



Gracias por comprar este producto, por favor lea cuidadosamente esta guía del usuario y guárdela adecuadamente para su referencia adicional. ¡Te gusta!

1 Bases teóricas

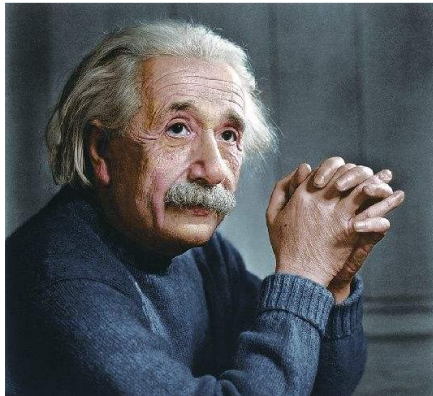

Einstein

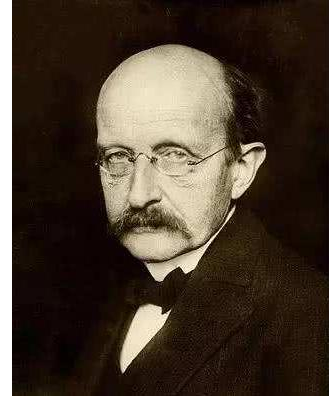

Planck

(a) Sin luz, las plantas no pueden crecer; Si vas a Haig en verano, te quedarás despegado; Si secas tu ropa al sol, puedes matar ácaros y bacterias

El sistema de apelación nos dice que la luz tiene energía y que la irradiación en un organismo vivo produce una serie compleja de efectos biológicos.

(B) Einstein y Puchaoke son los orkis de la teoría cuántica de la luz, proponiendo que la energía de cada precuántico es $E = h\nu$. Relación masa-energía según la relatividad. El momento de cada fotón es $p = E/c$

La luz es una energía radiante que se propaga en línea recta en el vacío a una velocidad de $3,0 \times 10^8$ m/s. Se cree que la luz es tanto una onda electromagnética como una corriente de partículas. Esta comprensión de la dualidad onda-partícula de la luz es la base de la teoría cuántica de la luz. La teoría cuántica de la luz cree que debido a la diferente energía de la luz cuántica, diferentes rayos de luz pueden causar reacciones fotoquímicas. Efecto fotoeléctrico. Pastoreo fluorescente. Efecto de punción y efecto térmico. Estos efectos se convierten en la base teórica de la medicina fototerapéutica.


(C) La teoría local se basa en la teoría de los dos ganadores nominados en 1903 y 1928.

(D) Principios técnicos

Un instrumento LED que utiliza luces LED para resolver problemas de piel mixta. Con diferentes longitudes de onda de 423-640nm, la luz se inyecta en la piel para resolver diferentes problemas como la regeneración, la calma y la sensibilidad. Excelente y potente alto brillo, con SMDLED especial infrarrojo cercano, los inconvenientes del tratamiento láser general, es decir, daño térmico, herida de fotoenvejecimiento y otros problemas peligrosos se han tratado.

1 Preparación antes de su uso

Abrir el paquete → sacar el instrumento y colocarlo---Insertar el cable de alimentación debajo-Llenar agua en la parte superior

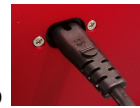

(a) Abra el paquete y retire suavemente el cuerpo del instrumento Y colocarlo sobre una superficie estable.


(b) Retire el cable de alimentación, conecte el instrumento a la toma de red y conecte la alimentación. El instrumento reaccionará con hormigueo y las teclas parpadearán ligeramente con un efecto de "luz de respiración". El instrumento entra en un estado especial

(c) Llene la parte superior con agua, abra la tapa de agua y llene la taza



medidora de 100ML con agua. El tanque de agua del instrumento

solo puede contener un vaso medidor de 100 ML de agua. Durante el proceso de

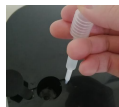

llenado, no se inyecta agua.

(d) Los clientes deben usar gafas de protección porque la luz directa puede



dañar los ojos

(e) Tips

1. El texto de las teclas de función en el panel táctil de la unidad es invisible cuando no está encendido.

2. Modo del botón de operación de esta máquina: es un botón táctil. Cuando

toca el botón, hay una retroalimentación acústica estridente en respuesta a la operación. Está prohibido presionar o disparar.

2. Uso

(a) Irradiación de luz de suplemento de calcio

i. El tiempo de exposición es de 30 n en una velocidad, se recomienda 1-3 veces al día. No más de 60 minutos cada vez. Se recomienda 30 minutos/hora.

2. Precauciones: La irradiación de luz UV a los suplementos de calcio oscurecerá la piel del área irradiada (se puede recuperar naturalmente después de la irradiación). Por lo tanto, se recomienda elegir las palmas de las manos, las plantas de los pies u otras ubicaciones que no afecten al aspecto del sitio irradiado. La distancia entre la piel irradiada y las dos lámparas de suplemento de calcio es de 5-10 cm. Se recomienda una falla del lado del instrumento. Las plantas de los pies están orientadas hacia la posición del cuerpo expuesta a la luz de calcio. Por ejemplo, aproveche la pausa para el almuerzo/el té/la hora del escritorio. Cuando se alcanza el tiempo establecido [recomendado 30min], el instrumento dejará de funcionar automáticamente.

(b) Utilice bandas distintas al relleno de calcio (UV). Se pueden irradiar diferentes sitios según sea necesario. Todas las posiciones, como decúbito, decúbito lateral y erguido, se pueden utilizar de manera flexible: se pueden irradiar todas las partes de la cabeza a los pies. Se resuelve el problema de la portabilidad de dispositivos grandes.

Consejos:

Para las personas con exceso de grasa abdominal, la suela del instrumento puede usar libros, taburetes y otros objetos, para que pueda satisfacer las necesidades especiales de iluminación.


Cada tiempo de irradiación puede aumentarse o disminuirse dentro de 30-60 minutos, en unidades de 5 minutos. Puede irradiarse con más frecuencia. Se recomienda no más de 60 minutos al día

Por favor, haga un buen trabajo en la prevención del alcoholismo en bienes públicos cuando haya mucha gente que los utiliza repetidamente en tiendas de experiencias o instituciones médicas y estéticas. Para lograr el propósito de la salud y extender la vida útil del instrumento.

La luz de calcio UV y otras ondas de luz pueden funcionar independientemente. También puede trabajar juntos; Las horas de trabajo también se pueden fijar de forma autónoma. Sin embargo, todos ellos están limitados a un tiempo de exposición seguro. Para obtener más detalles, consulte "IV. Guía de operación".

Adaptación a la población: véase "5. De acuerdo con la biblioteca de literatura, la literatura médica existente se buscó para resumir el papel de la luz en la cirugía exitosa de cada bandns. No se recomiendan compresiones duras o golpes.

3. Guía de operación

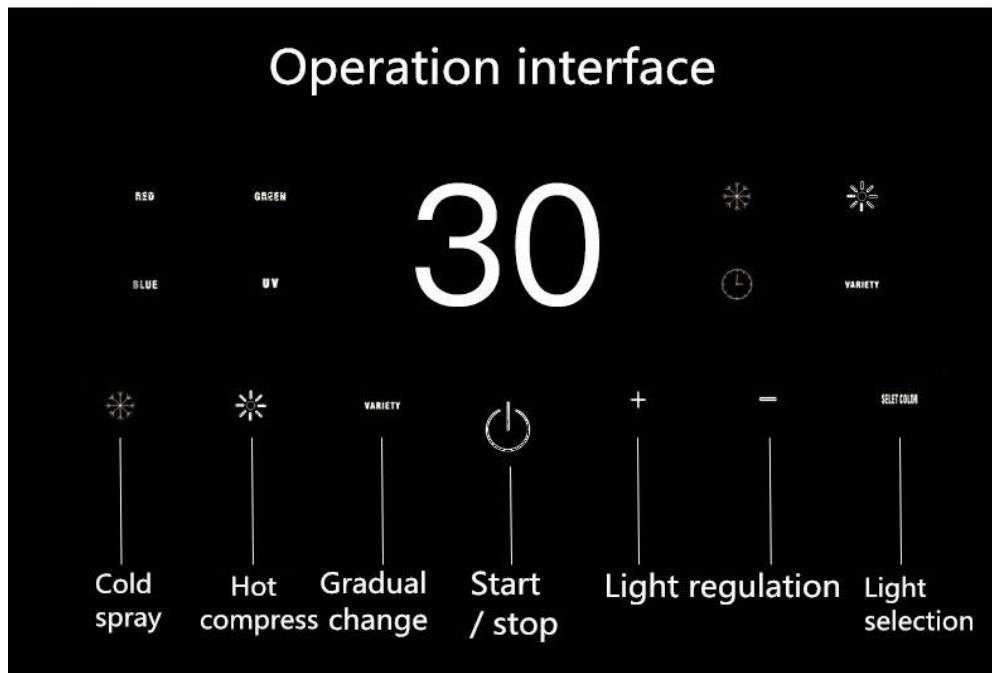

(a) Descripción de la función de la tecla/interruptor



1. Presione la tecla de control para el control táctil. Cada compresión es exitosa. El instrumento tiene una reacción de "ding":



2. Tecla de tiempo "+": presione esta tecla después del modo de iluminación rápida. La retroiluminación de los botones cambia de ligeramente brillante a totalmente brillante. Después de 5 minutos, suelte la llave para restablecer la luz deslumbrante. La pantalla de visualización sincroniza el estado de ajuste de tiempo del intervalo de 30 ~ 60 min. El tiempo se puede incrementar continuamente: después de entrar en el estado de ajuste de tiempo. Si no hay operación de tecla, el instrumento saldrá automáticamente del estado establecido después de 3 segundos y comenzará a funcionar en el tiempo de trabajo establecido actualmente.



3. Tecla de tiempo "-": después de seleccionar el modo de iluminación, presione esta tecla y la retroiluminación de la tecla cambiará de luz completa a luz poca. Reducción de tiempo en 5 minutos; Suelte la tecla para volver al estado medio iluminado. La pantalla muestra simultáneamente el estado de configuración del intervalo de 30-60 minutos, que puede reducir continuamente el tiempo: después de ingresar al estado de configuración de tiempo,

si no hay operación de botón, el instrumento salir automáticamente del estado de configuración después de 3 segundos y comenzar a trabajar de acuerdo con el tiempo de trabajo establecido actualmente

VARIETY

4. Presione la tecla de degradación de la energía de la luz, puede elegir la luz para cambiar automáticamente el tamaño, si desea ajustar la intensidad de la luz, puede hacer clic en esta

tecla primero,  Entonces ajuste 

SELET COLOR

(a) Primera compresión  La tecla de selección de energía luminosa, la tecla de luz roja aparecerá en el panel de control: presione este botón para presionar el sonido de pico en respuesta al tintineo. El instrumento entra en el modo de función de luz roja. Presione de nuevo para apagar la función de luz roja

(b) Presione la tecla de selección de energía luminosa de nuevo, aparecerá la tecla de luz verde en el panel de control, presione esta tecla, el zumbador responde al sonido, el instrumento entra en el modo de función de luz verde, presione de nuevo para apagar la función de luz verde

(c) Presione la tecla de selección de energía luminosa de nuevo, aparecerá la tecla de luz azul azul en el panel de control, presione esta tecla, el zumbador de pico responde al sonido, el instrumento entra en el modo de función de luz azul, presione de nuevo-para apagar la función de luz azul

(d) Presione la tecla de selección de energía luminosa de nuevo, aparecerá la tecla de luz UV en el panel de control, presione esta tecla, el zumbador responde al sonido, el instrumento entra en el modo de función de luz UV, presione de nuevo-para apagar la función de luz UV

(e) Presione la tecla de selección de energía luminosa de nuevo, el panel de control aparecerá rojo + verde, presione la tecla de luz al mismo tiempo, el zumbador de pico responderá al sonido, el instrumento entra en el modo de función de luz violeta, presione nuevamente para apagar la función de luz violeta

(f) Presione la tecla de selección de energía luminosa de nuevo, el panel de control aparecerá rojo + azul, presione la tecla de luz al mismo tiempo, el zumbador de pico responderá al sonido, el instrumento entra en el modo de función de luz naranja, y luego presione para apagar la función de luz naranja

(e) Presione la tecla de selección de energía luminosa de nuevo,

el panel de control aparecerá azul + verde, presione la tecla de luz al mismo tiempo, el zumbador pico responderá al sonido, el instrumento entra en el modo de función de luz cian, presione nuevamente para apagar la función de luz cian

(g) Presione la tecla de selección de energía luminosa de nuevo, el panel de control aparece rojo + verde + azul, presione la tecla de luz al mismo tiempo, el zumbador responde al sonido, el instrumento entra en el modo de función de luz blanca, luego presione para apagar la función de luz blanca

SELET COLOR

5. Presione la tecla degradada, el zumbador responde al sonido, el instrumento ingresa al modo de función de luz de cambio de color, luego presione para apagar la función de luz de cambio de color, luz de bucle x tecla de bucle automático: presione Naranja. Amarillo y verde. Verde, azul y púrpura bucle horizontalmente y luego haga clic para desactivar la función de bucle:



6, presione la función de pulverización en frío, presione este botón, la respuesta del generador de sonido máximo-la máquina entra en el pulverización de pulverización en frío. Antes de iniciar la función de pulverización en frío, asegúrese de que hay agua en la máquina antes de iniciar esta función. Si el agua en el tanque se acaba, el instrumento

Salta automáticamente, desenchufe el cable de alimentación cuando no pueda arrancar, espere 30 segundos, el instrumento pide una vez, luego vuelva a enchufar el cable de alimentación para arrancar el instrumento



7. Presione la función de compresa caliente, presione este botón, el zumbador de pico


Respuesta: la máquina entra en la función del paquete de calor, mientras que la función del paquete de calor de la máquina se activa, usted escuchará el zumbido, soplando aire caliente.

Using steps



step1

Thermal spray can help skin open pores

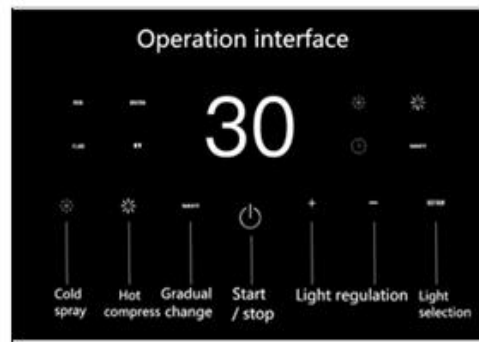

step2

Select the required nursing time, irradiation for 15-20 minutes, no overtime



step3

Use a beauty instrument for phototherapy, no more than 20 minutes at a time



step4

Replenish water and moisten in time after use

1. Estado de espera: tubo de lámpara de calcio. Todas las funciones del panel de luz apagado:

2. Función de luz roja: Cuando la función de luz roja está encendida, esta función es de color rojo brillante. Entrar en el modo rojo:

3. Función de luz verde: Cuando la función de luz verde está encendida, la función será verde brillante, ingresando al modo de luz verde:

4. Función Blu-ray: Cuando la función Blu-ray está encendida. Función Luz azul brillante. Entra en el modo azul:

5. Función de luz amarilla: Cuando la función de luz amarilla está encendida, la función es una luz amarilla. Entra en el modo amarillo:

6. Función de luz naranja: Cuando la función de luz naranja está encendida, la función es una luz naranja brillante. Entra en el modo naranja:

7. Función de luz violeta: Cuando la función de luz violeta está encendida, esta función está encendida. Entra en el modo púrpura:

8. Función de luz automática: cuando la función de luz del ciclo está encendida. El panel de luz funcional tiene luces rojas, naranjas, amarillas, verdes, verdes y moradas para cambiar alternativamente:

a) Nota: Luz roja: -Luz naranja, luz amarilla, luz verde, luz cian, luz púrpura y funciones de relleno violeta son diferentes al mismo tiempo.

9. Función de suplemento de calcio: Cuando la función de suplemento de calcio está activada, la luz de suplemento de calcio se enciende.

10. Cuando se complete el tiempo establecido, el instrumento entrará en modo de espera, apagando todas las funciones.

T e e n a g e D r e a m

LED7 color effect

Red deep into skin 1-6mm

Deep into skin 1-6, improve pockmarks and scars, whiten and lighten spots, soften skin, remove wrinkles, enhance skin elasticity, improve skin condition, etc



Whitening skin



Desalination



Improving fine lines



Green deep into skin 0.5-2mm

It has a good calming effect on allergic skin and body and mind



Whitening and skin rejuvenation



Deep restoration



Yellow patches



Yellow light penetrates the skin 1-2mm deep

It can effectively improve the red mark and erythema of skin, The pigment is red and swollen.



Blue light penetrates the skin 1mm deep

For the sensitive skin, repair the youth

It's good to suppress funny bacteria



Orange light

Penetrate deep skin, accelerate metabolism of active tissue, Decompose color spots, improve fine lines and skin relaxation



Purple deep into skin 1-2mm

Especially in sitting sores and teasing with special good effect and repair, Complex action



Calcium supplementation

Penetrate deep skin, improve skin roughness and strengthen skin

Immunity, improve skin redness and fever



5 De acuerdo con la literatura médica existente en la Biblioteca Wenfu, resume el papel de cada segmento de la luz

i. Luz de calcio: 320 nm. Después de la irradiación en la piel, se produce una reacción fotoquímica. Promueve la conversión de 7-dehidromasterol en colesterol en la piel, promoviendo así el equilibrio metabólico de iones de calcio y fósforo, aumentando así la densidad ósea y tratando la osteoporosis. Osteocondrosis y displasia. Prevenir enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, endocrinas y del sistema inmune causadas por metabolismo anormal del calcio y el fósforo.

1. Luz roja: 635 nm. La luz roja de alta energía tiene una fuerte penetración y es adecuada para líquidos antiinflamatorios y antifiltrales. Acelera la cicatrización de heridas. Mejora la actividad enzimática de las células. Cambiado al metabolismo iónico. Reduce el tono muscular. Alivia los espasmos musculares. Prevenir enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y mutaciones celulares. La luz roja también se utiliza en la neurodermatitis. Acné, quemaduras. Quemadura. Inflamación muscular. Tos crónica, asma. Dolor en las articulaciones. Artritis reumatoide, etc.

l Luz verde: 560 nm. Tiene un efecto estabilizador y relajante. Tiene efectos analgésicos y sedantes obvios sobre los nervios sensoriales. Por lo tanto, tiene un buen efecto fototerapéutico sobre la hipertensión, la hemiplejía y la neurastenia: la luz verde también se utiliza para tratar el asma, el síndrome de la menopausia, la lepra neurológica, la enfermedad renal, la diabetes y las enfermedades del tracto digestivo. Expulsa las toxinas del cuerpo, relaja los nervios, calma la hipnosis y elimina las emociones depresivas. Tratamiento de la piel áspera, arrugas, puntos negros, polvo, acné y trastornos endocrinos causados por la fatiga y el estrés mental.

w. Luz azul: 415 nm promueve la síntesis de proteínas y colágeno para blanquear la piel y los dientes. Adecuado para recién nacidos con amarillo, piel alérgica y grasa, piel con acné. Inhibe las bacterias para controlar, activar y tensar la piel y las arrugas del embarazo: cuando se pregunta, también relaja los nervios y alivia el dolor. Reduce los niveles altos de glóbulos rojos. Elimina el tejido y mejora la función del sistema linfático. También se utiliza clínicamente para tratar el agrandamiento del bocio. Enfermedades cardíacas crónicas, insomnio y síndrome menopáusico.

V violeta: 308 nm. Puede estimular el sistema secretor y desbloquear las glándulas linfáticas, y su acción en sí misma es más débil que la luz

roja. Tiene un efecto astringente sobre las úlceras de la piel y la mucosa, el acné.

5. Luz amarilla: 590 nm. Elimina pecas, desensibiliza e inhibe la precipitación de melanina de la piel. Promueve el crecimiento del cabello y acelera la curación de heridas y úlceras. Puede mejorar simultáneamente la secreción de adrenalina, equivalente a

Mejora la inmunidad. En medicina, la epinefrina se utiliza para estimular el corazón cuando se detiene o para dilatar la tráquea durante un ataque de asma.

Luz naranja ViL: 610 mm. Promueve la circulación sanguínea, acelera el metabolismo y mejora la función de la glándula tiroides. Reduce la aterosclerosis cerebral y coronaria. Aumenta el apetito. Puede ser utilizado para el tratamiento de la emaciación, la anemia, especialmente la insuficiencia cardíaca. Debe alternarse con la luz azul en el tratamiento de enfermedades cardíacas crónicas y palpitaciones.

Rayos ultravioleta violentos: penetra en las capas profundas de la piel, mejora la áspera de la piel, mejora la inmunidad de la piel, mejora el enrojecimiento y el calor de la piel.

Wi spray frío: el diámetro de los poros del cuerpo humano es de aproximadamente 0,02 ~ 0,05 mm, la humedad normal no es fácil de entrar en los poros para ser absorbida. El agua que sale de la pulverización se corta en 0,3-0,5 micrómetros (0,0003 ~ 0,0005 mm) y se absorbe fácilmente en los poros. La función principal del estrato córneo es proteger la piel y mantener el equilibrio de agua.

Así que hidrata la cutícula. Cuando la pérdida de hidratación del estrato córneo es grave, la piel secretará aceite para alcanzar el equilibrio, lo que hará que el aceite fluya de la piel humana, y los poros de la piel grasa se bloquen fácilmente, lo que provoca acné; Algunas partes especiales, como las esquinas de los ojos, se encuentran en un estado de deshidratación durante mucho tiempo, lo que producirá líneas finas. Por lo tanto, mientras repone la hidratación, no solo puede garantizar la humedad suficiente de la piel, sino también reducir la secreción excesiva de aceite de la piel y eliminar las arrugas y el acné.

Compresas calientes: 1. Tanto la piel seca como la piel grasa son adecuadas para el aerosol térmico.

A. Las personas con piel seca pueden usar aerosoles térmicos para acelerar la microcirculación de la piel, aumentar la temperatura de la superficie de la piel y proporcionar suficiente humedad y nutrientes a la piel.

B. El aerosol térmico del vaporizador facial para la piel grasa puede suavizar las células epidérmicas, expandir los poros, promover el metabolismo de la piel y eliminar el exceso de aceite de la piel.

2. El aerosol térmico puede hidratar eficazmente y limpiar profundamente. Debido a que el aerosol térmico puede ayudar a la piel a abrir los poros y permitir que la piel absorba más humedad, también puede promover el metabolismo de la piel y hacer que la piel se vuelva delicada y rosada.

3. El tiempo de pulverización térmica demasiado largo puede causar da

ño a la piel, el tiempo de uso general es de 8-10 minutos.

4. El aerosol térmico es más adecuado para el invierno y puede aliviar la piel tensa.

Con el fin de promover la popularización de la fototerapia. Con la misión de beneficiar la salud y la belleza de la humanidad. Fotocopias especialmente seleccionadas de literatura médica clínica de fototerapia original en el hogar y en el extranjero. ¡Acceso gratuito a los distribuidores autorizados oficiales en todo el mundo!

6. Grupo de alto riesgo de mercancías no conformes

Embarazadas

b. Pacientes con cáncer avanzado y pacientes con enfermedades mentales

c. Insuficiencia cardiopulmonar grave

d. Personas sin autoconciencia, percepción y expresión

e. Stent coronario o injerto de bypass. Use con precaución si se ha implantado un marcapasos o una prótesis femoral de silicona.

7. PROYECTOS PREPARADOS

a. Durante el uso de la máquina. Mantenga una rutina regular, haga ejercicio adecuado, coma ligera y evite la estimulación picante, esté de buen humor y beba más de 1/3 de lo habitual. Tong Dang recomienda complementar alimentos ricos en VC. E y calcio o alimentos saludables adecuados.

b. Está prohibido mirar directamente a cualquier tipo de luz emitida por la máquina. En particular, la luz azul puede dañar la visión. Al irradiar la cara, se recomienda usar gafas de sol y comprar accesorios de máscara para los ojos.

c. Los pacientes con enfermedades alérgicas de la piel deben tener cuidado de realizar pruebas a pequeña escala en piel oculta. Grandes áreas solo se pueden usar si no hay alergias.

d. Si tiene molestias mientras usa este producto. La recuperación debe interrumpirse inmediatamente y volver a utilizarse. Se debe seguir el principio de irradiación a corto plazo y múltiples, y se debe utilizar normalmente después de que el cuerpo se adapte gradualmente.

E. La máquina debe colocarse en un lugar fresco, seco y ventilado, no es fácil de alcanzar para los niños: está prohibido colocar en luz solar directa, humedad y alta temperatura. En el ambiente de ácido fuerte, álcali fuerte, oxidante fuerte y polvo fuerte, está prohibido rociar agua en el instrumento

F. Por favor, mantenga una cierta distancia de otros aparatos eléctricos, lejos de fuerte interferencia magnética y materiales inflamables y explosivos (gasolina). Diésel. Fuegos artificiales, petardos, etc.).

g. Por favor limpie la máquina con una toalla húmeda. No se permite el uso de ácidos fuertes o álcalis fuertes para la limpieza de pruebas químicas. La posición del escalón de la carga del espacio se puede limpiar con un cepillo suave.

h. Está prohibido golpear, luchar, lanzar o golpear la máquina. Está prohibido colocar cualquier objeto en el instrumento (incluyendo, pero no limitado a, teléfonos móviles). Tarjeta bancaria/control de acceso, etc

i. Está prohibido insertar objetos conductores como tornillos y metales en la máquina para evitar quemaduras, cortocircuitos, incendios y descargas eléctricas.

J Menores Los menores y aquellos que no tengan la capacidad de percibir/expresar actividades voluntarias deben utilizar la máquina con la asistencia de un cuidador con habilidades operativas y perceptivas normales.

k. Se prohíbe el uso de accesorios no suministrados por fuerzas oficiales. Está prohibida la modificación o desmontaje de la máquina. Lo anterior no está cubierto por la garantía.

l. No se permitirá el desmantelamiento por ingenieros o técnicos que no sean debidamente designados por la empresa. Máquina modificada. Para evitar descargas eléctricas o dañar los componentes electrónicos y la carcasa. El daño resultante al instrumento no está cubierto por la garantía. Las lesiones personales causadas por ello correrán a cargo de las partes.

En vista del diseño estético ergonómico, la estructura de ensamblaje interno de la máquina es más complicada. Solo las organizaciones profesionales o los técnicos formalmente capacitados y autorizados por escrito están calificados para el desmantelamiento y mantenimiento de la máquina.

8. Aviso legal

(a) La máquina es un producto electrónico innovador para el cuidado del hogar, no un dispositivo médico. No se hicieron compromisos explícitos o implícitos con respecto a resultados médicos específicos para ninguna población específica.

(b) La literatura médica clínica citada en esta máquina proviene de la base de datos de literatura internacional, y los derechos de autor pertenecen al autor original. Los textos, imágenes y otros materiales de la literatura médica compilados por la presente son solo para el aprendizaje interno y no se utilizan para la venta. Póngase en contacto

con nosotros si sus derechos han sido violados.

(c) La máquina ha presentado y aceptado 13 patentes internacionales y chinas (incluyendo invención, utilidad y apariencia). Sin la autorización formal por escrito de la empresa y el sello oficial, cualquier organización o individuo que venda privadamente, imita, contrabando, colusión urbana interregional de productos, venda a través de Internet y canales de medios propios, etc. será legalmente responsable, y la empresa se reserva la jurisdicción final.

(d) La apariencia, la función y la estructura del producto pueden cambiarse sin publicar información al público. Lo disculpamos por las molestias causadas por el ajuste o actualización. Tenemos el derecho final de interpretación.

(e) Este manual debe ser lo más detallado y objetivo posible, y debe ser cuidadosamente revisado, pero no se garantiza que contengan omisiones, errores o malentendidos. La compañía se reserva el derecho de interpretación final.

1. En 1903, el científico danés Niles Chamberly Finsen curó la viruela con fototerapia. El lupus ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina.

2. En 1928, el químico alemán Wenders descubrió el efecto de los rayos ultravioleta en la suplementación de calcio y fue galardonado con el Premio Nobel de Química.

3. Esta configuración puede no estar disponible dependiendo del modelo.

4. Se trata solo del "Resumen funcional del informe médico clínico de fototerapia" publicado por la Biblioteca Nacional de Literatura y no es la opinión de la empresa. Tampoco debe utilizarse como evidencia relevante de dispositivos médicos o efectos médicos expresos o implícitos en esta máquina.

5. Los derechos de autor de las obras literarias pertenecen al autor original. Sólo para el intercambio de aprendizaje interno y el desarrollo académico. ¡Está prohibido con fines de lucro!

En caso de violación de sus derechos. ¡Contáctenos por favor!