



CO2 Fraccionado Portátil

Láser fraccionado de CO2 para resurfacing facial y corporal, con cabezal adicional para rejuvenecimiento íntimo femenino.



Equipo CO2 Fraccionado Portátil, con detalle del cabezal articulado.

Cómo funciona

Es un láser ablativo que emite en **10.600 nm**, una longitud de onda que el agua de la piel absorbe casi por completo. Esa absorción es la que permite trabajar con precisión: la energía se consume donde se aplica y no se dispersa hacia los tejidos vecinos.

El haz no impacta de forma continua. Se divide en **miles de microhaces** que generan columnas térmicas microscópicas y dejan tejido sano entre una y otra. Ese tejido intacto es el que acelera la recuperación respecto de un CO2 tradicional no fraccionado.

Acción dual

- **Ablación.** Vaporiza de forma controlada las capas superficiales, eliminando las células dañadas.
- **Coagulación.** El calor que llega a la dermis estimula los fibroblastos y la producción de colágeno y elastina, remodelando la piel desde adentro.

El resultado es un resurfacing de rejuvenecimiento suave, ideal para épocas de baja exposición solar y con muy poco tiempo de recuperación.




Indicaciones y beneficios

- Mejora la textura de la piel y afina los poros.
- Atenúa arrugas y líneas de expresión.
- Rejuvenece la zona de los párpados.
- Trata la flacidez corporal.
- Actúa sobre cicatrices, incluidas las de acné y de cesárea.
- Reduce estrías.
- Trabaja sobre manchas e hiperpigmentaciones.
- Aplicable en rostro, cuello, escote y manos.

Versatilidad: rejuvenecimiento íntimo femenino


El equipo incluye un dispositivo adicional para rejuvenecimiento íntimo femenino, que mejora síntomas como sequedad, incontinencia y candidiasis recurrente, entre otros.

Resultados

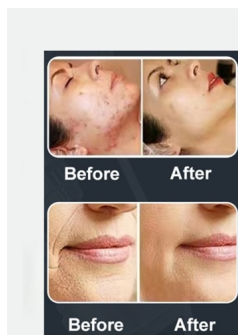

Fotos de antes y después provistas por el fabricante.

Cabezales y accesorios incluidos

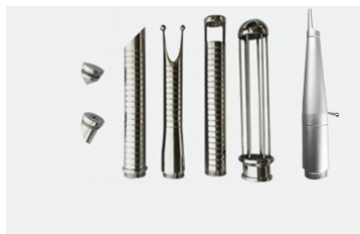

Puntas y cabezales incluidos con el equipo.

- Cabezal articulado principal con pieza de mano para tratamientos faciales y corporales.
- Puntas cónicas intercambiables.
- Punta tipo gancho.
- Dos sondas cilíndricas para el cabezal de rejuvenecimiento íntimo.
- Pieza de mano adicional tipo lápiz.

Interfaz y modo de uso

En la pantalla táctil del equipo se lee el nombre “CO2 Multi Treatment System”, con un modo “Twin Light” que ofrece las opciones 3D y 4D, y un “Scan mode” con parámetros ajustables de potencia, tiempo de disparo y distancia entre puntos. El equipo se controla con pedal, para que la profesional tenga las manos libres durante el tratamiento.



Prueba de disparo mostrando el patrón fraccionado sobre papel.



Especificaciones técnicas

Tecnología	
Tipo de láser	CO2 fraccionado, ablativo
Longitud de onda	10.600 nm (infrarrojo, invisible)
Cromóforo	Agua
Modo de emisión	Fraccionado: microhaces que generan zonas microtérmicas, dejando tejido sano intermedio
Mecanismo de acción	Dual: ablación más coagulación

Equipo	
Denominación en pantalla	CO2 Multi Treatment System
Formato	Portátil
Modos de trabajo	Twin Light, con opciones 3D y 4D · Scan mode
Control	Pedal, para trabajar con las manos libres
Certificaciones	CE y FDA

Parámetros de configuración	
Potencia	Hasta 100 W
Energía por pulso	De 5 a 200 mJ por punto
Tamaño del microhaz	De 50 a 120 µm de diámetro
Profundidad de penetración	Hasta 750 µm
Área de escaneo	De 1 × 1 mm a 20 × 20 mm por disparo, con figuras de barrido cuadrada, rectangular, circular y triangular
Densidad de puntos	Del 5 % al 30 % o más — de varias decenas a más de 2.000 puntos por cm²
Modos de pulso	Ultrapulsado (UP) y superpulsado (SP) · Onda continua (CW) para trabajo ablativo · Fraccionado con distintas formas de entrega
Tiempo de disparo	Ajustable desde la pantalla

Sobre los parámetros de configuración. Los valores de la tercera tabla son los límites entre los que la profesional ajusta manualmente cada tratamiento según el fototipo, la zona y el objetivo clínico. No son valores fijos del equipo. Fueron aportados por la dirección médica del representante del fabricante en Argentina.

Quedan por confirmar las dimensiones, el peso y la alimentación eléctrica. Si los necesitás para comparar, te los pedimos al fabricante y te los pasamos por escrito.

Qué incluye comprarlo en Corium

- **El equipo se prueba antes de salir.** Se enciende y se verifica acá, no viaja sellado de fábrica para que lo enciendas vos por primera vez.
- **Servicio técnico propio.** Taller y técnicos nuestros, no tercerizados, con stock de repuestos en el país.
- **Manuales y explicación remota sin cargo** para que puedas operarlo desde el primer día.
- **Envío a todo el país**, embalado en su baúl original, por el transporte que elijas.
- **Financiación propia con anticipo**, armada según el equipo y tu situación.
- **Asesoramiento antes de comprar.** Si este equipo no es el que te conviene, te lo decimos.

Hablemos

WhatsApp +54 9 11 7605-6720 · coriumlaser.com