

Coolplasma y hot plasma Tec

COOLPLASMO



Bienvenido a experimentar la obra maestra de nuestra compañía: instrumento de belleza de plasma frío Coolplasma. Conocido como una joya en el campo de la tecnología cosmética, Coolplasma combina hábilmente el plasma frío y el plasma caliente patentado. La tecnología se convierte en un sistema preciso. Este es un dispositivo profesional versátil y de gran potencia.

Todo el dispositivo consta de dos mangos (handles), acompañados de una variedad de sondas de conexión intercambiables (tips), que ofrecen combinaciones flexibles para satisfacer con precisión sus diversas necesidades de cuidado de la piel.

El equipo utiliza tecnología avanzada de plasma de calor y frío. Ionizar Gas, como el aire o el nitrógeno, que hace que los átomos o moléculas del gas pierdan o adquieran electrones y se conviertan en partículas cargadas, con éxito. Genera un plasma altamente activo. Estos plasmas llevan una rica energía e ingredientes activos que actúan sobre la piel para lograr una variedad de excelentes resultados en el cuidado de la piel.

Entre ellos, el tratamiento con plasma frío utiliza una tecnología de ionización única. Utilizando un gas como nitrógeno o argón como gas de trabajo para la generación de plasma, produce un plasma frío con diferentes características. La temperatura de este plasma frío se controla con precisión entre 30°C y 70°C. Debido a esto, cuando actúa sobre la piel, no solo es muy antibacteriano y antibacteriano.

Propiedades inflamatorias y también crea un microambiente para la reparación y el cuidado de la piel. Ya sea acné, inflamación de la piel o daños en los esquís, es eficaz para resolver el problema y reparar la piel.

El tratamiento con plasma térmico es igualmente potente y se conoce como "renovación".

Dueño de la piel". Un plasma térmico altamente activo actúa sobre la piel, penetrando

Penetra profundamente en todas las capas de la piel, estimula la vitalidad celular y promueve eficazmente la piel

Regeneración y ayuda a rejuvenecer la piel. También puede apuntar y eliminar con precisión salientes de la piel, verrugas y otras imperfecciones, haciendo que la piel

Fue suave de nuevo. Para problemas como lunares e hiperpigmentación, se puede manejar fácilmente

Descompone eficazmente los pigmentos y restaura la piel pura
Blancura. Más importante aún, el efecto de eliminación de arrugas es notable,
Estimula la producción de colágeno y elastina para restablecer la firmeza y
elasticidad de la piel. Además, el mango de plasma térmico al por lo que tiene
Excelente en la reparación de estrías, depresiones y cicatrices,
proporcionando un apoyo sólido para la transformación perfecta de la piel.
Elija el instrumento de belleza de plasma frío Coolplasma para comenzar su
exclusivo viaje de rejuvenecimiento de la piel.



· **Jet directo HEAD-chorro de plasma frío La sonda es un innovador plasma frío**

Aplicador, construyendo un multi-prospectivo
-Sistemas funcionales de tratamiento de la piel.
Su función de enfoque permite apuntar con
precisión a una amplia gama de enfermedades
y problemas de la piel, así como

Reparar la piel dañada. Durante la operación,
la sonda puede liberar con precisión iones
dirigidos

Sí, puede actuar establemente en la superficie de la piel, buen efecto
Tratamiento de enfermedades tales como acné, infecciones no relacionadas
con folículos pilosos y acné activo.

El haz de iones expulsado por la sonda tiene propiedades antibacterianas
significativas,

Puede reducir eficazmente la respuesta inflamatoria, inhibir la propagación de
la infección y promover eficazmente el funcionamiento eficiente de los
mecanismos de autocuración y regeneración de la piel. Este sistema
terapéutico se considera ideal

Selección de áreas de dermatología especializada y tratamientos estéticos,

Especialmente adecuado para el uso en
Control de infecciones, proporcionando una solución extremadamente
valiosa para el manejo de la salud de la piel.



· **Cabezal de tubo cuadrado-inyección de plasma frío**

La sonda es un aplicador de plasma frío cuidadosamente diseñado, suave y seguro que ofrece un innovador

Y soluciones multifuncionales para el cuidado de la piel. Su principio de funcionamiento se basa en la promoción de la producción de colágeno de la piel, reduciendo eficazmente las líneas finas y mejorando significativamente la textura de la piel, al tiempo que mejora en gran medida

Eficiencia de absorción de diversos productos para el cuidado de la piel.

El plasma frío producido por este dispositivo tiene excelentes propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. No solo puede controlar eficazmente las infecciones de la piel,

Acelera el proceso de curación de heridas y quemaduras, crea un microambiente terapéutico estéril y también participa activamente en el apretamiento de la piel y los procesos antienvjecimiento. Al estimular el metabolismo anabólico del colágeno y la elastina en la piel flácida, mantiene integralmente la salud y la juventud de la piel, y es aclamada como una excelente opción para el manejo integral de la salud de la piel.



· **Cabezal de tubo abocado-inyección de plasma frío**

En el campo del cuidado del cuero cabelludo, la sonda también

Excelente desempeño. Como un aplicador profesional del tratamiento del cuero cabelludo de plasma frío, puede

Estimula con precisión los folículos pilosos para promover el crecimiento del cabello y prevenir la caída del cabello. Su efecto es

Despierta profundamente la actividad de las células del folículo piloso, ~~Reinventar los ecosistemas saludables del sur de California.~~ Al mismo tiempo, los efectos antibacterianos y antiinflamatorios del plasma frío también juegan un papel clave en el cuero cabelludo.[1]

Cuidado, resuelve eficazmente los problemas comunes de salud del cuero cabelludo, como la caspa y la inflamación del cuero cabelludo, y crea un ambiente ideal para el crecimiento del cabello.

Además, durante el tratamiento del cuero cabelludo, las raíces del cabello y los folículos pilosos se pueden activar con precisión. A través de actina g en el tejido subcutáneo, promueve

Reduce el tejido adiposo, reduce significativamente la aparición de bolsas de grasa y mejora la circulación sanguínea local en la piel. Mejora la firmeza del tejido en la zona de acción mediante el aplanamiento de la superficie de la piel,

Lograr el doble efecto de tratar las bolsas de grasa y reafirmar la piel.



· Rodillo de agujas-escaneo de plasma frío

Rodillo aguja

La sonda es una combinación de Estructura de un rodillo de aguja con plasma frío Tecnología. Tratamiento, la columna de plasma frío del rodillo de aguja se libera gota a gota, haciendo que la piel experimente Microcontracción. Esta forma de acción optimizada conduce a una serie de efectos tales como las células de la piel

Encoger y reafirmar, lograr una textura de la piel suave y delicada y remodelar la piel g,

Tiene un efecto significativo en la mejora de varios signos de envejecimiento y cicatrices.

Los generadores de plasma frío funcionan de forma sincronizada, produciendo micro--

Canales enriquecidos con partículas altamente activas. Estos plasmas fríos penetran rápidamente en las capas más profundas de la piel con la ayuda de una acción de rodadura sobre la piel. El plasma frío desencadena una compleja serie de reacciones bioquímicas en las células de la piel,

Establece una base sólida para la reparación y regeneración de la piel. °

· La sonda número 4 (rodillo de aguja pequeño) está diseñada para tratamiento de áreas pequeñas y actúa con precisión en áreas localizadas.

· La sonda de calibre 5 (rodillo de aguja grande) está diseñada para tratamientos de área grande y puede cubrir áreas más grandes de la piel.



· Aguja 44P-Punto de escaneo de plasma frío

Matriz

La sonda es un aplicador que combina una aguja reticular y la tecnología de plasma cold. Durante el tratamiento, el frío plas ma

La aguja de matriz de escaneo actúa sobre la piel de una manera de escaneo de matriz y puede dirigirse a estimular el proceso de regeneración del colágeno y las fibras elásticas en la piel. Aumentar la cantidad de colágeno en la piel mediante el fortalecimiento de la estructura de reticulación c de estas proteínas clave en la piel,

Restaura eficazmente la firmeza y el brillo de la piel, haciendo que la piel se vea más joven y brillante.

Al mismo tiempo, estimulando el mecanismo de autorreparación de la piel, promueve

El colágeno regenera, rellena los hoyos del acné y mejora la suavidad de la piel.

Microcanales formados por la aguja 44P en la piel, frío

El plasma puede penetrar rápida y profundamente en los tejidos profundos de la piel. Durante este proceso, el plasma frío promueve fuertemente el metabolismo de las células epidérmicas, acelera el desprendimiento del antiguo estrato córneo y guía el nuevo

Las células están estrechamente dispuestas y ordenadas, mejorando eficazmente la piel áspera,

Problemas como poros agrandados.



Sonda 7

· **Cabezal cerámico-Plasma de ozono**

La sonda es un aplicador basado en ozono

ESTERILIZACIÓN Y PLASMA EFICIENTE

Tecnología de penetración. Utiliza un alto-

El voltaje de alta frecuencia electróliza el oxígeno en el aire para generar ozono altamente oxidante.

Puede apuntar con precisión a los dañinos

Microorganismos en lo profundo de los poros de la piel,

Eficaz para lograr antiinflamatorios y

Efecto bactericida, tiene un efecto significativo en el tratamiento del acné y otros problemas de la piel. También puede limpiar profundamente los poros y absorber y eliminar la suciedad, la grasa y el estrato córneo envejecido de los poros.

Al mismo tiempo, la sonda puede regular con precisión la secreción de sebo

Función de la piel, reduciendo la secreción excesiva de sebo en la fuente.

Utilice la oxidación del ozono para descomponer eficazmente la melanina en la piel, uniforme el tono de la piel, aclarar las manchas y hacer que la piel sea más

Translúcido.

Además, la sonda también tiene la función de generar plasma. El plasma tiene alta actividad y alta energía, y puede romper fácilmente la barrera de la piel,

Logra una penetración eficiente y promueve en gran medida la absorción de nutrientes por la piel. Al mismo tiempo, estimula el metabolismo celular y

revitaliza las células de la piel. Esta sonda combina múltiples funciones para proporcionar a los usuarios una solución integral y multifuncional de tratamiento de la piel, abriendo un nuevo

Capítulo sobre el cuidado de la piel.



· Sonda de diamante-antiplasma frío

-Aplicaciones de envejecimiento

La sonda es un aplicador basado en frío Tecnología antienvjecimiento de plasma. Al liberar la energía del plasma, se mejora la

Colágeno en la piel, mejora la elasticidad de la piel y logra el efecto anti-envjecimiento. Esta sonda está especialmente diseñada para mejorar la firmeza de la piel

Y elasticidad, con un significativo efecto antienvjecimiento. Con el tratamiento de esta sonda, la piel se puede reparar y tensar de manera efectiva, haciendo que la piel sea más firme y elástica, creando un contorno más suave y juvenil para la cara y el cuello. Actualmente se ha utilizado ampliamente en el cuello

Lifting, corrección del contorno ocular y cirugía microplástica.



Sonda No. 9/10

· Cirugía mínimamente invasiva con plasma

Esta sonda es desechable de alta precisión Aplicador curvado/recto, diseñado para transmitir energía plasmática. Esta técnica permite producir daños controlados en la epidermis y las capas superficiales de la dermis.

Ofrece una amplia gama de opciones de tratamiento con una selección de puntos de

Procedimiento de pulverización innovador. Es especialmente adecuado para el tratamiento de áreas pequeñas y medianas y lesiones benignas. Con su innovadora


Funcional, seguirá siendo la herramienta de elección para el tratamiento de la región periorbital y las lesiones benignas.

- La sonda de calibre 9 (aguja curva) es adecuada para posiciones de superficie/inclinadas (p. ej., en la región periorbital y en el tratamiento de lesiones benignas).
- La sonda de calibre 10 (aguja recta) es adecuada para tratamientos profundos y rectos (como el tratamiento de imperfecciones comunes de la piel y problemas de envejecimiento tales como líneas finas, arrugas, cicatrices y líneas finas).

Segundo lugar. Parámetros técnicos y especificaciones de embalaje


Nombre del producto	Instrumento de belleza de plasma frío Coolplasma
Vidrio templado Pantalla táctil capacitiva	15 pulgadas
Pantalla táctil	AC100V~240V, 50Hz-60Hz
Motivación	10-200W
Tamaño de la caja de aire	50×56×60 cm
Peso bruto	23 kg

Paquete: Caja de aluminio

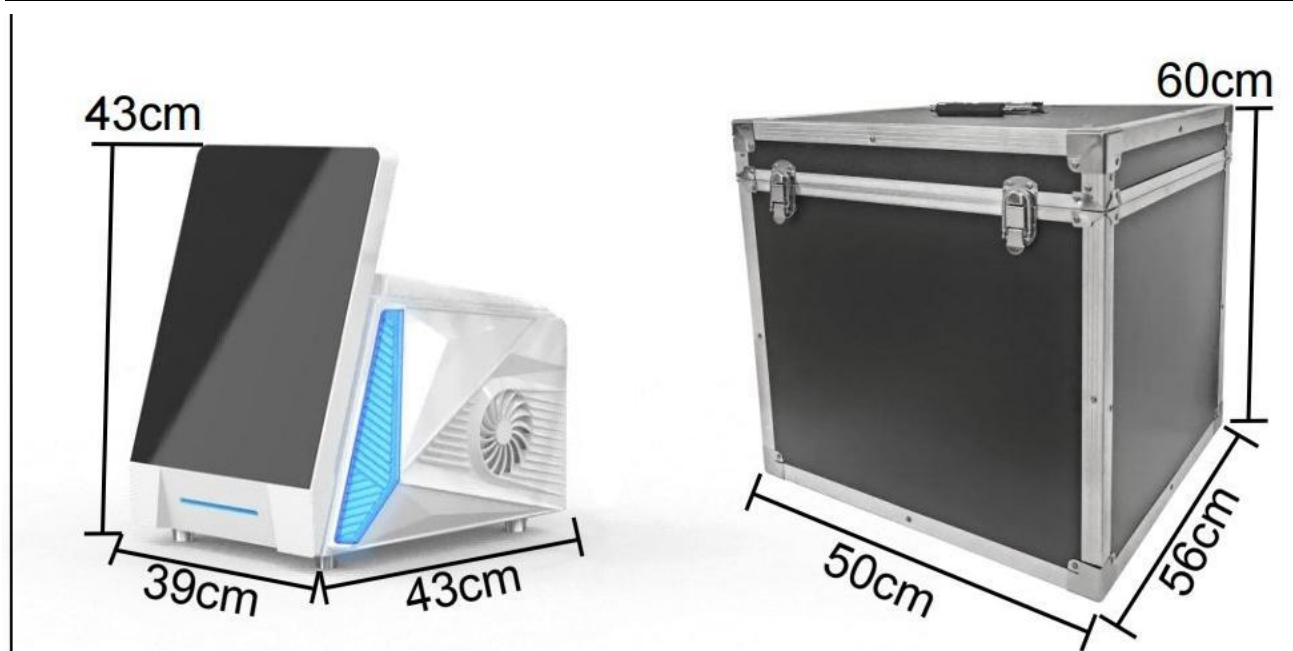

*** Esta especificación está sujeta a cambios o ajustes sin previo aviso.**

3d. Lista de producción

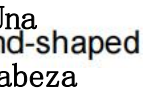Dos mangos multifuncionales para plasma frío (con sondas/puntas intercambiables) 			
(Sonda No. 1) A cold plasma spray 	(No. 2 Sonda) — La Plaza Plasma Cabeza de tubo frío 	(Sonda 3) Un cabezal de tubo ensanchado de plasma frío 	
Un conector Para la Número 4/Número sonda 5/Número 6 	(Sonda número 4) Un rodillo de agujas (pequeño) 	(Sonda número 5) Un rodillo de agujas (grande) 	(Sonda número 6) Una aguja 44P 
(Sonda 7) A ozonoplasma a head 	Un conjunto de conectores NO. 8/NO. 91 Sonda número 10 	(No.8 probe) Una iamond-shaped Cabeza 	(No. 9) (No. 10) 1 curvado/recto Cada aguja 

3d. Lista de producción

2 estanterías de
accesorios



1 interruptor de
pie



1 Cable de
alimentación



4th.Product Instructions

1. Pasos de instalación: (1) Instale el colgador en el dispositivo. (2 Conecte el mango al zócalo del mango en la parte posterior del dispositivo, alínea e inserte, colóquelo en el colgador.
2. Enchufe el cable de alimentación en la toma del cable de alimentación en la parte posterior del dispositivo, conecte la alimentación y encienda el interruptor de encendido, el dispositivo se arrancará Inmediatamente.

