



BTL-6000 Exilis
Remodeling your beauty

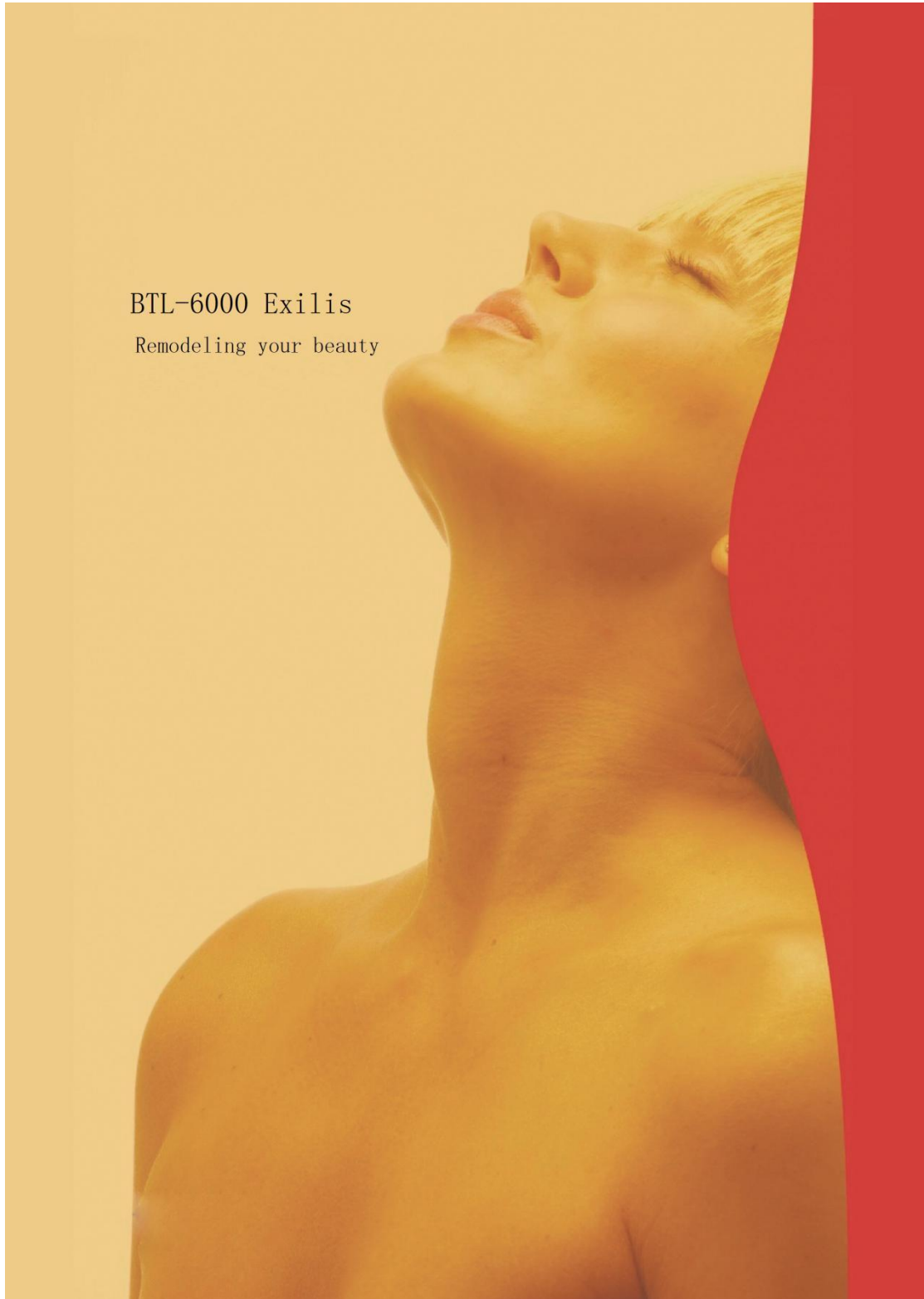

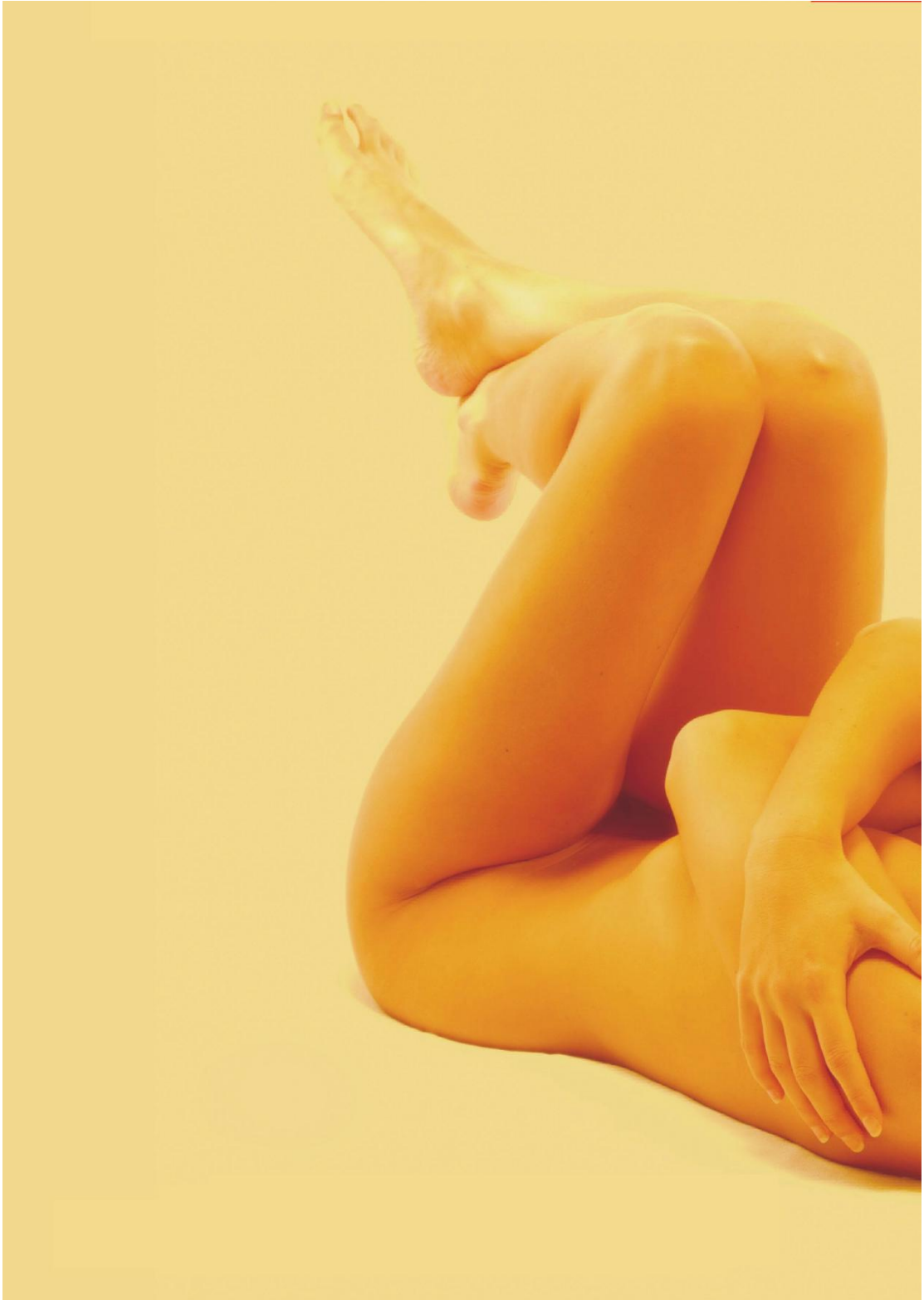

What is BTL-6000 Exilis?

BTL-6000 Exilis using parallel RF application technology and high cooling technology, integrated in a treatment head, is the world's top technology in the field of beauty perfect show.

Application of BTL-6000 Exilis


For all beauty customers to provide the ultimate shape of the sculpture experience.

The using of a revolutionary new platform to improve the body of local fat accumulation.

Firming the skin and eliminating cellulite.




Operar interfaz Introducción

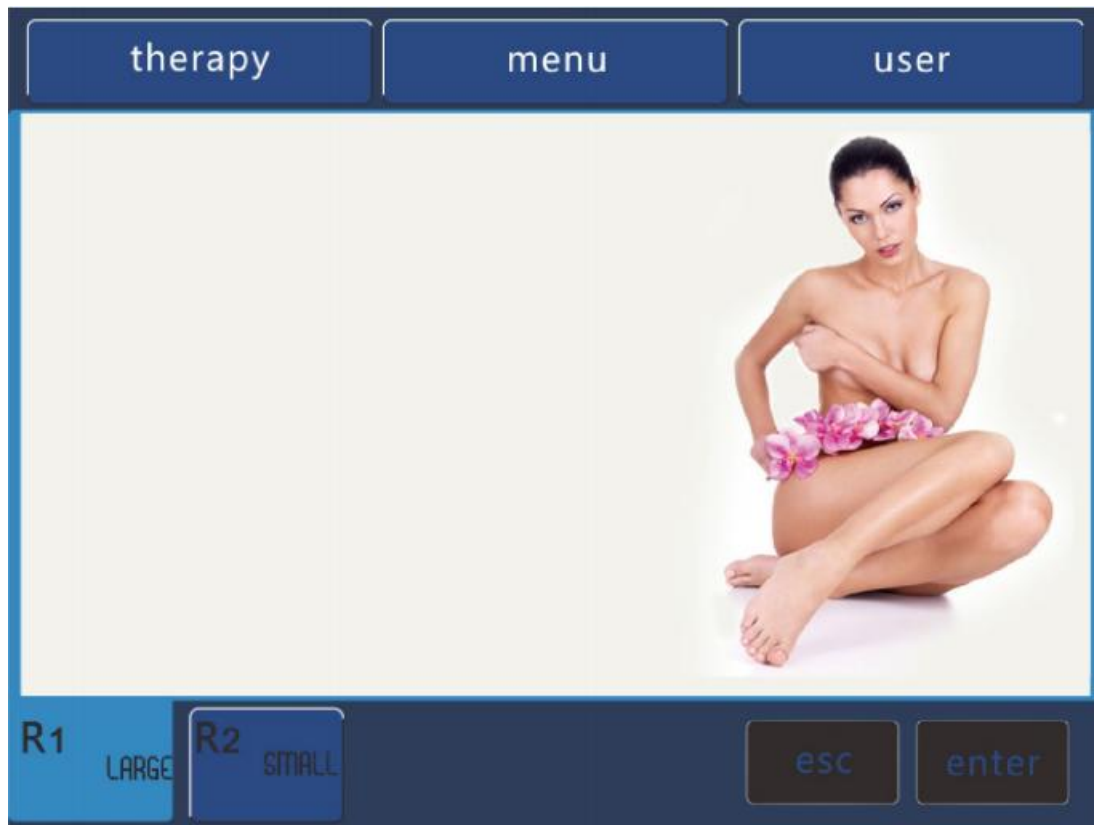


Uno (Introducción a la interfaz de terapia corporal)




Introducción a la interfaz de configuración:

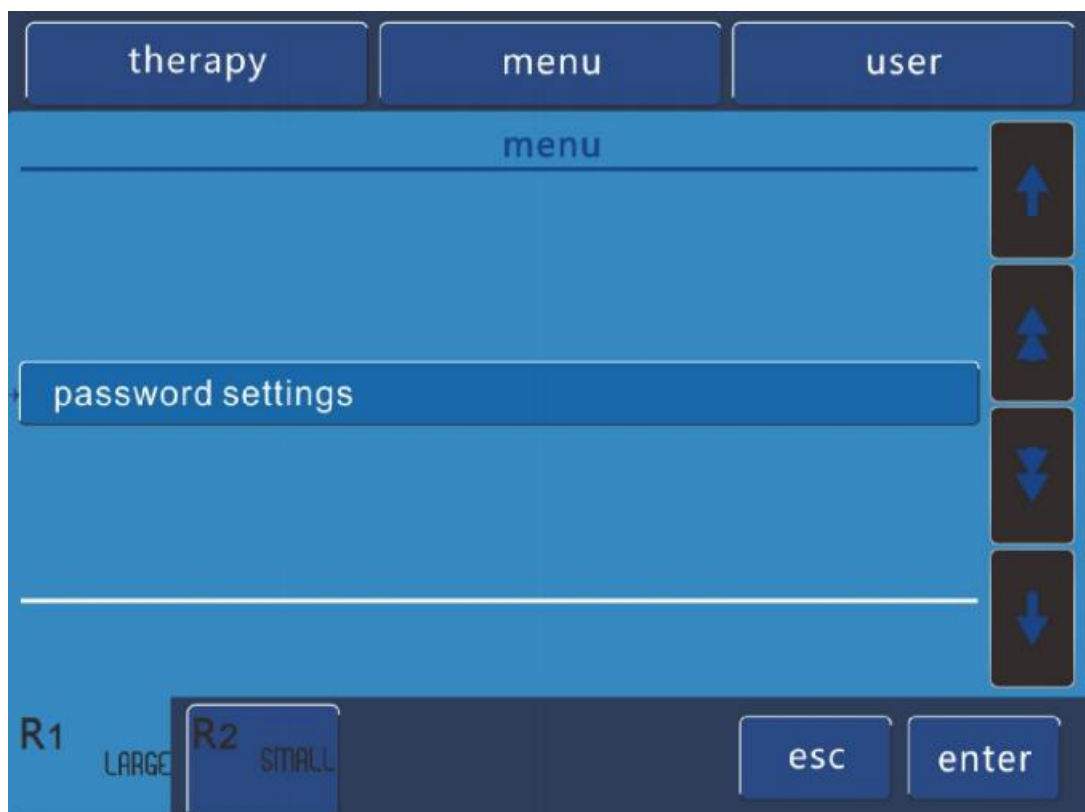

DOS (Introducción a la interfaz de terapia facial)

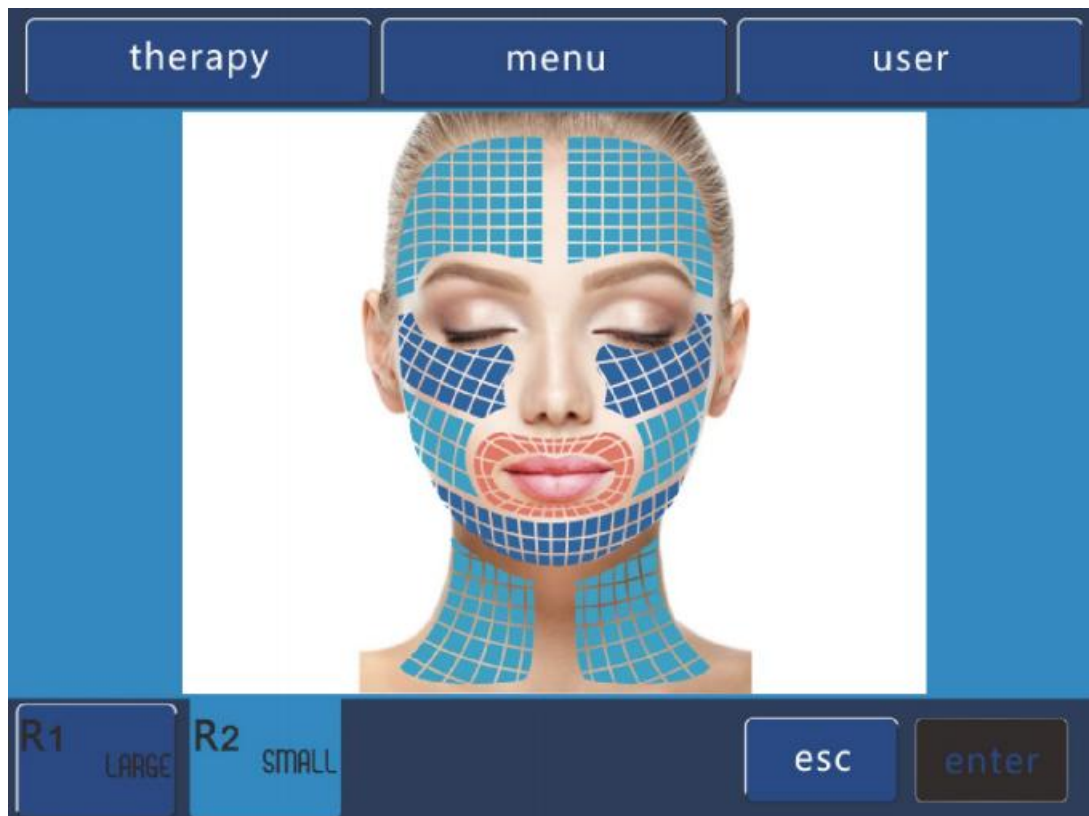


Introducción a la interfaz de terapia facial:

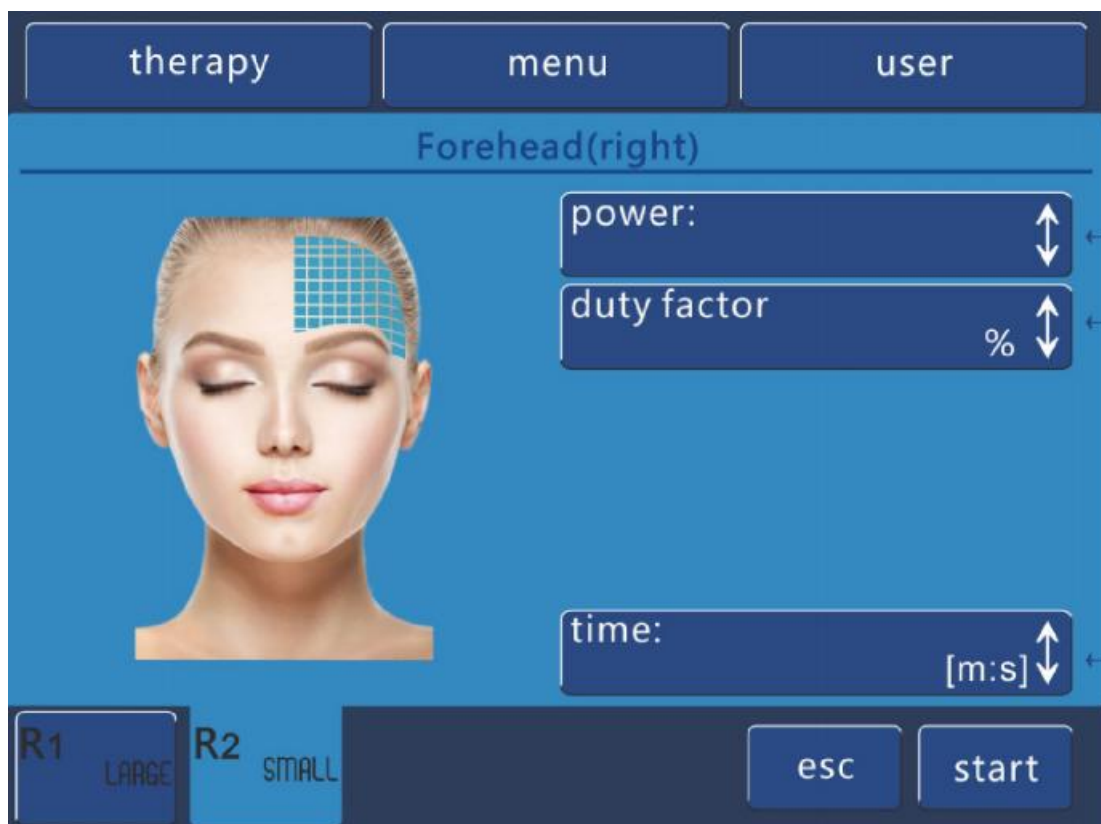

Doble energía al cuerpo de la escultura.

La tecnología patentada de BTL-6000 Exilis, a través de la RF paralela y el avanzado sistema de enfriamiento de la piel totalmente regulado, para controlar el calentamiento de los tejidos profundos.

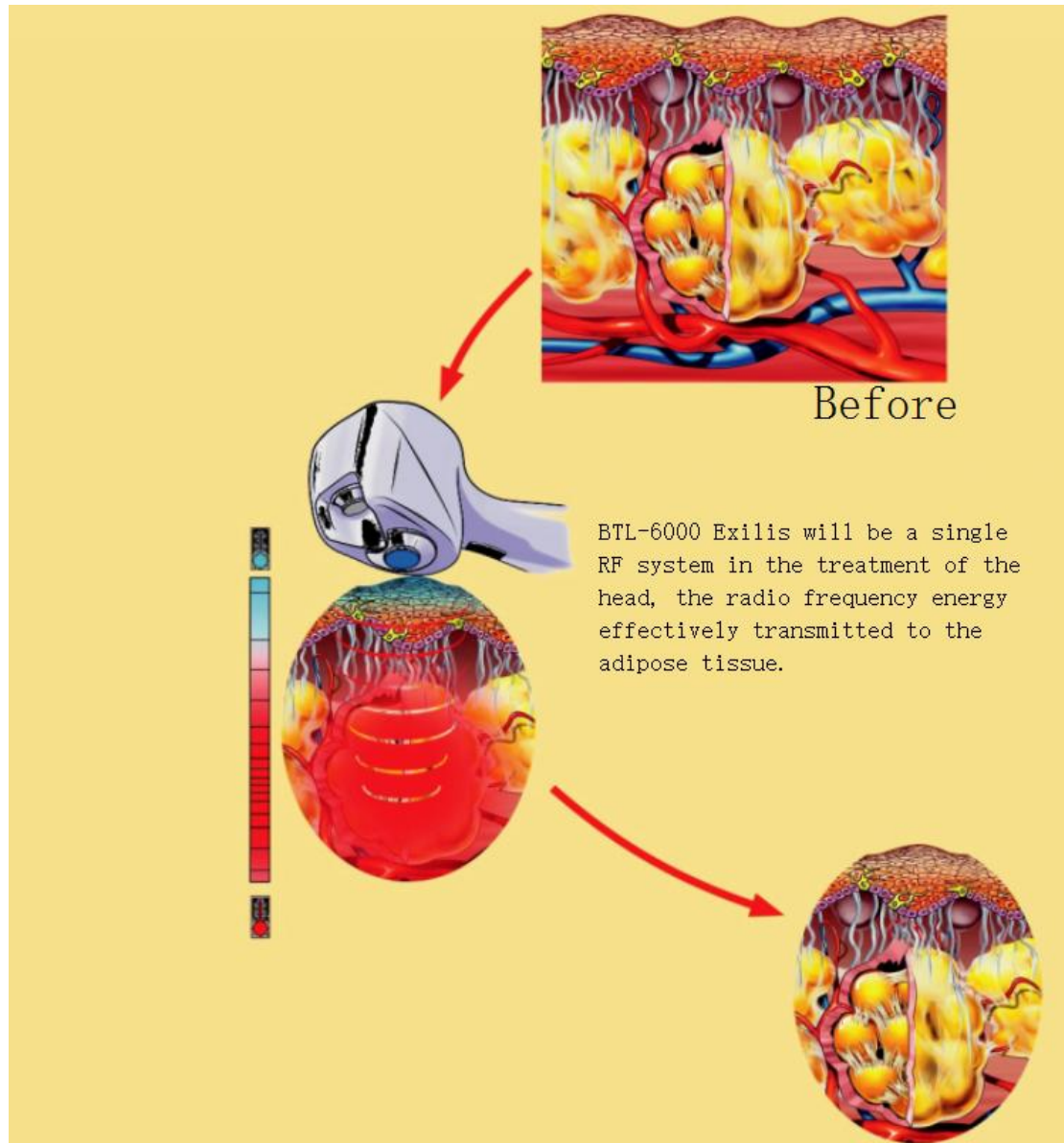


- 1.El Energy Flow Control System (EFC) garantiza la máxima seguridad.
- 2.El sistema de enfriamiento termoeléctrico más avanzado: control láser de la profundidad del tratamiento de radiofrecuencia (RF)
- 3.Solo un cabezal de tratamiento en la misma área de tratamiento, puede ser primero un desengrasado profundo y luego una arruga subcutánea
4. Termómetro incorporado, el único sistema que se puede utilizar para el control de la temperatura.
5. Cumple con la ergonomía: el mejor diseño del cabezal de tratamiento corporal.



After

Radiofrequency (RF) heat greatly contributes to the decomposition of fat, causing fat cells to dissolve liquid into the lymphatic drainage system

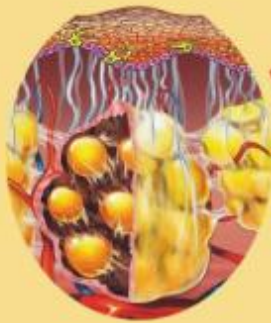

Reducir las arrugas

Remodelación facial


Tecnología de regeneración de colágeno.



La ventaja general de la cara.

1. Diseño avanzado para garantizar la seguridad del tratamiento, especialmente alrededor del ojo.
2. Excelente experiencia bajo una experiencia cómoda.
3. Simple, conveniente, el efecto de una importante cirugía plástica facial.
4. Sistema de control de flujo de energía seguro diseñado para profesionales.


Transferencia de energía controlable

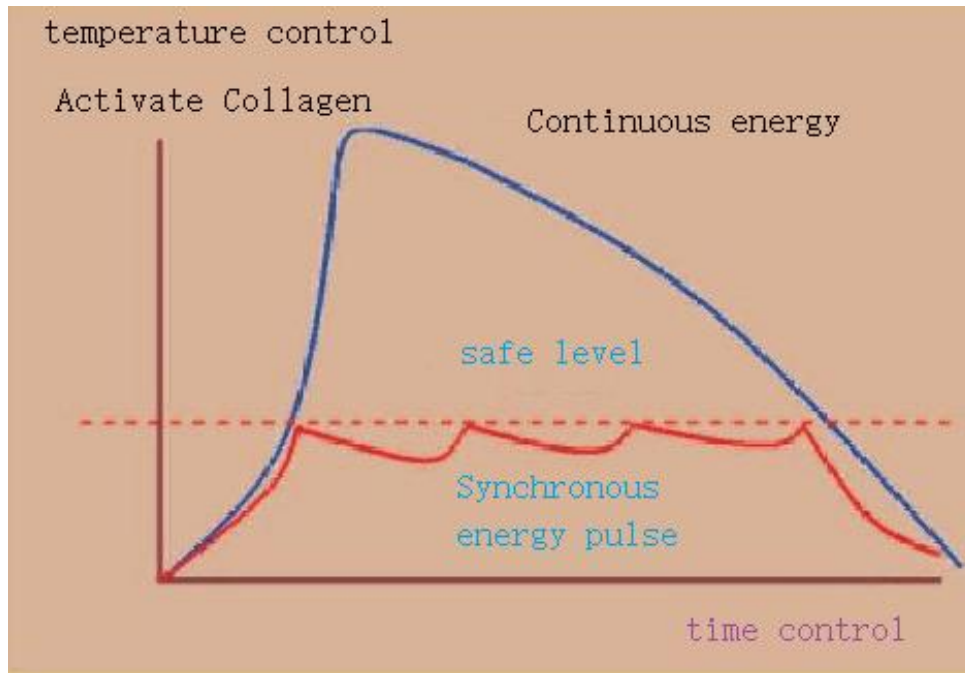

La tecnología más avanzada de la energía de doble pulso para producir una alta tasa de repetición (100kHz).

Para garantizar la seguridad de la tecnología de modo de pulso y, por lo tanto, crear una experiencia de calentamiento continuo, el sistema de control de transferencia de energía del cuchillo de grasa BTL-6000 estimuló en gran medida la respuesta fisiológica y fue completamente indoloro e incómodo.

1. Transferencia de energía de pulso síncrono para que sea un control más preciso de la energía de calefacción.
2. Doble pulso para asegurar el mejor tratamiento.
3. En comparación con la tecnología convencional existente, solo una pequeña cantidad de energía para completar el tratamiento.

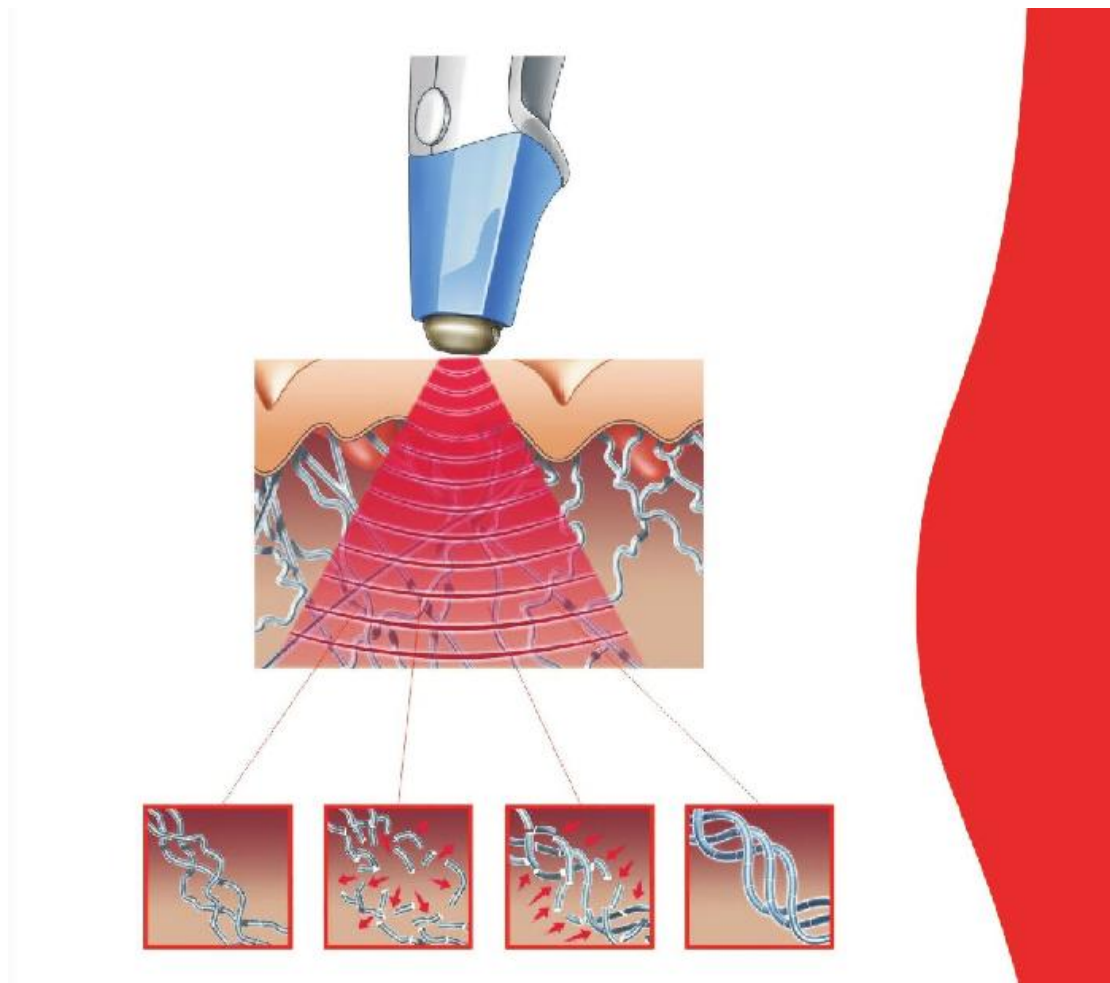

Principio de funcionamiento:

La estructura helicoidal ternaria de las fibras de colágeno se ve afectada por el calor y comienza a desintegrarse.

La radiofrecuencia enfocada de una sola etapa puede descomponer rápida y efectivamente las fibras de colágeno, separando la estructura del tejido de colágeno.

El proceso de curación natural, que estimula las fibrillas de colágeno, lo hace activo en la producción de nuevas fibras de colágeno.

La nueva cantidad de colágeno se vuelve a ensamblar en la estructura de la piel.



Tratamiento seguro, conveniente y más efectivo cm 2

El software EFC (sistema de control de flujo de energía) puede controlar el flujo de energía y eliminar automáticamente los picos de energía. Este proceso se conoce como un perfil de energía de espectro cuadrado (parte superior plana) que es exclusivo del equipo de tratamiento de alta frecuencia BTL-6000 Exilis. El BTL-6000 Exilis garantiza una distribución uniforme de la energía para un tratamiento más seguro, cómodo y eficaz.



Efecto significativo:



Antes y después



Antes y después



Antes y después

efecto:

- 1.Reductor de masa grasa
- 2.Reductor de celulitis
- 3.Estiramiento de la piel
- 4.Mejora de la piel



Antes y Después de 4 ciclos de tratamiento



Antes y Después de 4 ciclos de tratamiento



Antes y Después de 4 ciclos de tratamiento

Proveedor de fotos:

- Dr.R. Gartside (VA, EE. UU.)
- Dr.A. Okpaku (FL, EE. UU.)
- Dr.W. Voss (Alemania)
- Dr.A. Wong (Hong Kong)
- Dr.P. Hajduk (Rep. Gzeca)



Antes Después de 4 ciclos de tratamiento



Antes y Después de 4 ciclos de tratamiento




Antes y Después de 4 ciclos de tratamiento

Efecto:

1. Reducción de arrugas
2. Piel suave y más joven
3. Estiramiento de la piel y antienvjecimiento
4. Mejora la regeneración de colágeno


Verificación clínica:

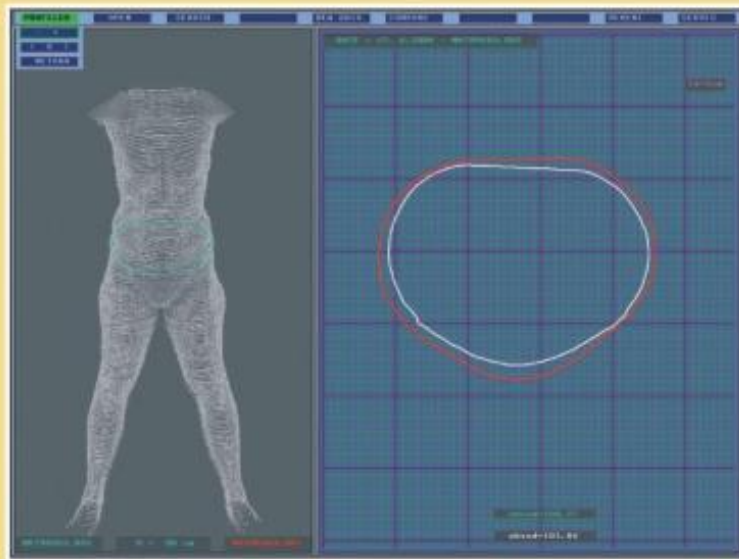


PREVAS Laser system-3D

Moisture detection
method

1. A large number of scientific research results verified
2. Biochemical tests had proven harmless to body organs
3. Tested by the test tube and biological in vivo test

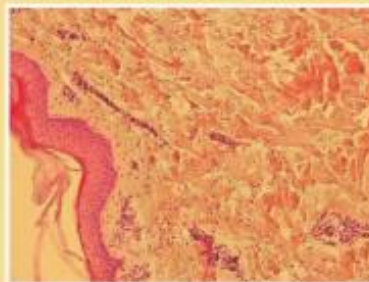

Histology - mesh connective tissue

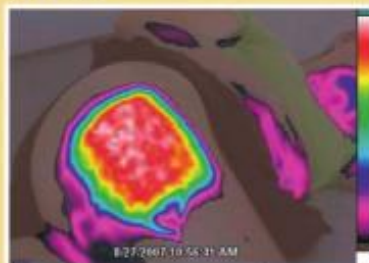

Late thermal
imaging scan

Ventaja incomparable

1. Es un tratamiento ampliamente probado de remodelación corporal, reafirmación de la piel y remodelación de la piel.
2. La única tecnología RF y de enfriamiento ajustable se combinan con el sistema.
3. Los estudios de RF autónomos verifican que la energía puede penetrar en la profundidad del tejido objetivo de piel profunda.
4. El sistema de enfriamiento avanzado se puede ajustar para penetrar con precisión el tejido objetivo y proteger la piel del daño.
5. El sistema de control de flujo de energía (EFC) protege el cuerpo de quemaduras en la piel al más alto nivel de tratamiento.

6. El cabezal de tratamiento de RF de precisión monitorea continuamente la temperatura objetivo de la piel y la calidad del contacto de RF.

7. Experiencia de tratamiento confortable, basada en una combinación única de radiofrecuencia y sistemas de refrigeración avanzados.