

Descripción general de la máquina adelgazante BBL

Nombre del producto	Máquina de adelgazamiento facial ultrasónica RF Máquina de levantamiento de la cara RF
Voltaje	110V-130V/60Hz, 220V-240V/50Hz
Tecnología	Ultrasonido + RF enfocada
El mango	2 Manija: Manija facial + manija de Bod y
Procesar las lentes	Sin límites
Frecuencia	1-10MHz
Mostrar	Pantalla táctil a color de 8 pulgadas
Profundidad del tratamiento	Capa de grasa subcutánea
Temperatura de tratamiento	Hielo superficial, calor de capa de grasa
Material de la carcasa	Carcasa metálica



Aplicación del polipasto de plasma

1. Reducción de volumen,
2. Reafirmación de la piel,
3. Conformación del cuerpo,
4. Rejuvenecimiento facial,
5. Levantamiento facial

Principio de funcionamiento

- BBL Slimming utiliza tecnologías paralelas de RF, cavitación y enfriamiento integradas en una cabeza. Proporciona la forma escultórica definitiva mejorando la acumulación de grasa local en el cuerpo, reafirmando la piel y ofreciendo una experiencia muy cómoda

Eliminar la celulitis.

- La estructura de hélice ternaria de las fibras de colágeno se ve afectada por el calor, comenzando a

La RF de una sola etapa permite una descomposición rápida y eficiente
Descomponer las fibras de colágeno y separar la estructura del tejido de colágeno.

Natural



Estimula el proceso de curación de las fibrillas de colágeno para hacer activamente
nuevas


Fibras de colágeno. Una nueva cantidad de colágeno se vuelve a montar en la
estructura de la piel.

- Tratamiento seguro, conveniente y más eficaz cm^2

El software EFC (sistema de control de flujo de energía) puede controlar el flujo de energía y eliminar automáticamente los picos de energía. Este proceso se denomina distribución de energía espectral cuadrada (superior plana) única para los dispositivos de procesamiento de alta frecuencia. Asegura una distribución uniforme de la energía, haciendo que el tratamiento sea más seguro, conveniente y eficaz.

Teoría terapéutica

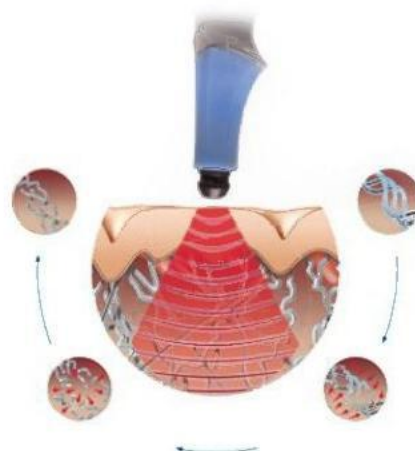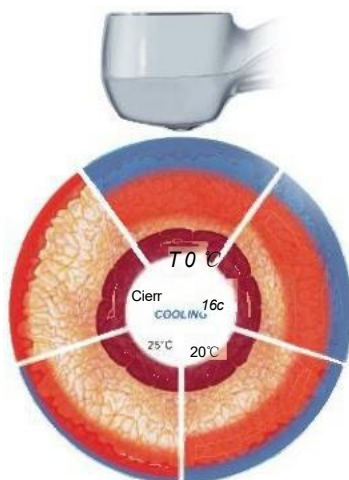

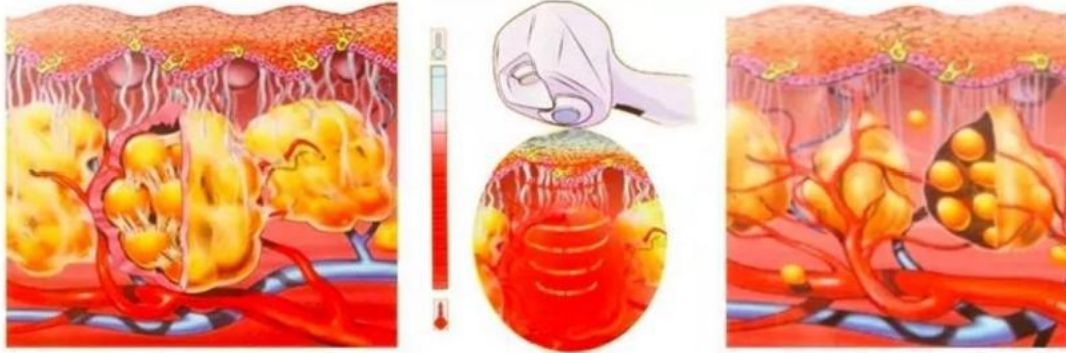

¿Cuáles son las ventajas de btl?



Sin daño a la epidermis-
Tejido adiposo
después de un
tratamiento



-Tejido adiposo sin
ningún tratamiento

· 2 en 1 RF y ultrasonido;

- Sin contacto, no invasivo, sin cirugía, sin tiempo de inactividad;
- Seguridad: la temperatura de la piel se controla durante todo el tratamiento para garantizar la máxima seguridad;
- Sin dolor: el calentamiento y el enfriamiento controlados aseguran la entrega indolora de energía a todas las profundidades del tejido;
- Eficaz: la administración simultánea de radiofrecuencia y ultrasonido proporciona un tratamiento clínico más eficaz para los pacientes;
- Comodidad: los pacientes que se sienten incómodos pueden reanudar el ejercicio o volver al trabajo inmediatamente después del tratamiento;
- Resultados notables: en muchos estudios clínicos, los pacientes han reportado excelentes resultados en la conformación y el apretamiento del cuerpo;
- Preciso: uniqueEFC™ (Control del flujo de energía) asegura que el nivel óptimo de energía se suministra siempre al tejido objetivo;
- Operación flexible: Cambiar la potencia y el enfriamiento durante el tratamiento, permitiendo al operador tratar tejidos profundos hasta la supercapa.

Sitio de tratamiento:

1. Apretamiento de la piel y eliminación de arrugas en la cara, el cuello y las áreas del cuerpo;
2. El contorno del abdomen, muslos, brazos, piernas y gran parte del cuerpo;
3. Reduce eficazmente las arrugas y los depósitos de grasa que obstaculizan la dieta y el ejercicio.

Tratamiento de adelgazamiento del brazo



after one treatment



after three treatments



after six treatments



Tratamiento de adelgazamiento abdominal



one treatment

three treatments

six treatments



Tratamiento de adelgazamiento de piernas



Un tratamiento, tres tratamientos y seis tratamientos



Aplicador grande para adelgazamiento corporal



Aplicador pequeño para lifting



**Efecto de eliminación
de arrugas con
aplicador pequeño**



Antes después antes después



Antes después antes después





Exhibición del producto







Perfil de la empresa

