

Manual de hidrodermabrasión para el rejuvenecimiento de la

De acuerdo con la información del texto y la imagen sobre la interfaz de salida en ambos lados del instrumento, inserte los accesorios en la interfaz correspondiente.

Luego coloque los accesorios cuidadosamente en el estante de accesorios.



DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO EN




Durante el uso, el instrumento emite un zumbido y parpadea mientras observa el icono de la botella de líquido residual en la interfaz. Si hay parpadeo, vacíe el líquido residual de la botella de líquido residual y vuelva a instalar la botella de líquido residual.

Métodos y procedimientos de funcionamiento


1. Hidrodermoabrasión: limpieza facial, exfoliación, limpieza de poros



Seleccione el molino de agua adecuado de acuerdo con la piel y gire la perilla delante de la pantalla a la botella A, B o D que necesita ser utilizada.

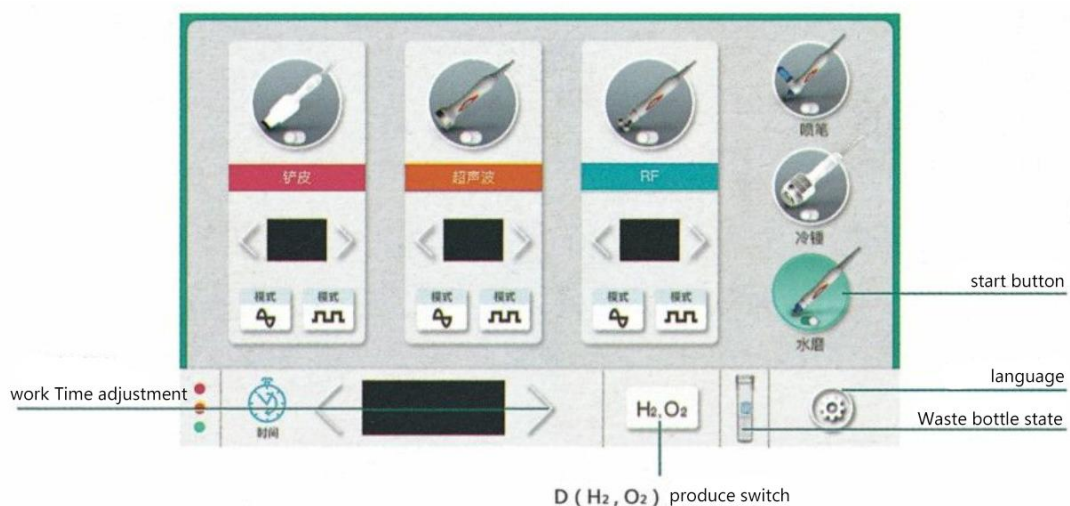


Ajuste la succión de presión negativa y el flujo de agua para limpiar toda la cara.

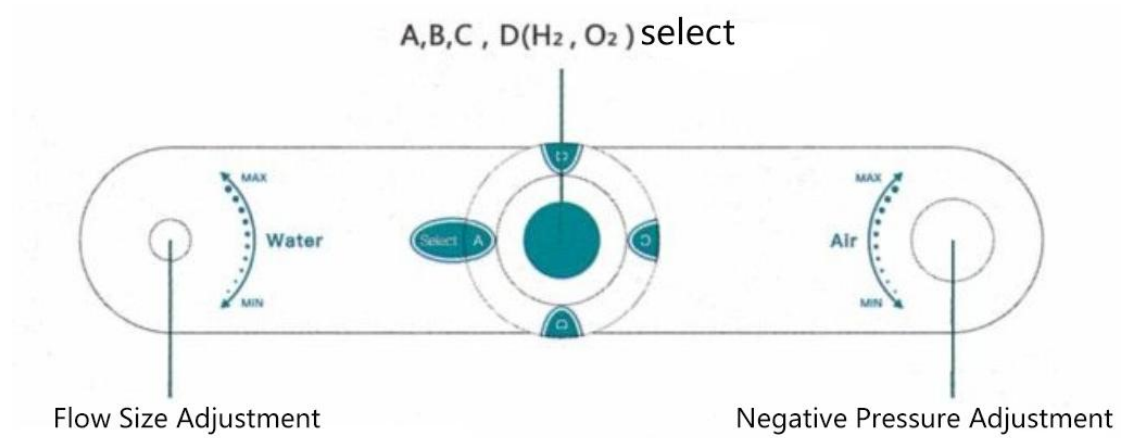

2. Pistola de oxígeno: rejuvenecimiento de la piel




Vierta la esencia diluida en el recipiente de la pluma aerosol.

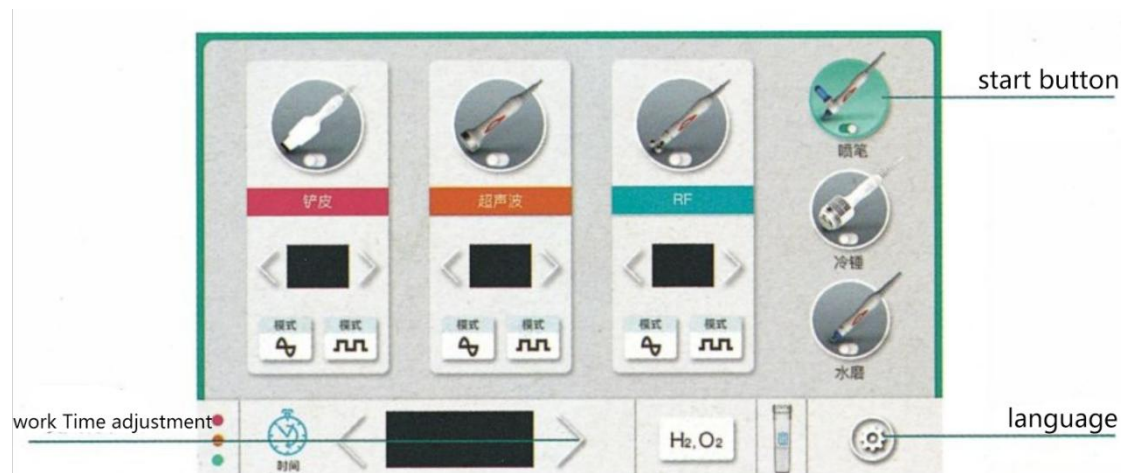

3 Martillo frío: la piel que se enfría después de los treamten



Área de contacto delantera del mango de operación

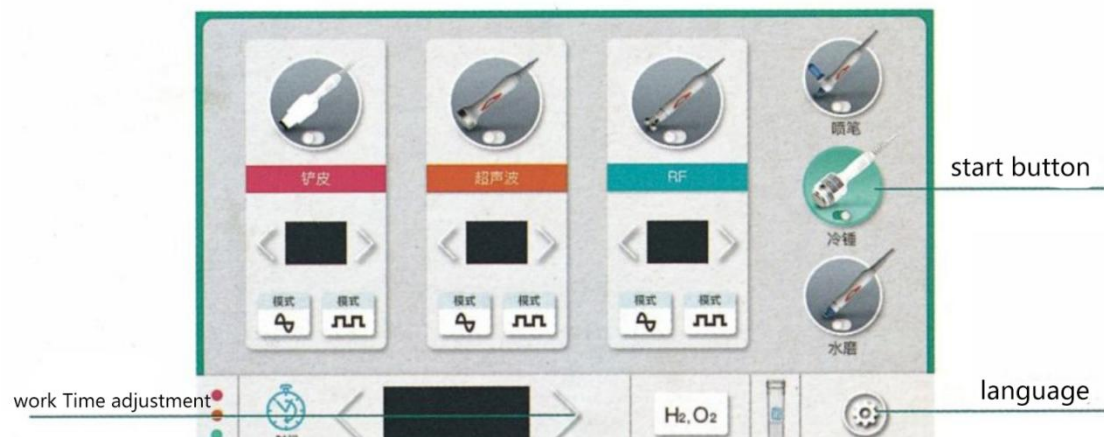


4. RF multipolar: reafirmante y modelado, levantamiento facial



Aplicar una cantidad adecuada de gel nutritivo en la piel.


Coloque el cabezal de radiofrecuencia cerca del sitio de acción. El tiempo de operación es de 10-15 minutos.

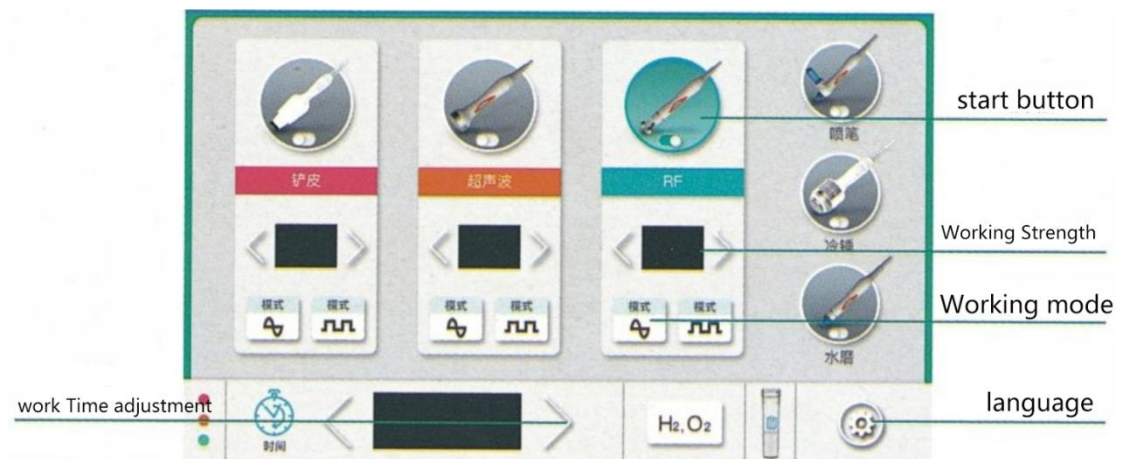

5. Cabeza ultrasónica: promueve la microcirculación, el rejuvenecimiento de la piel




Aplicar la cantidad adecuada de esencia sobre la piel. Apriete el cabezal acústico a la zona de acción. El tiempo de operación es de 5-8 minutos.

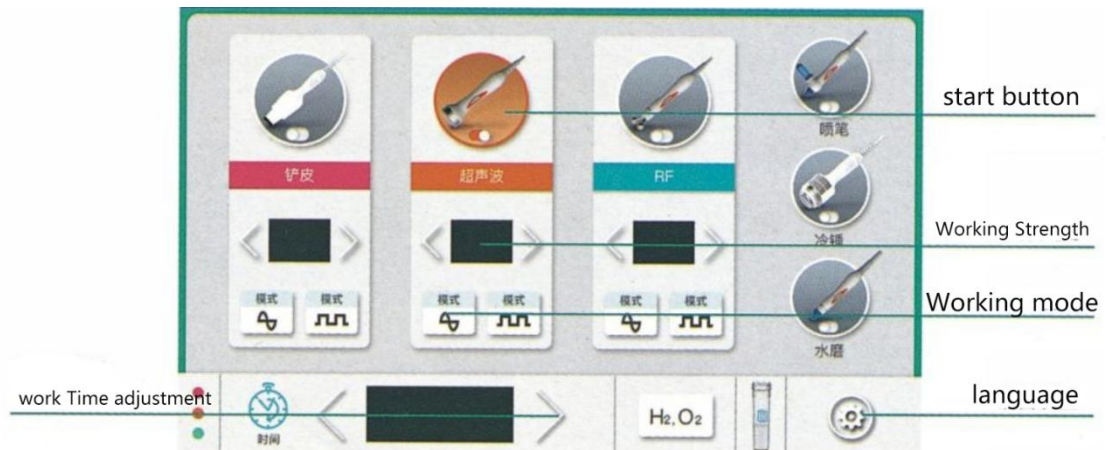

6. Dispositivo de limpieza de la piel: permite que la línea de la mandíbula se aprete y mejore biológicamente la firmeza general de la piel facial



Después de limpiar la piel, la sonda se mueve de abajo hacia arriba con una inclinación de 45 grados con respecto a la piel a una velocidad media. El tiempo de operación es de 10-15 minutos.

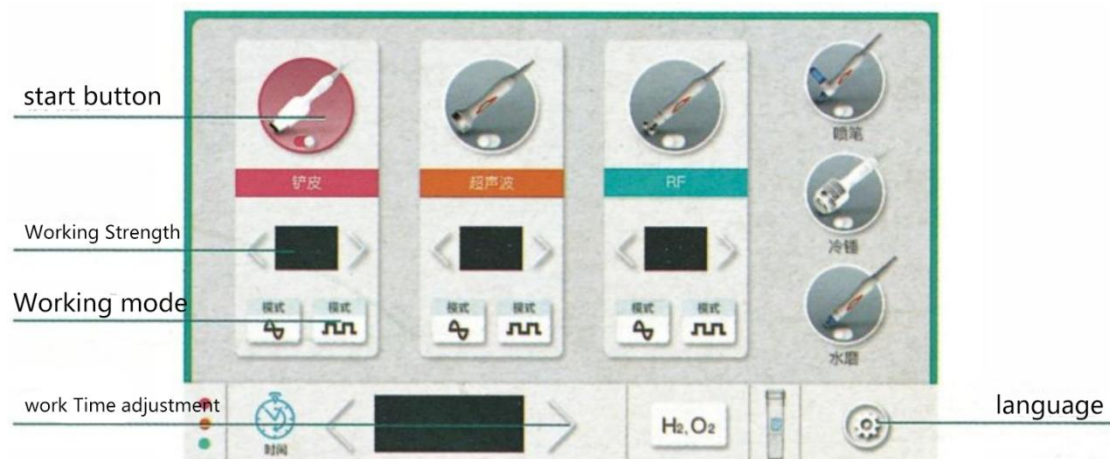

Ventajas

- 1 : Hidrodermoabrasión, adecuada para piel normal o sensible, o piel con acné, etc.
- 2 : Lavado de limpieza: limpieza profunda, eliminación de la suciedad de la piel, cicatrices mínimamente invasivas, eliminación de puntos negros, eliminación de la suciedad profunda de la piel
- 3 : Hidratación efectiva y directa: proporciona suficientes moléculas de agua a la piel mientras limpia
- 4 : Utilice productos de cuidado de la piel para una variedad de propósitos terapéuticos tales como eliminación de arrugas/ pigmentación, iluminación y blanqueamiento de la piel