

Modelo : TT MPT



[Watch on YouTube](#)

ULTRAMICRO PULSE ULTRASONIC SYSTEM es un dispositivo HIFU no invasivo diseñado para el tratamiento HIFU profesional para lifting facial, estiramiento de la piel y contorno. Con tecnología de ultramicropulso, proporciona energía precisa a múltiples profundidades para estimular la regeneración del colágeno, brindando resultados visibles y duraderos sin cirugía ni tiempo de inactividad.




Aplicación

- Activación de la epidermis y dermis superficial.
- Activación dérmica profunda
- Apriete instantáneamente la fascia
- Mejora el soporte de la capa de fascia y reduce el tejido caído.
- Mejorar la actividad celular y aumentar la capacidad de almacenamiento de agua celular.
- Aumenta el volumen facial, estimula la regeneración de colágeno, regeneración de malla de fibra elástica, regordeta y elástica.

Sistema ultrasónico de pulso Ultamicro

Utilizando el sistema ultrasónico ultramicropulsado, se realiza la conmutación de energía instantánea bidireccional entre el pulso acústico lineal transversal y la onda acústica anular. La máquina única realiza la combinación del modo de tecnología de punto, línea y superficie para lograr un modo completo de levantamiento y estiramiento multicapa antienvjecimiento de capa completa, perfecto y sin costuras de 360°, con efectos precisos, cómodos, rápidos y duraderos.

En el modo MP, el modo de transmisión de energía de microsegundos tiene puntos de enfoque más pequeños y densos que otros instrumentos, mayor seguridad, experiencia cómoda, período de recuperación más corto y distribución de puntos más uniforme y eficiente.

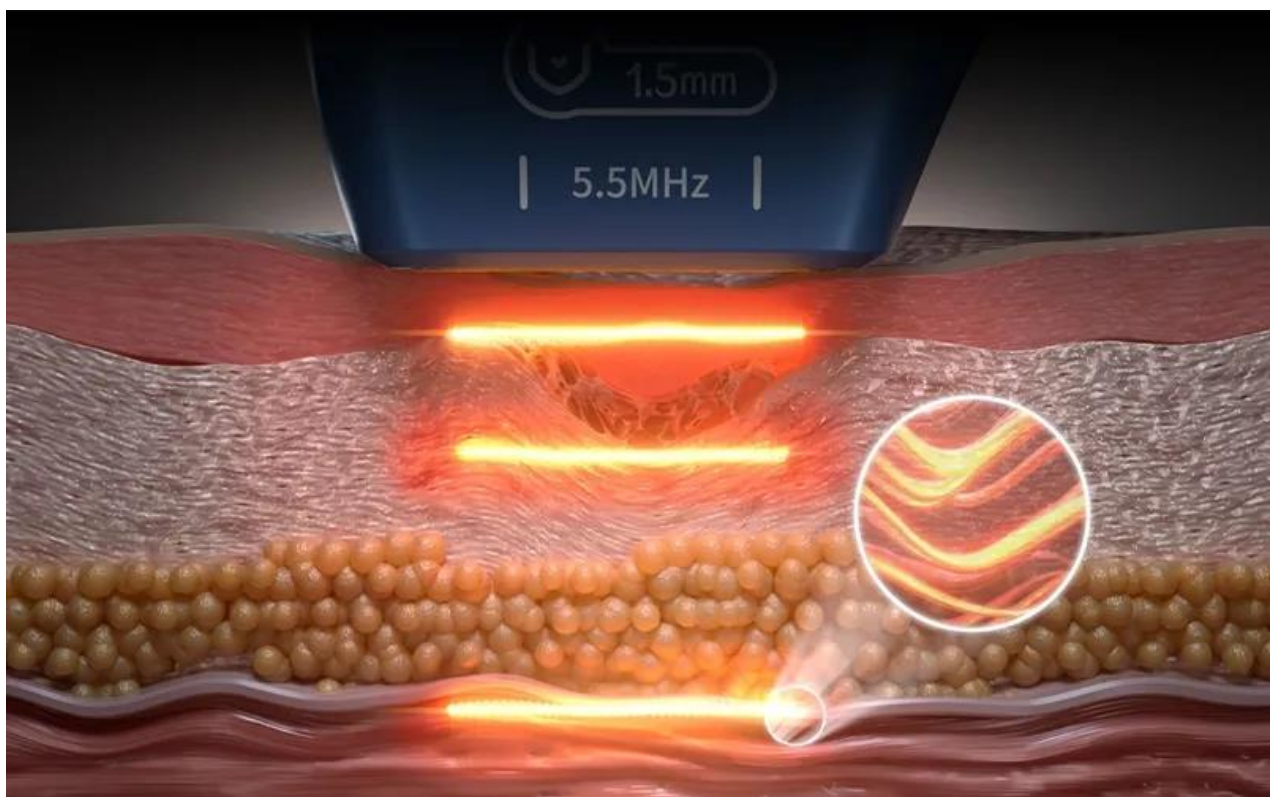

Efecto mecánico + Efecto térmico + Efecto cavitación

La tecnología MP puede transmitir energía con mayor precisión a la capa de tejido de la piel objetivo, generando efectos térmicos, tensando la fascia, activando la regeneración de colágeno y fibras elásticas y logrando efectos antienvjecimiento como el estiramiento. promoviendo la regeneración de colágeno y mejorando la textura de la piel sin dañar los tejidos circundantes.

TCP en modo micropulso

El modo de micropulso TCP en el modo de micropulso realiza una superposición de puntos de condensación térmica pequeña y precisa, actúa de manera uniforme e intensiva en todas las áreas del nivel objetivo, y la energía densa y dispersa juega un papel más extenso, destacando las ventajas generales.

Herramienta de mango de optimización de operación circular

La herramienta manual de operación anular integra el modo de salida de energía ultrasónica de nueva tecnología más alto del mundo. Sonda exquisita, cuidado exquisito.

Modo de punto de fusión Modo MP: salida infinita de energía ultrasónica en funcionamiento circular.

Sonda de funcionamiento anular

El efecto de enfermería básico, agregar un nuevo esquema operativo, consolidar el efecto y ampliar la adaptabilidad deben estar dentro del alcance.



TT MPT

Efecto antienvjecimiento multidimensional Como la pirámide

SEGURO|ESTABLE |CONTINUO

- ♦ 13,3 pulgadas
- ♦ pantalla inteligente de alta definición
- ♦ Diseño completamente dinámico
- ♦ Enchufe extraíble
- ♦ Interacción persona-computadora
- ♦ Pleno sentido de la tecnología
- ♦ Diseño original patentado

TECNOLOGÍA DE OPERACIÓN DE MICROPULSO Y SONDA

-Patrón MP (línea multipunto) [417 puntos/1 motor en total]

-Patrón MP (punteado) [17 puntos/1 motor en total]

-Efecto mecánico + efecto térmico Efecto mecánico + efecto térmico

-Tecnología de innovación de salida bidireccional.

-Múltiples sondas con diferentes profundidades de cuidado.

-Enfermería combinada multimodo

Las ventajas del mango plano multidimensional están dirigidas desde la capa de piel hasta la capa de fascia superficial, la capa de grasa, la capa muscular y un esquema de personalización integral basado en diferentes tipos de piel, regiones operativas y niveles de tejido.

SONDA OCULAR ESPECIAL

Sonda ocular especial de 5,5 Mhz y 2,0 mm

Tecnología de sonda ultrafina exclusiva

-Aplicación mundial de I+D profesional.

Actuando como una sonda para las manchas oculares, la sonda para las manchas oculares refina y resuelve problemas como líneas finas poco profundas, líneas genuinas profundas, ojeras y bolsas en los ojos.

LA SONDA FACIAL ACTÚA SOBRE LA PIEL

Nomal (Puntiforme)

Micropulso (lineal)

Aplicar gel sobre la piel antes de la operación.

Mango de operación piel vertical

No dejar la piel durante la operación.

T-1.5(cara)5.5MHz Para la capa de la piel, líneas superficiales, color de la piel, textura de la piel y contracción de los poros.

T-3.0(rostro)5.5MHz Llega directamente a la dermis y estimula la proliferación continua de colágeno.

T-4.5(cara)5.5MHz Llegue directamente a la capa de fascia SMAS y apriete la base del músculo para lograr un levantamiento apretado.

LA SONDA CORPORAL SE APLICA SOBRE LA PIEL

Nomal (Puntiforme)

Micropulso (lineal)

Aplicar gel sobre la piel antes de la operación.

Mango de operación piel vertical

No dejar la piel durante la operación.

T -6,0 (cuerpo) 2 MHz Para la capa de la piel, el color de la piel, la textura de la piel y la contracción de los poros

T-9.0(cuerpo)2MHz Llega directamente a la dermis y estimula la proliferación continua de colágeno.

T-13(cuerpo)2MHz Llegue directamente a la capa de fascia SMAS y apriete la base del músculo para lograr un levantamiento apretado.

HERRAMIENTA MANO Y SONDA DE OPTIMIZACIÓN DE OPERACIÓN CIRCULAR

-Patrón MP (línea multipunto) [417 puntos/1 motor en total]

Patrón MP (punteado) [motor de 17 puntos/l en total] - Tecnología innovadora de microtransductor

- Funcionamiento sin fin del anillo Múltiples sondas con diferentes profundidades de cuidado
- Enfermería combinada multimodo

La primera tecnología colaborativa anular de "ultrasonido de micropulso" del mundo, el enfoque de celosía lineal ultrasónico, puede maximizar el efecto de la operación; Además de levantar, también aporta firmeza adicional. En comparación con el modo de ultrasonido tradicional, múltiples modos pueden reducir eficazmente el dolor.

LA SONDA DE ANILLO SE APLICA SOBRE LA PIEL

Normal (punteado)

Micropulso (lineal)

Aplicar gel sobre la piel antes de la operación.

Mango de operación piel vertical

No dejar la piel durante la operación.

T-1.5(cara)5.5MHz Para la capa de la piel, líneas superficiales, color de la piel, textura de la piel y contracción de los poros.

T-3.0(rostro)5.5MHz Llega directamente a la dermis y estimula la proliferación continua de colágeno.

T-4,5 (cara) 4 MHz Llegue directamente a la capa de fascia SMAS, apriete la parte inferior del músculo para lograr un levantamiento apretado.

ANTIENVEJECIMIENTO PERSONAL A MEDIDA

Según el grupo de edad, el estado de la piel y las necesidades del cliente, se pueden combinar puntos, líneas y superficies para lograr un programa de personalización privado antienvjecimiento de todas las dimensiones y capas completas.

ENFERMERÍA DE MODO ÚNICO

Modo MP (formación de líneas multipunto) [417 puntos/l de motor en total]

También se puede seleccionar el modo de puntos [17 puntos/l ronda en total]

El modo se puede cambiar libremente tocando la interfaz de la misma sonda.

ENFERMERÍA COMBINADA MULTIMODO

El micropulso realiza la superposición de puntos de condensación térmica diminutos y precisos y actúa de manera uniforme e intensa en todas las áreas del nivel objetivo. La energía densa y dispersa actúa más ampliamente, resaltando las ventajas generales.

OPERACIÓN DE MICROPULSO ENFERMERÍA

Eficacia del tratamiento básico, agregar un nuevo esquema de operación, consolidar el efecto y ampliar el alcance de la aplicación.

El modo MP anular se puede seleccionar como modo de punto anular, y la misma sonda puede cambiar libremente el modo tocando la interfaz.

Ventajas del SISTEMA ULTRASÓNICO DE PULSO ULTRAMICRO (TTMPT)

Antienvejecimiento de capa completa de 360° con precisión multimodo

Combina los modos de punto, línea y superficie en un solo sistema para levantar y tensar capas completas y sin interrupciones, dirigiéndose a todo, desde la piel superficial hasta la fascia SMAS profunda con precisión milimétrica.

Innovadora tecnología de micropulsos (modo MP)

El modo MP ofrece puntos de coagulación térmica más densos, más pequeños y más uniformes que los dispositivos HIFU tradicionales, lo que garantiza un tratamiento más rápido, mayor seguridad, menos molestias y un tiempo de inactividad mínimo.

Mecanismo de triple acción: efectos mecánicos + térmicos + cavitación.

Al mismo tiempo, tensa la fascia, estimula la regeneración de colágeno y mejora la textura de la piel, logrando efectos antienvjecimiento visibles sin dañar los tejidos circundantes.

Herramienta manual de operación anular

El modo "ultrasonido de micropulsos" maximiza la eficacia del tratamiento con una salida de energía continua y una cobertura de tejido superior, ideal para el contorno facial y corporal.

Múltiples sondas especializadas para una atención personalizada

Incluye sondas faciales y corporales (de 1,5 mm a 13 mm) y una sonda ocular dedicada (2,0 mm, 5,5 MHz) para áreas delicadas, adaptando la profundidad y la producción de energía según el tipo, área y condición de la piel.

Verdadero diseño antienvjecimiento multidimensional

Desde líneas superficiales hasta levantamiento de tejidos más profundos, el sistema ofrece soluciones personalizadas de capa completa para los problemas del envejecimiento en todos los niveles, incluido el tono, la textura, la elasticidad y la pérdida de volumen de la piel.

Interfaz de usuario inteligente con pantalla táctil HD de 13,3"

La interfaz fácil de usar permite cambiar de modo en tiempo real (punto/línea/superficie) en la misma sonda, con ajustes preestablecidos inteligentes para diferentes regiones y necesidades de tratamiento.

Entrega de energía segura, estable y continua

La tecnología de micropulso TCP garantiza una entrega precisa de energía al nivel del tejido objetivo, lo que reduce el dolor y maximiza la uniformidad y los resultados del tratamiento.

Aplicación versátil del rostro al cuerpo

Adecuado para una amplia gama de tratamientos que incluyen lifting de la piel, reducción de arrugas, rejuvenecimiento de ojos, refinamiento de poros, aumento de colágeno y reafirmación corporal: verdaderamente una solución de una sola máquina.

Alto retorno de la inversión para clínicas y distribuidores

Diseñado para profesionales que buscan ofrecer un tratamiento HIFU premium para rostro y cuerpo. Una alternativa confiable a otras máquinas de ultraterapia a la venta como Ultraformer MPT, a un costo HIFU más accesible y con resultados clínicos similares o superiores.

Antes y después

Lifting y reafirmación facial

Eliminación y reafirmación de arrugas del cuello.

Antiarrugas y reafirmante alrededor de los ojos.

Parámetros técnicos

Modelo:	TT MPTSTL
Cartuchos de micropulso	1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 6,0 mm, 9,0 mm, 13,0 mm
Cartuchos circulares	1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
Fuente de alimentación:	110 V CA 220 V CA
Fuerza:	650W
Frecuencia:	2MHz 4MHz 5,5MHz
Peso del instrumento:	10 kilos
Cantidad bruta de producto:	20 kilogramos
Tamaño del paquete:	60X43X57cm

Preguntas frecuentes sobre la máquina ultraformadora MPT portátil

► ¿Cómo se compara TTMPPT con las máquinas Ultraformer MPT o Ultherapy?

TTMPPT ofrece resultados clínicos similares o superiores a un costo HIFU más competitivo. Ofrece tratamientos multimodo versátiles (punto, línea, superficie), tecnología de micropulso anular y múltiples sondas especializadas, todas diseñadas para brindar comodidad, seguridad y levantamiento de capas completas.

► ¿Se puede utilizar en zonas sensibles como alrededor de los ojos?

Sí. La sonda ocular dedicada de 2,0 mm y 5,5 MHz trata de forma segura las líneas finas, las ojeras y las bolsas de los ojos sin riesgo, proporcionando una entrega de energía precisa y suave para las zonas delicadas.