

22D MAX Ultra.

Tu gestor de prestigio

Tecnología innovadora: revitalizar la juventud

— Manual del usuario del producto





El nuevo 22D MAX ULTRA hace su debut

CONTENIDO

22D Max Ultra.

Asuntos que requieren atención

- Tabú operativo
- Medidas de seguridad
- Precauciones antes de la operación
- Medidas de precaución tras la cirugía

- Precauciones de operación

0105 **01**

Instrumento Instalación

- Componente
- Manejo de la conexión del host

06 - 07 **02**

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFACIA

- Interfaz de operación 13D
- Interfaz de operación 18D RS
- Interfaz de operación 30RS

08 - 09 **03**

INSTRucciones de Uso

- Interfaz de Selección del Controlador
- Manillar multidimensional 13D
- Manija termoplástica 18D RS
- Manija de termoplástico 30 RS

10 - 11 **04**

TÉCNICO PARÁMETRO- TÉCNICO

- Precauciones de airbags
- Parámetros del motor sin escobillas
- Configuración de la sonda 13D
- Configuración de la sonda 18D

12 - 14 **05**

PARÁMETRO TÉCNICO

- Configuración del producto

15 - 15 **06**

Instrucciones de po- sventa

- Mantenimiento
- cláusula de garantía

16 - 16 **07**

Tabú operativo

1. Prohibido durante el embarazo y la lactancia.
2. Las personas con arritmias cardíacas, especialmente aquellas que usan marcapasos, no deben hacer esto.
3. No se recomienda en pacientes con cáncer, cirugía mayor ni diabetes.
4. Está prohibido para personas con epilepsia y hipertensión grave.
5. Las personas con alergias y acné facial grave no lo hacen de forma temporal, y la cirugía facial está prohibida.
6. Si la piel tiene una herida, evita la herida o no hagaslo.
7. Si hay metal en el cuerpo, actúe con precaución y evite las partes metálicas al operar.
8. A quien tenga implantes de oro en la cara, no lo haga.
9. Sin cirugía plástica ni rellenos artificiales en el cuerpo.
10. Los pacientes con acné quístico grave en la cara y el cuello deben tener precaución.
11. Si la piel tiene enfermedades infecciosas graves, proceda con precaución.
12. En los primeros 9 meses, las personas que toman isotretino no deben tomarlo.






Medidas de seguridad

1. Si el enchufe está sucio, límtelo a tiempo y asegúrate de que no haya ningún impureza antes de conectarlo.
2. Conecte el dispositivo a una toma de corriente de 110-220 V, 50 Hz a 60 Hz, y desconecte el cable de alimentación al moverlo.
3. No toque el enchufe ni tira del cable de alimentación.
4. No toque el cable de alimentación ni el enchufe con manos húmedas.
5. No ejerza fuerza en la zona del instrumento o del suministro de energía.
6. No utilice el instrumento en altas temperaturas, ni coloque equipos de calefacción cerca de él.
7. No desmonte la tomada eléctrica una vez que el instrumento haya sido encendido, ya que podría provocar un fallo.
8. Si durante el uso del instrumento aparece humo o olor, desconecte la alimentación y consulte al servicio de posventa.
9. No toques los labios ni los ojos cuando el mango esté activado para evitar lesiones.
10. Si el indicador permanece siempre de un azul brillante durante el funcionamiento o se escucha un sonido anormal, retire la manija de la piel a tiempo.

Precauciones antes de la operación

1. Consulte a expertos o reciba formación profesional antes de usarlo.
2. Evalúe el estado de la piel del paciente y sus alergias (no se puede realizar la cirugía en caso de alergias graves).
3. Pregunte al paciente si ha recibido inyecciones recientemente en el instrumento o en la cara (el instrumento de luz acuosa puede operarse después de dos días, el de HIFU después de un mes, y la inyección facial después de tres meses).
4. Informa al cliente en detalle de la sensación o reacción que experimentará durante la operación, para que esté preparado psicológicamente.
5. No tome medicamentos ni beba alcohol durante las 24 horas previas y posteriores a la cirugía.
6. Antes de la operación, es fundamental ajustar correctamente los parámetros del cabezal de estética.
7. Compruebe que el instrumento esté en buen estado y que la preparación esté completa antes de iniciar el funcionamiento.

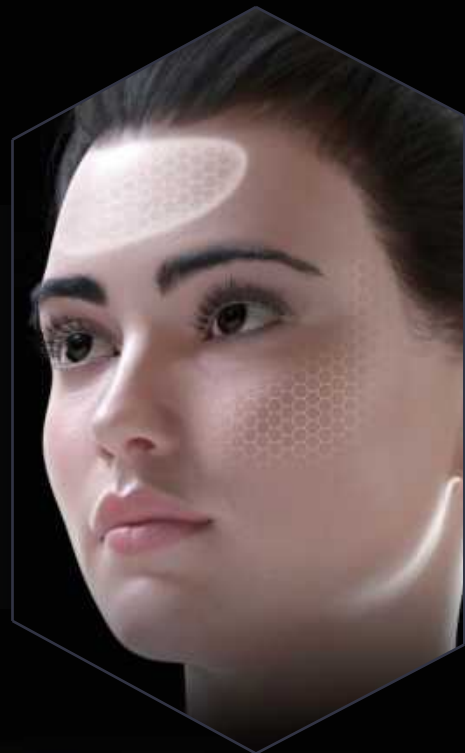

Medidas de precaución tras la cirugía



1. Después de la operación, no use agua caliente para lavarse la cara durante una semana; se recomienda usar agua fría, y en invierno puede usar agua tibia, siempre que no supere los 35 °C.
2. Aplica la máscara hidratante y reparadora una vez por la mañana y otra por la noche durante un mes, y presta atención a la hidratación, la nutrición y la protección solar.
3. No utilice el equipo de belleza térmica, láser o de luz de color durante una semana.
4. No utilice la sauna, no realice masajes faciales, no use maquillaje pesado, evite entornos de alta temperatura y no se exponga al sol durante dos semanas.
5. No se recomienda aceptar inyecciones, colocación de alambre, rellenos ni otros procedimientos en un plazo de un mes.
6. Evite consumir salsa de soja y otros alimentos con colorante intenso; no beba alcohol, no fume, no ingiera pimienta picante, mariscos, sangre ni otros alimentos similares; evite alimentos duros como la caña de azúcar y el betel; y no tome antibióticos como la aspirina.
7. Evita beber demasiada agua después de las 8 p.m., ya que cada persona tiene una constitución física y un metabolismo distintos. El edema es un fenómeno normal, así que no te preocupes: los síntomas desaparecerán por sí solos.
8. Después de la operación, es importante descansar adecuadamente, dormir lo suficiente, evitar el ejercicio intenso y favorecer la circulación sanguínea, ya que el cuerpo no se recupera fácilmente tras una actividad física intensa.
9. Para lograr un mejor estado tras la cirugía, es fundamental llevar a cabo adecuadamente la rehabilitación, la nutrición y el reposo. Es necesario evitar que, por descuido en el cuidado y la recuperación, el resultado no sea satisfactorio ni la recuperación sea insuficiente.
10. Las personas con metabolismo lento o que han recibido tratamientos como rellenos, inyecciones o procedimientos de pigmentación pueden presentar enrojecimiento, erupciones cutáneas y manchas oscuras en un corto período de tiempo; se trata de fenómenos normales que desaparecen espontáneamente en 3 a 7 días, aunque en algunos casos pueden persistir durante aproximadamente una semana.
11. Durante el procedimiento, se podrá sentir una sensación de hinchazón ácida en una zona muy pequeña en un plazo de un mes, lo cual es un fenómeno normal.
12. Por favor, cumpla conscientemente con las normas anteriores, ya que su cumplimiento desempeña un papel decisivo en la eficacia del tratamiento posterior: cuanto más estandarizado sea el cuidado posterior, mejor será el resultado (cuanto más tiempo se mantenga, mejor será el estado de la piel).

Medidas de precaución para la operación

1. Lea atentamente el manual de instrucciones y utilice el instrumento según el método indicado. Si no lo utiliza durante un largo período, desconecte la alimentación.
2. Al usar el mango, primero reduzca la intensidad y luego ajuste progresivamente hasta alcanzar la intensidad adecuada.
3. El malestar durante la intervención es una reacción normal, por lo que el mango debe estar bien acercado a la piel para evitar que aumente el malestar.
4. Cuando el manillar está en funcionamiento (el indicador de trabajo está encendido), no debe salir de la superficie de la piel y solo puede hacerlo tras la pausa o al finalizar.
5. Si el mango presenta anomalías, retirelo de la piel a tiempo para evitar daños innecesarios.
6. Cuando el esteticista trabaja, no envuelva el cable del mango alrededor de la mano.
7. Al cambiar la cabeza, el soporte de la cabeza se coloca contra el puerto de la manija, en estado suspendido.
8. Al usarlo, es importante seguir las indicaciones del accesorio correspondiente para evitar molestias.
9. Durante el funcionamiento, debe haber suficiente medio (como un gel) para que las piezas puedan ser cuidadas.
10. Cuando no se necesite el mango, debe colocarse en el estante de accesorios. No tira con fuerza del cable de conexión mientras esté en el estante.
11. Tras usar el instrumento, límpielo con una tela de algodón y hisopos de algodón, y luego limpie la parte metálica de la cabeza o mango del instrumento con alcohol al 75%.
12. Si observa alguna anomalía al utilizar el instrumento, detenga inmediatamente la operación y consulte a un profesional.
13. Si el instrumento presenta anomalías, confirme nuevamente las instrucciones antes de operarlo. Si la anomalía no se resuelve, no desmonte el instrumento por su cuenta; en su lugar, póngase en contacto con el servicio postventa.



Componente

El instrumento consta de una máquina principal y una manija (13D, 18DRS, 30RS), y la pantalla táctil se encuentra frente a la máquina principal.



13.3 Pantalla inteligente HD

Diseño clásico de pantalla grande con bordes reducidos un 40%



13D Multi-dimensional handle

Lifting facial y firmeza cutánea.
Innovación tecnológica en cabezales ultrasónicos multidimensionales



30 Manija termoplástica de RS

Utilizar el principio de medición de la presión del airbag para detectar la relajación vaginal



18D RS Manija termoplástica Gestión de la remodelación corporal con tecnología de onda RF en espiral de IA

Manejo de la conexión del host

Consulte el diagrama de la tapa trasera para conocer el accionamiento y la orientación antes de instalarla.




Instalando la pantalla
Alinee la ranura en la parte trasera de la pantalla con la interfaz de instalación del instrumento y presiona hasta el fondo.



13D Conector de conexión
Alinee la conexión del cable con la interfaz y preséntela hasta el fondo.



30 RS Conector de conexión
Alinee la conexión del cable con la interfaz y preséntela hasta el fondo.

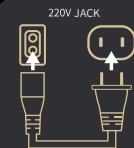

Operación al encender
Conecta el cable de alimentación y presiona el botón ON/OFF en la parte trasera de la consola para encenderla.



18D RS Conector de conexión
Alinee la conexión del cable del mango con la interfaz y preséntela hasta el fondo.



**Pé de pedal
soceto de conexión**
Alinea el conector del pedal con el puerto y presiona completamente hasta la posición final.

Interfaz de Selección del Controlador


Manillar 13D

Manillar del RS 18D


30 RS handle



Handle no está vinculado

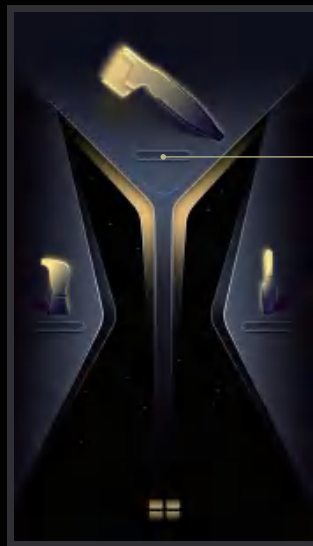

El conector del controlador está conectado, pero no está conectado.

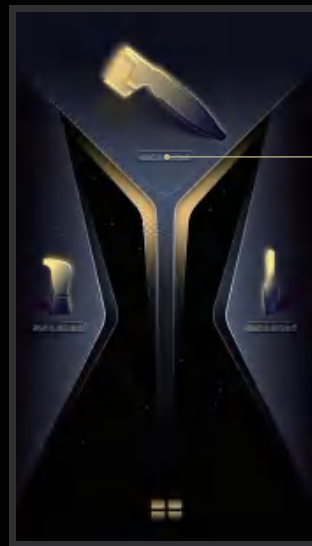

Enlace de maniobra

Interfaz de operación 13D

Partes correspondientes: Cara (1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm); Barbilla (6,0 mm)
Femur (10,0 mm) Abdomen (8,0 mm, 13,0 mm) Cadera (16,0 mm, 18,0 mm)



- ① Código de manejo
- ② Número restante
- ③ Número de unidades en uso actual
- ④ Tipo de placa base
- ⑤ Modo MP
- ⑥ Puntea la zona de animación (muestra tras el arranque)
- ⑦ Patrón de puntos
- ⑧ Frecuencia de la sonda
- ⑨ Regulación del tamaño de la energía
- ⑩ Tipo de sonda (profundidad de perforación)
- ⑪ Este tiempo ha operado el número de puntos
- ⑫ El número total de puntos en esta operación se ajusta
- ⑬ Número máximo de puntos para esta operación
- ⑭ Ajuste del número de líneas
- ⑮ Ajuste del espacio entre puntos
- ⑯ Ajuste de la longitud de los puntos
- ⑰ ajuste del intervalo de puntos
- ⑱ Cambiar entre el modo de arranque y el modo de espera
- ⑲ Volver atrás
- ⑳ Configuración

Ajuste la intensidad de energía de la mano al trabajar según la capacidad del cliente. MP: Línea - modo de línea multipunto. Punto: patrón de puntos.

WDTH: Número de filas: número de filas para ajustar la potencia de la mano durante la operación (rango: 2 a 13 filas).

PITCH: Espaciado entre líneas - Ajuste la distancia entre cada línea de energía activa (rango 2,1-1,0).

Al ajustar el número de líneas, el espaciado entre líneas también varía en consecuencia: 13-1.0, 12-1.1, 11-1.2, 10-1.3, 9-1.4, 8-1.5, 7-1.6, 6-1.7, 5-1.8, 4-1.9, 3-2.0, 2-2.1.


LONGITUD: La longitud de la energía utilizada para regular el funcionamiento de la mano (rango 5-25).

INTERVAL: Intervalo - Ajusta el intervalo entre cada ronda durante el funcionamiento de la mano. Cuanto más bajo sea el intervalo, mayor será la velocidad. El valor predeterminado es 1.5 (rango 1.0-5.0).

Establezca el número de envíos: ajuste el número necesario para esta tarea mediante los botones «+» y «-». Cuando se agote el número establecido, el control se detendrá automáticamente y deberá reiniciarse.

Interfaz de operación 18D RS

Partes correspondientes: Abdomen (6,0 mm, 8,0 mm, 13,0 mm), Talla (10,0 mm), Cadera (16,0 mm, 18,0 mm)

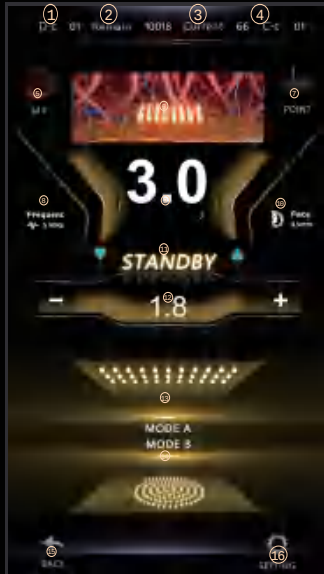

- ① Código de manejo
- ② Número restante
- ③ Número de unidades en uso actual
- ④ Tipo de placa base
- ⑤ Modo MP
- ⑥ Puntea la zona de animación (muestra tras el arranque)
- ⑦ Patrón de puntos
- ⑧ Frecuencia de la sonda
- ⑨ Regulación del tamaño de la energía
- ⑩ Tipo de sonda (profundidad de perforación)
- ⑪ Cambiar entre el arranque y el modo de espera
- ⑫ Área de regulación de la energía de radiofrecuencia (RF)
- ⑬ Selección del modo de múltiples filas
- ⑭ Selección del modo de círculo
- ⑮ Volver atrás
- ⑯ Configuración

Ajuste la intensidad de energía de la mano al trabajar según la capacidad del cliente. MP: Línea - modo de línea multipunto.

Punto: patrón de puntos.

ENERGÍA RF: Intensidad de la energía RF - "+" "-" Ajuste la energía de la mano al trabajar.

STANDBY: Inicio - La mano comienza a funcionar.

SELECCIÓN DE MODO: Modo de múltiples filas - Modo punto-línea.

SELECCIÓN DE FORMA: Modo de círculo - Estado

de trabajo puntual

ENTRADA: Configuración de los parámetros de contexto.

30 Interfaz de operación RS

Partes correspondientes: Partes privadas (3,0 mm, 4,5 mm)



- | | | |
|--|--|---|
| ① Código de Mach / Código de Custom | ② Número restante | ③ Número de unidades en uso |
| ④ Número total de pulsos por ciclo / Número de pulsos por fila | ⑤ Modo Automático | ⑦ Restablecimiento del motor de la cabeza de corte de tipo íntimo |
| ⑥ Puntuar el área de animación (muestra tras el arranque) | ⑧ Frecuencia de detección | ⑨ Regulación de la escala energética |
| ⑩ Modelo de cabeza de cuchillo | ⑪ Cambio entre la rotación de la sonda en modo de arranque y en modo de espera | ⑫ Ángulo de rotación de la sonda |
| ⑬ Modelo de cabeza de cuchillo | ⑭ Espaciado entre puntos | ⑮ Longitud de la aplicación de puntos |
| ⑯ Configuraciones del back-end | ⑰ Volver atrás | ⑱ Calibración del sensor de presión |

Ajuste la intensidad de esfuerzo de la mano durante el trabajo según la capacidad del cliente.

La ultrasonidos de alta energía y focalizada actúa directamente sobre la capa SMAS vaginal, levantando la suspensión fascial SMAS y resolviendo por completo el problema del relajamiento vaginal. La energía se dirige con precisión a la capa fascial de 4,5 mm debajo de la mucosa, estimulando el crecimiento y la contracción muscular de dicha capa, logrando así el máximo efecto de contracción vaginal. Asimismo, actúa sobre la capa de colágeno de 3 mm debajo de la piel, reorganizando el colágeno y recuperando la elasticidad cutánea. Al mismo tiempo, dado que la energía atraviesa la epidermis, no es necesario preocuparse por daños en la capa de mucosa ni por infecciones derivadas de dichos daños. El operador introduce la sonda en la vagina y ejerce una acción uniforme sobre la capa SMAS en la vagina, en las líneas 54-216 (unos 1350-5400 puntos), para lograr el mejor efecto de contracción vaginal.



Manillar multidimensional 13D

1. Un panel de visualización se encuentra detrás de la mano y muestra de forma sincronizada sus parámetros; además, el botón situado debajo de este panel permite ajustar simultáneamente los parámetros de energía.




Ajusta la intensidad de energía
a de la mano al trabajar



Modo de función de conmutación

2. Mantén presionado el botón superior mientras se  El botón de reemplazo se ha eliminado reemplaza la sonda.

3. Cuando se almacena la sonda, debe tener el lado que entra en contacto con la piel orientado hacia arriba para evitar daños por líquidos en la superficie de operación.  Configuración estándar  assorting)

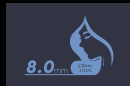

Manija termoplástica 18D RS

1. Hay botones de operación y de reemplazo de la sonda en la parte frontal de la mano:



Botón de operación



Botón de cambio de sonda

2. Cuando se almacena la sonda, debe tener el lado que entra en contacto con la piel orientado hacia arriba para evitar daños por líquidos en la superficie de operación.

( Configuración estándar  asortando)



Manija termoplástica 18D RS

1. Insertar una sonda de operación privada:



Alinea la sonda de la manija con la interfaz de la manija y presiona hasta el fondo.

2. Rango de ajuste del parámetro según la profundidad de la sonda

Cabeza privada de 3,0 mm


La energía llega directamente al tejido submucoso, lo que acelera la actividad celular y provoca la regeneración y reorganización del colágeno, aumentando así la elasticidad de la mucosa y fortaleciendo los músculos vaginales.

Cabeza privada de 4,5 mm

La energía llega directamente a la capa fascial, provocando su solidificación térmica y logrando así un efecto de contracción vaginal. Esto mejora la estructura muscular que sostiene la mucosa, desde las capas más profundas hasta las superficiales, y favorece que la capa muscular recupere su elasticidad y se vuelva más firme.



Pruebas de airbags

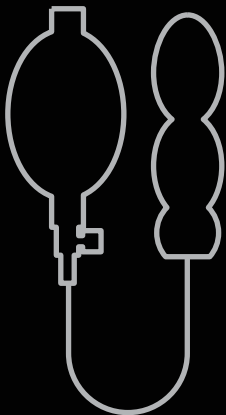

Presión valor	Estado de relajación personal	Sensibilidad	Métodos de ejercicio recomendados
60 ni menos	Muy mal	Ninguno	Es necesario fortalecer la actividad física.
60-80n	Pobre	Bajo	Es necesario mantenerse en el ejercicio.
80~120n	Normal	Normal	Es necesario hacer ejercicio de forma moderada.
120-160n	Bueno	Squirt	Realizar ejercicios de mejora
160 o más	Excelente	Diosa	Ejercicio de mantenimiento

1. Limpie y desinfecte la cabeza del airbag del tubo de ensayo, y coloque un condón sobre el airbag.
2. Introduzca la cabeza de balón en la vagina (si es difícil, añada lubricante).
3. Antes de medir, acúmútese con las piernas erguidas naturalmente, ligeramente separadas pero sin superar el ancho de los hombros. Durante la medición, contraiga los músculos del anillo vaginal y del suelo pélvico para observar los valores en la pantalla. Registre el valor más alto como dato de medición. La medición es similar a retener orina. (No contraiga los músculos de las nalgas ni de las piernas para evitar afectar la precisión del valor medido)
4. Relájate durante 6 segundos, respira naturalmente y realiza la primera medición, sumando un total de 2 mediciones. (La primera medición corresponde al valor estándar de tu relajación personal antes de operar el instrumento). (La segunda medición corresponde al valor estándar de tu tensión personal después de operar el instrumento).
5. Ajuste los valores de la siguiente tabla de pruebas de elasticidad vaginal para determinar el método de ejercicio.
6. Tras realizar la medición, retire la sonda, límtelo, seque bien con un paño suave y colóquelala en la caja de envío para su próxima utilización.

Sin escobillas parámetros del motor

Alta precisión: sensores de múltiples posiciones integrados para garantizar una posición exacta.

Mejorar de forma integral la velocidad de manejo y aumentar la eficiencia operativa.

- ▲ Velocidad: más de 1600 revoluciones por minuto.
- ▲ Buen par: el par de 30 mNm se adapta perfectamente a todos los tipos de piel.
- ▲ Ruido mínimo: tan silencioso como el sueño o de un bebé.
- ▲ Frecuencia alta: hasta 20.000 Hz.
- ▲ Duración prolongada: Motor sin escobillas de alta eficiencia con engranaje planetario de gran resistencia.



Model name	profundity	Row number	Line spacing	Length	density	Suggested energy	Suggested number	Applicable position
1.5	1.5MM	2 - 13	1	25	1.5	0.3 - 1.0	200 - 300	Facial epidermis
3.0	3.0MM	2 - 13	1	25	3.0	0.5 - 1.0	200 - 300	Facial dermis
4.5	4.5MM	2 - 13	1	25	4.5	0.5 - 1.5	200 - 300	Facial fascia layer, Double chin
6.0	6.0MM	2 - 13	1	25	6.0	0.5 - 1.5	200 - 300	Facial fascia layer, Double chin
8.0	8.0MM	2 - 13	1	25	8.0	0.5 - 1.5	Unilateral 250 - 400	Butterfly sleeve
10.0	10MM	2 - 13	1	25	10.0	0.5 - 1.8	Unilateral 250 - 400	calf
13.0	13MM	2 - 13	1	25	13.0	0.6 - 2.0	500 - 800	belly
16.0	16MM	2 - 13	1	25	16.0	0.6 - 2.0	belly 500 - 800 Unilateral hip 400 - 500	Belly and hips
18.0	18MM	2 - 13	1	25	18.0	0.6 - 2.0	belly 500 - 800 Unilateral hip 400 - 500	Belly and hips
Remark	6.0/8.0/10.0/13.0/16.0/18.0All of them are optional, and the energy and number of hair should be adjusted according to the customer's situation. Use stamp method when operating, Point mode is suitable for delicate skin, MP mode is suitable for key strengthening.							

Configuración de la sonda 13D



Configuración de la sonda 18D



Model name	Energy	Radio frequency	Suggested energy	Suggested radio frequency	Suggested number	Applicable position	Operation mode
6.0	6.0MM	6.78MHz	0.5 - 1.5	5 - 15	200 - 300	Butterfly sleeve	Sliding mode Stamp pattern
8.0	8.0MM	6.78MHz	0.5 - 1.5	5 - 15	Unilateral 250 - 400	Butterfly sleeve	Sliding mode Stamp pattern
10.0	10MM	6.78MHz	0.5 - 1.8	5 - 18	Unilateral 350 - 500	Calf	Sliding mode Stamp pattern
13.0	13MM	6.78MHz	0.6 - 2.0	6 - 20	belly 500 - 800 Unilateral hip 400 - 500	Belly and hips	Sliding mode Stamp pattern
16.0	16MM	6.78MHz	0.6 - 2.0	6 - 20	belly 500 - 800 Unilateral hip 400 - 500	Belly and hips	Sliding mode Stamp pattern
18.0	18MM	6.78MHz	0.6 - 2.0	6 - 20	belly 500 - 800 Unilateral hip 400 - 500	Belly and hips	Sliding mode Stamp pattern
Remark	6.0/10.0/16.0/18.0 are optional. The power and number of pulses must be adjusted according to the customer's situation. When using stamp technique, the energy must be reduced; When using the sliding technique, the energy can be appropriately raised. Point mode is suitable for delicate skin, MP mode is suitable for emphasis enhancement. MODE SELECTION for all skin, SHAPE SELECTION for local enhancement.						

Configuración del producto

El destinatario deberá inspeccionar los bienes según las variedades y tipos indicados en la lista de piezas al recibirlos. Responsabilidad por retraso en la retroalimentación.

Nombre del producto: 22D Max Ultra.

Modelo: 22D Max Ultra.

Fuente de alimentación: CA 220V

Potencia: 1280 W

Frecuencia: 2MHz 4MHz

Peso del instrumento: 10kg

Cantidad bruta del producto: 22kg

Tamaño del paquete: 32 x 53 x 37 cm



Un anfitrión



13D 1
Handle




18D RS 1
handle



30 RS
1 mango



3 sondas
13D

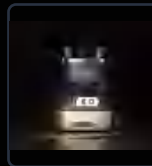

18D RS 2
sondas



30 RS
2 sondas



Un pie



1 cable de alimentación



Caja de sondas



especificación



Caso de vuelo

cláusula de garantía

Las especificaciones de diseño de este producto pueden modificarse sin previo aviso.
Si tiene dudas, por favor contáctenos.

1. Garantía del motor principal de un año, de accesorios de tres meses y mantenimiento de por vida.

- La máquina principal cuenta con una garantía de un año, y la nueva puede ser reemplazada si se produce un daño no causado por el usuario en un mes.
- Garantía de repuestos de tres meses, que se extiende tres meses después del pago de los costos de reparación.
- En caso de daños causados por el hombre, el costo de mantenimiento será asumido por el propio responsable.

2. No se ofrece servicio de garantía gratuita por fallos causados por las siguientes causas personales.

- Fallos causados por la desmontaje o modificación no autorizada de este producto.
- Fallos causados por caídas accidentales.
- Falla causada por no seguir las instrucciones correctas contenidas en las instrucciones de uso.
- Falla causada por la falta de mantenimiento adecuado.

Mantenimiento

- ▲ Este equipo está compuesto principalmente por instrumentos ópticos o electrónicos de precisión, y su mantenimiento y reparación deben cumplir con las disposiciones generales aplicables a dichos instrumentos. Durante su almacenamiento y uso, debe evitarse el impacto, la extrusión y las vibraciones.
- ▲ Limpie los accesorios y la máquina principal con agua y luego seque con una toalla limpia y húmeda. Guarde en un lugar fresco y seco. El estante de accesorios y otros paneles están fabricados en acrílico. No los limpie con alcohol.
- ▲ Pase y limpie las piezas metálicas con alcohol al 75 %, y luego colóquelas de nuevo en el estante de accesorios para evitar daños por caída.

22D Max Ultra. Especificaciones del instrumento