

22D MAX

Su gerente decente

Tecnología innovadora: rejuvenecimiento y vitalidad juvenil



— Manual de usuario del producto



El nuevo 22D-MAX debuta

Contenido

22D. Máximo

Precauciones

- Contraindicaciones de operación
- PRECAUCIONES DE
- Precauciones preoperatorias
- Precauciones postoperatorias
- PRECAUCIONES DE

01 - 05

01

INSTALACIÓN DE

- Componentes
- Host de conexión de identificador

06 - 07

02

Descripción de la interfaz

- Interfaz de operación 13D
- Interfaz de operación 18D

08 - 09

03

INSTRUCCIONES DE USO

- Mango multidimensional 13D
- Empuñadura termoplástica 18D RS

10 - 11

04

Parámetros técnicos

- Parámetros del motor sin escobillas
- Configuración de la sonda 13D
- CONFIGURACIÓN DE SONDA 18D

12 - 14

05

Parámetros técnicos

- CONFIGURACIÓN DEL

15 - 15

06

Instrucciones posventa

- Mantenimiento
- Términos de garantía

16 - 16

07

Contraindicaciones de operación

1. Está contraindicado en mujeres embarazadas y durante la lactancia.
2. Las personas con corazón y latidos irregulares, especialmente aquellas con marcapasos, no deben hacerlo.
3. Está contraindicado en pacientes con cáncer, pacientes sometidos a cirugía mayor y pacientes con diabetes.
4. Está contraindicado en pacientes con epilepsia e hipertensión severa.
5. Las personas con alergias y acné facial severo no deben realizarse por el momento y la cirugía facial está prohibida.
6. Si hay una herida en la piel, evite la herida o no la haga.
7. Si hay metal dentro del fuselaje, tenga cuidado y evite las partes metálicas durante la operación.
8. Cualquiera que tenga oro implantado en la cara, no lo haga.
9. Sin cirugía plástica, sin rellenos artificiales en el cuerpo.
10. Se debe tener precaución en pacientes con acné quístico severo en la cara y el cuello.
11. Hágalo con cuidado si hay una enfermedad infecciosa grave en la piel.
12. Las personas que toman isotretinoína (Accutane/Roaccutane/Oratane) no deben tomarlo durante 9 meses.






PRECAUCIONES DE

1. El enchufe de alimentación está sucio, por favor límpialo a tiempo y confirme que no haya objetos extraños antes de conectarlo al enchufe.
2. Asegúrese de conectar a una toma de corriente de 110-220V, 50Hz-60Hz y desenchufar el cable de alimentación mientras se mueve el dispositivo.
3. No toque el enchufe de alimentación ni tire del cable de alimentación.
4. No toque el cable de alimentación o el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
5. No presione con fuerza el área alrededor del instrumento o la fuente de alimentación.
6. No utilice el instrumento a altas temperaturas y no coloque equipos de calefacción cerca del instrumento.
7. Nunca desmonte el enchufe eléctrico después de que el instrumento se haya arrancado, de lo contrario puede causar un mal funcionamiento.
8. Durante el uso del instrumento, si hay humo o olor peculiar, desconecte la fuente de alimentación y consulte el servicio posventa.
9. No toque los labios o los ojos cuando se activa el mango para evitar lesiones.
10. Si la luz indicadora siempre está en azul o si se escucha un sonido anormal durante la operación, retire el mango de la superficie de la piel a tiempo.

Precauciones preoperatorias

1. Consulte a un experto o reciba entrenamiento profesional antes de usar.
2. Consulte al cliente sobre la condición de la piel y las alergias (las personas con alergias graves no pueden operarse).
3. Pregunte al cliente si ha inyectado recientemente el instrumento o la cara (el instrumento de la luz del agua puede funcionar después de dos días, el instrumento tipo HIFU puede funcionar después de un mes, y la inyección facial puede funcionar después de tres meses).
4. Cuéntale al cliente en detalle cómo se siente o reacciona durante la operación, para que el cliente esté mentalmente preparado.
5. No tome medicamentos ni alcohol durante las 24 horas antes y después de la cirugía.
6. Antes de la cirugía, es necesario ajustar los parámetros de la cabeza cosmética.
7. Compruebe si el instrumento está en condiciones normales, asegúrese de que el instrumento es normal y está completamente preparado antes de la operación.

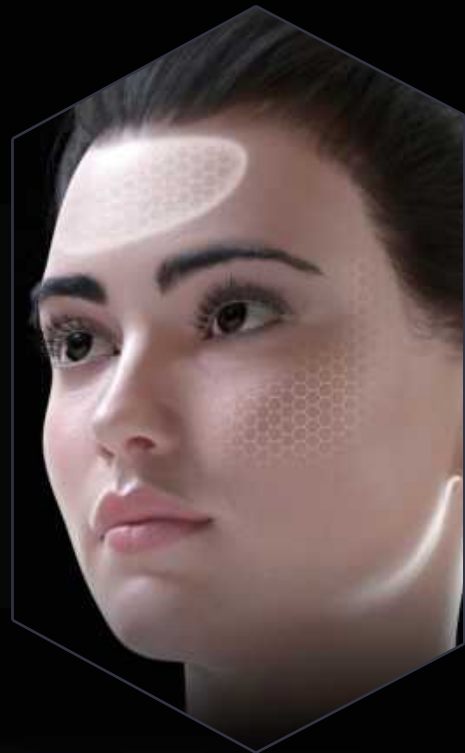



Precauciones postoperatorias

1. No se lave la cara con agua caliente durante una semana después de la cirugía, se recomienda usar agua fría, en invierno se puede usar agua tibia (no más de 35 grados).
2. Aplique una mascarilla hidratante y reparadora una vez por la mañana y por la noche durante un mes, prestando atención a la hidratación, la hidratación y la protección solar.
3. No haga tratamientos con energía térmica, luz colorida y equipos de belleza láser durante una semana.
4. No tome la sauna, no haga masajes faciales, no use maquillaje pesado, no esté en un ambiente de alta temperatura, no esté expuesto al sol durante dos semanas.
5. No se recomienda recibir inyecciones, incrustación de hilos, relleno y otros actos dentro de un mes.
6. No coma alimentos fuertemente pigmentados como salsa de soja, no beba alcohol ni fuma, coma pimientos, mariscos, sangre y otros alimentos, y no coma alimentos duros como caña de azúcar y nueces de betel; No tome antibióticos como la aspirina.
7. Trate de beber la menor cantidad de agua posible después de las 8 pm. m., porque la constitución y el metabolismo de cada persona son diferentes, por ejemplo, el edema es normal, no te preocupes, los síntomas desaparecerán naturalmente.
8. Preste atención al descanso después de la cirugía, asegúrese de dormir adecuadamente, evite el ejercicio extenuante y no es fácil recuperar la circulación sanguínea después del ejercicio.
9. Para lograr un mejor estado después de la cirugía, es necesario realizar reparaciones postoperatorias, nutrición y suplemento de agua; Evite situaciones en las que los resultados no son satisfactorios y no duren mucho después de la cirugía debido al descuido de los cuidados y reparaciones.
10. Las personas con un metabolismo malo, o las personas que han tenido rellenos, inyecciones y eliminación de manchas antes pueden experimentar enrojecimiento, erupción y oscuridad en un corto período de tiempo. Estos son fenómenos normales y se desvanecerán por sí solos en 3-7 días. Algunas personas durarán alrededor de una semana.
11. Es normal que el sitio quirúrgico tenga una sensación muy pequeña de dolor y hinchazón dentro de un mes.

12. Por favor, cumpla conscientemente con las regulaciones anteriores, que juegan un papel decisivo en la presentación de los efectos posteriores. Cuanto más estandarizado sea el cuidado posterior, mejor será el efecto (cuanto más tiempo se mantenga, mejor será la condición de la piel).

PRECAUCIONES DE FUNCIÓN

1. Lea cuidadosamente el manual de instrucciones y luego utilice como se describe en el manual de instrucciones. Si no utiliza el instrumento durante mucho tiempo, desconecte la fuente de alimentación.
2. Al usar el mango, primero reduzca la fuerza y luego ajuste gradualmente a la fuerza adecuada.
3. La incomodidad intraoperatoria es una reacción normal, y el mango debe estar cerca de la piel durante la operación para evitar aumentar la incomodidad.
4. Cuando el mango está funcionando (el indicador de trabajo está encendido), el mango no debe abandonar la superficie de la piel y puede dejarse después de una pausa o finalización.
5. Si el mango es anormal, retire el mango de la piel a tiempo para evitar daños innecesarios.
6. No envuelva el cable del mango alrededor de la mano durante la operación de la esteticista.
7. Cuando se reemplaza el cabezal, el receptáculo en el cabezal se monta contra el puerto del mango (en estado suspendido).
8. En la manipulación, se debe obedecer los accesorios correspondientes para evitar sensaciones incómodas.
9. Durante la manipulación, debe haber suficiente medio (por ejemplo, gel) para el cuidado de las piezas.
10. Cuando el mango no es necesario, debe colocarse en el soporte de accesorios. No tire con fuerza del cable de conexión mientras el mango se encuentra en el estante de accesorios.
11. Después de usar el instrumento, limpie con un paño de algodón y un hisopo de algodón, y luego limpie la parte metálica del cabezal/mango de maquillaje con alcohol al 75%.
12. Si experimenta algo anormal mientras utiliza el instrumento, deje de operar inmediatamente y consulte a un especialista.



13. Si el instrumento es anormal, confirme las instrucciones de nuevo antes de operar; Si la anomalía no se resuelve, no desmonte el instrumento usted mismo, comuníquese con el servicio postventa para consulta.

01 | Asuntos
Necesita atención

Componentes

El instrumento consiste en una unidad principal y un mango (13D 18D), con una pantalla táctil en la parte delantera de la unidad principal.



13.3 "Pantalla inteligente de alta definición"

El diseño clásico de pantalla grande reduce los biselos en un 40%



Mango multidimensional 13D

Lifting facial y reafirmación de la piel. Salida de tecnología innovadora de cabezal de ultrasonido multidimensional



Empuñadura termoplástica 18D RS

Remodelar el cuerpo y gestionar la salida de la nueva tecnología de onda de radiofrecuencia espiral de

Host de conexión de identificador

Antes de instalar la cubierta trasera, revise el conector y la orientación de la cubierta trasera según el diagrama de la cubierta trasera.



Conexión 13D Jack

El enchufe gris corresponde a la interfaz gris en el instrumento.

Jack de conexión 18D

El tapón púrpura corresponde al puerto púrpura en el instrumento.

Enchufe de conexión del pedal de pie

El enchufe de oro corresponde al conector de oro del instrumento.

Interfaz de operación 13D

Parte correspondiente: cara (1.5mm, 3.0mm, 4.5mm) mentón (6.0mm)
Muslo (10.0 mm) Abdomen (8.0 mm, 13.0 mm) Cadera (16.0 mm, 18.0 mm)



- | | | | |
|---|--|---|----------------------|
| ① Código de manejo | ② Número restante | 3 Cantidad actualmente en uso | 4 Tipo de placa base |
| ⑤ Modo MP | Área de animación de 6 puntos (se muestra después de encender) | | Patrón de 7 puntos |
| ⑧ Frecuencia de la sonda | ⑨ Ajuste del tamaño de la energía | 10 Tipo de sonda (profundidad de perforación) | |
| ⑪ Puntos para esta operación | 12 Ajuste del número total de puntos para esta operación | | |
| ⑬ Número máximo de puntos para esta operación | ○ Ajuste del número de líneas de 14 puntos | | |
| ⑮ Ajuste de espaciado de puntos | ○ Ajuste de longitud de 16 puntos | | |
| ⑰ Ajuste de intervalo de puntos | ○ 18 Cambiar entre el inicio y el modo de espera | | |
| ⑲ Atrás | ○ 20 Configuración | | |

De acuerdo con la tolerancia del cliente, ajuste la intensidad energética de la mano durante el trabajo.

MP: Línea-modo de línea multipunto.

Puntos: Patrón de puntos.

WDTH: Número de filas (rango de 2-13 filas) para ajustar la fuerza de la mano cuando se opera.

Espaciado: Espaciado de líneas-ajuste la distancia entre cada línea de energía en el trabajo (rango 2.1-1.0). Al ajustar el número de líneas, el espaciado de líneas también cambia en consecuencia, ajustando el número de líneas-espaciado de líneas (13-1.0, 12-1.1, 11-1.2, 10-1.3, 9-1.4, 8-1.5, 7-1.6, 6-1.7, 5-1.8, 4-1.9, 3-2.0, 2-2.1).

Longitud: Longitud-La longitud utilizada para ajustar la energía de la manipulación de la mano (rango 5-25).

Intervalo: Intervalo-ajuste el intervalo entre cada ronda mientras las manos están en el trabajo. Cuanto menor sea el intervalo, mayor será la velocidad. El valor predeterminado es 1.5 (rango 1.0-5.0)..

Configurar la cantidad enviada: ajuste la cantidad requerida para este trabajo con "+" y "-". Cuando se agota la cantidad establecida, el mango deja de funcionar automáticamente y necesita ser restablecido.

Interfaz de operación 18D

Sitios correspondientes: abdomen (6,0 mm, 8,0 mm, 13,0 mm) muslo (10,0 mm) cadera (16,0 mm, 18,0 mm)



- ① Código de manejo
- ② Número restante
- ③ Cantidad actualmente en uso
- ④ Tipo de placa base
- ⑤ Modo MP
- ⑥ Área de animación de 6 puntos (se muestra después de encender)
- ⑦ Patrón de 7 puntos
- ⑧ Frecuencia de la sonda
- ⑨ Ajuste del tamaño de la energía
- ⑩ Tipo de sonda (profundidad de perforación)
- ⑪ Cambiar entre el inicio y el modo de espera
- ⑫ Área de regulación de energía de radiofrecuencia (RF)
- ⑬ Selección de modo multilinea
- ⑭ Selección de modo circular
- ⑮ Atrás
- ⑯ Configuración

De acuerdo con la tolerancia del cliente, ajuste la intensidad energética de la mano durante el trabajo.

MP: Línea-modo de línea multipunto.

Puntos: Patrón de puntos.

Energía de radiofrecuencia: intensidad de energía de radiofrecuencia-"+" "-" ajusta la energía de la mano al trabajar.

En espera: Inicio-el puntero comienza a funcionar.

Selección de modo: modo de línea múltiple-modo de punto a línea.

Selección de forma: modo circular-estado de bobina de punto.

Volver: salga de la pantalla de operación y regrese a la pantalla de selección de mano.

Configuración: Parámetros de configuración de fondo.



Mango multidimensional 13D

1. Hay una pantalla detrás de la mano para mostrar simultáneamente los parámetros de la mano, y los botones debajo de la pantalla pueden ajustar simultáneamente los parámetros de



Al ajustar la energía de la mano de trabajo de intensidad



Modo de función de conmutación

2. Mantenga presionada la parte superior de la sonda mientras reemplaza la sonda y se ha reemplazado.  Botón de reemplazo eliminado


3. Cuando se almacena la sonda, el lado que entra en contacto con la piel debe estar hacia arriba para evitar que el líquido dañe la superficie operativa. (



Configuración estándar



Clasificación)

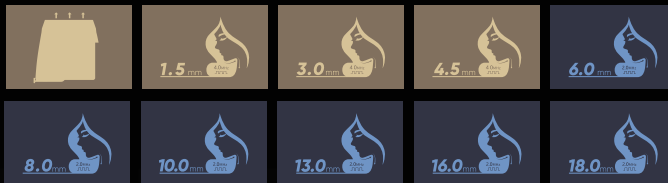

Empuñadura termoplástica 18D RS

1. Hay teclas de operación y teclas de cambio de sonda en la parte delantera de la mano:



Botón de operación



Reemplazar la sonda El botón

2. Cuando se almacena la sonda, el lado que entra en contacto con la piel debe estar hacia arriba para evitar que el líquido dañe la superficie operativa.

(■ Configuración estándar ■ Clasificación)



Sin escobillas

Parámetros del motor

Alta precisión: múltiples sensores de posición incorporados para asegurar una posición precisa.

Mejore integralmente la velocidad de operación del mango y mejore la eficiencia de la operación.

- ▲ Velocidad de rotación: más de 1600 rpm.
- ▲ Alto par: el par de torsión de 30mNm coincide perfectamente con todos los tipos de piel.
- ▲ Bajo nivel de ruido: tan silencioso como un bebé duerme.
- ▲ Alta frecuencia: hasta 20.000 Hz.
- ▲ Larga vida útil: motor sin escobillas de alta eficiencia, engranajes planetarios de alta resistencia.



Model name	profundity	Row number	Line spacing	Length	density	Suggested energy	Suggested number	Applicable position
1.5	1.5MM	2 - 13	1	25	1.5	0.3 - 1.0	200 - 300	Facial epidermis
3.0	3.0MM	2 - 13	1	25	3.0	0.5 - 1.0	200 - 300	Facial dermis
4.5	4.5MM	2 - 13	1	25	4.5	0.5 - 1.5	200 - 300	Facial fascia layer, Double chin
6.0	6.0MM	2 - 13	1	25	6.0	0.5 - 1.5	200 - 300	Facial fascia layer, Double chin
8.0	8.0MM	2 - 13	1	25	8.0	0.5 - 1.5	Unilateral 250 - 400	Butterfly sleeve
10.0	10MM	2 - 13	1	25	10.0	0.5 - 1.8	Unilateral 250 - 400	calf
13.0	13MM	2 - 13	1	25	13.0	0.6 - 2.0	500 - 800	belly
16.0	16MM	2 - 13	1	25	16.0	0.6 - 2.0	belly 500 - 800 Unilateral hip 400 - 500	Belly and hips
18.0	18MM	2 - 13	1	25	18.0	0.6 - 2.0	belly 500 - 800 Unilateral hip 400 - 500	Belly and hips
Remark	6.0/8.0/10.0/13.0/16.0/18.0All of them are optional, and the energy and number of hair should be adjusted according to the customer's situation. Use stamp method when operating, Point mode is suitable for delicate skin, MP mode is suitable for key strengthening.							

Sonda 13D Configuración



Sonda 18D Configuración



Model name	Energy	Radio frequency	Suggested energy	Suggested radio frequency	Suggested number	Applicable position	Operation mode
6.0	6.0MM	6.78MHz	0.5 - 1.5	5 - 15	200 - 300	Butterfly sleeve	Sliding mode Stamp pattern
8.0	8.0MM	6.78MHz	0.5 - 1.5	5 - 15	Unilateral 250 - 400	Butterfly sleeve	Sliding mode Stamp pattern
10.0	10MM	6.78MHz	0.5 - 1.8	5 - 18	Unilateral 350 - 500	Calf	Sliding mode Stamp pattern
13.0	13MM	6.78MHz	0.6 - 2.0	6 - 20	belly 500 - 800 Unilateral hip 400 - 500	Belly and hips	Sliding mode Stamp pattern
16.0	16MM	6.78MHz	0.6 - 2.0	6 - 20	belly 500 - 800 Unilateral hip 400 - 500	Belly and hips	Sliding mode Stamp pattern
18.0	18MM	6.78MHz	0.6 - 2.0	6 - 20	belly 500 - 800 Unilateral hip 400 - 500	Belly and hips	Sliding mode Stamp pattern
Remark	6.0/10.0/16.0/18.0 are optional. The power and number of pulses must be adjusted according to the customer's situation. When using stamp technique, the energy must be reduced; When using the sliding technique, the energy can be appropriately raised. Point mode is suitable for delicate skin, MP mode is suitable for emphasis enhancement. MODE SELECTION for all skin, SHAPE SELECTION for local enhancement.						

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

¡El consignatario debe inspeccionar la mercancía según la variedad y el tipo en la lista de piezas al recibir la mercancía! ¡Responsabilidad por retroalimentación atrasada!

Nombre del producto: 22D-MAX

Número de modelo: 22D-MAX

Fuente de alimentación: AC
220V

Potencia: 1280W

Frecuencia: 2MHz 4MHz

Peso del instrumento: 10kg

Cantidad total de productos:
22kg

Dimensiones del paquete: 32
X 53 X 37 cm




Un anfitrión



13D 1 mango



18D 1 mango

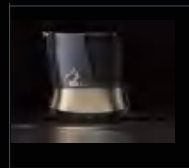


Sonda 13D3




Sonda 18D2



Un pie

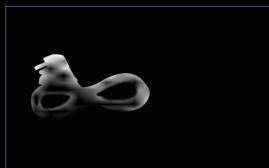

1 Cable de alimentaci
ón

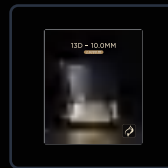

Caja de sonda



Especificación



Caja de vuelo

Términos de garantía

Las especificaciones de diseño de este producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta

1. ¡Un año de garantía para la máquina principal, tres meses de garantía para los accesorios, mantenimiento de por vida!

- La máquina principal tiene una garantía de un año, y el daño no artificial se puede reemplazar con una nueva máquina dentro de un mes.
- Garantía de piezas de tres meses, costo de reparación de piezas después de tres meses.
- En caso de daño provocado por el hombre, los costos de mantenimiento serán por cuenta propia.

2. No se ofrece ningún servicio de garantía gratuito para las fallas causadas por las siguientes razones personales.

- Fallas causadas por el desmontaje y modificación no autorizados de este producto.
- Fallas causadas por caídas accidentales.
- Fallas causadas por no seguir las instrucciones correctas en el manual de instrucciones.
- Fallas debidas a la falta de mantenimiento razonable.

Mantenimiento

- ▲ Este equipo consiste principalmente en instrumentos ópticos de precisión o electrónicos, y su mantenimiento y reparación deberán cumplir con las disposiciones generales para los instrumentos ópticos de precisión y los instrumentos electrónicos. Durante el almacenamiento y el uso, evite golpes, aplastamientos y vibraciones.
- ▲ Lave los accesorios y la unidad principal con agua y luego seque con un trapo limpio y húmedo. Almacenar en un lugar fresco y seco. Los estantes de accesorios y otros paneles están hechos de acrílico. No los limpie con alcohol.
- ▲ Limpie y limpie las piezas metálicas con alcohol al 75% y luego vuelva a colocarlas en el estante de accesorios para evitar daños por caída.

Especificaciones del instrumento 22D MAX