

Máquina HIFU 360 Max: Lifting facial y corporal profesional, antienvjecimiento y contorno



360 MAX HIFU



[Watch on YouTube](#)

NUEVA TECNOLOGÍA 360 MAX HIFU

TU ADMINISTRADOR FACIAL EXCLUSIVO

DECODIFICANDO LA / LEYENDA DE LAS CELEBRIDADES / LA INMORTALIDAD

360 Max HIFU: SU EXCLUSIVO FACE MANAGER es el último sistema HIFU. Con una precisión de 360 grados, brinda energía uniforme a la dermis y las capas SMAS, levantando, tensando y contorneando eficazmente la piel para una apariencia juvenil y natural.

Las clínicas y centros de belleza que buscan la mejor máquina HIFU para el rostro pueden confiar en el 360 Max para tratamientos seguros, no invasivos y sin tiempo de inactividad. Se vende máquina 360 HIFU, ofrece alta eficiencia y resultados visibles, por lo que es una opción ideal para prácticas estéticas profesionales.



Aplicación

El sistema 360Max HIFU combina tres tecnologías avanzadas (onda sinusoidal RF, pulso de microcorriente EMS y ultrasonido HIFU) para brindar un tratamiento integral y no invasivo de rejuvenecimiento de la piel y lifting facial.

La tecnología de ultrasonido HIFU se dirige con precisión a las capas dérmicas y SMAS profundas, estimulando la remodelación del colágeno y logrando efectos notables de elevación y estiramiento sin cirugía.


La tecnología RF Sine Wave calienta suavemente la dermis media para mejorar la elasticidad de la piel, suavizar las arrugas y mejorar el tono general de la piel.

La tecnología EMS Microcurrent Pulse activa los músculos faciales mediante estimulación eléctrica de bajo nivel, mejorando el tono muscular, redefiniendo los contornos faciales y promoviendo el drenaje linfático.

- ♦ Lifting facial y estiramiento de la piel.
- ♦ Antienvjecimiento
- ♦ Eliminación y levantamiento de bolsas de ojos.
- ♦ Modelado corporal y reducción de grasa.
- ♦ Líneas finas y arrugas
- ♦ Párpados caídos

- Signos de envejecimiento
- Piel flácida y flácida
- Laxitud de la piel
- Piel flácida
- Disminución de la elasticidad de la piel.
- Contorno de línea V

Principio de funcionamiento

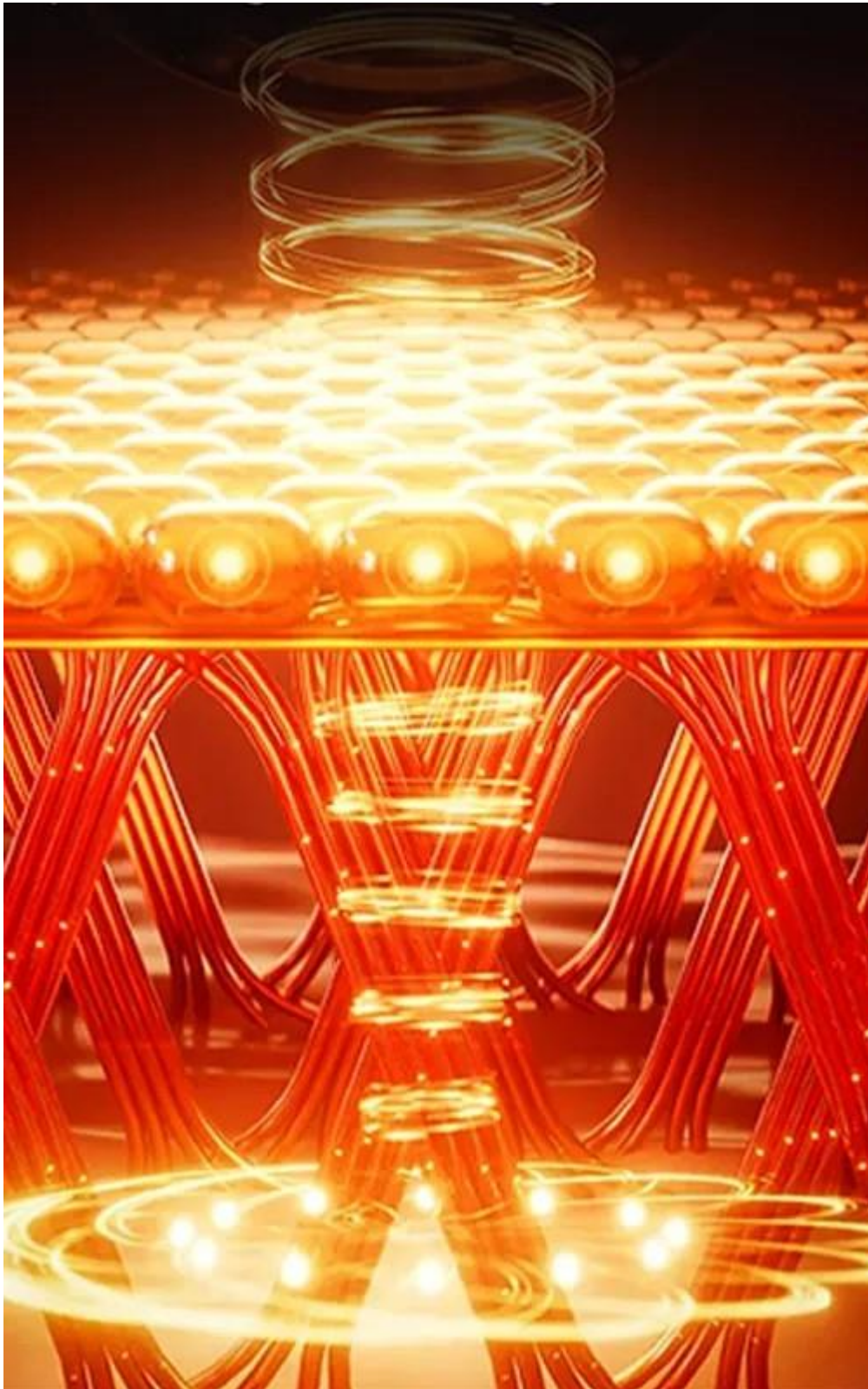


HIFU

La última tecnología patentada de ondas de choque de ultrapulso de V-HIFU y P-HIFU se utiliza para generar ultrasonido enfocado de alta energía, que pasa rápidamente a través de la epidermis. La membrana de la capa de grasa y la capa SMAS se contrae, haciendo que instantáneamente el tejido de la piel alcance una temperatura de 65 °C, produciendo así un efecto de coagulación térmica en la piel, formando un punto de coagulación de malla en la dermis y la capa de fascia, estimulando la contracción y reafirmación de fibras y colágeno, regeneración y reparación, y logrando elevación y reafirmación capa por capa.

Eliminación de arrugas

El calentamiento específico del tejido hace que el colágeno subcutáneo se contraiga y se tense. La dermis se calienta mientras la epidermis mantiene una temperatura normal. En este momento se producirán dos reacciones: primero, la dermis se vuelve más gruesa y las arrugas se aclaran o desaparecen. Segundo, el colágeno subcutáneo cambia de forma y se produce nuevo colágeno, que se vuelve más firme después de un tratamiento. Después del calentamiento, las fibras de colágeno dérmico se encogen, tensando las arrugas sueltas de la piel, mientras reorganiza la proliferación de colágeno y repara la capa de colágeno envejecida y dañada, logrando así el efecto de eliminación de arrugas y estiramiento de la piel.

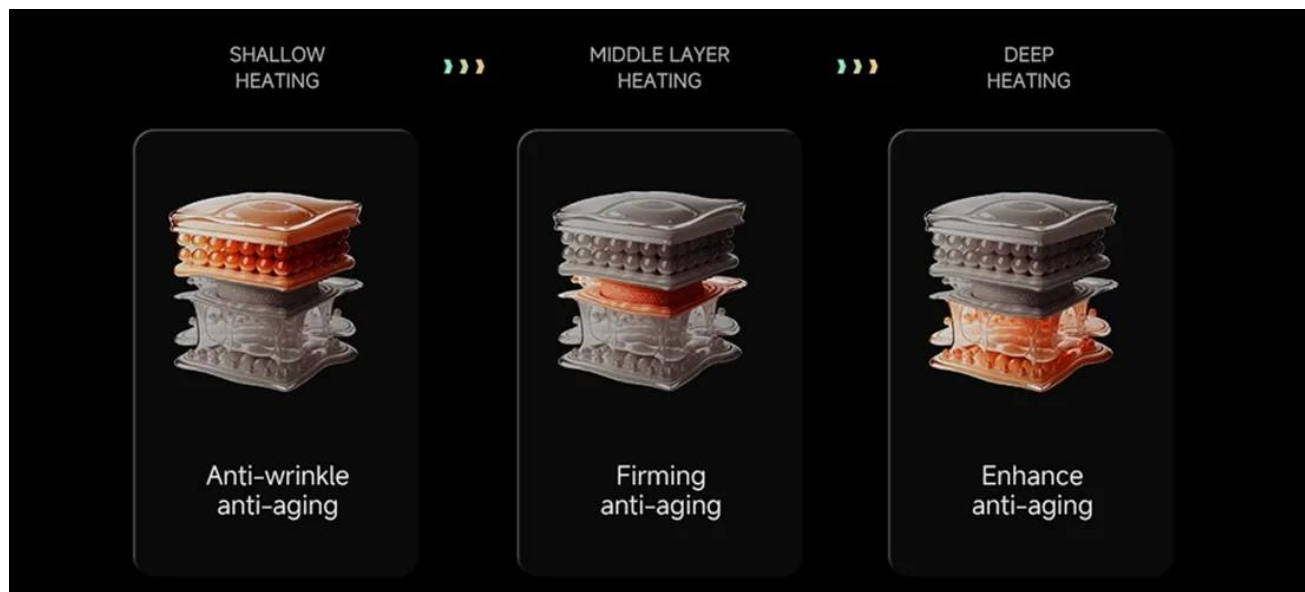

Tecnología de onda sinusoidal RF

La radiofrecuencia de 6,78 MHZ penetra la epidermis directamente en la dermis con una salida de onda sinusoidal. La tecnología de ondas de choque de ultrapulso genera ultrasonido enfocado de alta energía, penetra rápidamente en la epidermis, la capa de grasa, estimula la contracción de la membrana de la capa SMAS, hace que instantáneamente el tejido de la piel alcance los 65 °C, produciendo así un efecto de coagulación térmica en la piel, formando un punto de coagulación de malla en la dermis y la capa de fascia.

EMS

Tecnología de pulso de microcorriente Los exclusivos pulsos de microcorriente dirigidos estimulan los canales iónicos en las membranas celulares. La tecnología de corriente de frecuencia media tensa los músculos y reduce los espacios en la piel.

Tecnología de ultrasonido HIFU

El ultrasonido enfocado penetra profundamente en la capa de fascia. Tecnología de ondas de levantamiento de calor endógeno Estimula el tejido de fibra y colágeno para que se contraiga y tense, se regenere y repare, y logre un levantamiento y estiramiento capa por capa.

Antiarrugas, reafirmante, lifting.

El manejo en capas mejora rápidamente la salud de la piel y repara perfectamente las imperfecciones de la piel, para lograr los efectos de desbloquear, disolver, levantar, tensar, iluminar, dar forma y embellecer la piel, permitiendo que la piel esté en su lugar en un solo paso.

15RS multi-dimensional handle



Matching probe model

Standard: 1.5mm 3.0mm 4.5mm 2.0mm
Optional: 6.0mm 9.0mm 13.0mm

Probe corresponding part

Eyes: 2.0mm
Face: 1.5mm 3.0mm 4.5mm
Body: 6.0mm 9.0mm 13.0mm

Mango multidimensional 15RS

Redefina las tecnologías antienvjecimiento HIFU, RF y EMS y deje que la tecnología le ayude a gestionar su apariencia y forma corporal. El mango multidimensional 15RS cambia los ejes X e Y para aplicar rápidamente energía de alta frecuencia a la cara para tensarla y levantarla.

Modelo de sonda adecuado

Estándar: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 2,0 mm

Opcional: 6,0 mm, 9,0 mm, 13,0 mm

Sonda parte correspondiente

Ojos: 2,0 mm

Cara: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm

Cuerpo: 6,0 mm, 9,0 mm, 13,0 mm

RF

La radiofrecuencia de 6,78 MHZ penetra la epidermis directamente hasta la dermis en forma de salida de onda sinusoidal, lo que hace que las moléculas de agua polares generen calor (calentamiento Joule) mediante fricción a alta velocidad, calentándose a aproximadamente 45 °C, provocando que las fibras de colágeno se contraigan y activando el mecanismo de curación de heridas, estimulando la regeneración de colágeno y fibras elásticas, tensando así la piel y reduciendo las arrugas. Al mejorar la circulación sanguínea subcutánea y el suministro de oxígeno, mejorar la capacidad metabólica de la piel y mejorar la textura general de la piel, se logran los efectos de tensar, levantar y retrasar el envejecimiento.

EMS

Los pulsos de microcorriente específicos exclusivos de EMS estimulan los canales de la membrana celular, promueven la entrada de glucosa y oxígeno a la célula y mejoran la función mitocondrial a través del mecanismo de "carga celular". estimula la conexión entre actina y miosina, promueve la contracción muscular isométrica en lugar de la contracción dinámica y el entrenamiento de los músculos de la piel, reduce el daño de la inflamación crónica a las células, rompe el círculo vicioso del "envejecimiento inflamatorio" y logra efectos antienvjecimiento a través de la activación celular, la síntesis de colágeno, reafirmación muscular, antiinflamatorio y neuromodulación.

Mango multidimensional 36RS

Redefina las tecnologías antienvjecimiento HIFU, RF y EMS y deje que la tecnología lo ayude a controlar su apariencia y forma corporal. 36RS maneja la tecnología sinérgica de "ultrasonido de micropulso", el enfoque ultrasónico de matriz de puntos lineal puede maximizar el efecto de la operación; Además de levantar, también aporta una sensación extra de firmeza; Múltiples modos pueden reducir eficazmente el dolor en comparación con los modos ultrasónicos tradicionales.

Modelo de sonda adecuado

Estándar: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm

Sonda parte correspondiente

Epidermis: 1,5 mm

Dermis: 3,0 mm.

Capa de fascia: 4,5 mm

36RS multi-dimensional handle



Matching probe model

Standard: 1.5mm 3.0mm 4.5mm

Probe corresponding part

Epidermis: 1.5mm

Dermis: 3.0mm

Fascia layer: 4.5mm

RF

La radiofrecuencia de 6,78 MHZ penetra la epidermis directamente hasta la dermis con salida de onda sinusoidal.

EMS

Los exclusivos pulsos de microcorriente dirigidos estimulan los canales iónicos en las membranas celulares.

Tratamiento de capas 3D para la piel

La tecnología de ondas de choque de ultrapulso aplica energía a la epidermis, la capa muscular, la capa ósea, la dermis y la capa de grasa.

Herramienta de optimización de movimiento circular

Mango 36RS"ultrasonido de micropulso "Tecnología Synergy enfoque ultrasónico de matriz de puntos lineal Maximiza el efecto de operación

Anillo de punto/línea

En el modo MP, la energía se transmite en microsegundos y el punto de enfoque es más pequeño y más denso que otros instrumentos, lo que lo hace más seguro.

20%

El efecto es mayor que el de los instrumentos ordinarios.

+200%

Valor de reducción de edad ARRIBA

360°

Antiedad integral

3

Tres nuevas tecnologías

18RS multi-dimensional handle



Matching probe model

Standard: 8.0mm 13.0mm
Optional: 6.0mm 10.0mm 16.0mm 18.0mm

Probe corresponding part

thigh: 6.0mm 10.0mm
abdomen: 8.0mm 13.0mm
Arm: 16.0mm 18.0mm

Mango multidimensional 18RS

La combinación subversiva de HIFU, RF y EMS utiliza la inteligencia para hacer que los efectos antienvjecimiento y modeladores del cuerpo sean más significativos. Los motores duales sin escobillas de alta velocidad funcionan de manera eficiente y el ultrasonido enfocado combinado con radiofrecuencia de 6,78 MHz transmite energía desde la epidermis a la capa de grasa de forma sincrónica, quemando la grasa rápidamente.

Modelo de sonda adecuado

Estándar: 8,0 mm, 13,0 mm

Opcional: 6,0 mm, 10,0 mm, 16,0 mm, 18,0 mm

Sonda parte correspondiente

muslo: 6,0 mm, 10,0 mm

abdomen: 8,0 mm, 13,0 mm

Brazo: 16,0 mm, 18,0 mm

RF

La radiofrecuencia de 6,78 MHz penetra la epidermis directamente hasta la dermis con salida de onda sinusoidal.

EMS

Los exclusivos pulsos de microcorriente dirigidos estimulan los canales iónicos en las membranas celulares.

Salida de tecnología de ondas RF en espiral

El ultrasonido enfocado HIFU penetra profundamente en la capa de fascia, la radiofrecuencia RF activa el colágeno en la dermis y la microcorriente EMS se dirige a la capa muscular. Utilizando la última tecnología de ondas de radiofrecuencia en espiral, la tecnología de radiofrecuencia de onda sinusoidal en espiral de 6,78 MHz transmite su energía de radiofrecuencia desde la epidermis a la capa de grasa en una espiral positiva y negativa.

Modo círculo

Estado de la bobina de punto

Modo de varias filas

Estado de la línea de puntos

El principio básico de la reducción de grasa por ondas de choque.

Se adopta la tecnología de ondas sonoras de haz hueco. Innumerables energías térmicas de alta intensidad se irradian y transfieren en una matriz de puntos. Se emiten ondas de energía molecular de matriz de alta energía que vibran hasta millones de veces por segundo a través de 4MHz y 2MHz. Penetran profundamente en el tejido subcutáneo y toda la energía converge para formar un punto de haz. Se repara una profundidad de 6 a 13 mm y el tejido de la piel se impacta fuertemente, produciendo un efecto de acumulación de campo eléctrico en el tejido de la piel. Se abren los canales para que la piel absorba nutrientes y excrete toxinas, y se vacía la barrera entre la epidermis y la capa de grasa, de modo que la grasa se metaboliza y absorbe rápidamente, promoviendo el metabolismo y logrando el efecto de reafirmación, adelgazamiento y modelado de la piel.

2-4MHz

Sonido de haz hueco

El ultrasonido de alta frecuencia descompone selectivamente la grasa externa al cuerpo

6-18 mm

Profundidad de reparación de la piel

Permitir que las células grasas destruidas se metabolicen naturalmente en el cuerpo.

1000000+veces/segundo

Vibración de ondas de energía molecular.

Masa grasa reducida Talla media reducida en una talla

Pantalla HD a todo color de 15,1 pulgadas Borde extremadamente estrecho

Resolución de 2560*1440



Sondear múltiples modos de cuidado

Según los grupos de edad, las condiciones de la piel y las necesidades del cliente, se pueden combinar puntos, líneas y superficies para lograr una capa completa. Solución integral antienvjecimiento personalizada.

Atención monomodo

Modo MP (línea multipunto) [417 puntos/1 disparo] También puedes usar el modo de puntos [17 puntos/1 disparo] Puedes cambiar libremente el modo tocando la interfaz en la misma sonda.

Tratamiento de micropulsos

Eficacia del tratamiento básico, agregar un nuevo esquema de operación, consolidar el efecto y ampliar el alcance de la aplicación. Se puede seleccionar el modo MP circular, el modo de punto circular, la misma interfaz táctil de la sonda puede cambiar el modo libremente.

Cuidado de la espiral

El ultrasonido enfocado combinado con radiofrecuencia de 6,78MHz penetrará la energía de la epidermis a la capa de grasa sincrónicamente, quemando grasa rápidamente. El área de efecto de energía de salida alcanza los 40 mm * 50 mm, lo que puede eliminar instantáneamente la grasa en un área grande a gran escala.

Atención multimodal

Los micropulsos logran la superposición de puntos de coagulación térmica pequeños y precisos, actuando de manera uniforme y densa en todas las áreas de la capa objetivo, y la energía densamente dispersa tiene un efecto relativamente más amplio, lo que resalta la ventaja general.

Antes y después

Elevación de la mandíbula

Reafirmante del cuello

Apretar los labios

Parámetros técnicos

Modelo	360 MÁXIMO
Voltaje	CA 110 V CA 220 V
Fuerza	1180W
Frecuencia	2MHz 4MHz 5,5MHz
Peso del instrumento	10 kilos
Peso bruto del producto	20 kilos
Dimensiones del embalaje	60X43X57cm

Preguntas frecuentes sobre HIFU 360 Max

► ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la "sinergia de tres tecnologías" de 360Max (EMS + RF + HIFU) y el HIFU tradicional de un solo uso?

El HIFU tradicional se centra únicamente en el levantamiento profundo (la capa SMAS), mientras que 360Max ofrece antienvjecimiento en capas y una gestión integral de la energía:

HIFU (ultrasonido enfocado de alta intensidad): sirve como núcleo, apuntando con precisión a la capa SMAS para un levantamiento profundo y remodelación del contorno.

RF (Radiofrecuencia multipolar): actúa como un efecto sinérgico en la dermis profunda y el tejido subcutáneo, tensando instantáneamente la piel a través de efectos térmicos y estimulando la regeneración de colágeno a largo plazo, mejorando la textura de la piel y abordando las deficiencias del HIFU de un solo uso.

EMS (Microcorriente): se dirige a la capa muscular, fortaleciendo los delicados músculos faciales, mejorando la elasticidad y resolviendo instantáneamente los contornos poco claros causados por el edema.

Estas tres energías no se combinan simplemente; más bien, están coordinados por un sistema inteligente, que se adapta de manera inteligente al área de tratamiento y necesita

lograr un efecto triple rejuvenecedor integral de "levantamiento, reafirmación y contorno".

► **¿Para qué están diseñadas específicamente las tres piezas de mano diferentes (18RS LipoSonix, 15RS 7dHIFU y 36RS V-MAX)?**

La pieza de mano 18RS está diseñada específicamente para el contorno corporal. Su energía y profundidad de aplicación son ideales para descomponer la grasa rebelde (como alrededor de la cintura, el abdomen y los muslos) mediante una lipólisis no invasiva.

La pieza de mano 15RS está diseñada para tratar grandes áreas de la cara y el cuello. El cabezal del transductor de matriz es muy eficiente y cubre rápidamente áreas como la frente, las mejillas, la línea de la mandíbula y el cuello, logrando un lifting y reafirmación profundos en todo el rostro.

La pieza de mano 36RS está diseñada específicamente para zonas faciales delicadas. Proporciona mayor flexibilidad y precisión en zonas como la zona de los ojos, la zona de los labios y los pliegues nasolabiales, consiguiendo un lifting y reducción de arrugas de gran precisión.

► **¿Qué significan los modos Punto y Línea del 360Max? ¿Qué ventajas ofrecen?**

Modo Punto: Adecuado para un tratamiento preciso. Al igual que los bisturíes ultrasónicos tradicionales, proporciona fijación y refuerzo profundo y de alta energía en puntos de soporte clave (como puntos de unión de ligamentos) para fortalecer el soporte.

Modo Línea: Adecuado para elevación continua. El operador puede administrar energía continua y uniforme a lo largo de contornos lineales como la línea de la mandíbula y los pliegues nasolabiales, logrando un efecto de elevación suave y evitando el efecto "escalonado" que puede ocurrir con los tratamientos basados en puntos.

La ventaja radica en la capacidad de personalizar el plan de tratamiento (combinando puntos y líneas) en función de la textura de la piel, la dirección de la flacidez y la gravedad del paciente, lo que da como resultado un tratamiento antienvjecimiento personalizado más natural, anatómicamente preciso y superior.

► **Para las instituciones, ¿cuáles son las ventajas comerciales de invertir en 360Max en comparación con dispositivos de función única?**

Su valor comercial reside en su "un solo dispositivo, múltiples funciones, servicios personalizados":

Creación de proyectos estrella: un solo dispositivo puede realizar múltiples proyectos estrella de alto precio, incluidos "Ultra", "Thermage", "Body Fat Reduction" y "Microcurrent Lifting".

Aumento del valor promedio de los pedidos: se pueden proporcionar soluciones personalizadas que combinen soluciones integradas en función de las necesidades del

cliente, lo que genera un mayor valor.

Atraer clientes de alto nivel: las capacidades de personalización e integración de tecnología avanzada son clave para atraer clientes de alto nivel que exigen altos resultados y son menos sensibles al precio.

Alto retorno de la inversión: no es necesario comprar múltiples dispositivos de una sola función, lo que ahorra costos y crea mayores márgenes de beneficio.