

Maestro de Bodyearring

multidimensional
maestro del tallado de cuerpos

Uso continuo

**Tiene una forma de S fácil
curva encantadora**

Se utilizan diversos tratamientos para reducir la
grasa corporal y aliviar la molestia.

Gestión eficaz para aliviar la fatiga




Principio de funcionamiento del instrumento

Mediante la corriente térmica de 448 kHz, las células activadas generan energía térmica mediante movimiento, lo que favorece la circulación sanguínea y linfática.

Para recuperar la elasticidad de la piel y tonificarla con el fin de mejorar la textura subcutánea Aumenta la grasa corporal, mejora el tejido celular y optimiza el funcionamiento del cuerpo. Activa las funciones corporales para mejorar la elasticidad tisular, favorece la reconstrucción de tejidos, fortalece las venas y la circulación de líquidos, y promueve un efecto de belleza y adelgazamiento.

Tecnología de temperatura constante mediante punto fijo promover el aumento de la temperatura corporal

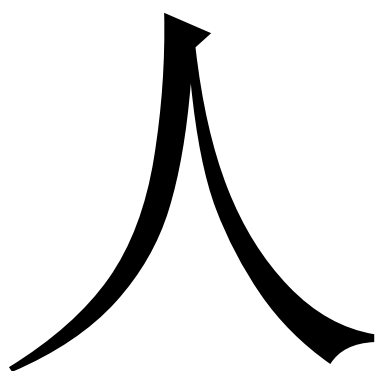

Cuidados de diatermia
delantera tras

La sonda entra en contacto con la piel y se introduce energía térmica de forma continua.

Todas las partes del cuerpo generan una gran cantidad de energía térmica, no un simple cociente térmico.

Cuidar la piel mientras se sigue cuidando todas las partes del cuerpo

Es más seguro y confiable usar caliente en lugar de caliente.

temperatura

37 36 34 32 31 28

3. Gran ventaja central

Esquema de control de temperatura fiable

Temperatura de precisión integrada
sensor, doble temperatura y doble control, más fiable

2. conducción térmica profunda

Tecnología avanzada de transferencia de calor que transfiere rápidamente la energía térmica hacia zonas más profundas del cuerpo, logrando un efecto de calentamiento más duradero

3. cabeza de conducción cerámica con cabeza metálica de conducción

Dos tipos de cabezal de conducción de material para diferentes partes, con posicionamiento y conducción precisos.

Más que la cara

Una máquina para resolver todo tipo de problemas
belleza + curva + salud: una sola máquina para todo



Facial
relaxation



de constitución fuerte y
corpulenta



Eye fine
líneas



Postpartum
maintenance



fiebre por deficiencia
femenina



Conexión
inconforto



muscular
soreness



Temor
al frío

análisis de la función de la sonda



Sonda cerámica
CAP



Rés
sondeo de transmisión de
calor interno profundo



pistola de masaje



acero inoxidable
adhesivo para electrodo negativo

sonda de cápsula de cerámica

Utiliza la CAP para generar conducción térmica y alcanzar con precisión la capa profunda de la piel, estimulando los iones corporales y logrando así el efecto de firmeza cutánea, relleno de arrugas y re mantener la elasticidad y el brillo de la piel



cuatro sondas humanizadas
can be switched arbitrarily



body probe
(muchísima parte)



body probe
(parte pequeña)



face probe
(muchísima parte)



face probe
(parte pequeña)

Notas:

Tras seleccionar la sonda de operación, aplique el producto sobre la zona a manipular y presione ligeramente la sonda para que se adhiera al cuerpo de la piel. A continuación, haga clic en "Iniciar" y, finalmente, haga clic en "Pausa" una vez finalizado el trabajo, y luego la cabeza se separa de la piel. Durante la operación, la sonda no puede permanecer en una posición fija, sino que debe moverse mediante un taxi. Recomendaciones energéticas para niveles bajos: aumenta lentamente la marcha, mantén preguntando a los clientes cómo se sienten durante la operación, y el nivel de energía varía de persona a persona

4 No lleve objetos metálicos durante la enfermería.

sonde de conductividad térmica profunda RES

El efecto térmico secura los tejidos profundos del cuerpo humano y permite aplicar una tecnología de calentamiento interno de alta eficiencia que acelera la circulación sanguínea.eliminación sinérgica y no invasiva de la grasa subcutánea y visceral para el control térmico corporal, activación celular y mejora de la inmunidad humana.Penetrar en la subcutánea de forma neusada, 12 cm hacia la capa fascial superficial, media y profunda bidireccional
circulación interna nacional



cuatro sondas humanizadas
can be switched arbitrarily



body probe
(muchísima parte)



body probe
(parte pequeña)



face probe
(muchísima parte)



face probe
(parte pequeña)

Notas:

Tras seleccionar la sonda de operación, aplique el producto sobre la zona a manipular y presione ligeramente la sonda para que se adhiera al cuerpo de la piel. A continuación,haga clic en « Iniciar » y, finalmente,haga clic en « Pausa una vez finalizado el trabajo, y luego la cabeza se retira de la piel. Durante la intervención, la sonda no puede permanecer en una misma posición y debe ser manejada por taxi.Recomendaciones energéticas desde niveles bajos: aumenta lentamente el marchos,mantén preguntando a los clientes sobre sus sensaciones durante la operación, y el nivel energético varía de persona en persona

4 No lleve objetos metálicos durante la enfermería.

JMD pistola de masaje


Se utiliza la corriente biológica EMS para activar las células, desbloquear los meridianos, mejorar la circulación sanguínea y reducir la obstrucción. Se emplea ampliamente en el tratamiento de la limitación motora, el dolor durante el ejercicio, la reclutación muscular, así como el dolor en el epicondilo interno y el epicondilo externo. Dolor en el cuello, hombros y piernas, dolor en la fáschia plantar, dolor en el talón, enfermedades sinoviales, tendinitis y muchas otras afecciones comunes. La corrección de la curvatura espinal es la técnica estrella de la Fáschia Nife.




Antes

operación

tras la operación

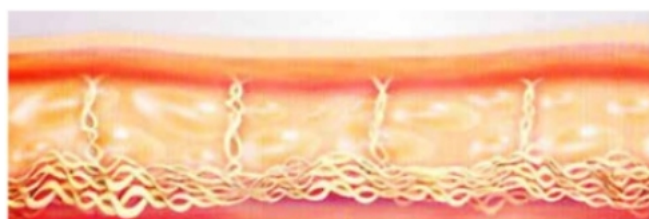

La membrana anterior se relaja;
colapso muscular

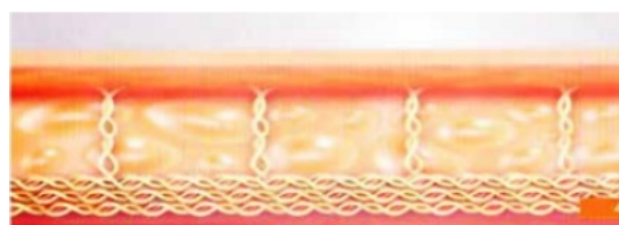

La capa de fascia es firme y bien
ordenada. Promueve la absorción tis-
ular para lograr la bomba Q muscular.

Notas:

Pielza negativa de acero inoxidable para uso con cuchillo de fascia. Coloque la pielza sobre el paciente. Aplicar el producto sobre la zona operativa y presionar la cabeza del instrumento contra la piel.y haz clic en "Inicio". Al finalizar la manipulación, pulsa " Pausa" y retira la cabeza operadora de la piel. Durante la intervención,la cabeza no debe permanecer en una misma posición;debe deslizarse.Se recomienda aplicar energía empezar desde un nivel bajo y aumentar poco a poco, y seguir preguntando a los clientes cómo se sienten al operar. La energía varía de persona a persona.

4 No lleve objetos metálicos durante la enfermería.


Pielca de electrodo negativo de acero inoxidable

Utilice con sonda facial, sonda corporal y cuchillo de fascia. El cuerpo humano forma un circuito eléctrico

Material metálico en el envoltorio de goma de silicona, diseño que evita la concentración de energía y el daño térmico en la piel, confíe en su seguridad.




diagrama de operaciones

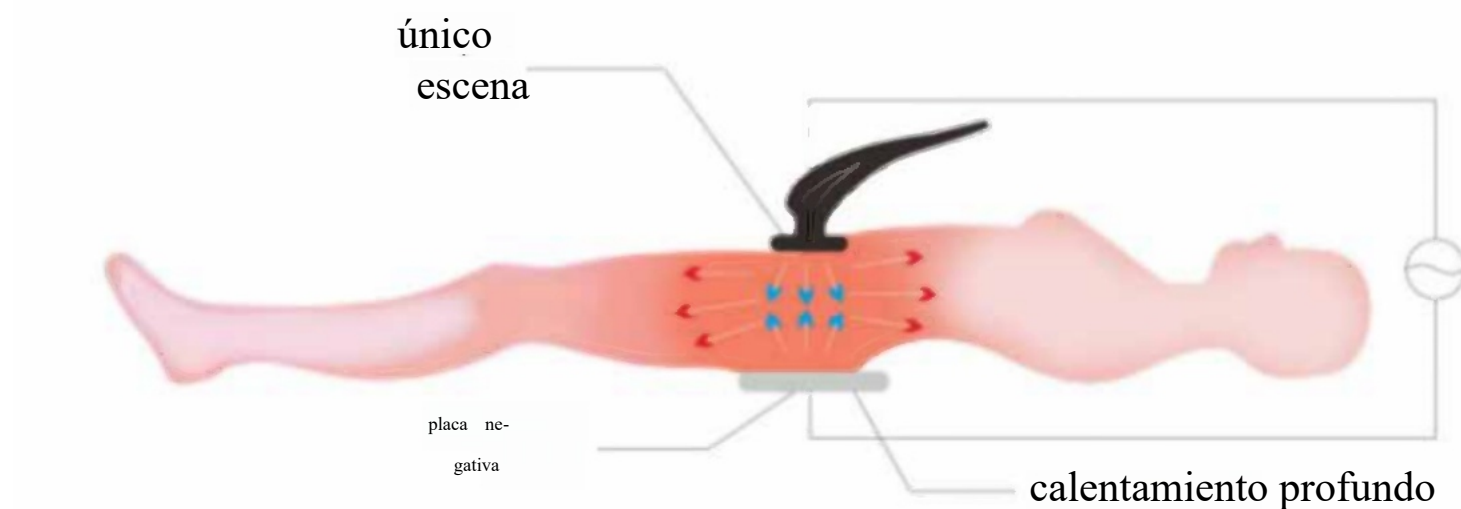

▲ No lleve objetos metálicos durante la enfermería.

Operaciones de interfaz para usar métodos

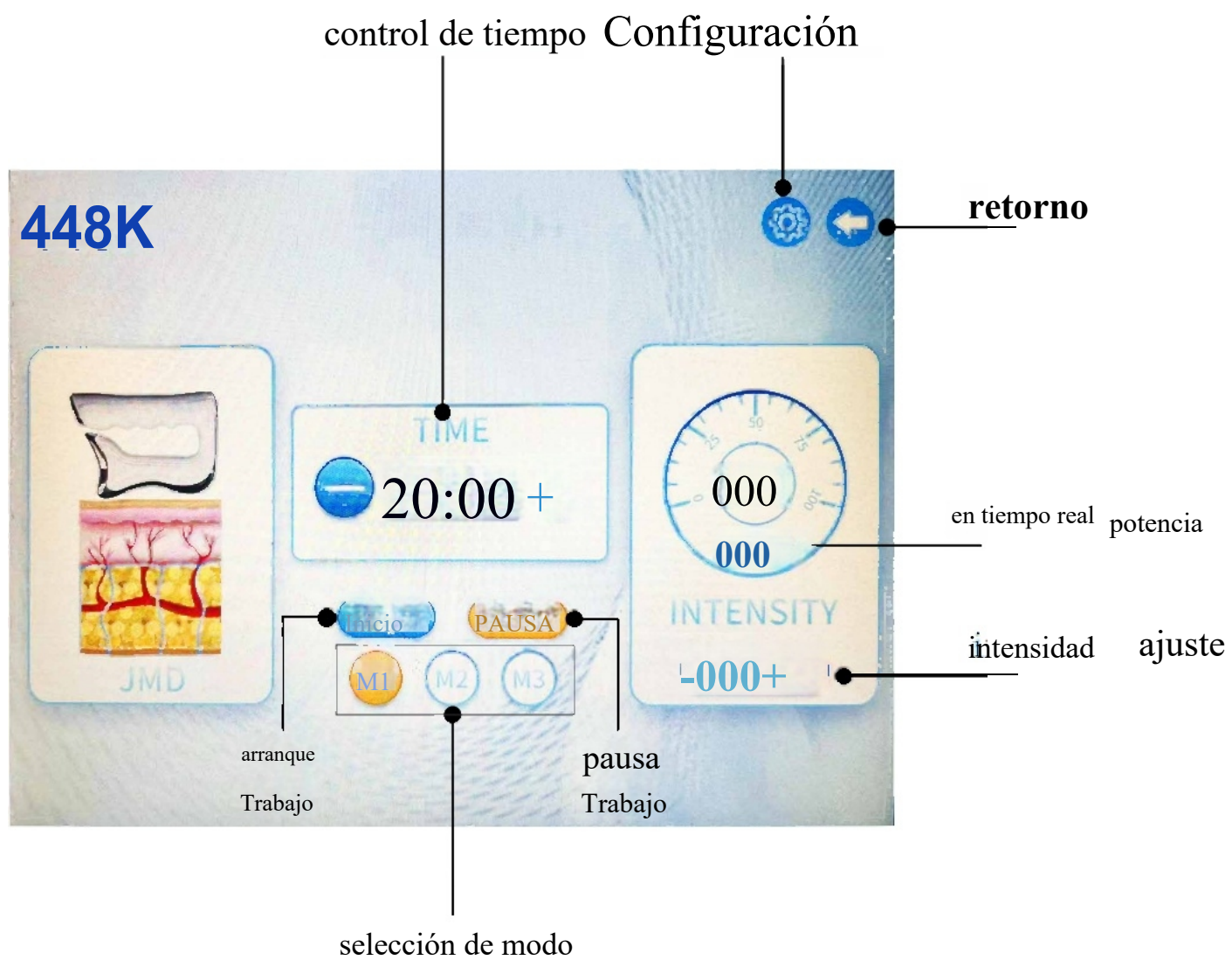

Introducción del instrumento y sus parámetros



Maestro en Escultura Corporal Multidimensional

Longitud, ancho y altura:
34 cm × 46 cm × 25 cm

Peso del instrumento:
6 2 kg

Temperatura de funcionamiento
10°C-+40°C

Potencia de entrada
MAX350W

Tamaño del paquete
62.5cm*43cm*23.2cm

Peso envasado
7,8 kg

5-1. Introducción

Antes que nada, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los clientes que han adquirido nuestros instrumentos. Este manual está dirigido al servicio al cliente para facilitar un uso más eficaz de este instrumento. Que los productos de la empresa, kimonoI, les brinden el honor y la cortesía que merecen.

NOTA:

- Este producto debe utilizarse estrictamente según lo indicado en este manual; cualquier uso no conforme a lo descrito será de exclusiva responsabilidad del usuario, y la empresa no asumirá ninguna responsabilidad.
- La Compañía no ofrece ninguna garantía, incluida, entre otras, una garantía implícita de comerciabilidad y idoneidad para fines no comerciales. La Compañía no será responsable de los errores contenidos en este material, ni de los daños accidentales o consecuenciales derivados de la provisión, ejecución o uso de este manual.
- Este manual contiene materiales propietarios protegidos por derecho de patente. Todos los derechos reservados. Sin el consentimiento por escrito de la Compañía, queda prohibido fotografiar, copiar, reproducir o traducir en otros idiomas cualquier parte de este manual. El contenido del mismo puede modificarse sin previo aviso al usuario.

5-2. responsabilidad del fabricante

La empresa solo es responsable de la seguridad y fiabilidad del instrumento en las siguientes circunstancias: operaciones de ensamblaje, reajustes, Las mejoras y reparaciones se realizan por personal autorizado por la empresa para el equipo eléctrico correspondiente, cumpliendo con las normas nacionales, y el instrumento se utiliza conforme a las instrucciones de operación.

advertencia:

- Este es un instrumento de belleza personal, no un instrumento médico; no debe utilizarse para fines terapéuticos.
- Si la institución de belleza encargada del uso de este instrumento no logra un plan de operación satisfactorio, podría provocar una falla anormal del equipo y poner en riesgo la salud de las personas. Actualmente, la empresa ofrecerá diagramas de circuito a petición, a cambio de una tarifa, junto con una lista de métodos de calibración y otra información, para ayudar al usuario con la opción más adecuada. personal técnico cualificado para reparar las piezas del instrumento clasificadas por la empresa y disponibles para el usuario, destinadas al mantenimiento.

5-3. garantía

Proceso de fabricación y materias primas: La empresa garantiza que el instrumento (excepto las piezas) se encuentra en condiciones de uso y mantenimiento normales, sin que se produzca ninguna interrupción en el proceso de fabricación ni en el suministro de materias primas durante un año a partir de la fecha de envío. Ninguna de nuestras pruebas es perfecta, ni falta nada.

5-4. Precauciones antes del uso

ADVERTENCIA:

El operador debe conocer bien el manual de instrucciones y el procedimiento de funcionamiento. El instrumento debe ser gestionado por una persona designada específicamente. La configuración de los parámetros de operación deben configurarse bajo la orientación de personal

especializado.  notificación:

- Verifique que el instrumento esté en condiciones normales de funcionamiento antes de usarlo.
- Asegúrese de que la conexión eléctrica esté correctamente realizada.
- Asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados y bien sujetos.
- Cuando se utilice el instrumento, debe hacerse con precaución, ya que de lo contrario puede ser peligroso.

5-5. Precauciones durante el uso

ADVERTENCIA:

Cuando se produzcan condiciones anormales durante la operación del instrumento o en el paciente, el operador deberá retirar inmediatamente el mango de la manivela de la posición de pa-
sacúmbalo y presione el interruptor de parada para detener el uso del

instrumento  notificación:

Durante el funcionamiento del instrumento, es fundamental supervisar constantemente el estado del paciente y del propio equipo, vigilando cualquier anomalía en cualquier momento. El instrumento debe utilizarse correctamente por técnicos operativos cualificados. No se permite su uso por personal distinto de los técnicos operativos.

5-6. Precauciones ante fallos, mantenimiento e inspección

ADVERTENCIA:

- No utilice el instrumento si presenta anomalías.
- Un olor a humo intenso y ardiente; si no se detiene el uso, podría provocar un incendio. En caso de peligro, presione de inmediato el botón de parada, apague el equipo, desconecte el enchufe y contacte de inmediato a la empresa o a los distribuidores.
- Está prohibido que el personal no técnico realice reparaciones o modificaciones en el instrumento sin autorización. No se permite abrir el interior del instrumento para evitar riesgos. Los infractores serán responsables de las consecuencias.

NOTA:

Durante el funcionamiento del instrumento, es fundamental supervisar constantemente el estado del paciente y del propio equipo, vigilando cualquier anomalía en cualquier momento. El instrumento debe utilizarse correctamente por técnicos operativos cualificados. No se permite su uso por personal distinto de los técnicos operativos.

Hay aspectos que requieren atención

5-7. Tabú operativo

- Mujeres embarazadas, corazón, arritmias, especialmente con marcapasos, está prohibido
- Prohibido para pacientes con cáncer, cirugía mayor y diabetes.
- A las personas con epilepsia y hipertensión grave se les prohíbe hacerlo.
- Las personas alérgicas o con heridas graves en la piel no lo hacen de forma temporal.
- No haga esto con ningún metal en el cuerpo ni con implantes de oro en la cara.
- Puede usarse tres meses después de una cirugía facial.

5-8. Aspectos a tener en cuenta en el lugar de uso

ADVERTENCIA:

- No utilice ni conecte el enchufe para evitar incendios.
- Siempre apague el interruptor de alimentación al reemplazar el fusible, para evitar incendios y descargas eléctricas.
- Debe utilizarse una fuente de alimentación de $220\text{ V} \pm 22\text{ V}$ y $50\text{ Hz} \pm 1\text{ Hz}$, así como una toma eficazmente puesta a tierra.
- El uso de líneas eléctricas dañadas o manipuladas conlleva el riesgo de incendios y descargas eléctricas.
- No doblee ni torce el cable de alimentación de forma excesiva, ya que podría provocar incendios o electrocuciones.
- Si el instrumento está suelto, ha caído o está dañado, contacte a la empresa de inmediato.
- No utilice este instrumento en entornos inestables, como inclinación, vibración o impacto.
- No debe haber agua ni restos dentro del instrumento. Si hay un cuerpo extraño, contacte a la empresa de inmediato.
- El enchufe debe desconectarse cuando el instrumento se mueve.
- Cuando el instrumento se mueve, debe evitarse la vibración en la medida de lo posible.
- El instrumento debe colocarse en un lugar estable, dejando al menos 5 cm de espacio alrededor para garantizar la circulación del aire y facilitar la disipación de calor.
- El instrumento no debe estar cubierto con nada si el conducto de ventilación queda obstruido.
- Evite usar este instrumento en los siguientes entornos:
 - Lugar expuesto a la luz solar, ambiente de alta humedad, vibraciones en entornos cercanos al agua, posición inclinada, campo magnético intenso, ondas electromagnéticas, voltaje de impulso, lugar de almacenamiento de productos químicos, gases corrosivos y cuerpo expuesto al entorno.
- Este instrumento no debe utilizarse cerca de radio, televisión, fotocopadoras, máquinas de fax, etc.
- No utilice con otros instrumentos (como microondas) para evitar interferencias mutuas y posibles errores de operación.

NOTA:

- Los instrumentos y componentes deben inspeccionarse periódicamente;
- No utilice herramientas de limpieza que dañen el recubrimiento protector, como el cepillo, la escoba, etc.
- Si el instrumento no se ha utilizado durante más de 2 semanas, debe revisarse cuidadosamente antes de volver a usarlo.

5-9. Advertencias y instrucciones sugerentes

ADVERTENCIA:

Cuando el equipo de alta frecuencia y el instrumento se conectan simultáneamente al mismo paciente, la posición de los electrodos del instrumento puede provocar quemaduras en el tejido cutáneo del paciente, así como daños en el propio instrumento. Cuando el instrumento se utiliza cerca de equipos de onda corta o microondas (1 m), su salida puede volverse inestable debido a interferencias microondas. El uso de electrodos próximos al pecho aumenta el riesgo de fibrilación cardíaca.

5-10. Cuidado y mantenimiento

Los inspectores de rutina deben realizar los siguientes controles en los instrumentos y componentes:

- Compruebe si la toma eléctrica está bien conectada a tierra. Si no, reemplace la toma.
- Si el cable de alimentación está deformado, roto o dañado: revise visualmente si presenta deformaciones. En algunos casos, puede provocar incendios debido a fugas eléctricas. Reemplace inmediatamente el cable de alimentación. Inspeccione la línea de salida a simple vista para detectar deterioro o deformación. Si se observan, reemplace inmediatamente. Verifique que el contenido de la indicación sea correcto antes de utilizar el instrumento.

5-11. El reemplazo de un fusible

- Tamaño del fusible de potencia de 8 A (diámetro 5×20 mm). Al reemplazar un fusible, siga estos pasos:
 - ① Apague el interruptor;
 - ② Desconecte el enchufe;
 - ③ Utilice un llave de tornillo para abrir la carcasa del fusible.
 - ④ Retira el fusible defectuoso y sustitúelo por uno nuevo.
 - ⑤ Vuelva a colocar la carcasa del fusible en su posición original.
 - ⑥ Conecta.

ADVERTENCIA:

- Al reemplazar el fusible, para evitar un electrocudo, apague la luz y desconecte el dispositivo.
- La limpieza de la ceniza interna del instrumento debe realizarse por personal de mantenimiento especializado durante un período prolongado, superior a un año.
- Cuando el instrumento no se utilice, debe colocarse en un lugar ventilado y seco, y cubrirse con una funda antipolvore.

6. tarjeta de garantía

Nombre del producto:		Modelo:	
Producción		Serial Número:	
Fecha:			

1、 Esta máquina solo puede ser reemplazada por otra si presenta problemas de calidad dentro de los 7 días siguientes a la fecha de compra (incluida la factura) y si su estado general es ó ptimo.El motor principal está garantizado durante un año, salvo por las piezas desgastadas. Si otras piezas no están cubiertas por la garantía o ya han expirado, también podrán ser objeto de mantenimiento y renovación.El comprador asumirá los gastos de envío dentro de los seis meses siguientes a la fecha de compra, mientras que el vendedor asumirá los gastos de envío posteriores a ese plazo.

2、 No se ofrece servicio de garantía gratuita por fallos causados por motivos personales.

- ① Afectación causada por la desmontaje o modificación no autorizada del producto;
- ② Avaría causada por una caída descuidada o accidental;
- ③ Falla causada por la falta de mantenimiento adecuado;
- ④ Falla causada por una falla conforme al manual de instrucciones correcto;

Nombre del cliente:		Fecha de compra:	
Dirección:			
Número de contacto:			

Nombre del distribuidor:		Nombre de contacto:	
Dirección:			
Número de contacto:			

Registro de Garantía: Causa del problema: Procedimiento y resultados:	Mantenimiento Fecha:	Fecha de entrega:	Modelo:
		Fecha de entrega:	
		Nombre del cliente:	
		úmero de contacto:	
		Dirección de entrega:	

Registro de Garantía: Mantenimiento Fecha:		Fecha de entrega:		Fecha de entrega:		Modelo:	
Causa del problema:		Nombre del cliente:		Número de contacto:		Dirección de entrega:	
Procedimiento y resultados:		2					

Registro de Garantía:

Mantenimiento

Fecha:

Causa del problema:

Procedimiento y resultados:

Fecha de entrega:

Fecha de entrega:

Nombre del cliente:

Número de contacto:

Dirección de entrega:

Modelo:

6-1. Necesidad de conocer la garantía

- Tras la compra de los instrumentos para completar la ficha de garantía y su envío al fabricante o a sus agentes, entra en vigor la garantía.
- A partir de la fecha de emisión de la factura, la empresa ofrece una garantía gratuita de un año por defectos de calidad del producto, desde la fecha de compra de la máquina.
(Nota: La garantía se incluye con el comprobante de compra y la tarjeta de garantía; su alcance se limita al motor principal del instrumento, excluyendo accesorios y otros componentes de consumo que deban reemplazarse periódicamente).
- Una vez finalizado el período de garantía, contacte directamente al fabricante para obtener asistencia técnica.
- Para reparar esta máquina, contacte con el servicio al cliente o con el distribuidor. No intente repararla ni desempaquetarla por su cuenta.
La empresa no ofrece garantías.

6-2. vida útil

- El período de garantía de este instrumento es de 1 año. (Nota: no incluye daños manuales)
- Los accesorios están garantizados durante 3 meses. (Nota: daños por uso manual no están incluidos)
- El uso continuo del instrumento más allá del período de servicio deberá ser autorizado por el ingeniero, y en su uso posterior deberá someterse a inspecciones periódicas por parte del ingeniero.
- Los instrumentos y accesorios descartados que hayan superado su vida útil deben gestionarse conforme a las normativas locales aplicables.