



HIFEM(Upgrade version)

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente este manual y siga estrictamente sus instrucciones de uso.

1. Línea

Los músculos representan alrededor del 35% del cuerpo, y la mayoría de los aparatos adelgazantes del mercado sólo se centran en la grasa, pero no en los músculos. En la actualidad sólo se utilizan inyecciones y cirugía para mejorar la forma de los glúteos. Por el contrario, el instrumento de belleza muscular HIFEM, que utiliza la más avanzada tecnología de vibración magnética focalizada de alta intensidad (HIFEM), estimula directamente las neuronas motoras, de modo que los músculos del cuerpo continúan expandiéndose y contrayéndose (Este tipo de contracción no se puede lograr con el ejercicio habitual o el ejercicio en forma) El pulso de energía de 30 minutos de tratamiento puede estimular 30000 fuertes contracciones musculares, que ayudan a las células de grasa a metabolizarse y descomponerse vigorosamente. Al mismo tiempo, con el fortalecimiento muscular, aporta una nueva experiencia tecnológica para la remodelación corporal. Ha ganado la certificación internacional de FDA y CE, y su seguridad y eficacia han sido ampliamente reconocidas. El instrumento de belleza muscular HIFEM tiene cuatro manijas de tratamiento, que soportan dos o cuatro manijas para trabajar sincronizadamente; puede operar dos o cuatro personas al mismo tiempo. Los parámetros de tratamiento de ambos mangos se pueden ajustar de forma independiente; puede ser operado por dos personas al mismo tiempo, y se puede colocar en el abdomen, las nalgas, la parte superior del brazo (bíceps, tríceps), el muslo y otras partes solas o al mismo tiempo.


muslo y otras partes del cuerpo por separado o al mismo tiempo.

Para aquellos que quieren reducir rápidamente la grasa y aumentar el músculo o cambiar su forma del cuerpo, o aquellos que no tienen tiempo o dificultad en persistir en el ejercicio, puede lograr la línea de chaleco muscular abdominal, las nalgas de melocotón y el recto abdominal separado para las mujeres después del parto, Es un equipo de reforma innovadora. "HIFEM" puede fácilmente moldear muscular y reducir la grasa para usted, y el efecto es notable. El dispositivo es no invasor, seguro e indoloro, ninguna radiación, ningunos efectos secundarios, ninguna necesidad de la anestesia, usted puede bethinwhen que se acuesta,

puede apretar los músculos y perder el peso, no hay malestar durante el thetreatment, y no hay necesidad de un período de recuperación después del tratamiento.

2. Principio de trabajo

El instrumento muscular de belleza HIFEM utiliza la tecnología no invasiva HIFEM para liberar energía de vibración magnética de alta frecuencia a través de dos grandes asas de tratamiento para penetrar en los músculos a una profundidad de 8 cm, e inducir la expansión y contracción continua de los músculos para lograr un entrenamiento extremo de alta frecuencia, para profundizar el crecimiento de las miofibrillas (agrandamiento muscular), y producir nuevas cadenas de colágeno y fibras musculares (hiperplasia muscular), por lo tanto entrenar y aumentar la densidad y el volumen muscular

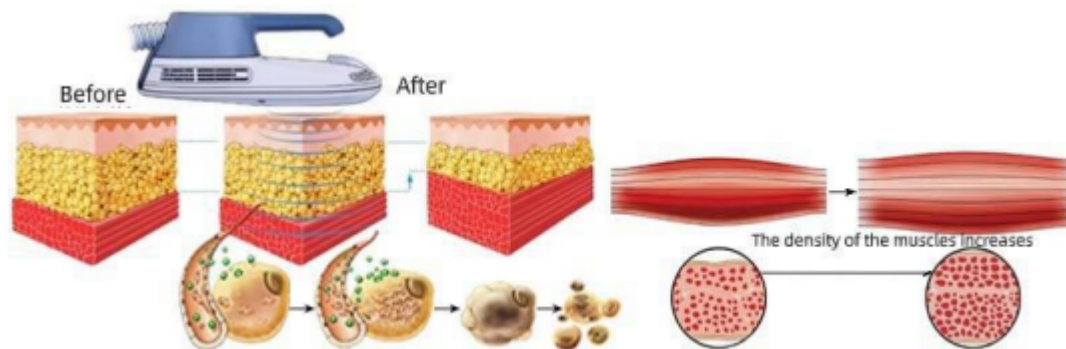

La contracción muscular límite del 100% de la tecnología HIFEM puede desencadenar una gran cantidad de lipólisis, los ácidos grasos se descomponen a partir del ácido triglicérico, y se acumulan en grandes cantidades en las células grasas. La concentración del ácido graso es demasiado alta, que causará las células gordas al apoptosis y será excretada del cuerpo por metabolismo normal dentro de algunas semanas. Por lo tanto, HIFEM belleza muscular instrumento puede fortalecer y aumentar los músculos al mismo tiempo lograr el efecto de reducir la grasa.

Ventaja:

- 1 Puede establecer diferentes modos de entrenamiento muscular.
- 2 diseño de la manija de 180 radianes, más conveniente para el diseño de la curva del brazo y del muslo, fácil a la operación.
- 3、Cuatro asas de tratamiento, energía de control de doble canal, el apoyo de dos o cuatro asas de trabajo sincronizado, puede operar dos personas o cuatro personas al mismo tiempo, adecuado para hombres y mujeres.
- 4、Es seguro y no invasivo, no corriente, no hipertermia, y no radiación, y sin período de recuperación.
- 5、No cuchillo, sin inyección, sin medicamentos, sin ejercicio, sin dieta, sólo acostarse puede quemar grasa y construir músculo, y remodelar la belleza de las líneas.
- 6、Ahorro de tiempo y esfuerzo, sólo acostarse durante 30 minutos = 30000 contracciones musculares (equivalente a 30000 rollos de vientre / sentadillas)
- 7、Es de operación simple y tipo vendaje. La cabeza de operación solo necesita ser colocada en la parte de operación del huésped, y puede ser reforzada con una banda de equipo especial, sin la necesidad de que una esteticista opere el instrumento, lo cual es conveniente y simple.

8、Es no invasivo, y el proceso es fácil y cómodo. Solo recuestese y experimente como un musculo es succionado.

9、Durante el tratamiento, sólo hay una sensación de contracción muscular, sin dolor y sin sudor, y no hay efectos secundarios en el cuerpo, sólo hazlo y vete.

10、Hay suficientes estudios experimentales para demostrar que el efecto del tratamiento es notable. Sólo se necesitan 4 tratamientos en dos semanas, y cada media hora, se puede ver el efecto de volver a dar forma a las líneas en el lugar de tratamiento.

11、El dispositivo de refrigeración por aire evita que el cabezal de tratamiento genere alta temperatura, El mango puede trabajar continuamente durante mucho tiempo, lo que mejora en gran medida la vida útil y el factor de seguridad de la máquina. y mejora en gran medida la estabilidad de la producción de energía.



Culturismo



Liposucción



Drogas o comidas
Alternativas.



Comida Vegetariana

4. Es importante elegir el método correcto para perder peso.

Elegir una forma relajada y profesional de desarrollar los músculos y quemar grasa sin perjudicar la salud. ¡La elección es más importante que el esfuerzo!

La tecnología de resonancia magnética focalizada (HIFEM) le ayuda a ganar músculo y perder grasa fácilmente. No hay necesidad de ejercicio duro, sin dolor, sin sudor, sin necesidad de

quitarse la ropa, y es más ahorro de tiempo y ahorro de trabajo. Sólo tiene que tumbarse durante 30 minutos = 30000 veces de contracción muscular (30 minutos de tratamiento abdominal / cadera, equivalente a 30000 veces de abdominales / sentadillas), por lo que puede tumbarse fácilmente para desarrollar los músculos y reducir la grasa.

5. El cuerpo adelgazante, debe “construir músculos”.

Cuanto más músculos, más rápido se queman las grasas

El músculo es la segunda parte del cuerpo que almacena la mayor tasa metabólica basal. Mientras el contenido de músculo aumenta, la tasa metabólica basal puede metabolizar tus calorías más rápido y alcanzar el nivel de "puedes perder peso sin moverte". ¿Por qué los hombres musculosos pueden engordar y adelgazar? Porque absorben bien y consumen más calorías. La cantidad de músculo es directamente proporcional al consumo. Las personas con más músculos consumirán más calorías. Por lo tanto, los hombres musculosos pueden consumir energía en cualquier momento, incluso durmiendo, consume más que reejercicio. Si desea desarrollar una constitución magra, debe aumentar los músculos.

Beneficios de la construcción de músculo

- ✓Mejorar la constitución de la obesidad y la eficacia de la pérdida de peso
- ✓Construir un cuerpo fuerte y atractivo
- ✓Prevenir el envejecimiento y mantener la juventud física
- ✓Reducir el dolor crónico de músculos y articulaciones
- ✓Helping circulación de sangre lisa
- ✓Proteger la seguridad del útero, intestino y otros órganos
- ✓Mejorar y prevenir la diabetes
- ✓Reducir la presión arterial alta para aliviar la presión de los vasos sanguíneos
- ✓Prevenir las enfermedades del corazón
- ✓Mejorar la memoria y prevenir la demencia




6. Métodos para construir músculos y quemar grasas. HIFEM

- 1、 La investigación médica ha demostrado que después de completar un curso de tratamiento, HIFEM puede aumentar eficazmente el músculo en un 16% y reducir la grasa en un 19% al mismo tiempo. Presenta las líneas hermosas de la línea del chaleco, de la línea de la sirena y de la cadera del melocotón.
- 2、 Improving los músculos abdominales que han llegado a ser flojos debido a la separación del abdominis del rectus, y formando la línea del chaleco. Es especialmente adecuado para las madres que han aumentado la circunferencia del vientre y el vientre flojo debido a la separación del recto abdominal después del parto, volviendo a una postura de niña.
- 3、 El ejercicio fortalece el grupo muscular central, incluidos los músculos abdominales del grupo central grande (recto abdominal, músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, músculo transverso abdominal) y el músculo glúteo mayor del grupo central pequeño. El grupo de músculos centrales puede proteger la columna vertebral, mantener la estabilidad del tronco, mantener la postura correcta, mejorar la capacidad atlética y reducir la posibilidad de lesiones, proporcionar apoyo estructural a todo el cuerpo, y dar forma a un cuerpo joven y sano.

7. tecnología-mejora de la separación del recto abdominal

Una vez separado el recto abdominal, el ejercicio tradicional de curvatura abdominal sólo conseguirá abrir más los músculos abdominales. Sin embargo, la sutura del recto abdominal mediante cesárea no es una buena estrategia debido a su gran traumatismo y lenta recuperación. Sólo HIEMT aporta una tecnología no invasiva a las mujeres que han dado a luz y resuelve la separación del recto abdominal para muchas madres. Las últimas investigaciones médicas por resonancia magnética y tomografía computarizada confirmaron que, tras el tratamiento HIEMT, la separación del recto abdominal se redujo una media del 11%, mientras que la pérdida de grasa se redujo un 19% y el crecimiento muscular fue del 16%.

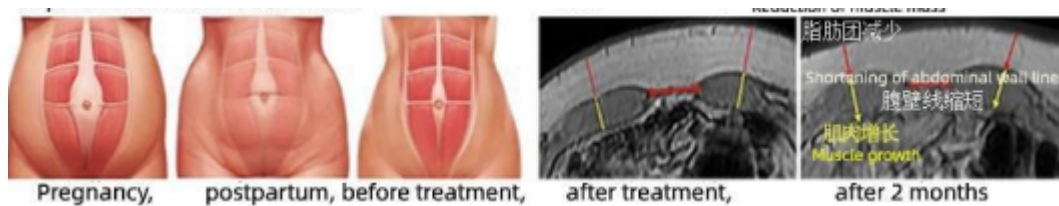


8. Tecnología segura y efectiva no invasiva HIFEM

《Inducción de la apoptosis de adipocitos: Evaluación de la seguridad y el mecanismo de la tecnología HIFEM no invasiva en modelo porcino》.

92%

A las 8 horas del tratamiento, el índice de apoptosis aumentó un 92

El análisis microscópico del tejido adiposo confirmó que el número de células apoptóticas aumentó significativamente tras el tratamiento.

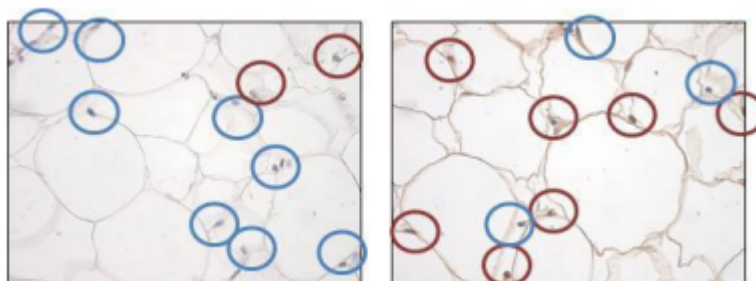

- El nivel de apoptosis de los adipocitos aumentó del 19% al 36% tras 30 minutos de tratamiento.

- Los análisis de sangre confirmaron una rápida respuesta metabólica tras el tratamiento como prueba de los cambios en el tejido adiposo subcutáneo.

El análisis microscópico del tejido adiposo confirmó que el número de células apoptóticas aumentó significativamente tras el tratamiento.

-No se han identificado riesgos para la seguridad.

Disminución de la grasa subcutánea: Cambios en el grosor de la grasa subcutánea tras el tratamiento con HIFEM》

19%


19% reducción promedio de grasa

4.4mm

la capa de grasa se redujo en 4.4mm

91%

91% de pacientes satisfechos en su tratamiento

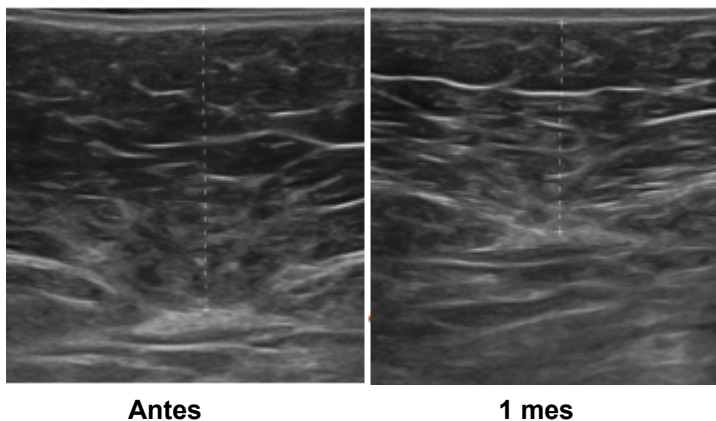

«Eficacia entre grasa y músculo: Evidencia de cambios simultáneos en el tejido adiposo y el tejido muscular humanos tras el tratamiento con HIFEM».

4.17 cm **19%**

circunferencia de la cadera reducida en 4.17cm y reducción de grasa en un 19%

16% **11%**

media de espesor muscular aumento en un 16% y la media de mejoría en el recto abdominal es de 11%



«MRI: Sincronizar los efectos de la grasa y el músculo»

HIFEM Evaluación técnica de la resonancia magnética: Investigación sobre la seguridad y eficacia del tratamiento de grasa y músculo basado en el moldeado abdominal no invasivo

3.6 cm **18.6%**

Cadera reducida 3.6mm grasa reducida 18.6%

A black circular graphic with the text "15.4%" in white, bold, sans-serif font.

A black circular graphic with the text "10.4%" in white, bold, sans-serif font.

circunferencia media del músculo incrementada en 15.4% y La media mejora del recto abdominal fue del 10,4%.

9. HIFEM tecnología modo de conducción

Utiliza 6 modos diferentes de combinación de frecuencias para garantizar la máxima eficacia clínica.

Plan de ejercicios escalonado, ejercicio de frecuencia convergente de energía, para proporcionar ejercicio gradual a sus músculos.


- ① Estiramiento y calentamiento: el ritmo es suave para impulsar a los músculos a estirarse, para que los músculos se calienten y promuevan la circulación sanguínea.
- ②Ejercicio profundo: acelera gradualmente el ritmo para ejercitar los músculos, estimula un gran número de fibras musculares profundas para que participen en la fuerza.
- ③Activar los músculos: acelerar gradualmente el ritmo y la intensidad, activar la contracción de las fibras musculares y la fuerza, y recuperar la vitalidad muscular.
- ④Aumentar la fuerza muscular: Acelere el ritmo y realice ejercicios de contracción muscular potentes e intensos para estimular la contracción a alta velocidad de los músculos profundos. Mejorar la densidad muscular y aumentar la fuerza muscular.
- ⑤Fuerte quema de grasa: Aumentar gradualmente la carga, hacer que la contracción muscular de resistencia, mejorar la micro circulación en el cuerpo, y acelerar la quema de grasa en el consumo de energía.
- ⑥Relajar: ritmo más lento impulsa la contracción muscular y relaja la fatiga muscular.

10. Selectividad Muscular

La composición de los músculos esqueléticos puede dividirse en dos categorías: fibras musculares rápidas y lentas.

- Las fibras de contracción rápida se caracterizan por una velocidad de contracción rápida, gran fuerza, energía a corto plazo proporcionada por el metabolismo anaeróbico y ninguna resistencia. - Las fibras musculares lentas se caracterizan por una velocidad de contracción lenta, poca fuerza, buen uso del oxígeno y resistencia. - Cuanto mayor es la velocidad del ejercicio, más se estimulan los músculos blancos, y cuanto menor es la velocidad, más se estimulan los músculos rojos.

11. HIFEM Hyper contracción muscular vs ejercicios musculares ordinarios.

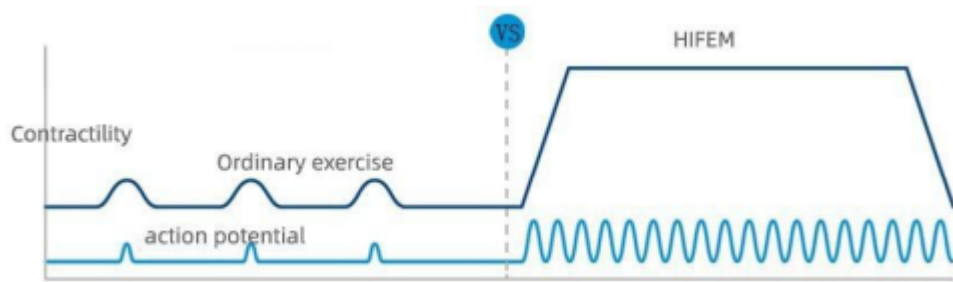

- Las neuronas motoras musculares están controladas por el cerebro, y la intensidad y amplitud de contracción muscular son limitadas, sólo algunos músculos pueden ejercitarse.
- Es difícil conseguir ganar músculo en un corto período de tiempo
- El uso de la tecnología HIFEM penetrar en el tejido muscular de 8 cm, y el uso de la señal de contracción de alta frecuencia lanzar directamente las neuronas motoras;
Hasta 30.000 ejercicios musculares extremas in 30 minutes, superando ejercicios ordinarios, haciendo que muchos músculos para producir de alta frecuencia y contracciones.
- Ver rápidamente el efecto de la ganancia de músculo.

12. HIFEM VS EMS

HIFEM

La profundidad de penetración efectiva del HIFEM es de 8 cm, cubriendo toda la red neuronal e impulsando la contracción de toda la capa muscular;

- El efecto de la apoptosis de la grasa y el "super ejercicio muscular" nunca puede ser alcanzado por el ejercicio físico;
- Estudios realizados en Estados Unidos han demostrado que el efecto de cuatro tratamientos es el mejor;
- La experiencia del tratamiento es buena.

EMS

- La mayor parte de la energía de la corriente se concentra en la capa superficial, sólo una pequeña parte puede llegar al músculo;
- Sensación de un ligero hormigueo o contracción;
- VS - Se necesitan 40 tratamientos para producir un cambio visible
- La intensidad del tratamiento no puede aumentarse debido al riesgo de dolor y quemaduras

Intensidad del tratamiento:

HIFEM : El campo eléctrico se genera en el tejido muscular subcutáneo sin contacto con el medio.

EMS: La corriente eléctrica pasa directamente a través de la piel y necesita entrar en contacto con el medio (almohadilla de gel). Los electrodos suelen ser desechables.

Penetrabilidad

HIFEM: tiene una gran profundidad de penetración, cubriendo toda la red neuronal e la contracción de toda la capa capa muscular.

EMS: La mayor parte de la energía de la corriente se concentra en la capa superficial, y sólo una pequeña parte llega a los músculos.

Tipo de Cliente:

HIFEM: Debido a su profunda penetración, HIFEM es adecuado para todo tipo de clientes.

EMS: Adecuado para pacientes delgados. La corriente superficial no puede alcanzar los músculos de los pacientes con capas de grasa medias.

Respuesta Fisiológica:

HIFEM: Los efectos de la apoptosis grasa y el "super muscular" nunca se consiguen con el ejercicio físico.

EMS: Sensación de un ligero hormigueo o contracción, equivalente a un leve ejercicio físico.

Curso de tratamiento:

HIFEM: Estudios realizados en Estados Unidos han demostrado que cuatro tratamientos son los mejores

EMS: Se necesitan 40 tratamientos para producir un cambio visible

Soluciones al tratamiento:

HIFEM: Cambiar regularmente la frecuencia para obtener una estimulación eficaz y una respuesta de los tejidos.

EMS: Tratamiento de frecuencia fija. No elimina los productos de desecho ni aumenta el flujo sanguíneo, lo que provoca fatiga muscular y limita la eficacia.

Intensidad del tratamiento

HIFEM: Tratamiento de confort de alta energía.

EMS: La intensidad es baja debido al riesgo de dolor y quemaduras.

Riesgos del tratamiento:

HIFEM: El tratamiento es totalmente indoloro. HIFEM no activa los receptores del dolor y no hay riesgo de quemaduras. Los efectos secundarios se limitan a la fatiga muscular.

EMS: Si el dolor es evidente, el tratamiento activa el receptor del dolor. La FDA advierte de descargas eléctricas, quemaduras, contusiones, irritación y dolor.

13. Mantenimiento diario.

- El instrumento debe utilizar un enchufe con clavija de conexión a tierra, y asegurarse de que la toma de corriente del instrumento está bien conectada a tierra.
 - Asegúrese de que la fuente de alimentación es estable y adaptable. Si la tensión de alimentación local es inestable, se recomienda que el usuario añada una fuente de alimentación regulada con la potencia adecuada. Recordatorio especial: El cable de alimentación de la toma debe tener más de 1,5 metros cuadrados.
 - Cuando el aparato esté en uso, manténgalo alejado de la pared y deje un espacio de 30 cm alrededor del aparato para la disipación del calor.
 - Después de cada tratamiento, humedezca la toalla con solución salina normal para limpiar los accesorios.
 - No utilice alcohol ni disolventes corrosivos para limpiar la hostia y el mango para evitar daños.
 - El mango de trabajo debe manipularse con cuidado, y está estrictamente prohibido dejarlo caer para evitar daños.
 - Durante el uso, el mango de trabajo no debe doblarse ni dañarse en exceso.
 - No coloque el instrumento en un entorno con altas temperaturas, humedad, polvo y luz solar directa. El instrumento debe colocarse en una habitación seca, fresca y ventilada con una temperatura de 5 a 40°C y una humedad no superior al 80%.
 - Cuando el instrumento no esté en uso, apáguelo, desenchúfelo y coloque los distintos accesorios del instrumento. Si es posible, cubra el instrumento con una funda antipolvo.
 - Queda terminantemente prohibido desmontar y modificar el equipo sin autorización.
- Si se produce algún fallo en el equipo, debe apagarse inmediatamente y ponerse en contacto con nosotros.

14. Instrucciones. Instalación

1. Instalación: alinee el asa con el zócalo del asa de la parte posterior del dispositivo y colóquelo en el bastidor; inserte el cable de alimentación en el zócalo de la parte posterior del dispositivo, conecte la alimentación, encienda el interruptor de alimentación y el dispositivo se pondrá en marcha inmediatamente.

Mango, Pantalla, ranura para el mango, puerto de poder, switch de encendido.



5 bandas. 2 cabezales para abdomen y caderas(arriba). 2 cabezales para brazos y piernas (abajo)



15. Instrucciones de interfaz.

- 1、 Después de encender el dispositivo, entre en la interfaz de selección de modo (Figura 1).
- seleccione el modo automático o el modo manual puede entrar en la Figura 2.

Figure 1




- 2、 Tras hacer clic en Auto/Manual en la figura 1, introduzca en la interfaz de selección of gender/age/position (figura 2)
- Elegir el sexo y la edad correspondientes ;.
- Tras seleccionar la parte correspondiente según la parte a tratar, haga clic para entrar en la interfaz de trabajo



Back: atrás.

Enter into working interface: Ingresar a interfaz de trabajo.

3、De acuerdo con la selección automática en la Figura 1, haga clic en la Figura 2 para entrar en la interfaz de trabajo automático (Figura 3).

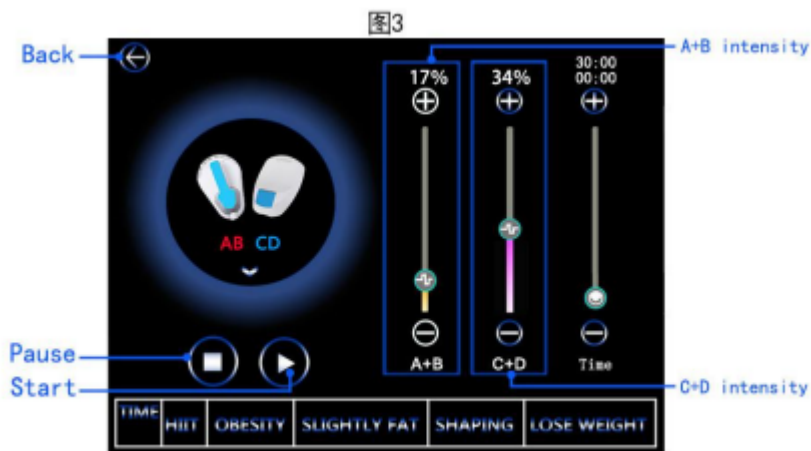

9

Back - Atrás

Pause /Start - Pausa, comenzar.

A+B Intensidad

C+D Intensidad

(Figura 3) Introducción de la interfaz de trabajo automático:

- En la Figura 3 (Interfaz de modo automático), Antes de la operación, seleccione el modo de trabajo:

【HIIT】:Entrenamiento básico para principiantes 【OBESITY】:Entrenamiento de adaptación.

【SLIGHTLY FAT】:Entrenamiento inicial 【SHAPING】:Entrenamiento avanzado

【LOSE WEIGHT】:Entrenamiento profesional


Cada modo contiene 6 diferentes conmutación automática de frecuencia. El primer minuto de cada modo es calentamiento.

- Ajuste de la intensidad, rango de 1% (débil) a 100% (fuerte).


[Intensidad A B]: A y B manejan intensidad, click[-]y[+]de intensidad para ajustar.[Intensidad C D]: C y D manejan intensidad, click[-]y[+]de intensidad para ajustar. Establecer la intensidad antes de la operación ,El tratamiento comienza a partir de baja intensidad, y debe ser gradualmente incrementando de acuerdo a la tolerancia del paciente. - Ajuste del tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo predeterminado del sistema es de 30 minutos, haga clic en [+] y [-] para ajustar. El rango de tiempo se puede ajustar de 1 a 60 minutos, y la operación de cada parte es de unos 30 minutos.

-Haga clic"  "para empezar, si necesita hacer una pausa, por favor haga clic"  ".  para volver a la interfaz anterior. Nota: Haga clic en [-]y [+] para ajustar los parámetros cuando el dispositivo esté en estado de pausa.

4、Según la selección automática de la Figura 1, haga clic en la Figura 2 para entrar en la interfaz de trabajo automático (Figura 4).

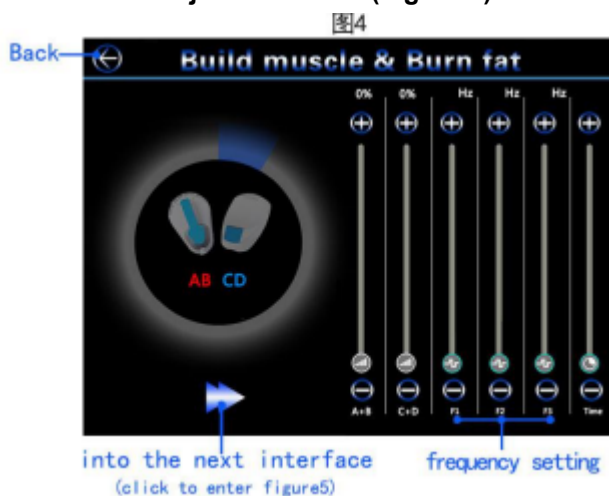

into the next interface (ir a siguiente interfaz)
frequency setting (configuración de frecuencia)

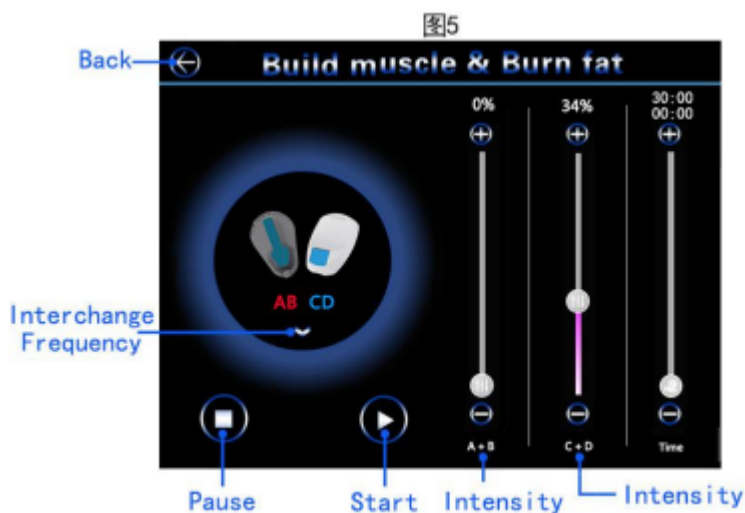

Intensidades para cabezales.

(Figura 4)/(Figura 5)Introducción de la interfaz de trabajo manual: - Ajuste de la frecuencia F1-F3.Haga clic en[+]y[-]para ajustar la frecuencia de salida, el rango es el siguiente:.

[F1]: El rango de intensidad es de 3HZ (débil) a 150Hz (fuerte);

[F2]: El rango de intensidad es de 3Hz (débil) a 150Hz (fuerte);

[F3]: El rango de intensidad es de 3Hz (débil) a 150Hz (fuerte);

Antes de la operación, ajuste los parámetros de frecuencia de acuerdo con la frecuencia requerida. F1 funciona durante cinco minutos, F2 funciona durante un minuto, F3 funciona durante cinco minutos. Durante el funcionamiento, las frecuencias F1, F2 y F3 se alternarán. Los parámetros recomendados son 50 Hz para F1, 5 Hz para F2 y 150 Hz para F3. - Ajuste de la intensidad, que oscila entre 8% (débil) y 100% (fuerte)

[Intensidad A B]: A y B manejan la intensidad, click[-]y[+]para ajustar. **[Intensidad C D]:** C y D manejan la intensidad, haga clic en [-] y [+] para ajustar. Ajuste la intensidad antes de la operación, El tratamiento comienza desde baja intensidad, y debe ser gradualmente de acuerdo con la tolerancia del paciente. - Ajuste del tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo predeterminado del sistema es de 30 minutos, haga clic en [+]y [-] para ajustar. El rango de tiempo se puede ajustar de 1 a 60 minutos, y la operación de cada parte es de unos 30 minutos.

16, usando posiciones.



Abdomen - Caderas - Hombros
Antepierna - Pierna - Brazo

17. Cuidados y contraindicaciones.

- 1, No operar cabeza, cuello/arteria carótida, posición de bolsa de riqueza ,o cerca de la galería torácica.
- 2, Las dos asas no pueden trabajar una contra la otra.
- 3, El sanador no debe llevar objetos de metal.
- 4, No estar lleno durante el tratamiento, y tratar al menos 1 hora después de las comidas.
- 5, El lugar de la operación y la sonda de tratamiento deben estar secos sin agua.
- 6, La energía de operación varía de persona a persona y aumenta gradualmente desde baja energía.
- 7, El tiempo total de operación de un día no excede 1.5 horas, y una parte no excede 1 hora.
- 8, No coloque productos electrónicos ni objetos metálicos sobre el instrumento durante el funcionamiento.
- 9, No coma ni entre en el agua durante el funcionamiento.
- 10, Tras finalizar la operación, intente volver a comer después de 1 hora (beba más agua y coma alimentos con alto contenido en proteínas).
- 11, Las personas con las siguientes condiciones no pueden recibir tratamiento:
▲ El proyecto debe evitar la menstruación, el embarazo y la lactancia;

- ▲ Los pacientes con enfermedades del corazón, hipertensión, tiroides, tumor maligno, insuficiencia renal, epilepsia y tensión muscular deben ser utilizados con precaución;
- ▲ Las personas con implantes metálicos o electrónicos (anillo anticonceptivo metálico, marcapasos cardíaco, desfibrilador cardíaco, estimulador nervioso, bomba medicamentosa y stent) deben utilizarse con precaución;
- ▲ Los pacientes con tromboflebitis, enfermedad cerebrovascular (pacientes con ictus), lesión cerebral o con cirugía cerebral deben utilizarse con precaución.

18. Preguntas frecuentes.

1. ¿Quién es apto para el instrumento muscular de belleza HI-FEM?

Esta técnica puede proporcionar el endurecimiento muscular beneficioso para la mayoría de la gente. Cinco grupos areresortedout

- ① Mujeres que necesitan ganar músculo y cambiar su forma-glúteos, línea del chaleco, toshowwomena postura agraciada.
- ② Hombres que necesitan ganar músculo y cambiar su cuerpo-ganar músculo, especialmente músculo esculpidochocolate.
- ③ Personas que necesitan perder peso-adequado tanto para hombres como para mujeres, más adecuado para los trabajadores busyoffice.
- ④ Personas que necesitan perder peso rápidamente: novias, modelos, actores, etc.
- ⑤ Postparto (r Separación del recto abdominal)--Mejorar la forma de los músculos abdominales y dar forma a un abdomen plano.

2. ¿Hay alguna diferencia en el efecto del tratamiento abdominal con uno o dos cabezales de tratamiento? ¿Cómo debemos elegir?

R: Se recomienda que todos los pacientes utilicen dos cabezales de tratamiento al mismo tiempo. Ambos cabezales de tratamiento deben estar en pleno contacto con la piel, y no flotar lateralmente ni extenderse más allá de la zona de tratamiento. Esto garantizará que se traten y activen todos los músculos abdominales. El uso de un cabezal de tratamiento a la vez sólo se recomienda para pacientes con zonas de tratamiento pequeñas. Ambas terapias son igualmente eficaces.

3. ¿Se derrite la grasa al levantar las caderas?

R: Muchos estudios han confirmado que la actividad metabólica de la grasa de las nalgas es menor que la de la grasa abdominal. Debido a esto, no se disuelve la grasa cuando el tratamiento de las nalgas.

4. ¿Es segura la profundidad de penetración de la energía? ¿Afectará a los órganos internos?

R: La tecnología HIFEM ha existido durante décadas, y su seguridad ha sido probada por docenas de estudios.

El único tejido que responde a la energía son las neuronas motoras, por lo que no tiene ningún efecto onother tissues incluyendo órganos.

5. ¿Cómo es la sensación de hacer HIFEM belleza máquina muscular? ¿Dolerá?

R: El proceso es indoloro y no invasivo. No hay necesidad de anestesia. El feelingduringthe tratamiento es el mismo que el de sus músculos durante el ejercicio intenso.

6. ¿Cuánto dura el tratamiento? ¿Durante cuánto tiempo hará efecto?

R: 4 veces para un curso de tratamiento, intervalo de 2-3 días para hacer una vez, por lo general abrir una tarjeta de conjunto 6-8courses de tratamiento, que puede obtener buenos resultados. Los mejores resultados son en las 2-4 semanas después del tratamiento. Para romper la grasa y aumentar la masa muscular, los pacientes deben ser pacientes. Usualyafter4-6 tratamientos, la masa muscular aumenta en aproximadamente un 16% y la grasa se puede reducir en un 19%.

7. ¿Cuánto tiempo durará el efecto?

A: El efecto se puede mantener durante un año después de 6 cursos. Pero algunas personas pueden necesitar tratamiento adicional para lograr los mejores resultados. Si usted tiene un curso de tratamiento cada 2-3 meses, puede mantener una mejor y mejor condición. Al mismo tiempo, los clientes pueden visitar la tienda varias veces.

8. ¿Cuánto tiempo se tarda?

A: No hay necesidad de operación manual, y se establece el modo automático de calcinación, y sólo se tarda 30 minutos cada vez.

9. ¿La energía magnética de este instrumento tiene radiación? ¿Es seguro?

R: El movimiento del músculo humano es impulsado por la energía de vibración magnética, no por la radiación electromagnética. La radiación en el cuerpo humano se siente caliente, pero nuestro instrumento del músculo de la belleza de HIFEM no es caliente en absoluto cuando trabaja en el cuerpo humano. Emite menos radiación que nuestros teléfonos móviles normales. También hicimos especialmente un informe de prueba para él, que demostró que su rango de radiación está dentro de los aparatos eléctricos de seguridad nacional ! Si es así, esta tecnología no será certificada por la FDA de EE.UU. y se utiliza en los hospitales extranjeros.

10. ¿Es la gruesa capa de grasa no es adecuado para HIFEM instrumento músculo belleza?

R: HIFEM tecnología puede penetrar 8 cm por debajo de la capa muscular. Sin embargo, si la grasa del paciente es gruesa, la energía puede no ser capaz de penetrar en el tejido muscular a fondo, por lo que es difícil hacer que el músculo se contraiga y lograr el efecto terapéutico.

11. ¿Se puede combinar con otros tratamientos corporales?

Se puede combinar con algunos cuidados no traumáticos de eliminación de grasa, como varios equipos de reducción de grasa, para eliminar más grasa. Además, se puede combinar con algunos cuidados de reparación postparto para mejorar la salud y los problemas físicos de las mujeres postparto.

19. Casos clínicos.



Before




After the fourth treatment




Before



After the fourth treatment

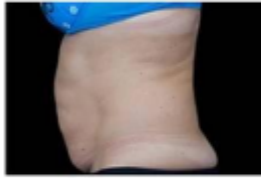

Before

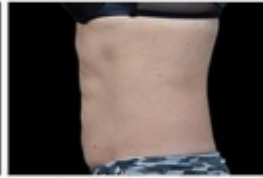

8 weeks after the fourth treatment



Before



12 weeks after the fourth treatment



Before



8 weeks after the fourth treatment



Before



4 weeks after the fourth treatment



Before



After the fifth treatment



After the eighth treatment



Before



after



Before



After



20. Especificaciones técnicas.

Nombre del producto: HIFEM Beauty muscle instrument

Intensidad de la vibración magnética: 7 Tesla

Voltaje: AC110V-230V

Poder de salida - 300W-5000W / 3-150HZ

Fusible: 20A

Tamaño del host: 46x60x105

Tamaño del vuelo Caja de envío: 56x66.116

Peso: alrededor de 50.5kg