



Bola interior 9D

Lea cuidadosamente las instrucciones y siga las instrucciones antes de usar.

Prefacio

Estimado usuario:

Bienvenido a comprar nuestro último producto, máquina de rodillo de bola interior, con tecnología innovadora de microvibración de compresión. La tecnología se realiza a través de un mango de rodillo cilíndrico giratorio inteligente de 360°. Dispositivo de rodillos compuesto por 50 bolas de silicona dentro del mango más grande para el cuidado del cuerpo; Otro dispositivo de rodillo que consiste en 60 bolas de silicona en un mango más pequeño se utiliza para el tratamiento de la cara y el cuello. Las bolas de gel de sílice se colocan en forma de panal con una densidad y diámetro específicos. La dirección de la rotación y la presión aseguran que la microcompresión se transmita al tejido. El mango único crea compresión mecánica y microvibraciones en la piel que no se pueden replicar con las manos u otras técnicas, y la "terapia de microvibración de compresión" reemplaza el método tradicional de "masaje de tracción por atracción", reemplazando la succión por microcompresión y la tracción por microvibración. Aplicado sobre el cuerpo, ayuda a mejorar el drenaje linfático y la circulación, desintoxicación profunda, alivia la rigidez y el dolor muscular, descompone los depósitos de grasa subcutánea, elimina la celulitis, reduce la celulitis y contorna. Después de varios procedimientos, su cuerpo se reducirá inmediatamente en 1-2 tamaños! Cuando se aplica en el rostro, ayuda a mejorar la formación de vasos sanguíneos, favoreciendo así la producción de colágeno y elastina, aumentando el suministro de oxígeno, ayudando a nutrir y

2

iluminar los tejidos desde dentro, además, relaja y tonifica los músculos, ayudando a reducir las arrugas expresivas.


Aparece, reduce la hinchazón, combate la flacidez de los tejidos y rejuvenece significativamente la cara. La terapia de microvibración de compresión está especialmente diseñada para el rejuvenecimiento no invasivo de la piel, el modelado del cuerpo y la fisioterapia. Es la última generación de tratamientos corporales para cara, cuello, hombros, brazos, pecho, espalda, cintura, abdomen, caderas, piernas y pies. La microvibración compresiva es un tratamiento que puede reactivar la circulación sanguínea, un método que puede cuidar enfermedades complejas como la linfostasis, el linfedema y la celulitis, por lo que mejora la nutrición de la piel y la oxigenación celular, la microvibración compresiva es una combinación innovadora de belleza y bienestar.

Introducción al principio

El dispositivo de bolas internas es un tratamiento de microvibración de compresión mecánica no invasivo. El principio es que la bola de silicona gira 360 ° a lo largo del rodillo, produciendo microvibraciones de compresión. A medida que la rotación de la bola ejerce presión sobre la piel, produce un efecto de "compresión pulsante" para lograr un movimiento alternativo continuo de empuje, pull y amasado, el tejido experimentará algunas acciones de presión y elevación, no aprietará ni dañará la piel, el tejido está sometido a presión para estirar las células naturalmente profundas para estimular la actividad celular, el flujo sanguíneo y la oxigenación, los depósitos de grasa están sometidos a presión para aflojarse y finalmente descomponerse, reducir la celulitis y eliminar la celulitis; También ejerce presión sobre los grupos musculares profun-


dos para suavizarlos y estirarlos suficientemente, reduciendo así la rigidez y el dolor muscular, acelerando el metabolismo,

Elimina el estancamiento y la acumulación de líquidos, acondiciona los tejidos y vuelve a reafirmar los tejidos de la piel, remodelando su cuerpo. También estimula los fibroblastos, aumenta la producción de colágeno y elastina, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta el oxígeno. Como resultado, las arrugas se suavizan, la hinchazón y las bolsas bajo los ojos se reducen, y la piel se rejuvenece y reafirma. Esta técnica ha demostrado clínicamente que ayuda a tonificar los músculos, moldear y rejuvenecer el cuerpo y la cara, y ayuda a rediseñar y apretar el pecho.

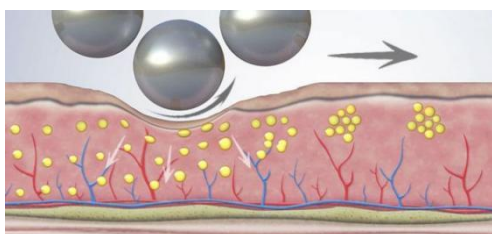


Operación Reinvent-ing

Remodela el contorno y suaviza las arrugas.

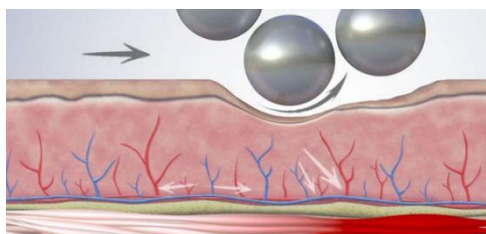


Movimientos musculares

Tonar los músculos y tensar los tejidos.

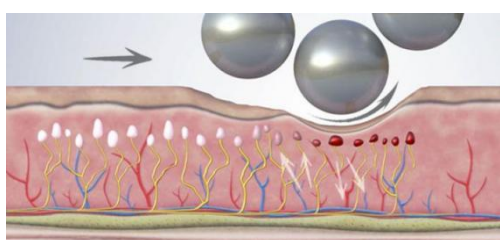


Calmante

Mejora el oxígeno y elimina el dolor.

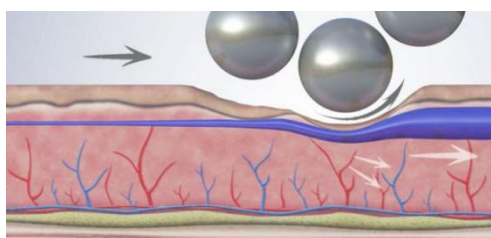

Efecto de drenaje

Elimina las toxinas y ayuda al drenaje linfático.

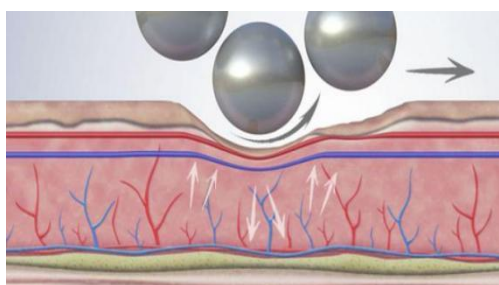

Efectos vasculares

Mejora la circulación sanguínea y nutre los tejidos.

Características:

1. Hay un mango grande y un mango pequeño.
2. La bola del mango se puede reemplazar. Todos los mangos tienen 1 juego de bolas de metal y 1 juego de bolas de silicona. (Nota: no se puede reemplazar en instrumentos de mercado).
- 3: Hay 10 velocidades ajustables, cada mango tiene luz roja, azul y verde.
- 4: Cada color tiene tres modos de luz opcionales, todas las ruedas del mango apoyan el desplazamiento bidireccional, puede guardar 5 grupos de parámetros de operación.
- 5: carcasa moldeada por inyección, pantalla táctil de 5.6 pulgadas, carcasa de vuelo de alta gama, embal-


ado en cartón.

Sección de Aplicación



DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO



- A. Instalación: alinear el mango con la toma del mango en la parte posterior del dispositivo y colocarlo en el rack; Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente en la parte posterior del dispositivo, encienda la alimentación y encienda el interruptor de encendido y pulse el botón de encendido para encender el dispositivo.

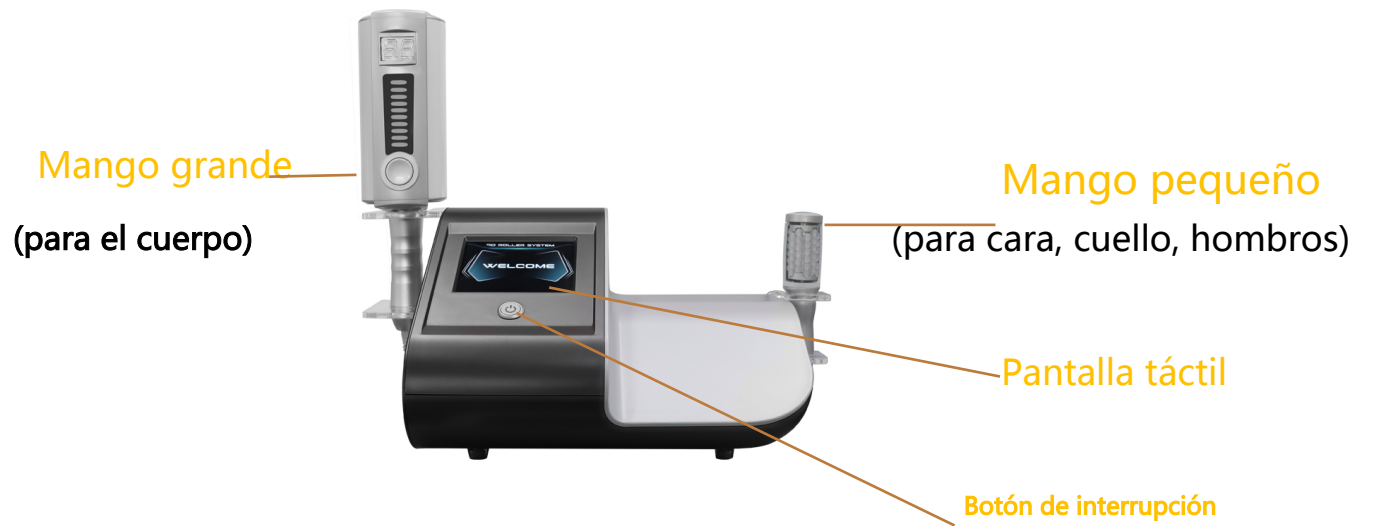


B. Mango pequeño: para cara, cuello, hombro




C.Mango grande: para el cuerpo

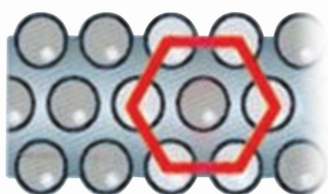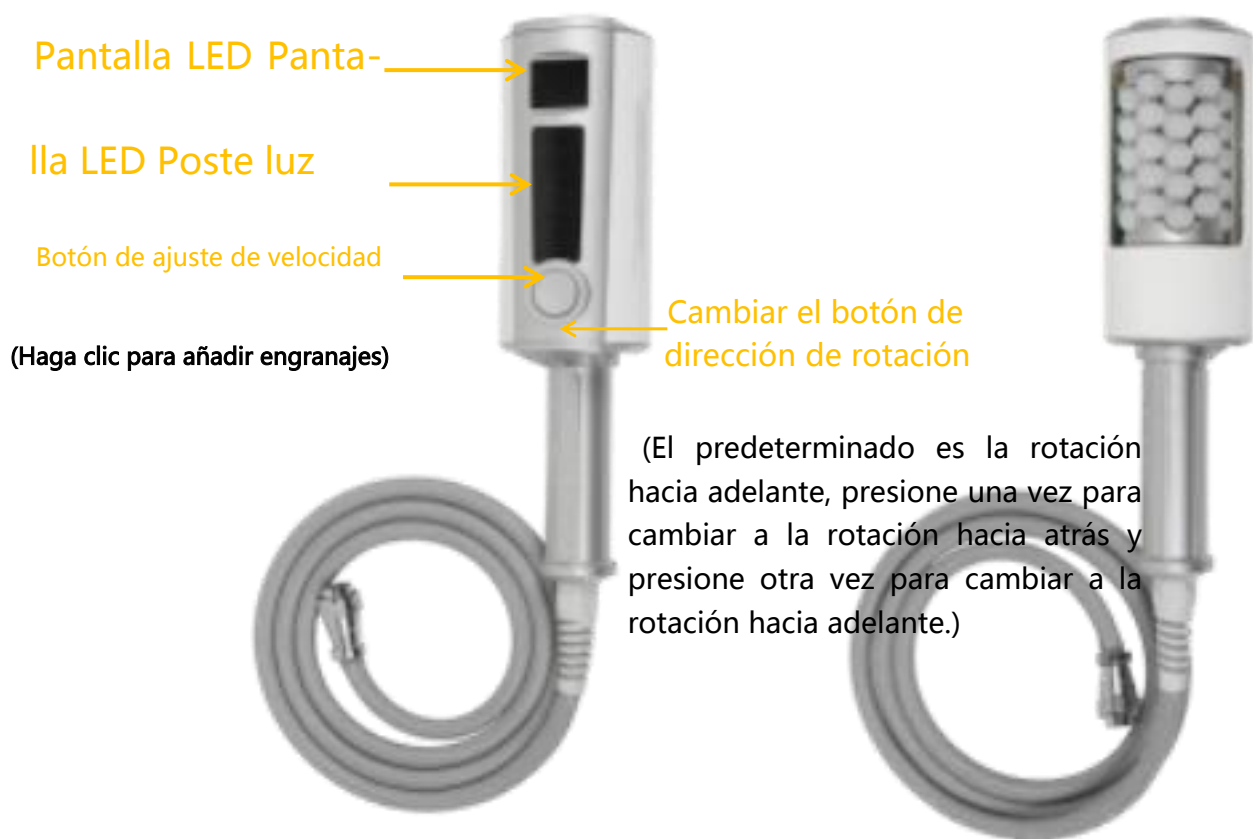

Arreglo de esfera de panal

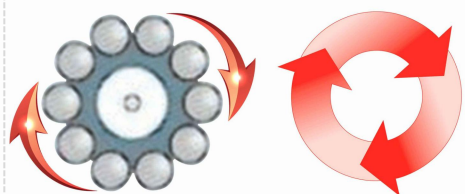


Rotar en el sentido de las agujas del reloj (abreviado: rotar en el sentido de las agujas del reloj)

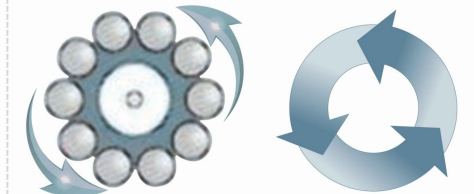

Girar en sentido contrario a las agujas del reloj (abreviado: inverso)


D. El cambio y la instalación de los rodillos incorporados en el mango se muestra en la siguiente imagen:

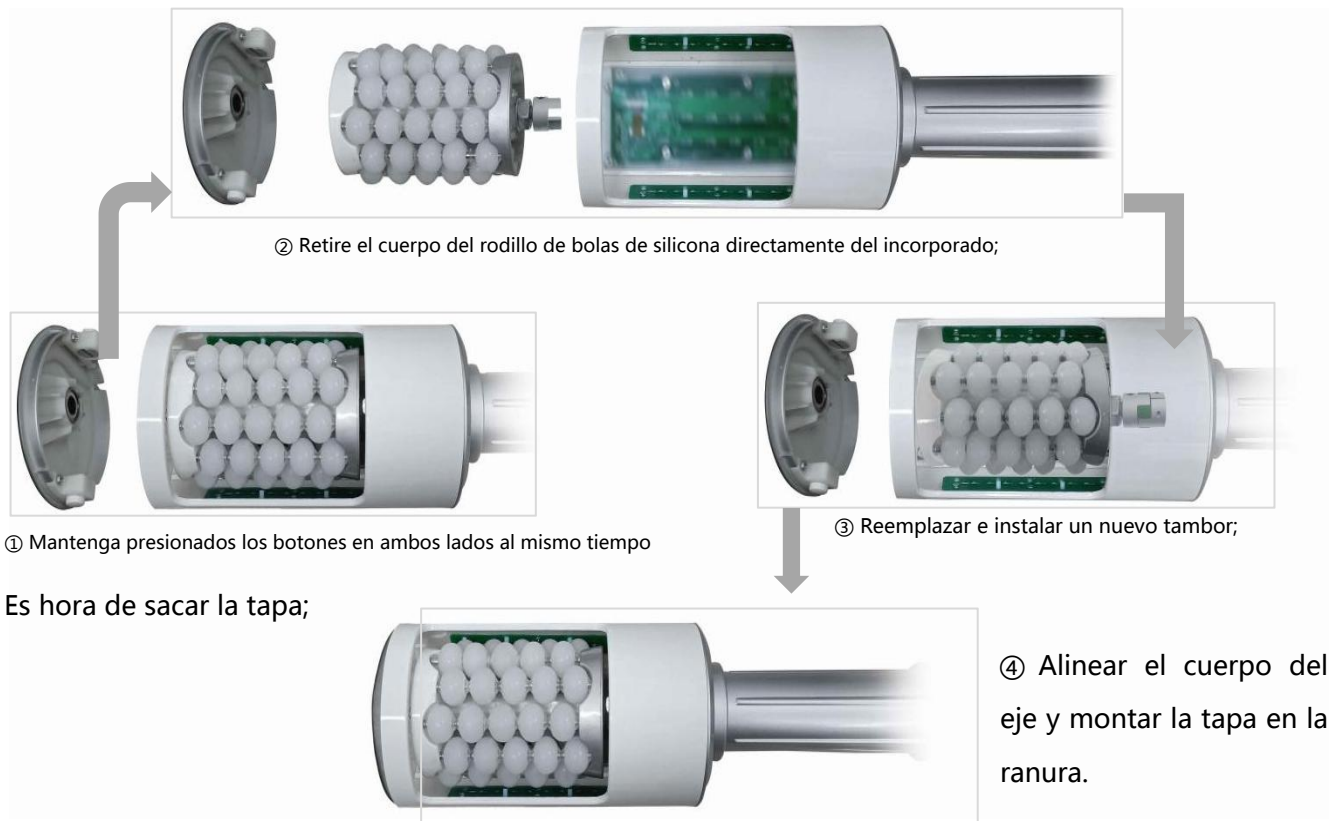

Introducción a la interfaz

A. Compruebe que la conexión del instrumento sea correcta. Conecte el instrumento a la fuente de alimentación y encienda el interruptor de encendido. Presione el botón de encendido, la máquina se arrancará inmediatamente y aparecerá la interfaz de arranque.

I

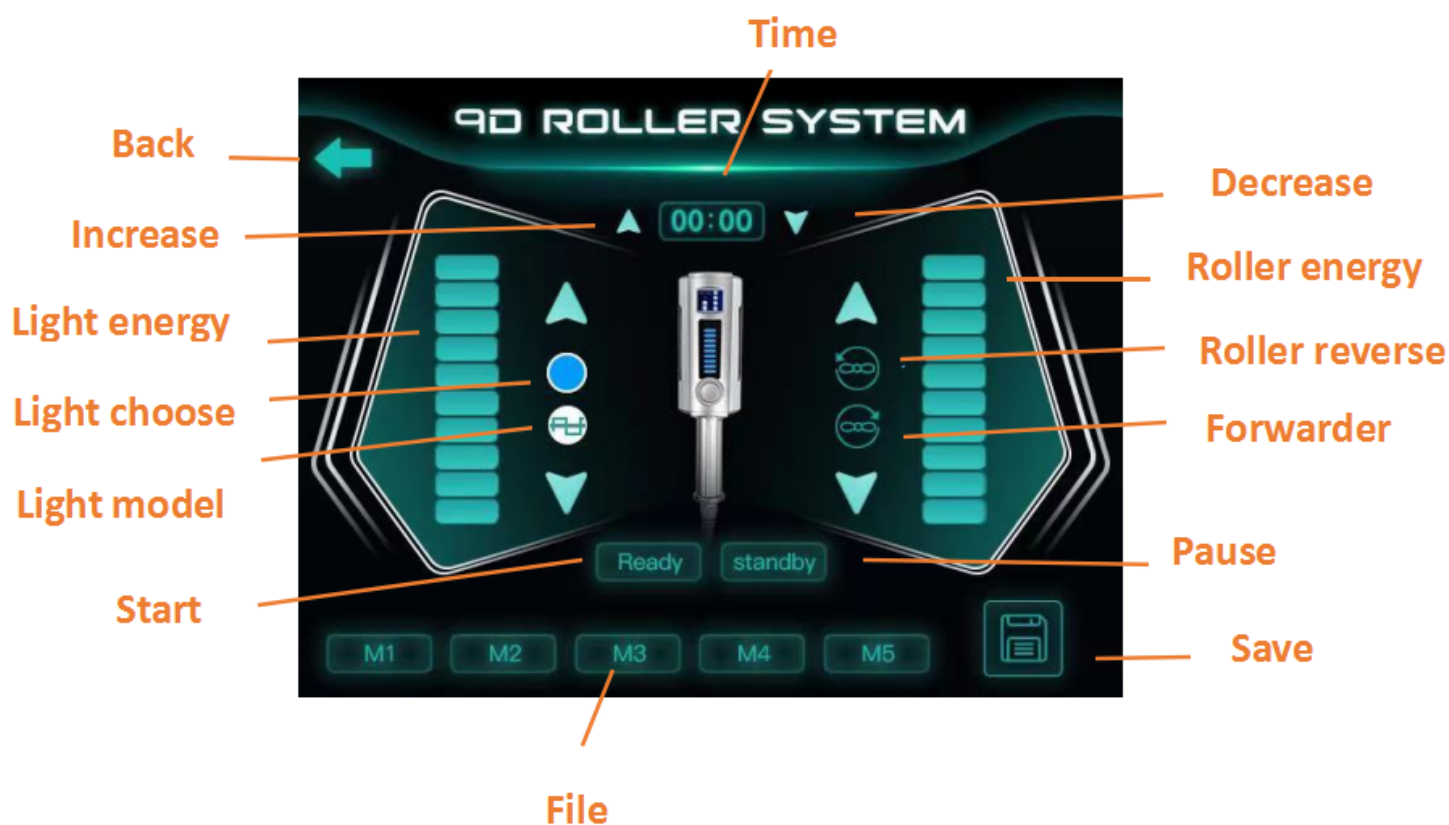

(1)Introducción a la interfaz de trabajo especial:

【 "Mango grande; 【 Mango pequeño;

【 "Dirección de rotación: en el sentido de las agujas del reloj;

【 "Dirección de rotación: inversa;

"60:00"0 Tiempo de funcionamiento: 60 minutos, 1-10 marchas,
con un intervalo de 5 minutos entre cada marcha;

【 "Marcha de velocidad: 1-10 marchas, ajuste la velocidad, haga clic

▲ "Aumentar." ▼】

【

Reducción;

Haga clic en  para comenzar; Haga clic en  para pausar;

Parámetros de almacenamiento "M1"-"M5", puede almacenar 5 parámetros o parámetros de llamada: M1, M2, M3, M4, M5, " "Botón de almacenamiento.

【 "Botón de regreso.

"Selección ligera" 

"Modo de luz" 

Preguntas frecuentes

¿Qué es la máquina interna del rodillo de la bola?

El dispositivo de bolas internas es reconocido mundialmente como un dispositivo de modelado corporal de vanguardia. Utiliza microvibraciones de compresión innovadoras para mejorar el drenaje linfático, aumentar la circulación sanguínea, mejorar la celulitis, reducir la celulitis, revertir los signos del envejecimiento, acondicionar los músculos y tratamientos de desintoxicación. Se puede utilizar tanto en la cara como en el cuerpo. Las áreas de tratamiento más populares son los muslos, caderas y la parte superior de los brazos.

¿Es segura la terapia de microvibración de compresión?

La terapia de microvibración por compresión es un tratamiento no invasivo. Es 100% seguro y no tiene efectos secundarios.

¿Cuánto tiempo dura un único tratamiento?

Es adecuado para cualquier parte del cuerpo o la cara, pero dependiendo del tamaño de la zona a tratar, el tiempo de una sola sesión varía de un mínimo de aproximadamente 45 minutos a un máximo de 1 hora y 30 minutos.

¿Siente dolor durante el tratamiento?

No, en realidad es un tratamiento muy agradable. La mayoría de los clientes dicen que se siente similar a un masaje de tejido profundo. Los niveles de intensidad/estrés aumentan gradualmente con cada sesión y se pueden ajustar según su tolerancia deseada. No hay efectos secundarios y la vida normal se puede reanudar inmediatamente después del

tratamiento.

¿Con qué frecuencia se puede realizar el tratamiento?

Generalmente se recomienda hacerlo dos o tres veces por semana.

Sin embargo, el tiempo mínimo requerido entre dos tratamientos es de 48 horas.

Parámetros del producto

Nombre del producto	Máquina de rodillo de bola interior
Pantalla táctil	Pantalla LCD grande de 5,6 pulgadas
Velocidad del mango grande	450rpm
Velocidad del mango pequeño	410rpm
Frecuencia de salida	40-254Hz
Voltaje de entrada	AC110V/220V
Potencia de salida	100-1000W
Fusible	5A
Mango grande	50 bolas de silicona (para cuidado corporal)
Mango pequeño	60 bolas de silicona (para el cuidado de la cara/cuello)
Temperatura ambiente	5°C~+40°C