

Máquina de depilación láser con diodo de 3 longitudes de onda



Manual de usuario

Contenido

Capítulo Uno - Introducción	3
1. Teoría	3
2. Aplicación	3
3. Contraindicaciones.....	3
4. Características	4
I. Especificaciones del producto	4
Capítulo Dos - Reglamento de Seguridad.....	5
1. Introducción de seguridad.....	5
2. Seguridad eléctrica y mecánica	5
Capítulo Tres - Instalación.....	6
II. Accesorios	7
III.	8
IV. Instalación	8
Capítulo Cuatro - Instrucción de Operación	13
II.....	13
III. Interfaz de tratamiento	13
Si lo tocas, volverás a la interfaz principal	14
Capítulo Cinco - Aplicación Clínica	15
I. Treatment procedure.....	15
II. Parámetro de tratamiento.....	16
Capítulo Seis Mantenimiento y Reparación Sencillos.....	44
I. Problemas y fallos normales.....	44
II. Mantenimiento y reparación diarios	44
III. Garantía.....	47

Capítulo Uno - Introducción

1. Teoría

Durante un tratamiento de depilación láser, la luz atraviesa la piel y es absorbida por la melanina en el tallo del pelo. Esta absorción eleva la temperatura del folículo piloso y destruye térmicamente las células responsables del recrecimiento sin afectar negativamente al tejido cutáneo circundante.

1. Aplicación

Adecuado para la eliminación rápida del vello rápida, segura, indoloro y permanente en los 6 tipos de piel en cualquier zona, incluyendo cara, brazos, axilas, pecho, espalda, bikini y piernas.

1. Contraindicaciones

1. Cáncer, especialmente el cáncer de piel
2. Embarazo
3. Uso actual de fármacos y medicamentos fotosensibles
4. Conoce la irritación de una fuente de luz de 808 nm
5. Exposición artificial al sol desde la cama de bronceado durante hasta 3-4 semanas antes del tratamiento
6. Infecciones activas por herpes simple
7. Crecimiento de vello en cicatrices
8. Diabetes como (depender de las inyecciones de insulina)
 - Sentirán más dolor debido a los nervios y tejidos sensibles.
 - Serán más fáciles de quemar y ampollar debido al daño en las terminaciones nerviosas.
 - Son más susceptibles a infecciones debido a la respuesta de curación más lenta.
 - La depilación es menos eficaz ya que un menor flujo sanguíneo a la superficie de la piel puede requerir ajustes más bajos en el láser.
9. Piel seca y sensible
10. Trastornos endocrinos (la luz genera estimulación)
11. Uso de agente anticoagulante
12. Epilepsia
13. Antecedentes de coagulación sanguínea

II. Características

1. El sistema de depilación láser con diodo de 808nm utiliza la tecnología más avanzada en depilación láser que penetra mejor, ofrece mejor rendimiento y resultados clínicos, y de forma segura.
2. Alta energía: se puede esperar un excelente resultado en el tratamiento en el primer tratamiento para todo tipo de cabello.
3. Ancho láser largo: Eficaz para que los folículos pilosos produzcan acumulación de calor, depilación permanente.
4. Seguridad: No quemará ni cicatrizará la piel
5. El potente sistema de enfriamiento táctil de Zafiro enfría la piel, por lo que todo el proceso es indoloro.
6. Quick: This new technology is 5 times faster than the original hair removal lasers.
7. El mejor sistema termostático de ciclo de agua garantiza que la bomba semiconductor no se sobrecaliente.

III. Product Specifications

Model	Soprano ice laser
Sistema de visualización	Pantalla táctil de microordenador en color de 15 pulgadas
Tipo láser	Láser de diodo de 3 ondas de alta potencia
Longitud de onda	755nm+808nm+1064nm
Frecuencia	1-10hz
Duración del pulso	5~300ms ajustable
Energía	1-320J ajustable
Tamaño del área de tratamiento	12 x 35mm ²
Sistema de refrigeración	Estilo de refrigeración zafiro + aire + semiconductor + inteligente TEC
Temperatura del cristal	-10~5° C
Requisitos de potencia	AC 110V/220 50~60Hz

Capítulo Dos - Normativas de Seguridad

1. Introducción de seguridad

Este sistema láser de diodo es un dispositivo de alta tecnología seguro y fiable. El personal formado y cualificado puede utilizar esta máquina de forma segura siguiendo los procedimientos operativos y de mantenimiento adecuados. Los operadores deben comprender plenamente la información de seguridad de este capítulo. Precauciones de seguridad integradas:

- 1) El sistema de Inspección Automática se activa tras encender la máquina y monitoriza continuamente los circuitos eléctricos durante el funcionamiento.
- 2) Este dispositivo tiene circuitos de seguridad contra fallos a tierra, la alimentación se cortará automáticamente en caso de cortocircuito eléctrico.
- 3) El botón rojo de emergencia puede usarse para cortar la alimentación eléctrica inmediatamente si ocurre una emergencia.
- 4) Las teclas de interruptor pueden impedir que otros enciendan la máquina sin permiso.

1. Seguridad eléctrica y mecánica

- a. No abras la carcasa de la máquina, puede producirse un shock residual incluso al desenchufarla.
- b. Solo los profesionales autorizados de servicio deberían trabajar en la máquina.
- c. Durante el mantenimiento, por favor desconecta la corriente, no abras la tapa de la máquina.
- d. El dispositivo puede moverse lentamente con cuidado.
- e. La máquina debe conectarse con cables de alimentación estándar de tres hilos con conexión a tierra para un funcionamiento seguro.

【PREVENIR FUEGO】

- a. No uses etanol, acetona u otras sustancias inflamables en la piel antes del tratamiento. Si es necesario, por favor usa agua y jabón.
- b. Después de desinfectar la cabeza de tratamiento u otras partes con etanol, por favor deje secar antes de la operación.

【INSPECCIÓN AUTOMÁTICA】

Tras encender la máquina, el sistema realizará una inspección automática del circuito eléctrico. Unos 1-3 minutos después empieza a funcionar automáticamente y luego entra en la interfaz de tratamiento.

Capítulo Tres - Instalación

I. Caja de envío

¡La máquina es un paquete como en la caja de envío que se muestra abajo. Si ha ocurrido algún daño durante el transporte, por favor contacte con nosotros o con el transportista inmediatamente!



Cómo abrir la caja?



Imagen Uno

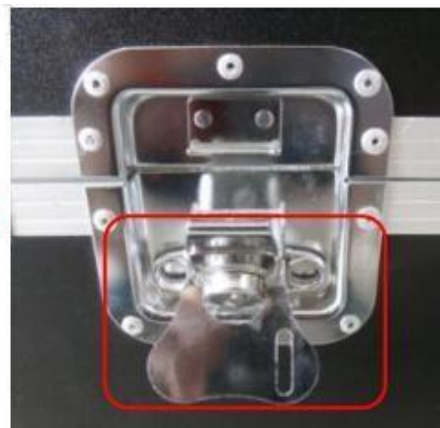


Imagen Dos

- Levanta la llave inglesa y gírala a la derecha como en la imagen 1 de arriba hasta la posición que se muestra en la imagen 2.
- Gira la palanca, así se puede abrir la caja.

II. Accesorios

Nº	Nombre	CANTIDAD	Imagen
1	Pieza láser	2 PC	
2	Filtro de agua	4+2 PCS	
3	Cable de alimentación	1 PC	
4	U disk	1 PC	
5	Llave de arranque	2 PC	
6	Gafas paciente	1 PC	
7	Gafas operadora	1 PC	
8	Embudo	1 Set	
9	Tornillos	6 PC	
10	Pedal de pie	1 PC	

Aviso: Por favor, confirme que los accesorios están en su paquete si alguno se ha perdido en el transporte, por favor contáctenos inmediatamente.

III. Máquina principal

- ① Pantalla táctil a color de 15 TFT
- ② Botón de emergencia
- ③ Teclas de encendido/apagado
- ④ Conector láser de mano
- ⑤ Pieza láser
- ⑥ Soporte para piezas de mano láser



Vista trasera

- ① El interruptor de aire del ventilador del radiador
- ② Sistema de refrigeración TEC
- ③ El conector del cable de alimentación
- ④ Entrada de agua
- ⑤ Visor de agua
- ⑥ Salida de agua

IV. Instalación

La instalación de este dispositivo debe realizarse por un profesional técnico que haya estado

entrenado por el fabricante del equipo.

PRECAUCIÓN

Asegúrate de que la máquina esté instalada en una superficie nivelada. Instala el producto en una zona nivelada.





Fuente de agua: Por favor, utilice solo agua pura o destilada

PRECAUCIÓN: por favor cambie el agua cada mes.

Aviso:

Por favor, lee esto con atención antes de usar la máquina.


Por favor, enchufa bien la pieza de mano, si no, la manguera de agua podría romperse y causar un cortocircuito.

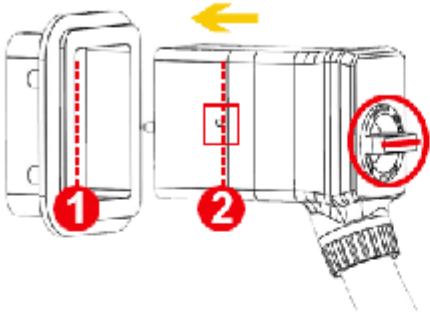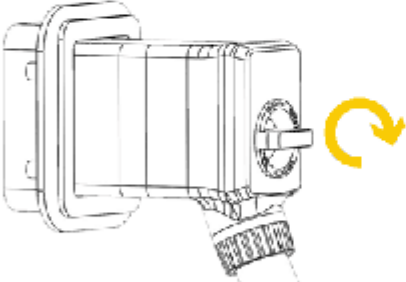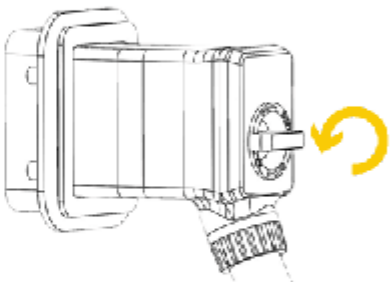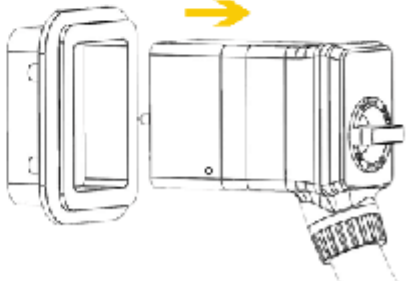Lock	Release
 Position 1 reach position 2 Note: Make sure the knob is horizontal  Clockwise rotate 300°  The right knob position	  Anticlockwise rotate 300°  Make sure the knob is horizontal and pull out

Advertencia: Debe insertar o quitar la pieza de mano según los pasos siguientes para evitar romper el conector .



Por favor, revisa la estructura del interior del conector de la pieza de mano, esas piezas deberían estar bien conectadas .

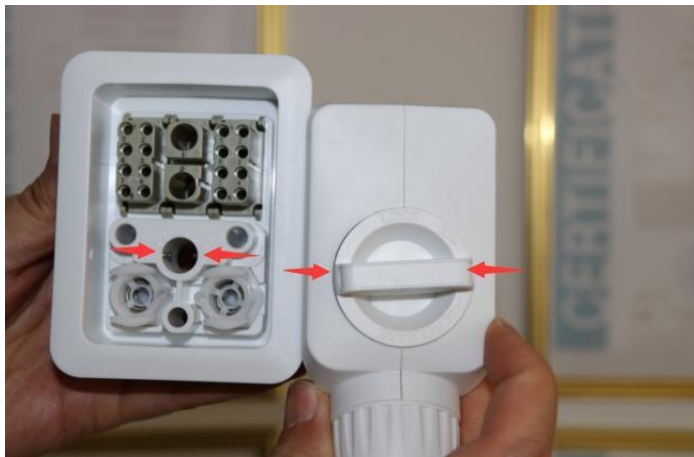

Así que el botón del conector debe estar en posición paralela cuando vayas a insertar la pieza de mano .



Luego gira el botón en sentido horario hasta que esté estable como la posición del botón en la imagen de arriba



Cuando quieras quitar la mano, gira el botón en sentido antihorario. Por fin puedes sacarla suavemente .

Cuando añadas agua o uses la máquina, asegúrate de que la salida de escape esté abierta.




Cuando recibas la nueva máquina, por favor añade agua y ponla funcionar durante 5 minutos, luego cambia el agua. En el futuro, por favor cambia el filtro de algodón PP cada 6 meses y el filtro de resina cada año.

Cambia el agua de la máquina mensualmente.

Asegúrate de usar agua destilada o desionizada.
máquina y vuelve a comprobar el nivel del agua.

Después de cada llenado, enciende la

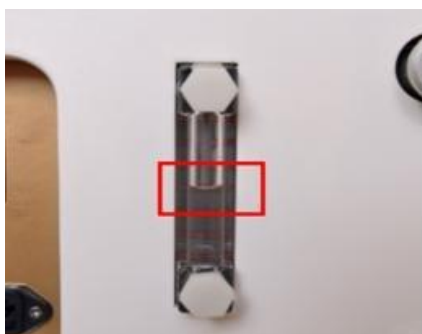

Por favor, espera al menos un minuto antes de volver a encender la máquina, porque la fuente de alimentación tiene protección contra reinicio continuo.

Capítulo Cuatro - Instrucción de Operación


II. Interfaz principal

Logo táctil en la interfaz de bienvenida, ve a la interfaz de abajo



Toca el tamaño del punto del mango, irá a la interfaz de tratamiento.

II. Interfaz de tratamiento

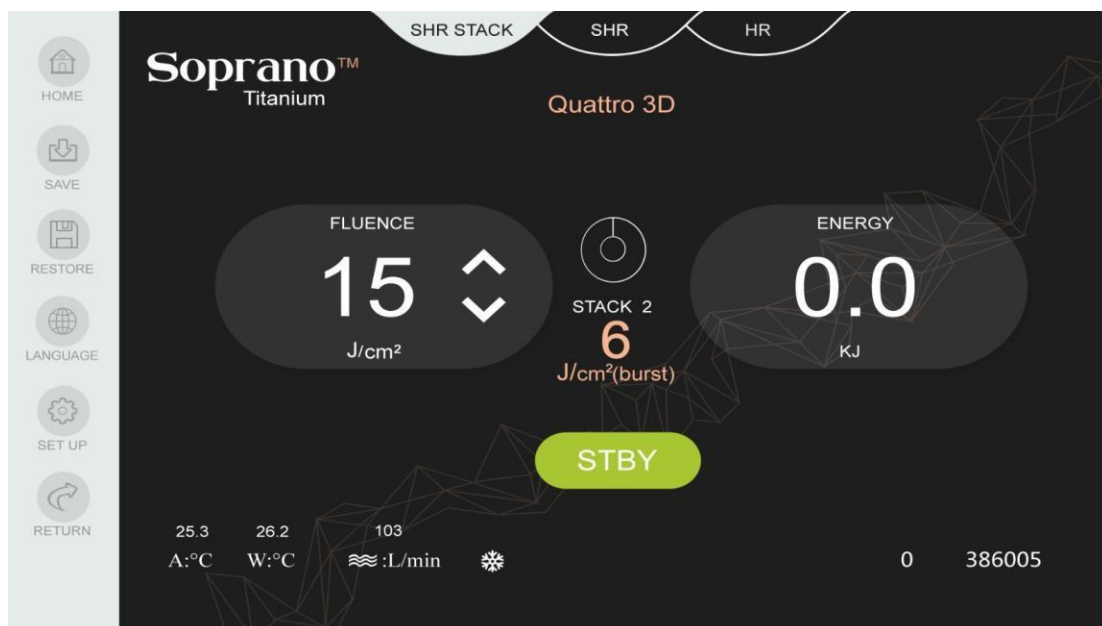

	Densidad energética, pulsa  , entonces puedes aumentar la energía, pulsando  puedes reducir la energía.
	MS mide el ancho de pulso, el ancho mínimo de pulso es 0, el ancho máximo de pulso es 400. El ancho de pulso es el tiempo de trabajo de la luz láser sobre la piel. Si pones 100ms, entonces La luz funciona en la piel a 100 ms.
	La frecuencia es del 1 al 10, ajustable. Significa cuántos destellos emite de un solo disparo.
	Si lo tocas, volverás a la interfaz principal
	Este botón se utiliza para guardar los parámetros que has establecido en el software.
	Tócalo, el parámetro de tratamiento será el de fábrica.
	Este es el botón de listo. Pulsa este botón Listo, se convertirá 
	Este es el registro de vacunas para todas las vacunas y una de tratamiento.

Capítulo Cinco - Aplicación Clínica

Preparación

Mantén los líquidos y gases inflamables y explosivos, incluyendo alcohol, óxido nitroso y oxígeno, alejados de la radiación de la luz.

Los adornos que reflejan la luz, como las joyas, siempre deben ser retirados por el paciente y el operador.

1. El paciente debe recibir protección adecuada para los ojos, como gafas protectoras.
2. Siempre vuelve a colocar la pieza de mano en su cuna después de usarla.
3. Se recomienda colocar una señal de advertencia en la entrada de la sala de tratamiento siempre que el sistema esté en uso.
4. Los primeros tratamientos deben ser usar la configuración de energía más baja para determinar la reacción a la piel usando la Escala Fitzpatrick como guía.

I. Procedimiento de tratamiento

Instrucciones de preparación

Para ofrecerte el mejor servicio posible, te pedimos que revises cuidadosamente estas instrucciones previas y posteriores al tratamiento.

1. Por favor, sigue todas las directrices del formulario de consentimiento para la depilación láser. Habla de tu historial médico (medicamentos, alergias, tipo de piel de Fitzpatrick y cualquier tendencia a cicatrices o mala cicatrización) con tu técnico de láseres.
2. No utilice ningún medicamento que cause fotosensibilidad durante al menos 6 semanas antes de los tratamientos con láser. Si estás tomando un medicamento con receta que causa fotosensibilidad, por favor contacta con tu médico que te lo prepara para hablar sobre tus opciones.
3. Evita el bronceado o los productos solares antes de los tratamientos láser (se recomienda entre 4 y 6 semanas).
4. Evita cremas depilatorias (depilación), arrancadas, depilaciones con cera o electrólisis durante al menos 6 semanas antes de los tratamientos con láser.
5. No utilice Accutane (ni productos que contengan isotretinoína) durante al menos 6 meses antes de los tratamientos con láser.
6. No utilice Retin-A (ni productos que contengan tretinoína) durante al menos 2 semanas antes de los tratamientos con láser.
7. La zona de tratamiento debe estar libre de llagas abiertas, lesiones o infecciones cutáneas.

Preparación del paciente El día de su cita

1. Afeita la zona a tratar. Si el vello en la zona de tratamiento es muy escaso, por favor déjanos recortar la zona en el momento del tratamiento, ya que así podemos definir mejor la zona tratada.
1. Lava suavemente la zona a tratar y no apliques cremas, lociones ni otros productos en la zona

excepto un anestésico tópico (si se usa).

2. Si has decidido usar un anestésico tópico, hazlo solo después de revisar todas las precauciones asociadas a su uso. Solicita y usa según las indicaciones antes de llegar.

3. Vístete de modo que puedas dejar la zona de tratamiento de forma modesta.

4. Si así lo deseas, puedes tomar medicamentos antiinflamatorios de venta libre como el ibuprofeno antes de llegar.

5. Por favor, llegue 15 minutos antes a su primera cita y 10 minutos antes a las siguientes citas. Esto te permitirá tiempo para el papeleo necesario y te mantendrá en el horario, por favor llega puntual a tus citas.

1. Parámetro de tratamiento

Atención: Este protocolo es solo una referencia para diferentes tipos de piel. No importa qué piel opere, debes intentar desde energía baja hasta energía más alta para intentarlo. ¡Prohibido usar la energía máxima para intentar ser paciente!

Advertencia:

Para el usuario principiante, sugerimos usar la frecuencia 1-2Hz (siguiendo la tabla verde), Para la esteticista que conozca esta máquina, podrías usar el parámetro de la tabla azul (3-4Hz).

Para un experto bastante en operación láser en archivo, podrías usar el parámetro en la tabla naranja con frecuencias más altas de 5-6Hz.

Para el parámetro en la tabla roja, no sugerimos usarlo normalmente, porque hay un poder demasiado alto y hay riesgo de quemar la piel en caso de accidente durante el tratamiento .

Parámetro de tratamiento en modo SHR: Es decir, en modo de movimiento.

Por ejemplo, puedes deslizar el mango sobre la piel unas 4-5 veces con 3Hz en la misma zona de tratamiento .

Te recomiendo que elijas el modo SHR durante el tratamiento, todos los comentarios positivos de nuestros clientes sobre los parámetros de tratamiento del modo SHR

755/808/1064 Parámetros de tratamiento con láser con diodo (12 x 20)

Spot size (mm²) Frequency		12*20 1HZ				
MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 34	Energy: 31	Energy: 31	Energy: 30	Energy: 30	Energy: 30
	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1
Armpit	Energy: 35	Energy: 34	Energy: 34	Energy: 33	Energy: 33	Energy: 30
	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1
Hairline	Energy: 30	Energy: 29	Energy: 28	Energy: 27	Energy: 27	Energy: 25
	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1
Bikini	Energy: 29	Energy: 28	Energy: 27	Energy: 27	Energy: 26	Energy: 26
	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1
Thigh	Energy: 35	Energy: 35	Energy: 34	Energy: 33	Energy: 33	Energy: 30
	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1
Leg	Energy: 34	Energy: 33	Energy: 33	Energy: 27	Energy: 27	Energy: 34
	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1	HZ: 1

FEMALE		I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy:	35	34	31	27	25	25
	HZ:	1	1	1	1	1	1
Armpit	Energy:	35	35	34	30	30	30
	HZ:	1	1	1	1	1	1
Hairline	Energy:	27	26	26	25	25	25
	HZ:	1	1	1	1	1	1
Bikini	Energy:	30	29	28	26	25	25
	HZ:	1	1	1	1	1	1
Thigh	Energy:	35	34	33	28	27	26
	HZ:	1	1	1	1	1	1
Leg	Energy:	34	33	31	30	27	27
	HZ:	1	1	1	1	1	1

Spot size (mm ²)		12*20				
Frequency		2HZ				
MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 68	Energy: 62	Energy: 62	Energy: 60	Energy: 60	Energy: 60
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Armpit	Energy: 70	Energy: 68	Energy: 68	Energy: 66	Energy: 66	Energy: 60
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Hairline	Energy: 60	Energy: 58	Energy: 56	Energy: 54	Energy: 54	Energy: 50
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Bikini	Energy: 58	Energy: 56	Energy: 54	Energy: 54	Energy: 52	Energy: 52
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Thigh	Energy: 70	Energy: 70	Energy: 68	Energy: 66	Energy: 66	Energy: 60
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Leg	Energy: 68	Energy: 66	Energy: 66	Energy: 54	Energy: 54	Energy: 68
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 70	Energy: 68	Energy: 62	Energy: 54	Energy: 50	Energy: 50
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Armpit	Energy: 70	Energy: 70	Energy: 68	Energy: 60	Energy: 60	Energy: 60
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Hairline	Energy: 54	Energy: 52	Energy: 52	Energy: 50	Energy: 50	Energy: 50
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Bikini	Energy: 60	Energy: 58	Energy: 56	Energy: 52	Energy: 50	Energy: 50
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Thigh	Energy: 70	Energy: 68	Energy: 66	Energy: 56	Energy: 54	Energy: 52
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Leg	Energy: 68	Energy: 66	Energy: 62	Energy: 60	Energy: 54	Energy: 54
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2

Spot size (mm²) 12*20
Frequency 3HZ

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 105 HZ: 3	Energy: 102 HZ: 3	Energy: 93 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 75 HZ: 3	Energy: 75 HZ: 3
Armpit	Energy: 105 HZ: 3	Energy: 105 HZ: 3	Energy: 102 HZ: 3	Energy: 90 HZ: 3	Energy: 90 HZ: 3	Energy: 90 HZ: 3
Hairline	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 78 HZ: 3	Energy: 78 HZ: 3	Energy: 75 HZ: 3	Energy: 75 HZ: 3	Energy: 75 HZ: 3
Bikini	Energy: 90 HZ: 3	Energy: 87 HZ: 3	Energy: 84 HZ: 3	Energy: 78 HZ: 3	Energy: 75 HZ: 3	Energy: 75 HZ: 3
Thigh	Energy: 105 HZ: 3	Energy: 102 HZ: 3	Energy: 99 HZ: 3	Energy: 84 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 78 HZ: 3
Leg	Energy: 102 HZ: 3	Energy: 99 HZ: 3	Energy: 93 HZ: 3	Energy: 90 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 102 HZ: 3	Energy: 93 HZ: 3	Energy: 93 HZ: 3	Energy: 90 HZ: 3	Energy: 90 HZ: 3	Energy: 90 HZ: 3
Armpit	Energy: 105 HZ: 3	Energy: 102 HZ: 3	Energy: 102 HZ: 3	Energy: 99 HZ: 3	Energy: 99 HZ: 3	Energy: 90 HZ: 3
Hairline	Energy: 90 HZ: 3	Energy: 78 HZ: 3	Energy: 84 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 75 HZ: 3
Bikini	Energy: 78 HZ: 3	Energy: 84 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 78 HZ: 3	Energy: 78 HZ: 3
Thigh	Energy: 105 HZ: 3	Energy: 105 HZ: 3	Energy: 102 HZ: 3	Energy: 99 HZ: 3	Energy: 99 HZ: 3	Energy: 90 HZ: 3
Leg	Energy: 102 HZ: 3	Energy: 99 HZ: 3	Energy: 99 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 102 HZ: 3

Spot size (mm²) 12*20
Frequency 4HZ

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 140 HZ: 4	Energy: 136 HZ: 4	Energy: 124 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 100 HZ: 4	Energy: 100 HZ: 4
Armpit	Energy: 140 HZ: 4	Energy: 140 HZ: 4	Energy: 136 HZ: 4	Energy: 120 HZ: 4	Energy: 120 HZ: 4	Energy: 120 HZ: 4
Hairline	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 104 HZ: 4	Energy: 104 HZ: 4	Energy: 100 HZ: 4	Energy: 100 HZ: 4	Energy: 100 HZ: 4
Bikini	Energy: 120 HZ: 4	Energy: 116 HZ: 4	Energy: 112 HZ: 4	Energy: 104 HZ: 4	Energy: 100 HZ: 4	Energy: 100 HZ: 4
Thigh	Energy: 140 HZ: 4	Energy: 136 HZ: 4	Energy: 132 HZ: 4	Energy: 112 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 104 HZ: 4
Leg	Energy: 136 HZ: 4	Energy: 132 HZ: 4	Energy: 124 HZ: 4	Energy: 120 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 136 HZ: 4	Energy: 124 HZ: 4	Energy: 124 HZ: 4	Energy: 120 HZ: 4	Energy: 120 HZ: 4	Energy: 120 HZ: 4
Armpit	Energy: 140 HZ: 4	Energy: 136 HZ: 4	Energy: 136 HZ: 4	Energy: 132 HZ: 4	Energy: 132 HZ: 4	Energy: 120 HZ: 4
Hairline	Energy: 120 HZ: 4	Energy: 116 HZ: 4	Energy: 112 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 100 HZ: 4
Bikini	Energy: 116 HZ: 4	Energy: 112 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 104 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4
Thigh	Energy: 140 HZ: 4	Energy: 140 HZ: 4	Energy: 136 HZ: 4	Energy: 132 HZ: 4	Energy: 132 HZ: 4	Energy: 120 HZ: 4
Leg	Energy: 136 HZ: 4	Energy: 132 HZ: 4	Energy: 132 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 136 HZ: 4

Spot size (mm ²)		12*20				
Frequency		5HZ				
FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 175 HZ: 5	Energy: 170 HZ: 5	Energy: 155 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 125 HZ: 5	Energy: 125 HZ: 5
Armpit	Energy: 175 HZ: 5	Energy: 175 HZ: 5	Energy: 170 HZ: 5	Energy: 150 HZ: 5	Energy: 150 HZ: 5	Energy: 150 HZ: 5
Hairline	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 130 HZ: 5	Energy: 130 HZ: 5	Energy: 125 HZ: 5	Energy: 125 HZ: 5	Energy: 125 HZ: 5
Bikini	Energy: 150 HZ: 5	Energy: 145 HZ: 5	Energy: 140 HZ: 5	Energy: 130 HZ: 5	Energy: 125 HZ: 5	Energy: 125 HZ: 5
Thigh	Energy: 175 HZ: 5	Energy: 170 HZ: 5	Energy: 165 HZ: 5	Energy: 140 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 130 HZ: 5
Leg	Energy: 170 HZ: 5	Energy: 165 HZ: 5	Energy: 155 HZ: 5	Energy: 150 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 170 HZ: 5	Energy: 155 HZ: 5	Energy: 155 HZ: 5	Energy: 150 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 150 HZ: 5
Armpit	Energy: 170 HZ: 5	Energy: 170 HZ: 5	Energy: 170 HZ: 5	Energy: 165 HZ: 5	Energy: 165 HZ: 5	Energy: 150 HZ: 5
Hairline	Energy: 150 HZ: 5	Energy: 145 HZ: 5	Energy: 140 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 125 HZ: 5
Bikini	Energy: 145 HZ: 5	Energy: 140 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 130 HZ: 5	Energy: 130 HZ: 5
Thigh	Energy: 175 HZ: 5	Energy: 175 HZ: 5	Energy: 170 HZ: 5	Energy: 165 HZ: 5	Energy: 165 HZ: 5	Energy: 150 HZ: 5
Leg	Energy: 170 HZ: 5	Energy: 165 HZ: 5	Energy: 165 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 140 HZ: 5	Energy: 170 HZ: 5

Spot size (mm²) 12*20
Frequency 6HZ

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 210 HZ: 6	Energy: 204 HZ: 6	Energy: 186 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 150 HZ: 6	Energy: 150 HZ: 6
Armpit	Energy: 210 HZ: 6	Energy: 210 HZ: 6	Energy: 204 HZ: 6	Energy: 180 HZ: 6	Energy: 180 HZ: 6	Energy: 180 HZ: 6
Hairline	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 156 HZ: 6	Energy: 156 HZ: 6	Energy: 150 HZ: 6	Energy: 150 HZ: 6	Energy: 175 HZ: 6
Bikini	Energy: 180 HZ: 6	Energy: 174 HZ: 6	Energy: 168 HZ: 6	Energy: 156 HZ: 6	Energy: 150 HZ: 6	Energy: 150 HZ: 6
Thigh	Energy: 210 HZ: 6	Energy: 204 HZ: 6	Energy: 198 HZ: 6	Energy: 168 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 156 HZ: 6
Leg	Energy: 204 HZ: 6	Energy: 198 HZ: 6	Energy: 186 HZ: 6	Energy: 180 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 204 HZ: 6	Energy: 186 HZ: 6	Energy: 186 HZ: 6	Energy: 180 HZ: 6	Energy: 180 HZ: 6	Energy: 180 HZ: 6
Armpit	Energy: 210 HZ: 6	Energy: 204 HZ: 6	Energy: 204 HZ: 6	Energy: 198 HZ: 6	Energy: 198 HZ: 6	Energy: 180 HZ: 6
Hairline	Energy: 180 HZ: 6	Energy: 174 HZ: 6	Energy: 168 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 150 HZ: 6
Bikini	Energy: 174 HZ: 6	Energy: 168 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 156 HZ: 6	Energy: 156 HZ: 6
Thigh	Energy: 210 HZ: 6	Energy: 210 HZ: 6	Energy: 204 HZ: 6	Energy: 198 HZ: 6	Energy: 198 HZ: 6	Energy: 180 HZ: 6
Leg	Energy: 204 HZ: 6	Energy: 198 HZ: 6	Energy: 198 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 204 HZ: 6

Spot size (mm²) 12*20
Frequency 7HZ

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 245 HZ: 7	Energy: 238 HZ: 7	Energy: 217 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 175 HZ: 7	Energy: 175 HZ: 7
Armpit	Energy: 245 HZ: 7	Energy: 245 HZ: 7	Energy: 238 HZ: 7	Energy: 210 HZ: 7	Energy: 210 HZ: 7	Energy: 210 HZ: 7
Hairline	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 182 HZ: 7	Energy: 182 HZ: 7	Energy: 175 HZ: 7	Energy: 175 HZ: 7	Energy: 175 HZ: 7
Bikini	Energy: 210 HZ: 7	Energy: 203 HZ: 7	Energy: 196 HZ: 7	Energy: 182 HZ: 7	Energy: 175 HZ: 7	Energy: 175 HZ: 7
Thigh	Energy: 245 HZ: 7	Energy: 238 HZ: 7	Energy: 231 HZ: 7	Energy: 196 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 182 HZ: 7
Leg	Energy: 238 HZ: 7	Energy: 231 HZ: 7	Energy: 217 HZ: 7	Energy: 210 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 238 HZ: 7	Energy: 217 HZ: 7	Energy: 217 HZ: 7	Energy: 210 HZ: 7	Energy: 210 HZ: 7	Energy: 210 HZ: 7
Armpit	Energy: 245 HZ: 7	Energy: 238 HZ: 7	Energy: 238 HZ: 7	Energy: 231 HZ: 7	Energy: 231 HZ: 7	Energy: 210 HZ: 7
Hairline	Energy: 210 HZ: 7	Energy: 203 HZ: 7	Energy: 196 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 175 HZ: 7
Bikini	Energy: 203 HZ: 7	Energy: 196 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 182 HZ: 7	Energy: 182 HZ: 7
Thigh	Energy: 245 HZ: 7	Energy: 245 HZ: 7	Energy: 238 HZ: 7	Energy: 231 HZ: 7	Energy: 231 HZ: 7	Energy: 210 HZ: 7
Leg	Energy: 238 HZ: 7	Energy: 231 HZ: 7	Energy: 231 HZ: 7	Energy: 289 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 238 HZ: 7

Spot size (mm²) 12*20
Frequency 8HZ

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 280 HZ: 8	Energy: 272 HZ: 8	Energy: 248 HZ: 8	Energy: 216 HZ: 8	Energy: 200 HZ: 8	Energy: 200 HZ: 8
Armpit	Energy: 280 HZ: 8	Energy: 280 HZ: 8	Energy: 272 HZ: 8	Energy: 240 HZ: 8	Energy: 240 HZ: 8	Energy: 240 HZ: 8
Hairline	Energy: 216 HZ: 8	Energy: 208 HZ: 8	Energy: 208 HZ: 8	Energy: 200 HZ: 8	Energy: 200 HZ: 8	Energy: 200 HZ: 8
Bikini	Energy: 240 HZ: 8	Energy: 232 HZ: 8	Energy: 224 HZ: 8	Energy: 208 HZ: 8	Energy: 200 HZ: 8	Energy: 200 HZ: 8
Thigh	Energy: 280 HZ: 8	Energy: 272 HZ: 8	Energy: 264 HZ: 8	Energy: 224 HZ: 8	Energy: 216 HZ: 8	Energy: 208 HZ: 8
Leg	Energy: 272 HZ: 8	Energy: 264 HZ: 8	Energy: 248 HZ: 8	Energy: 240 HZ: 1	Energy: 216 HZ: 8	Energy: 216 HZ: 8

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 272 HZ: 8	Energy: 248 HZ: 8	Energy: 248 HZ: 8	Energy: 240 HZ: 8	Energy: 240 HZ: 8	Energy: 240 HZ: 8
Armpit	Energy: 280 HZ: 8	Energy: 272 HZ: 8	Energy: 272 HZ: 8	Energy: 264 HZ: 8	Energy: 264 HZ: 8	Energy: 240 HZ: 8
Hairline	Energy: 240 HZ: 8	Energy: 232 HZ: 8	Energy: 224 HZ: 8	Energy: 216 HZ: 8	Energy: 216 HZ: 8	Energy: 200 HZ: 8
Bikini	Energy: 232 HZ: 8	Energy: 224 HZ: 8	Energy: 216 HZ: 8	Energy: 216 HZ: 8	Energy: 208 HZ: 8	Energy: 208 HZ: 8
Thigh	Energy: 280 HZ: 8	Energy: 280 HZ: 8	Energy: 272 HZ: 8	Energy: 264 HZ: 8	Energy: 264 HZ: 8	Energy: 240 HZ: 8
Leg	Energy: 272 HZ: 8	Energy: 264 HZ: 8	Energy: 264 HZ: 8	Energy: 216 HZ: 8	Energy: 216 HZ: 8	Energy: 272 HZ: 8

755/808/1064 Parámetros de tratamiento con láser con diodo (14 x 14)

Spot size (mm ²) Frequency		14*14 1HZ				
MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 28 HZ: 1	Energy: 25 HZ: 1	Energy: 25 HZ: 1	Energy: 25 HZ: 1	Energy: 25 HZ: 1	Energy: 25 HZ: 1
Armpit	Energy: 29 HZ: 1	Energy: 28 HZ: 1	Energy: 28 HZ: 1	Energy: 27 HZ: 1	Energy: 27 HZ: 1	Energy: 25 HZ: 1
Hairline	Energy: 25 HZ: 1	Energy: 24 HZ: 1	Energy: 23 HZ: 1	Energy: 22 HZ: 1	Energy: 22 HZ: 1	Energy: 20 HZ: 1
Bikini	Energy: 24 HZ: 1	Energy: 23 HZ: 1	Energy: 22 HZ: 1	Energy: 22 HZ: 1	Energy: 21 HZ: 1	Energy: 21 HZ: 1
Thigh	Energy: 29 HZ: 1	Energy: 29 HZ: 1	Energy: 28 HZ: 1	Energy: 23 HZ: 1	Energy: 27 HZ: 1	Energy: 25 HZ: 1
Leg	Energy: 28 HZ: 1	Energy: 27 HZ: 1	Energy: 27 HZ: 1	Energy: 22 HZ: 1	Energy: 22 HZ: 1	Energy: 28 HZ: 1

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 29 HZ: 1	Energy: 28 HZ: 1	Energy: 25 HZ: 1	Energy: 22 HZ: 1	Energy: 20 HZ: 1	Energy: 20 HZ: 1
Armpit	Energy: 29 HZ: 1	Energy: 29 HZ: 1	Energy: 28 HZ: 1	Energy: 25 HZ: 1	Energy: 25 HZ: 1	Energy: 25 HZ: 1
Hairline	Energy: 22 HZ: 1	Energy: 21 HZ: 1	Energy: 21 HZ: 1	Energy: 20 HZ: 1	Energy: 20 HZ: 1	Energy: 20 HZ: 1
Bikini	Energy: 25 HZ: 1	Energy: 24 HZ: 1	Energy: 23 HZ: 1	Energy: 21 HZ: 1	Energy: 20 HZ: 1	Energy: 20 HZ: 1
Thigh	Energy: 29 HZ: 1	Energy: 28 HZ: 1	Energy: 27 HZ: 1	Energy: 23 HZ: 1	Energy: 22 HZ: 1	Energy: 21 HZ: 1
Leg	Energy: 28 HZ: 1	Energy: 27 HZ: 1	Energy: 25 HZ: 1	Energy: 25 HZ: 1	Energy: 22 HZ: 1	Energy: 22 HZ: 1

Spot size (mm²) 14*14
Frequency 2HZ

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 56 HZ: 2	Energy: 51 HZ: 2	Energy: 51 HZ: 2	Energy: 49 HZ: 2	Energy: 49 HZ: 2	Energy: 49 HZ: 2
Armpit	Energy: 57 HZ: 2	Energy: 56 HZ: 2	Energy: 56 HZ: 2	Energy: 54 HZ: 2	Energy: 54 HZ: 2	Energy: 49 HZ: 2
Hairline	Energy: 49 HZ: 2	Energy: 47 HZ: 2	Energy: 46 HZ: 2	Energy: 44 HZ: 2	Energy: 44 HZ: 2	Energy: 41 HZ: 2
Bikini	Energy: 47 HZ: 2	Energy: 46 HZ: 2	Energy: 44 HZ: 2	Energy: 44 HZ: 2	Energy: 42 HZ: 2	Energy: 42 HZ: 2
Thigh	Energy: 57 HZ: 2	Energy: 57 HZ: 2	Energy: 56 HZ: 2	Energy: 54 HZ: 2	Energy: 54 HZ: 2	Energy: 49 HZ: 2
Leg	Energy: 56 HZ: 2	Energy: 54 HZ: 2	Energy: 54 HZ: 2	Energy: 44 HZ: 2	Energy: 44 HZ: 2	Energy: 56 HZ: 2

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 57 HZ: 2	Energy: 56 HZ: 2	Energy: 51 HZ: 2	Energy: 44 HZ: 2	Energy: 41 HZ: 2	Energy: 41 HZ: 2
Armpit	Energy: 57 HZ: 2	Energy: 57 HZ: 2	Energy: 56 HZ: 2	Energy: 49 HZ: 2	Energy: 49 HZ: 2	Energy: 49 HZ: 2
Hairline	Energy: 44 HZ: 2	Energy: 42 HZ: 2	Energy: 42 HZ: 2	Energy: 41 HZ: 2	Energy: 41 HZ: 2	Energy: 41 HZ: 2
Bikini	Energy: 49 HZ: 2	Energy: 47 HZ: 2	Energy: 46 HZ: 2	Energy: 42 HZ: 2	Energy: 41 HZ: 2	Energy: 41 HZ: 2
Thigh	Energy: 57 HZ: 2	Energy: 56 HZ: 2	Energy: 54 HZ: 2	Energy: 46 HZ: 2	Energy: 44 HZ: 2	Energy: 42 HZ: 2
Leg	Energy: 56 HZ: 2	Energy: 54 HZ: 2	Energy: 51 HZ: 2	Energy: 49 HZ: 2	Energy: 44 HZ: 2	Energy: 44 HZ: 2

Spot size (mm²) 14*14
Frequency 3HZ

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 86 HZ: 3	Energy: 83 HZ: 3	Energy: 76 HZ: 3	Energy: 66 HZ: 3	Energy: 61 HZ: 3	Energy: 61 HZ: 3
Armpit	Energy: 86 HZ: 3	Energy: 86 HZ: 3	Energy: 83 HZ: 3	Energy: 74 HZ: 3	Energy: 74 HZ: 3	Energy: 74 HZ: 3
Hairline	Energy: 66 HZ: 3	Energy: 64 HZ: 3	Energy: 64 HZ: 3	Energy: 61 HZ: 3	Energy: 61 HZ: 3	Energy: 61 HZ: 3
Bikini	Energy: 74 HZ: 3	Energy: 71 HZ: 3	Energy: 69 HZ: 3	Energy: 64 HZ: 3	Energy: 61 HZ: 3	Energy: 61 HZ: 3
Thigh	Energy: 86 HZ: 3	Energy: 83 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 69 HZ: 3	Energy: 66 HZ: 3	Energy: 64 HZ: 3
Leg	Energy: 83 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 76 HZ: 3	Energy: 74 HZ: 3	Energy: 66 HZ: 3	Energy: 66 HZ: 3

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 83 HZ: 3	Energy: 76 HZ: 3	Energy: 76 HZ: 3	Energy: 74 HZ: 3	Energy: 74 HZ: 3	Energy: 74 HZ: 3
Armpit	Energy: 86 HZ: 3	Energy: 83.3 HZ: 3	Energy: 83.3 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 74 HZ: 3
Hairline	Energy: 74 HZ: 3	Energy: 63.7 HZ: 3	Energy: 68.6 HZ: 3	Energy: 66 HZ: 3	Energy: 66 HZ: 3	Energy: 61 HZ: 3
Bikini	Energy: 64 HZ: 3	Energy: 68.6 HZ: 3	Energy: 66.2 HZ: 3	Energy: 66 HZ: 3	Energy: 64 HZ: 3	Energy: 64 HZ: 3
Thigh	Energy: 86 HZ: 3	Energy: 85.8 HZ: 3	Energy: 83.3 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 81 HZ: 3	Energy: 74 HZ: 3
Leg	Energy: 83 HZ: 3	Energy: 80.9 HZ: 3	Energy: 80.9 HZ: 3	Energy: 66 HZ: 3	Energy: 66 HZ: 3	Energy: 83 HZ: 3

Spot size (mm ²)		14*14				
Frequency		4HZ				
FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 114 HZ: 4	Energy: 111 HZ: 4	Energy: 101 HZ: 4	Energy: 88 HZ: 4	Energy: 82 HZ: 4	Energy: 82 HZ: 4
Armpit	Energy: 114 HZ: 4	Energy: 114 HZ: 4	Energy: 111 HZ: 4	Energy: 98 HZ: 4	Energy: 98 HZ: 4	Energy: 98 HZ: 4
Hairline	Energy: 88 HZ: 4	Energy: 85 HZ: 4	Energy: 85 HZ: 4	Energy: 82 HZ: 4	Energy: 82 HZ: 4	Energy: 82 HZ: 4
Bikini	Energy: 98 HZ: 4	Energy: 95 HZ: 4	Energy: 91 HZ: 4	Energy: 85 HZ: 4	Energy: 82 HZ: 4	Energy: 82 HZ: 4
Thigh	Energy: 114 HZ: 4	Energy: 111 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 91 HZ: 4	Energy: 88 HZ: 4	Energy: 85 HZ: 4
Leg	Energy: 111 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 101 HZ: 4	Energy: 98 HZ: 4	Energy: 88 HZ: 4	Energy: 88 HZ: 4

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 111 HZ: 4	Energy: 101 HZ: 4	Energy: 101 HZ: 4	Energy: 98 HZ: 4	Energy: 98 HZ: 4	Energy: 98 HZ: 4
Armpit	Energy: 114 HZ: 4	Energy: 111 HZ: 4	Energy: 111 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 98 HZ: 4
Hairline	Energy: 98 HZ: 4	Energy: 95 HZ: 4	Energy: 91 HZ: 4	Energy: 88 HZ: 4	Energy: 88 HZ: 4	Energy: 82 HZ: 4
Bikini	Energy: 95 HZ: 3	Energy: 91 HZ: 3	Energy: 88 HZ: 3	Energy: 88 HZ: 3	Energy: 85 HZ: 3	Energy: 88 HZ: 3
Thigh	Energy: 114 HZ: 4	Energy: 114 HZ: 4	Energy: 111 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 98 HZ: 4
Leg	Energy: 111 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 108 HZ: 4	Energy: 88 HZ: 4	Energy: 88 HZ: 4	Energy: 111 HZ: 4

Spot size (mm²) 14*14
Frequency 5HZ

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 143 HZ: 5	Energy: 139 HZ: 5	Energy: 127 HZ: 5	Energy: 110 HZ: 5	Energy: 102 HZ: 5	Energy: 102 HZ: 5
Armpit	Energy: 143 HZ: 5	Energy: 143 HZ: 5	Energy: 139 HZ: 5	Energy: 123 HZ: 5	Energy: 123 HZ: 5	Energy: 123 HZ: 5
Hairline	Energy: 110 HZ: 5	Energy: 106 HZ: 5	Energy: 106 HZ: 5	Energy: 102 HZ: 5	Energy: 102 HZ: 5	Energy: 102 HZ: 5
Bikini	Energy: 123 HZ: 5	Energy: 118 HZ: 5	Energy: 114 HZ: 5	Energy: 106 HZ: 5	Energy: 102 HZ: 5	Energy: 102 HZ: 5
Thigh	Energy: 143 HZ: 5	Energy: 139 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 114 HZ: 5	Energy: 110 HZ: 5	Energy: 106 HZ: 5
Leg	Energy: 139 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 127 HZ: 5	Energy: 123 HZ: 5	Energy: 110 HZ: 5	Energy: 110 HZ: 5

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 139 HZ: 5	Energy: 127 HZ: 5	Energy: 127 HZ: 5	Energy: 123 HZ: 5	Energy: 110 HZ: 5	Energy: 123 HZ: 5
Armpit	Energy: 139 HZ: 5	Energy: 139 HZ: 5	Energy: 139 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 123 HZ: 5
Hairline	Energy: 123 HZ: 5	Energy: 118 HZ: 5	Energy: 114 HZ: 5	Energy: 110 HZ: 5	Energy: 110 HZ: 5	Energy: 102 HZ: 5
Bikini	Energy: 118 HZ: 5	Energy: 114 HZ: 5	Energy: 110 HZ: 5	Energy: 110 HZ: 5	Energy: 106 HZ: 5	Energy: 106 HZ: 5
Thigh	Energy: 143 HZ: 5	Energy: 143 HZ: 5	Energy: 139 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 123 HZ: 5
Leg	Energy: 139 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 135 HZ: 5	Energy: 110 HZ: 5	Energy: 114 HZ: 5	Energy: 139 HZ: 5

Spot size (mm²) 12*24
Frequency 6HZ

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 172 HZ: 6	Energy: 167 HZ: 6	Energy: 152 HZ: 6	Energy: 132 HZ: 6	Energy: 123 HZ: 6	Energy: 123 HZ: 6
Armpit	Energy: 172 HZ: 6	Energy: 172 HZ: 6	Energy: 167 HZ: 6	Energy: 147 HZ: 6	Energy: 147 HZ: 6	Energy: 147 HZ: 6
Hairline	Energy: 132 HZ: 6	Energy: 127 HZ: 6	Energy: 127 HZ: 6	Energy: 123 HZ: 6	Energy: 123 HZ: 6	Energy: 143 HZ: 6
Bikini	Energy: 147 HZ: 6	Energy: 142 HZ: 6	Energy: 137 HZ: 6	Energy: 127 HZ: 6	Energy: 123 HZ: 6	Energy: 123 HZ: 6
Thigh	Energy: 172 HZ: 6	Energy: 167 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 137 HZ: 6	Energy: 132 HZ: 6	Energy: 127 HZ: 6
Leg	Energy: 167 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 152 HZ: 6	Energy: 147 HZ: 6	Energy: 132 HZ: 6	Energy: 132 HZ: 6

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 167 HZ: 6	Energy: 152 HZ: 6	Energy: 152 HZ: 6	Energy: 147 HZ: 6	Energy: 147 HZ: 6	Energy: 147 HZ: 6
Armpit	Energy: 172 HZ: 6	Energy: 167 HZ: 6	Energy: 167 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 147 HZ: 6
Hairline	Energy: 147 HZ: 6	Energy: 142 HZ: 6	Energy: 137 HZ: 6	Energy: 132 HZ: 6	Energy: 132 HZ: 6	Energy: 123 HZ: 6
Bikini	Energy: 142 HZ: 6	Energy: 137 HZ: 6	Energy: 132 HZ: 6	Energy: 132 HZ: 6	Energy: 127 HZ: 6	Energy: 127 HZ: 6
Thigh	Energy: 172 HZ: 6	Energy: 172 HZ: 6	Energy: 167 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 147 HZ: 6
Leg	Energy: 167 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 162 HZ: 6	Energy: 132 HZ: 6	Energy: 132 HZ: 6	Energy: 167 HZ: 6

Spot size (mm²) 14*14
Frequency 7HZ

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 200 HZ: 7	Energy: 194 HZ: 7	Energy: 177 HZ: 7	Energy: 154 HZ: 7	Energy: 143 HZ: 7	Energy: 143 HZ: 7
Armpit	Energy: 200 HZ: 7	Energy: 200 HZ: 7	Energy: 194 HZ: 7	Energy: 172 HZ: 7	Energy: 172 HZ: 7	Energy: 172 HZ: 7
Hairline	Energy: 154 HZ: 7	Energy: 149 HZ: 7	Energy: 149 HZ: 7	Energy: 143 HZ: 7	Energy: 143 HZ: 7	Energy: 143 HZ: 7
Bikini	Energy: 172 HZ: 7	Energy: 166 HZ: 7	Energy: 160 HZ: 7	Energy: 149 HZ: 7	Energy: 143 HZ: 7	Energy: 143 HZ: 7
Thigh	Energy: 200 HZ: 7	Energy: 194 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 160 HZ: 7	Energy: 154 HZ: 7	Energy: 149 HZ: 7
Leg	Energy: 194 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 177 HZ: 7	Energy: 172 HZ: 7	Energy: 154 HZ: 7	Energy: 154 HZ: 7

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 194 HZ: 7	Energy: 177 HZ: 7	Energy: 177 HZ: 7	Energy: 172 HZ: 7	Energy: 172 HZ: 7	Energy: 172 HZ: 7
Armpit	Energy: 200 HZ: 7	Energy: 194 HZ: 7	Energy: 194 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 172 HZ: 7
Hairline	Energy: 172 HZ: 7	Energy: 166 HZ: 7	Energy: 160 HZ: 7	Energy: 154 HZ: 7	Energy: 154 HZ: 7	Energy: 143 HZ: 7
Bikini	Energy: 166 HZ: 7	Energy: 160 HZ: 7	Energy: 154 HZ: 7	Energy: 154 HZ: 7	Energy: 149 HZ: 7	Energy: 149 HZ: 7
Thigh	Energy: 200 HZ: 7	Energy: 200 HZ: 7	Energy: 194 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 172 HZ: 7
Leg	Energy: 194 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 189 HZ: 7	Energy: 236 HZ: 7	Energy: 154 HZ: 7	Energy: 194 HZ: 7

Spot size (mm ²)		14*14				
Frequency		8HZ				
FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 229	Energy: 222	Energy: 203	Energy: 176	Energy: 163	Energy: 163
	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8
Armpit	Energy: 229	Energy: 229	Energy: 222	Energy: 196	Energy: 196	Energy: 196
	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8
Hairline	Energy: 176	Energy: 170	Energy: 170	Energy: 163	Energy: 163	Energy: 163
	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8
Bikini	Energy: 196	Energy: 189	Energy: 183	Energy: 170	Energy: 163	Energy: 163
	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8
Thigh	Energy: 229	Energy: 222	Energy: 216	Energy: 183	Energy: 176	Energy: 170
	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8
Leg	Energy: 222	Energy: 216	Energy: 203	Energy: 196	Energy: 176	Energy: 176
	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 222	Energy: 203	Energy: 203	Energy: 196	Energy: 196	Energy: 196
	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8
Armpit	Energy: 229	Energy: 222	Energy: 222	Energy: 216	Energy: 216	Energy: 196
	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8
Hairline	Energy: 196	Energy: 189	Energy: 183	Energy: 176	Energy: 176	Energy: 163
	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8
Bikini	Energy: 189	Energy: 183	Energy: 176	Energy: 176	Energy: 170	Energy: 170
	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8
Thigh	Energy: 229	Energy: 229	Energy: 222	Energy: 216	Energy: 216	Energy: 196
	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8
Leg	Energy: 222	Energy: 216	Energy: 216	Energy: 176	Energy: 176	Energy: 222
	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8	HZ: 8

755/808/1064 Parámetros de tratamiento con láser con diodo (15 x 27)

Spot size (mm²) 15*27
Frequency 1HZ

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 53 HZ: 1	Energy: 48 HZ: 1	Energy: 48 HZ: 1	Energy: 47 HZ: 1	Energy: 47 HZ: 1	Energy: 47 HZ: 1
Armpit	Energy: 55 HZ: 1	Energy: 53 HZ: 1	Energy: 53 HZ: 1	Energy: 52 HZ: 1	Energy: 52 HZ: 1	Energy: 47 HZ: 1
Hairline	Energy: 47 HZ: 1	Energy: 45 HZ: 1	Energy: 44 HZ: 1	Energy: 42 HZ: 1	Energy: 42 HZ: 1	Energy: 39 HZ: 1
Bikini	Energy: 45 HZ: 1	Energy: 44 HZ: 1	Energy: 42 HZ: 1	Energy: 42 HZ: 1	Energy: 41 HZ: 1	Energy: 41 HZ: 1
Thigh	Energy: 55 HZ: 1	Energy: 55 HZ: 1	Energy: 53 HZ: 1	Energy: 52 HZ: 1	Energy: 52 HZ: 1	Energy: 47 HZ: 1
Leg	Energy: 53 HZ: 1	Energy: 52 HZ: 1	Energy: 52 HZ: 1	Energy: 42 HZ: 1	Energy: 42 HZ: 1	Energy: 53 HZ: 1

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 55 HZ: 1	Energy: 53 HZ: 1	Energy: 48 HZ: 1	Energy: 42 HZ: 1	Energy: 39 HZ: 1	Energy: 39 HZ: 1
Armpit	Energy: 55 HZ: 1	Energy: 55 HZ: 1	Energy: 53 HZ: 1	Energy: 47 HZ: 1	Energy: 47 HZ: 1	Energy: 47 HZ: 1
Hairline	Energy: 42 HZ: 1	Energy: 41 HZ: 1	Energy: 41 HZ: 1	Energy: 39 HZ: 1	Energy: 39 HZ: 1	Energy: 39 HZ: 1
Bikini	Energy: 47 HZ: 1	Energy: 45 HZ: 1	Energy: 44 HZ: 1	Energy: 41 HZ: 1	Energy: 39 HZ: 1	Energy: 39 HZ: 1
Thigh	Energy: 55 HZ: 1	Energy: 53 HZ: 1	Energy: 52 HZ: 1	Energy: 44 HZ: 1	Energy: 42 HZ: 1	Energy: 41 HZ: 1
Leg	Energy: 53 HZ: 1	Energy: 52 HZ: 1	Energy: 48 HZ: 1	Energy: 47 HZ: 1	Energy: 42 HZ: 1	Energy: 42 HZ: 1

Spot size (mm ²)		15*27				
Frequency		2HZ				
MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 106	Energy: 97	Energy: 97	Energy: 94	Energy: 94	Energy: 94
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Armpit	Energy: 109	Energy: 106	Energy: 106	Energy: 103	Energy: 103	Energy: 94
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Hairline	Energy: 94	Energy: 91	Energy: 88	Energy: 84	Energy: 84	Energy: 78
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Bikini	Energy: 91	Energy: 88	Energy: 84	Energy: 84	Energy: 81	Energy: 81
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Thigh	Energy: 109	Energy: 109	Energy: 106	Energy: 103	Energy: 103	Energy: 94
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Leg	Energy: 106	Energy: 103	Energy: 103	Energy: 84	Energy: 84	Energy: 106
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 109	Energy: 106	Energy: 97	Energy: 84	Energy: 78	Energy: 78
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Armpit	Energy: 109	Energy: 109	Energy: 106	Energy: 94	Energy: 94	Energy: 94
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Hairline	Energy: 84	Energy: 81	Energy: 81	Energy: 78	Energy: 78	Energy: 78
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Bikini	Energy: 94	Energy: 91	Energy: 88	Energy: 81	Energy: 78	Energy: 78
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Thigh	Energy: 109	Energy: 106	Energy: 103	Energy: 88	Energy: 84	Energy: 81
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2
Leg	Energy: 106	Energy: 103	Energy: 97	Energy: 94	Energy: 84	Energy: 84
	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2	HZ: 2

Spot size (mm²) 15*27
Frequency 3HZ

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 164 HZ: 3	Energy: 159 HZ: 3	Energy: 145 HZ: 3	Energy: 127 HZ: 3	Energy: 117 HZ: 3	Energy: 117 HZ: 3
Armpit	Energy: 164 HZ: 3	Energy: 164 HZ: 3	Energy: 159 HZ: 3	Energy: 141 HZ: 3	Energy: 141 HZ: 3	Energy: 141 HZ: 3
Hairline	Energy: 127 HZ: 3	Energy: 122 HZ: 3	Energy: 122 HZ: 3	Energy: 117 HZ: 3	Energy: 117 HZ: 3	Energy: 117 HZ: 3
Bikini	Energy: 141 HZ: 3	Energy: 136 HZ: 3	Energy: 131 HZ: 3	Energy: 122 HZ: 3	Energy: 117 HZ: 3	Energy: 117 HZ: 3
Thigh	Energy: 164 HZ: 3	Energy: 159 HZ: 3	Energy: 155 HZ: 3	Energy: 131 HZ: 3	Energy: 127 HZ: 3	Energy: 122 HZ: 3
Leg	Energy: 159 HZ: 3	Energy: 155 HZ: 3	Energy: 145 HZ: 3	Energy: 141 HZ: 3	Energy: 127 HZ: 3	Energy: 127 HZ: 3

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 159 HZ: 3	Energy: 145 HZ: 3	Energy: 145 HZ: 3	Energy: 141 HZ: 3	Energy: 141 HZ: 3	Energy: 141 HZ: 3
Armpit	Energy: 164 HZ: 3	Energy: 159 HZ: 3	Energy: 159 HZ: 3	Energy: 155 HZ: 3	Energy: 155 HZ: 3	Energy: 141 HZ: 3
Hairline	Energy: 141 HZ: 3	Energy: 122 HZ: 3	Energy: 131 HZ: 3	Energy: 127 HZ: 3	Energy: 127 HZ: 3	Energy: 117 HZ: 3
Bikini	Energy: 122 HZ: 3	Energy: 131 HZ: 3	Energy: 127 HZ: 3	Energy: 127 HZ: 3	Energy: 122 HZ: 3	Energy: 122 HZ: 3
Thigh	Energy: 164 HZ: 3	Energy: 164 HZ: 3	Energy: 159 HZ: 3	Energy: 155 HZ: 3	Energy: 155 HZ: 3	Energy: 141 HZ: 3
Leg	Energy: 159 HZ: 3	Energy: 155 HZ: 3	Energy: 155 HZ: 3	Energy: 127 HZ: 3	Energy: 127 HZ: 3	Energy: 159 HZ: 3

Spot size (mm²) 15*27
Frequency 4HZ

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 219 HZ: 4	Energy: 213 HZ: 4	Energy: 194 HZ: 4	Energy: 169 HZ: 4	Energy: 156 HZ: 4	Energy: 156 HZ: 4
Armpit	Energy: 219 HZ: 4	Energy: 219 HZ: 4	Energy: 213 HZ: 4	Energy: 188 HZ: 4	Energy: 188 HZ: 4	Energy: 188 HZ: 4
Hairline	Energy: 169 HZ: 4	Energy: 163 HZ: 4	Energy: 163 HZ: 4	Energy: 156 HZ: 4	Energy: 156 HZ: 4	Energy: 156 HZ: 4
Bikini	Energy: 188 HZ: 4	Energy: 181 HZ: 4	Energy: 175 HZ: 4	Energy: 163 HZ: 4	Energy: 156 HZ: 4	Energy: 156 HZ: 4
Thigh	Energy: 219 HZ: 4	Energy: 213 HZ: 4	Energy: 206 HZ: 4	Energy: 175 HZ: 4	Energy: 169 HZ: 4	Energy: 163 HZ: 4
Leg	Energy: 213 HZ: 4	Energy: 206 HZ: 4	Energy: 194 HZ: 4	Energy: 188 HZ: 4	Energy: 169 HZ: 4	Energy: 169 HZ: 4

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 213 HZ: 4	Energy: 194 HZ: 4	Energy: 194 HZ: 4	Energy: 308 HZ: 8	Energy: 188 HZ: 4	Energy: 188 HZ: 4
Armpit	Energy: 219 HZ: 4	Energy: 213 HZ: 4	Energy: 213 HZ: 4	Energy: 338 HZ: 8	Energy: 206 HZ: 4	Energy: 188 HZ: 4
Hairline	Energy: 188 HZ: 4	Energy: 181 HZ: 4	Energy: 175 HZ: 4	Energy: 277 HZ: 8	Energy: 169 HZ: 4	Energy: 156 HZ: 4
Bikini	Energy: 181 HZ: 4	Energy: 175 HZ: 4	Energy: 169 HZ: 4	Energy: 277 HZ: 8	Energy: 163 HZ: 4	Energy: 169 HZ: 4
Thigh	Energy: 219 HZ: 4	Energy: 219 HZ: 4	Energy: 213 HZ: 4	Energy: 338 HZ: 8	Energy: 206 HZ: 4	Energy: 188 HZ: 4
Leg	Energy: 213 HZ: 5	Energy: 206 HZ: 5	Energy: 206 HZ: 5	Energy: 277 HZ: 9	Energy: 169 HZ: 5	Energy: 213 HZ: 5

Spot size (mm²) 15*27
Frequency 5HZ

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 273 HZ: 5	Energy: 266 HZ: 5	Energy: 242 HZ: 5	Energy: 211 HZ: 5	Energy: 195 HZ: 5	Energy: 195 HZ: 5
Armpit	Energy: 273 HZ: 5	Energy: 273 HZ: 5	Energy: 266 HZ: 5	Energy: 234 HZ: 5	Energy: 234 HZ: 5	Energy: 234 HZ: 5
Hairline	Energy: 211 HZ: 5	Energy: 203 HZ: 5	Energy: 203 HZ: 5	Energy: 195 HZ: 5	Energy: 195 HZ: 5	Energy: 195 HZ: 5
Bikini	Energy: 234 HZ: 5	Energy: 227 HZ: 5	Energy: 219 HZ: 5	Energy: 203 HZ: 5	Energy: 195 HZ: 5	Energy: 195 HZ: 5
Thigh	Energy: 273 HZ: 5	Energy: 266 HZ: 5	Energy: 258 HZ: 5	Energy: 219 HZ: 5	Energy: 211 HZ: 5	Energy: 203 HZ: 5
Leg	Energy: 266 HZ: 5	Energy: 258 HZ: 5	Energy: 242 HZ: 5	Energy: 234 HZ: 5	Energy: 211 HZ: 5	Energy: 211 HZ: 5

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 266 HZ: 5	Energy: 242 HZ: 5	Energy: 242 HZ: 5	Energy: 234 HZ: 5	Energy: 211 HZ: 5	Energy: 234 HZ: 5
Armpit	Energy: 266 HZ: 5	Energy: 266 HZ: 5	Energy: 266 HZ: 5	Energy: 258 HZ: 5	Energy: 258 HZ: 5	Energy: 234 HZ: 5
Hairline	Energy: 234 HZ: 5	Energy: 227 HZ: 5	Energy: 219 HZ: 5	Energy: 211 HZ: 5	Energy: 211 HZ: 5	Energy: 195 HZ: 5
Bikini	Energy: 227 HZ: 5	Energy: 219 HZ: 5	Energy: 211 HZ: 5	Energy: 211 HZ: 5	Energy: 203 HZ: 5	Energy: 203 HZ: 5
Thigh	Energy: 273 HZ: 5	Energy: 273 HZ: 5	Energy: 266 HZ: 5	Energy: 258 HZ: 5	Energy: 258 HZ: 5	Energy: 234 HZ: 5
Leg	Energy: 266 HZ: 5	Energy: 258 HZ: 5	Energy: 258 HZ: 5	Energy: 211 HZ: 5	Energy: 219 HZ: 5	Energy: 266 HZ: 5

Spot size (mm²) 15*27
Frequency 6HZ

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 328 HZ: 6	Energy: 319 HZ: 6	Energy: 291 HZ: 6	Energy: 253 HZ: 6	Energy: 234 HZ: 6	Energy: 234 HZ: 6
Armpit	Energy: 328 HZ: 6	Energy: 328 HZ: 6	Energy: 319 HZ: 6	Energy: 281 HZ: 6	Energy: 281 HZ: 6	Energy: 281 HZ: 6
Hairline	Energy: 253 HZ: 6	Energy: 244 HZ: 6	Energy: 244 HZ: 6	Energy: 234 HZ: 6	Energy: 234 HZ: 6	Energy: 273 HZ: 6
Bikini	Energy: 281 HZ: 6	Energy: 272 HZ: 6	Energy: 263 HZ: 6	Energy: 244 HZ: 6	Energy: 234 HZ: 6	Energy: 234 HZ: 6
Thigh	Energy: 328 HZ: 6	Energy: 319 HZ: 6	Energy: 309 HZ: 6	Energy: 263 HZ: 6	Energy: 253 HZ: 6	Energy: 244 HZ: 6
Leg	Energy: 319 HZ: 6	Energy: 309 HZ: 6	Energy: 291 HZ: 6	Energy: 281 HZ: 6	Energy: 253 HZ: 6	Energy: 253 HZ: 6

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 319 HZ: 6	Energy: 291 HZ: 6	Energy: 291 HZ: 6	Energy: 281 HZ: 6	Energy: 281 HZ: 6	Energy: 281 HZ: 6
Armpit	Energy: 328 HZ: 6	Energy: 319 HZ: 6	Energy: 319 HZ: 6	Energy: 309 HZ: 6	Energy: 309 HZ: 6	Energy: 281 HZ: 6
Hairline	Energy: 281 HZ: 6	Energy: 272 HZ: 6	Energy: 263 HZ: 6	Energy: 253 HZ: 6	Energy: 253 HZ: 6	Energy: 234 HZ: 6
Bikini	Energy: 272 HZ: 6	Energy: 263 HZ: 6	Energy: 253 HZ: 6	Energy: 253 HZ: 6	Energy: 244 HZ: 6	Energy: 244 HZ: 6
Thigh	Energy: 328 HZ: 6	Energy: 328 HZ: 6	Energy: 319 HZ: 6	Energy: 309 HZ: 6	Energy: 309 HZ: 6	Energy: 281 HZ: 6
Leg	Energy: 319 HZ: 6	Energy: 309 HZ: 6	Energy: 309 HZ: 6	Energy: 253 HZ: 6	Energy: 253 HZ: 6	Energy: 319 HZ: 6

Parámetro de tratamiento en modo frecuencia cardíaca: modo frecuencia cardíaca, lo que significa que debes tratar la misma zona en menos de 1 segundo. Por ejemplo: si configuras 5Hz, deberían hacer 5 disparos en la misma zona .

755/808/1064 Parámetros de tratamiento con láser con diodo (1HZ)

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 34 Pulsewidth: 85 HZ : 1	Energy: 31 Pulsewidth: 78 HZ : 1	Energy: 31 Pulsewidth: 78 HZ : 1	Energy: 30 Pulsewidth: 77 HZ : 1	Energy: 30 Pulsewidth: 77 HZ : 1	Energy: 30 Pulsewidth: 75 HZ : 1
Armpit	Energy: 35 Pulsewidth: 88 HZ: 1	Energy: 34 Pulsewidth: 86 HZ: 1	Energy: 34 Pulsewidth: 85 HZ: 1	Energy: 31 Pulsewidth: 79 HZ: 1	Energy: 31 Pulsewidth: 79 HZ: 1	Energy: 30 Pulsewidth: 76 HZ: 1
Hairline	Energy: 26 Pulsewidth: 65 HZ: 1	Energy: 25 Pulsewidth: 63 HZ: 1	Energy: 24 Pulsewidth: 62 HZ: 1	Energy: 22 Pulsewidth: 55 HZ: 1	Energy: 22 Pulsewidth: 55 HZ: 1	Energy: 20 Pulsewidth: 52 HZ: 1
Bikini	Energy: 29 Pulsewidth: 74 HZ : 1	Energy: 26 Pulsewidth: 65 HZ : 1	Energy: 25 Pulsewidth: 63 HZ : 1	Energy: 25 Pulsewidth: 63 HZ : 1	Energy: 23 Pulsewidth: 59 HZ : 1	Energy: 23 Pulsewidth: 59 HZ : 1
Thigh	Energy: 35 Pulsewidth: 89 HZ: 1	Energy: 35 Pulsewidth: 88 HZ: 1	Energy: 34 Pulsewidth: 85 HZ: 1	Energy: 30 Pulsewidth: 75 HZ: 1	Energy: 30 Pulsewidth: 75 HZ: 1	Energy: 30 Pulsewidth: 75 HZ: 1
Leg	Energy: 34 Pulsewidth: 85 HZ : 1	Energy: 30 Pulsewidth: 75 HZ : 1	Energy: 30 Pulsewidth: 75 HZ : 1	Energy: 27 Pulsewidth: 68 HZ : 1	Energy: 27 Pulsewidth: 68 HZ : 1	Energy: 23 Pulsewidth: 58 HZ : 1

FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 35 Pulsewidth: 89 HZ: 1	Energy: 34 Pulsewidth: 86 HZ: 1	Energy: 31 Pulsewidth: 79 HZ: 1	Energy: 27 Pulsewidth: 68 HZ: 1	Energy: 23 Pulsewidth: 58 HZ: 1	Energy: 23 Pulsewidth: 58 HZ: 1
Armpit	Energy: 35 Pulsewidth: 89 HZ: 1	Energy: 35 Pulsewidth: 88 HZ: 1	Energy: 34 Pulsewidth: 85 HZ: 1	Energy: 30 Pulsewidth: 76 HZ: 1	Energy: 30 Pulsewidth: 76 HZ: 1	Energy: 30 Pulsewidth: 76 HZ: 1
Hairline	Energy: 27 Pulsewidth: 68 HZ: 1	Energy: 26 Pulsewidth: 67 HZ: 1	Energy: 26 Pulsewidth: 65 HZ: 1	Energy: 24 Pulsewidth: 61 HZ: 1	Energy: 23 Pulsewidth: 58 HZ: 1	Energy: 23 Pulsewidth: 58 HZ: 1
Bikini	Energy: 30 Pulsewidth: 75 HZ : 1	Energy: 29 Pulsewidth: 74 HZ : 1	Energy: 28 Pulsewidth: 72 HZ : 1	Energy: 26 Pulsewidth: 65 HZ : 1	Energy: 23 Pulsewidth: 58 HZ : 1	Energy: 23 Pulsewidth: 58 HZ : 1
Thigh	Energy: 35 Pulsewidth: 88 HZ : 1	Energy: 34 Pulsewidth: 86 HZ : 1	Energy: 33 Pulsewidth: 83 HZ : 1	Energy: 28 Pulsewidth: 72 HZ : 1	Energy: 26 Pulsewidth: 65 HZ : 1	Energy: 26 Pulsewidth: 65 HZ : 1

Leg	Energy: 34 Pulsewidth: 85 HZ : 1	Energy: 33 Pulsewidth: 83 HZ : 1	Energy: 31 Pulsewidth: 78 HZ : 1	Energy: 30 Pulsewidth: 75 HZ : 1	Energy: 27 Pulsewidth: 68 HZ : 1	Energy: 27 Pulsewidth: 68 HZ : 1
------------	--	--	--	--	--	--

755/808/1064 Parámetros de tratamiento con láser con diodo (5HZ)

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 72 Pulsewidth: 36 HZ: 5	Energy: 72 Pulsewidth: 36 HZ: 5	Energy: 68 Pulsewidth: 34 HZ: 5	Energy: 64 Pulsewidth: 32 HZ: 5	Energy: 64 Pulsewidth: 32 HZ: 5	Energy: 56 Pulsewidth: 28 HZ: 5
Armpit	Energy: 74 Pulsewidth: 37 HZ : 5	Energy: 72 Pulsewidth: 36 HZ : 5	Energy: 68 Pulsewidth: 34 HZ : 5	Energy: 60 Pulsewidth: 30 HZ : 5	Energy: 60 Pulsewidth: 30 HZ : 5	Energy: 56 Pulsewidth: 28 HZ : 5
Hairline	Energy: 70 Pulsewidth: 35 HZ : 5	Energy: 68 Pulsewidth: 34 HZ : 5	Energy: 64 Pulsewidth: 32 HZ : 5	Energy: 60 Pulsewidth: 30 HZ : 5	Energy: 60 Pulsewidth: 30 HZ : 5	Energy: 58 Pulsewidth: 29 HZ : 5
Bikini	Energy: 70 Pulsewidth: 35 HZ: 5	Energy: 68 Pulsewidth: 34 HZ: 5	Energy: 64 Pulsewidth: 32 HZ: 5	Energy: 60 Pulsewidth: 30 HZ: 5	Energy: 60 Pulsewidth: 30 HZ: 5	Energy: 52 Pulsewidth: 26 HZ: 5
Thigh	Energy: 74 Pulsewidth: 37 HZ : 5	Energy: 72 Pulsewidth: 36 HZ : 5	Energy: 68 Pulsewidth: 34 HZ : 5	Energy: 64 Pulsewidth: 32 HZ : 5	Energy: 64 Pulsewidth: 32 HZ : 5	Energy: 60 Pulsewidth: 30 HZ : 5
Leg	Energy: 70 Pulsewidth: 35 HZ : 5	Energy: 68 Pulsewidth: 34 HZ : 5	Energy: 68 Pulsewidth: 34 HZ : 5	Energy: 64 Pulsewidth: 32 HZ : 5	Energy: 64 Pulsewidth: 32 HZ : 5	Energy: 52 Pulsewidth: 26 HZ : 5


FEMALE	I	II	III	IV	V	VI
Face	Energy: 74 Pulsewidth: 37 HZ: 5	Energy: 72 Pulsewidth: 36 HZ: 5	Energy: 72 Pulsewidth: 36 HZ: 5	Energy: 66 Pulsewidth: 33 HZ: 5	Energy: 66 Pulsewidth: 33 HZ: 5	Energy: 58 Pulsewidth: 29 HZ: 5
Armpit	Energy: 74 Pulsewidth: 37 HZ: 5	Energy: 72 Pulsewidth: 36 HZ: 5	Energy: 72 Pulsewidth: 36 HZ: 5	Energy: 64 Pulsewidth: 32 HZ: 5	Energy: 64 Pulsewidth: 32 HZ: 5	Energy: 58 Pulsewidth: 29 HZ: 5
Hairline	Energy: 68 Pulsewidth: 34 HZ : 5	Energy: 68 Pulsewidth: 34 HZ : 5	Energy: 68 Pulsewidth: 34 HZ : 5	Energy: 60 Pulsewidth: 30 HZ : 5	Energy: 60 Pulsewidth: 30 HZ : 5	Energy: 58 Pulsewidth: 29 HZ : 5
Bikini	Energy: 66 Pulsewidth: 33 HZ: 5	Energy: 64 Pulsewidth: 32 HZ: 5	Energy: 60 Pulsewidth: 30 HZ: 5	Energy: 56 Pulsewidth: 28 HZ: 5	Energy: 56 Pulsewidth: 28 HZ: 5	Energy: 52 Pulsewidth: 26 HZ: 5
Thigh	Energy: 74 Pulsewidth: 37 HZ: 5	Energy: 72 Pulsewidth: 36 HZ: 5	Energy: 68 Pulsewidth: 34 HZ: 5	Energy: 56 Pulsewidth: 28 HZ: 5	Energy: 56 Pulsewidth: 28 HZ: 5	Energy: 52 Pulsewidth: 26 HZ: 5
Leg	Energy: 72 Pulsewidth: 36 HZ : 5	Energy: 72 Pulsewidth: 36 HZ : 5	Energy: 68 Pulsewidth: 34 HZ : 5	Energy: 56 Pulsewidth: 28 HZ : 5	Energy: 56 Pulsewidth: 28 HZ : 5	Energy: 52 Pulsewidth: 26 HZ : 5

755/808/1064 Parámetros de tratamiento con láser con diodo (10HZ)

MAN	I	II	III	IV	V	VI
Whiskers	Energy: 104 Pulsewidth: 26 HZ: 10	Energy: 104 Pulsewidth: 26 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 96 Pulsewidth: 24 HZ: 10	Energy: 96 Pulsewidth: 24 HZ: 10	Energy: 84 Pulsewidth: 21 HZ: 10
Armpit	Energy: 104 Pulsewidth: 26 HZ : 10	Energy: 104 Pulsewidth: 26 HZ : 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ : 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ : 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ : 10	Energy: 96 Pulsewidth: 24 HZ : 10
Hairline	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ : 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ : 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ : 10	Energy: 96 Pulsewidth: 24 HZ : 10	Energy: 96 Pulsewidth: 24 HZ : 10	Energy: 92 Pulsewidth: 23 HZ : 10
Bikini	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 92 Pulsewidth: 23 HZ: 10
Thigh	Energy: 104 Pulsewidth: 26 HZ : 10	Energy: 104 Pulsewidth: 26 HZ : 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ : 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ : 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ : 10	Energy: 92 Pulsewidth: 23 HZ : 10
Leg	Energy: 104 Pulsewidth: 26 HZ: 10	Energy: 104 Pulsewidth: 26 HZ: 10	Energy: 104 Pulsewidth: 26 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 92 Pulsewidth: 23 HZ: 10

FEMALE	I	II	III	IV	V	IV
Face	Energy: 108 Pulsewidth: 27 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 96 Pulsewidth: 24 HZ: 10	Energy: 96 Pulsewidth: 24 HZ: 10	Energy: 92 Pulsewidth: 23 HZ: 10
Armpit	Energy: 108 Pulsewidth: 27 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 96 Pulsewidth: 24 HZ: 10	Energy: 96 Pulsewidth: 24 HZ: 10	Energy: 92 Pulsewidth: 23 HZ: 10
Hairline	Energy: 104 Pulsewidth: 26 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 96 Pulsewidth: 24 HZ: 10	Energy: 92 Pulsewidth: 23 HZ: 10	Energy: 92 Pulsewidth: 23 HZ: 10	Energy: 84 Pulsewidth: 21 HZ: 10
Bikini	Energy: 104 Pulsewidth: 26 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 96 Pulsewidth: 24 HZ: 10	Energy: 92 Pulsewidth: 23 HZ: 10	Energy: 92 Pulsewidth: 23 HZ: 10	Energy: 88 Pulsewidth: 22 HZ: 10
Thigh	Energy: 108 Pulsewidth: 27 HZ : 10	Energy: 104 Pulsewidth: 26 HZ : 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ : 10	Energy: 96 Pulsewidth: 24 HZ : 10	Energy: 96 Pulsewidth: 24 HZ : 10	Energy: 92 Pulsewidth: 23 HZ : 10
Leg	Energy: 108 Pulsewidth: 27 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 100 Pulsewidth: 25 HZ: 10	Energy: 92 Pulsewidth: 23 HZ: 10	Energy: 92 Pulsewidth: 23 HZ: 10	Energy: 88 Pulsewidth: 22 HZ: 10

Métodos de tratamiento

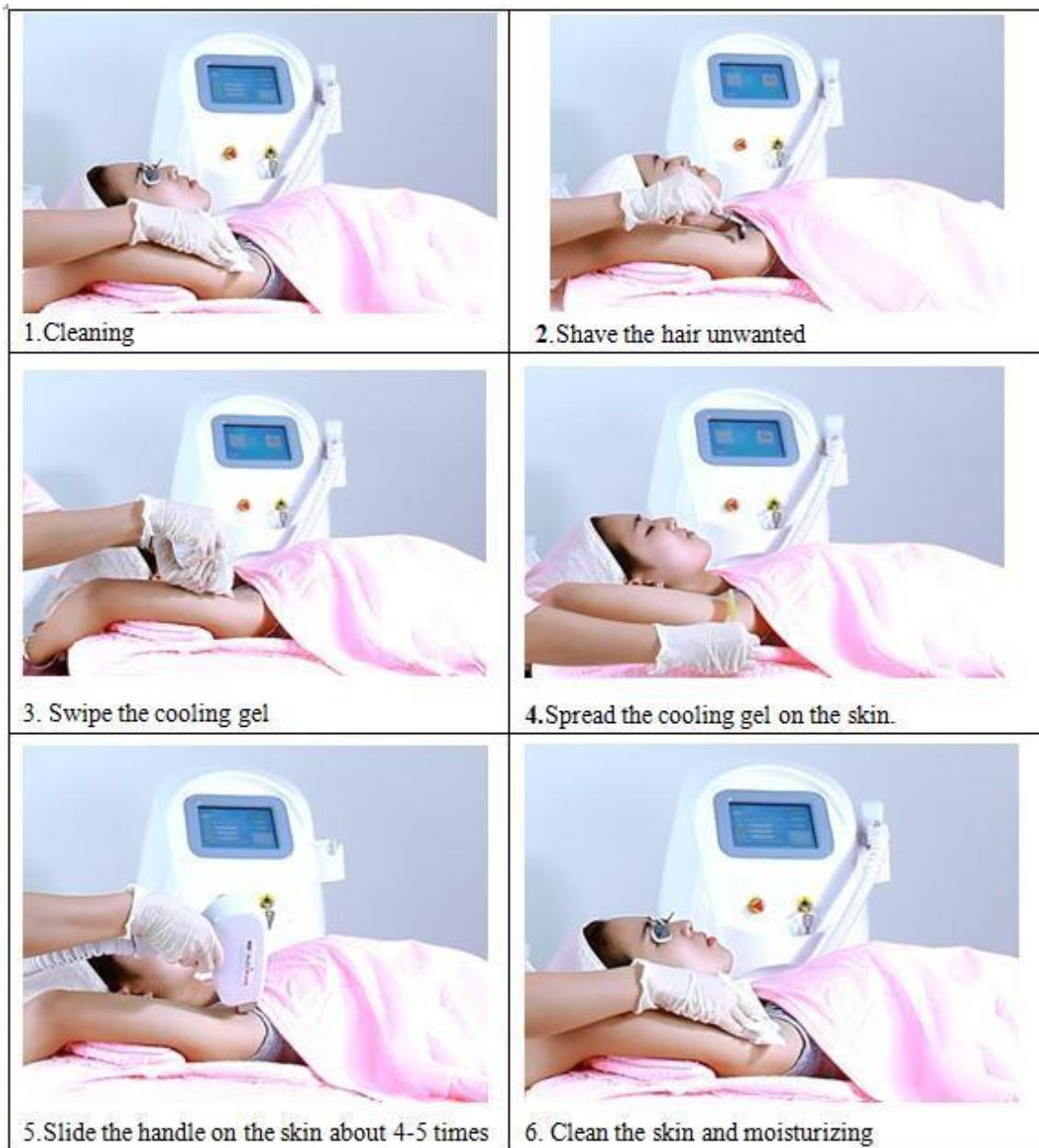

Instrucciones posteriores al tratamiento

8. Puedes tener una leve sensación de quemadura solar tras el tratamiento, que normalmente desaparece en pocas horas. El enrojecimiento de la piel, hematomas leves y/o un ligero edema (hinchazón) son normales y pueden durar varios días. Puedes tomar medicamentos antiinflamatorios de venta libre (como el ibuprofeno) según lo prefieras. Evita la exposición al sol. Si la exposición al sol es inevitable, deberías usar protector solar (SPF 30 o más) durante 4 a 6 semanas después del tratamiento.
9. Mantén la zona tratada limpia y seca durante los siguientes días, lávate suavemente dos veces al día. Los poros estarán abiertos y no deberías aplicar cremas espesas o lociones, ya que pueden tapar los poros y causar complicaciones
10. También se puede usar un ungüento de venta libre para la curación si aparecen ampollas. Las bolsas de hielo o compresas frías son especialmente útiles durante los primeros días. Evita el calor y no uses compresas calientes. El área de tratamiento puede dejarse abierta y sin tapar sin necesidad de vendaje ni vendaje especial. Se recomienda ropa holgada y cómoda.
11. No frotes ni exfolies la zona de tratamiento durante 7 días. No utilice productos químicos ni medicamentos (que no sean los mencionados en estas Instrucciones) en la zona tratada durante una semana.

Por favor, recuerda limpiar la pieza de mano después del tratamiento.



Capítulo Seis Mantenimiento y Reparación Sencillos

I. Problemas y fallos normales

SÍNTOMAS	POSIBLES CAUSAS	ACCIONES
Una vez que se enciende la corriente principal, la indicación en la pantalla no se enciende	La tensión de alimentación es corta	Comprueba que el voltaje de alimentación requerido sea 230V CA o no
	El enchufe de alimentación no ha sido completamente enchufado	Aprieta el tapón
	Se pulsa el interruptor de emergencia	Gira el botón rojo de emergencia suelta botón de emergencia
No hay salida de luz, pero el sistema parece funcionar con normalidad	El botón de trabajo en la pieza de mano no se presiona ni se rompe	Botón de cambio
	Problema con la placa de alimentación	Reparar la placa de alimentación para cambiarla
	Ajusta la energía a cero	Ajusta la energía al parámetro adecuado
Pantalla "Sin agua"	La pantalla parpadea diciendo "No hay agua" y suena la alarma	Comprueba que el tapón de la mano conecta el tubo de agua está plegado o no

II. Mantenimiento y reparación diarios

1. Cambia el agua destilada o el agua pura cada dos o tres semanas
2. Cambia el filtro de agua cada mes
3. Barre esta superficie de máquina una vez a la semana con el paño suave y húmedo. Se pueden usar detergentes neutros, pero ten cuidado y no dejes que el líquido se filtre en la máquina.
4. El cristal de plomo ligero debe estar limpio en cualquier momento. Debe limpiarse cada vez después del tratamiento. Al limpiar el cristal de plomo claro, limpia primero con el paño suave y húmedo, usa otro trozo de paño suave con alcohol absoluto para limpiarlo y luego seca al aire.
5. Cada cabeza de tratamiento con láser con diodo tiene una vida útil específica. Por favor, contacta con el concesionario cuando cambies una nueva cabeza de tratamiento en la fecha indicada.
6. Esta sección enumera algunos fenómenos y soluciones de fallos.

Malfunction phenomenon	Solutions
No tiene pantalla	Revisa el cable de alimentación
	Comprueba el interruptor urgente, pulsa la parte inferior y afloja el botón en sentido horario.
	Revisa el interruptor de aire, si salta hacia abajo, empújalo hacia arriba. Si salta hacia abajo de nuevo, por favor contacta con el fabricante
Al tocar la tecla, el sistema no tiene reacción	Por favor, contacte con el fabricante
El sistema no arranca	El interruptor de la llave no está girado a la posición adecuada, gíralo en sentido horario.
El sistema no puede inicializarse	Por favor, contacte con el fabricante
Fallo en la cabeza de tratamiento con láser de diodos	El transmisor láser ha llegado al final de su vida útil, por favor cambie la cabeza de tratamiento láser del diodo o el transmisor láser Probablemente la cabeza láser de diodo esté dañada, por favor cambia la cabeza láser de diodo o contacta con el fabricante
La cabeza láser de diodo está perdiendo	Probablemente la cabeza láser de diodo esté dañada, por favor cambia el diodo cabeza de tratamiento láser o contactar con el fabricante
La temperatura del sistema de refrigeración es alto	Cierra el sistema, baja la temperatura, Reinicia Contacta con el distribuidor.
El poder del tratamiento láser Cabeza a debilitarse	La vida útil de la cabeza de tratamiento láser con diodo no es larga.

Cómo cambiar el filtro de agua?

Pasos de desinstalación:



1. Quita los filtros como indica la flecha.
2. Quita el pequeño clip azul.
3. Pulsa el botón interior como indica la flecha.
4. Desconecta los filtros como indica la marca de la flecha.

Pasos de instalación:



1. Conecta el filtro al tubo de PE siguiendo la dirección de la flecha
2. Conecta el clip azul en la ranura de la tubería de la capa interior siguiendo la dirección de la flecha
3. Ajusta la posición del clip azul, haciendo que se inserte al final
4. Empuja los filtros hacia las abrazaderas siguiendo la dirección de la flecha

Aviso de instalación de filtros:

1. Por favor, desenchufa el cable de alimentación y despega el agua antes de cambiar el filtro.
2. Cuando conecto el filtro, el filtro necesita insertarse al final para asegurarse de que no pueda ser sacado. Instala el clip azul. Si quieres sacar el filtro, hay que seguir pulsando el botón interior del conector y luego sacar el filtro.
3. Si quieres cambiar el filtro, tienes que hacerlo estrictamente según la dirección de la flecha en el filtro. Prohíbe el intercambio de la posición y dirección de los dos filtros.
4. Después de arrancar la máquina, comprueba cuidadosamente si hay alguna fuga; si no hay fugas, vuelve a revisar después de 1-2 horas para asegurarte de que todo está bien.

III. Garantía

1. Todos los productos se prueban estrictamente antes de la venta. Podemos garantizar una reparación gratuita de un año desde la fecha de compra.

Durante el periodo de garantía, repararemos la máquina gratuitamente si el fallo es causado por la calidad de nuestro producto.

2. El estándar de funcionamiento y el entorno deben cumplir con la especificación del producto.

3. Los fallos causados por las siguientes razones están fuera del alcance de nuestra garantía:

a. Fallos causados por una operación abusada

b. Fallos causados por otros factores artificiales como moverse o desmontarse en movimiento correcto, colisión, etc.

c. Reducción de energía causada por ambientes húmedos y polvo

d. Malfuncionamiento causado por una fuerza natural incontrolable, por ejemplo. Repuestos y accesorios de esta máquina