



EMS + Radiofrecuencia

Modelado corporal no invasivo: estimulación electromagnética de alta intensidad combinada con radiofrecuencia, en un equipo de sobremesa con cuatro aplicadores. Modelo HMT42-4.



Equipo EMS + RF, con sus cuatro aplicadores.

Cómo funciona

El equipo combina **dos tecnologías en un mismo disparo**, y ahí está su diferencia con los aparatos de tecnología única.

- **EMS.** La estimulación electromagnética induce contracciones musculares supramáximas, mucho más intensas que las que se logran con ejercicio voluntario. Esas contracciones estimulan el crecimiento y la tonificación del músculo.
- **Radiofrecuencia.** Al mismo tiempo, la energía de RF calienta la capa de grasa subcutánea y provoca la apoptosis de los adipocitos, con la consiguiente reducción del espesor graso.

El tratamiento es cómodo para la paciente, no requiere tiempo de recuperación y es completamente no quirúrgico.



Valores máximos declarados por el fabricante.



Esquema de acción combinada provisto por el fabricante.

Ventajas del equipo

Tecnología de doble acción

Un solo equipo resuelve tono muscular y reducción de grasa. Frente a un aparato de tecnología única, es un tratamiento más completo y un argumento de venta más fuerte frente a tu competencia.

Cuatro aplicadores

Dos grandes y dos chicos, que permiten cubrir abdomen y glúteos, o trabajar zonas más pequeñas como brazos y pantorrillas. Tratar más de una zona en la misma sesión reduce el tiempo por paciente y aumenta cuántas podés atender por día.

Estimulación muscular dirigida


El campo electromagnético penetra en profundidad y actúa sobre grupos musculares específicos, mejorando fuerza, tono y definición más allá de lo que se logra con ejercicio regular.

Reducción de grasa y celulitis

El calentamiento por radiofrecuencia degrada las células grasas y, combinado con las contracciones, mejora la circulación y atenúa la apariencia de la celulitis persistente.

Interfaz simple

Pantalla táctil a color con selección directa de modos de tratamiento y niveles de intensidad. Tu operadora aprende a usarlo rápido.

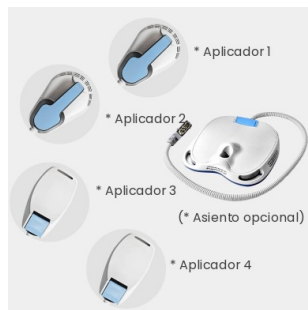


Los cuatro aplicadores incluidos. El asiento es opcional.



Protocolo y resultados

Un tratamiento estándar son **4 a 6 sesiones**, de **2 a 3 veces por semana**. La paciente puede notar la diferencia desde la primera sesión, con resultados visibles en pocas semanas y mejora continua hasta seis meses después de terminado el tratamiento.

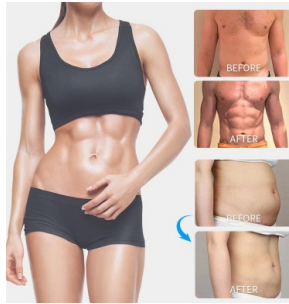

Fotos de antes y después provistas por el fabricante.

Para qué tipo de negocio

- **Centros y spas médicos.** Suma una opción no quirúrgica de contorno corporal a los tratamientos que ya ofrecés.
- **Salones de belleza y estética.** Un servicio de alta demanda y buena rentabilidad, que atrae clientas nuevas y amplía el menú.
- **Centros de fitness y bienestar.** Acelera los objetivos del socio, sobre todo en definición muscular y grasa localizada.
- **Clínicas de dermatología.** Tratamiento seguro para pacientes que buscan mejorar forma corporal y firmeza de la piel.



Las tres acciones del equipo en una sola sesión.



Especificaciones técnicas

Equipo	
Modelo	HMT42-4
Tecnología	Estimulación electromagnética de alta intensidad (EMS) + Radiofrecuencia (RF)
Aplicadores	4 — dos grandes y dos pequeños
Interfaz	Pantalla táctil a color
Refrigeración	Por aire
Formato	Sobremesa, aproximadamente 45 × 40 × 30 cm
Alimentación	CA 110 V / 220 V, 50/60 Hz
Certificaciones	CE y FDA

Parámetros	
Potencia de salida	Hasta 6.500 W
Consumo	De 3.000 a 6.000 W
Intensidad del campo magnético	16 Tesla
Frecuencia de trabajo	De 150 a 200 Hz

Sobre los datos. Las especificaciones y los porcentajes de resultado fueron provistos por el fabricante. Los valores de potencia, campo magnético y frecuencia son los máximos y rangos declarados; la intensidad efectiva de cada sesión la define la profesional según la paciente y la zona.

Qué incluye comprarlo en Corium

- **El equipo se prueba antes de salir.** Se enciende y se verifica acá, no viaja sellado de fábrica para que lo enciendas vos por primera vez.
- **Servicio técnico propio.** Taller y técnicos nuestros, no tercerizados, con stock de repuestos en el país.
- **Manuales y explicación remota sin cargo** para que puedas operarlo desde el primer día.
- **Envío a todo el país,** embalado en su baúl original, por el transporte que elijas.
- **Financiación propia con anticipo,** armada según el equipo y tu situación.
- **Asesoramiento antes de comprar.** Si este equipo no es el que te conviene, te lo decimos.

Hablemos

WhatsApp +54 9 11 7605-6720 · coriumlaser.com

Las especificaciones técnicas, los porcentajes de aumento de masa muscular y reducción de grasa y las fotos de “antes y después” son datos y material del fabricante. Las imágenes fueron traducidas al español conservando el diseño original. El equipo cuenta con certificación CE y FDA. Los resultados varían según la paciente, la zona tratada y la constancia del tratamiento. Documento comercial, no reemplaza al manual de uso ni al criterio profesional.