




BROCHURE

HIFU 12D MAX ULTRA

con manípulo vaginal



DALE NUEVA VITALIDAD A TU PIEL

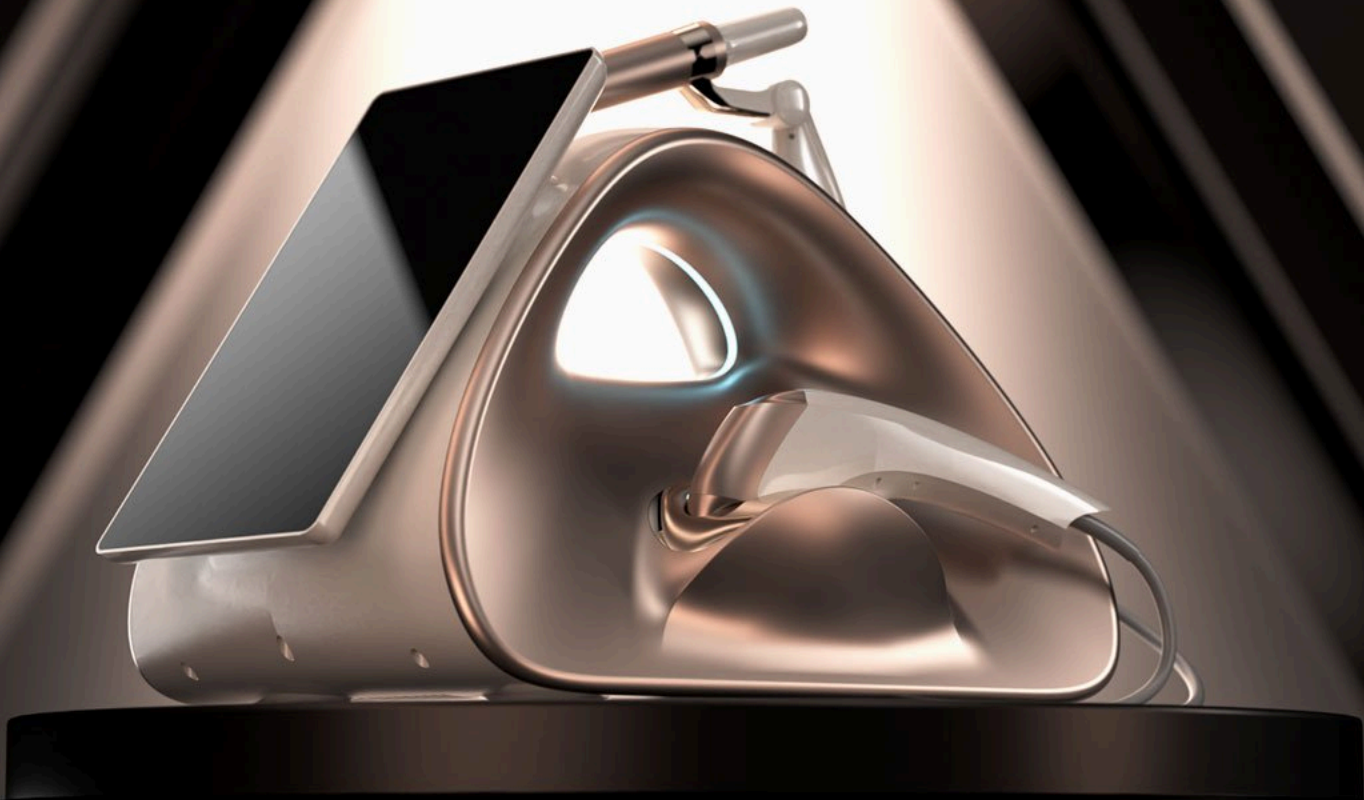

Ilumina el
tono de piel



Piel más
delicada



Regenera
colágeno



Suaviza
líneas finas



Mejora la
elasticidad



Reduce
adiposidad



Resiste la
gravedad




Lifting de
fascia

SISTEMA DE ULTRASONIDO DE MICROPULSO

Con el sistema de ultrasonido de micropulso, se logra una conmutación instantánea y bidireccional de energía entre el pulso acústico lineal transversal y la onda acústica anular. El equipo combina en un solo aparato los modos punto, línea y superficie, logrando un modo de 360° con lifting y tensado multicapa antienvjecimiento de capa completa, perfecto y sin costuras, con efectos precisos, cómodos, rápidos y duraderos.

En el modo MP, la transmisión de energía en microsegundos genera puntos de foco más pequeños y densos que otros equipos, con mayor seguridad, una experiencia más cómoda, un período de recuperación más corto y una distribución de puntos más uniforme y eficiente.

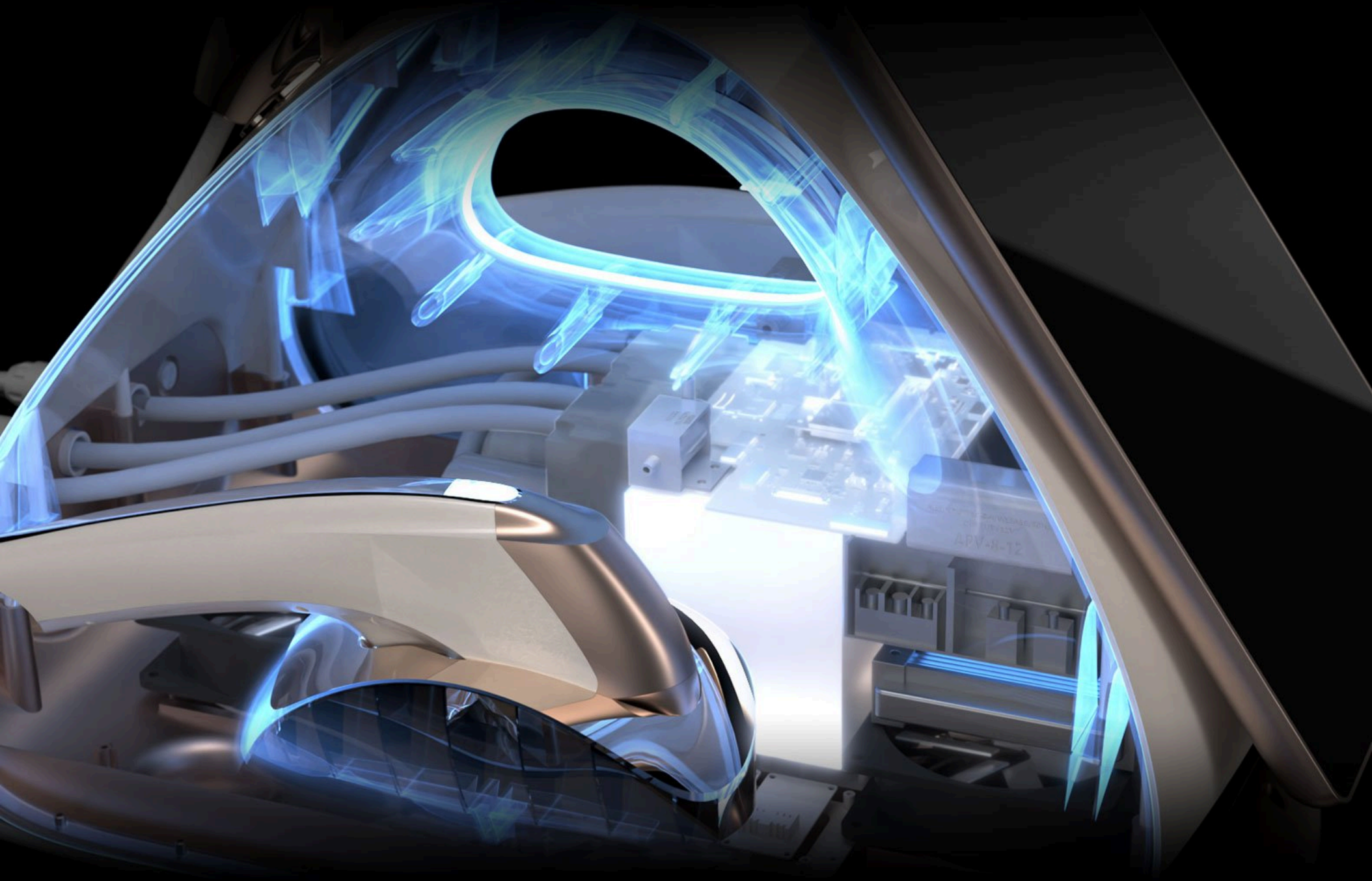

TT DTIRA

Efecto antienvjecimiento multidimensional

Como la “pirámide”

SEGURO | ESTABLE | CONTINUO

13.3 pulgadas

Pantalla inteligente HD


Diseño dinámico

Interacción humano-máquina

Enchufe extraíble

Alta tecnología

Diseño original patentado

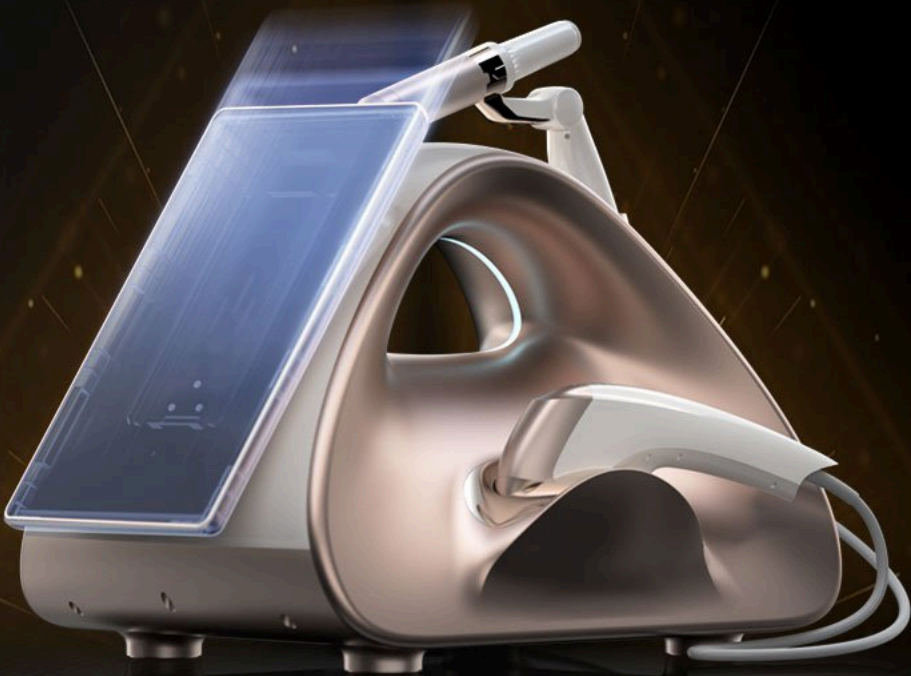



OPERACIÓN DE MICROPULSO TECNOLOGÍA Y CARTUCHOS

- Patrón MP (línea multipunto) [417 puntos / 1 motor en total]
- Patrón MP (puntual) [17 puntos / 1 motor en total]
- Efecto mecánico + efecto térmico
- Tecnología de salida bidireccional
- Múltiples cartuchos con distintas profundidades de tratamiento
- Cuidado combinado multimodo

Las ventajas del cabezal plano multidimensional apuntan a la piel, la fascia superficial, la grasa y el músculo, con un esquema de personalización integral según el tipo de piel, la zona a tratar y la profundidad del tejido.

OPERACIÓN CIRCULAR HERRAMIENTA Y CARTUCHOS DE OPTIMIZACIÓN


- Patrón MP (línea multipunto) [417 puntos / 1 motor en total]
- Patrón MP (puntual) [17 puntos / 1 motor en total]
- Tecnología innovadora de microtransductor
- Operación continua en anillo
- Múltiples cartuchos con distintas profundidades de tratamiento
- Cuidado combinado multimodo



La primera tecnología del mundo de ultrasonido de micropulso anular: el enfoque lineal ultrasónico en malla maximiza el efecto de la operación. Además del lifting, aporta firmeza extra; comparado con el modo de ultrasonido tradicional, los múltiples modos reducen el dolor de forma más eficaz.

EFFECTO MECÁNICO + EFFECTO TÉRMICO + EFFECTO DE CAVITACIÓN

La tecnología MP transmite la energía con mayor precisión a la capa de tejido objetivo, generando efectos térmicos que tensan la fascia, activan la regeneración de colágeno y fibras elásticas, y logran efectos antienvjecimiento como el tensado, la estimulación de colágeno y la mejora de la textura de la piel, sin dañar el tejido circundante.

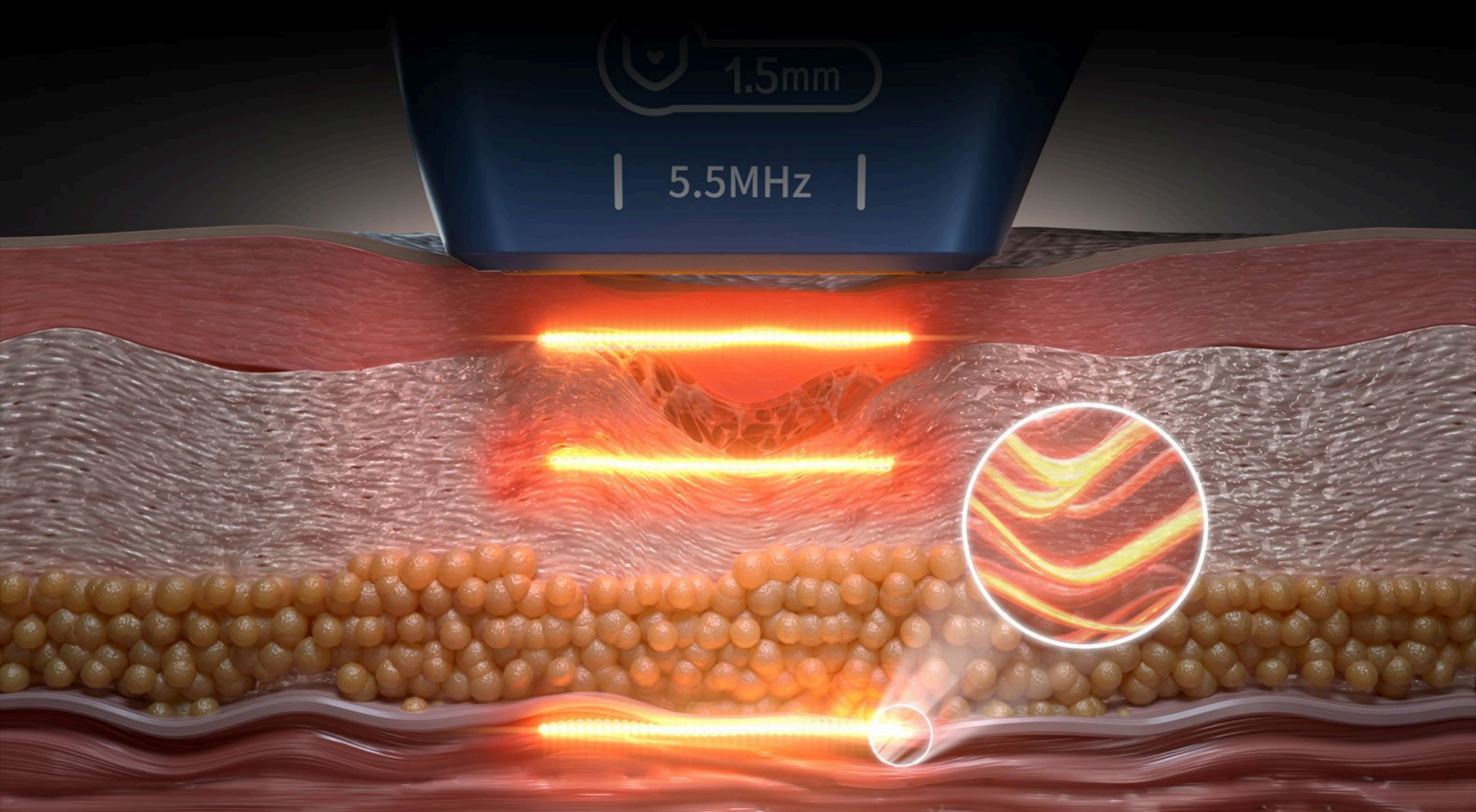

TCP EN MODO MICROPULSO

El modo TCP dentro del micropulso logra una superposición precisa y diminuta de puntos de condensación térmica, actuando de forma uniforme e intensa sobre toda el área del nivel objetivo; la energía densa y dispersa cumple un rol más amplio, destacando las ventajas generales.

HERRAMIENTA DE OPTIMIZACIÓN CIRCULAR

La herramienta de operación anular integra el modo de salida de energía ultrasónica más avanzado del mundo.

- Cartucho exquisito, cuidado exquisito.
- Modo punto de fusión y modo MP: salida continua de energía ultrasónica en operación circular.

CARTUCHO DE FUNCIONAMIENTO ANULAR

Efecto de cuidado base, con un nuevo esquema de operación que consolida el efecto y amplía la adaptabilidad dentro del alcance previsto.



CARTUCHO ESPECIAL PARA OJOS

- Cartucho especial para ojos de 5.5 MHz y 2.0 mm
- Tecnología exclusiva de cartucho ultrafino
- Aplicación de I+D profesional a nivel mundial

Como cartucho de punto para el contorno de ojos, refina y resuelve problemas como líneas finas superficiales, arrugas profundas, ojeras y bolsas.

CARTUCHO FACIAL SOBRE LA PIEL

Normal (puntual)

Micropulso (lineal)

- Aplicar gel en la piel antes de la operación
- Mantener el cabezal en forma perpendicular a la piel
- No detener el movimiento sobre la piel durante la operación

T - 1.5 (rostro) 5.5MHz



Para la capa de la piel, líneas superficiales, tono de piel, textura y afinado de poros.

T - 3.0 (rostro) 5.5MHz

Llega directo a la dermis y estimula la proliferación continua de colágeno.

T - 4.5 (rostro) 5.5MHz

Llega directo a la capa fascial SMAS y tensa la base muscular para lograr un lifting firme.

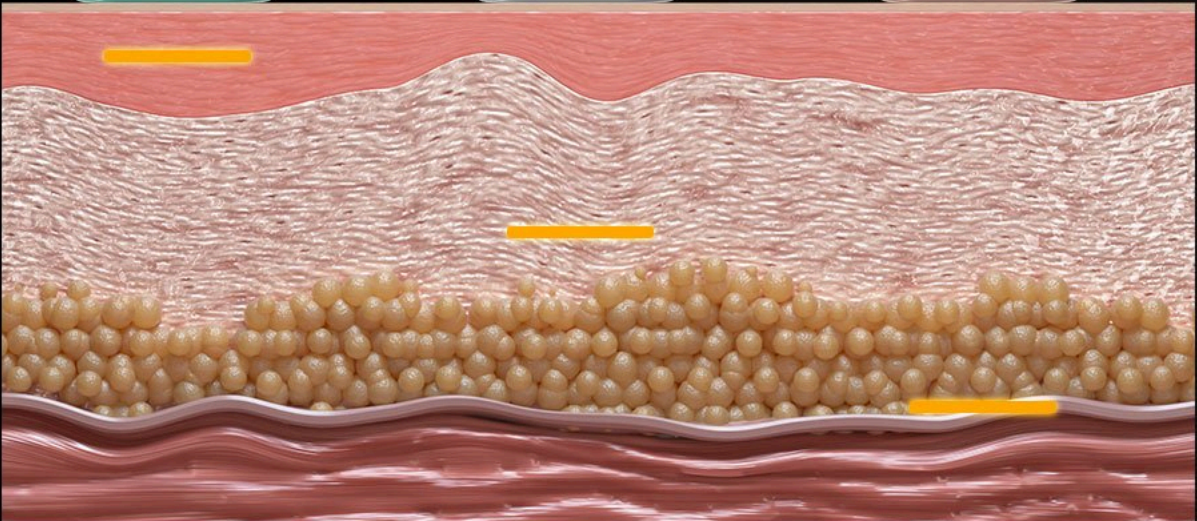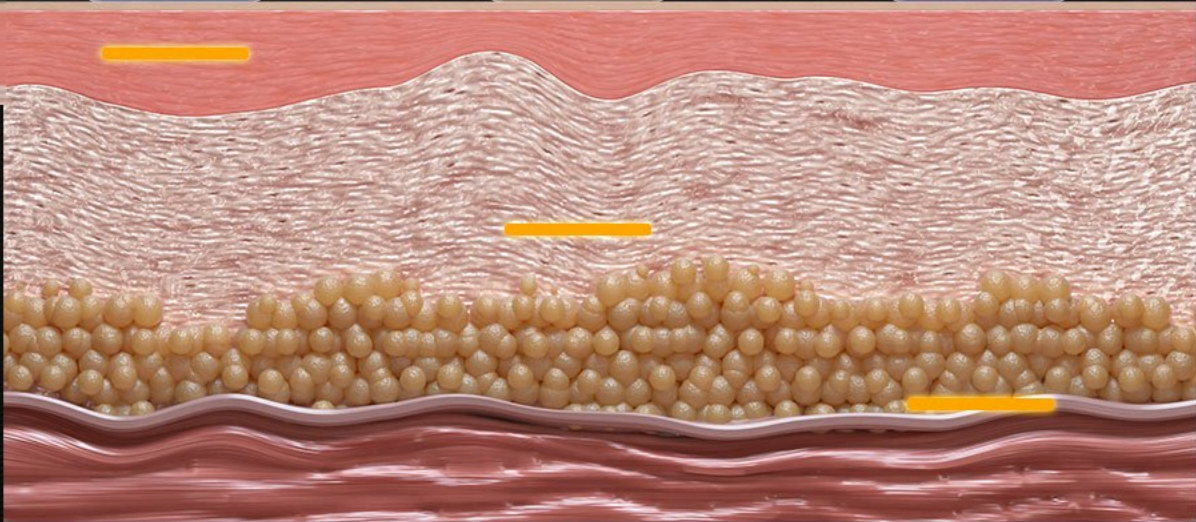

CARTUCHO CORPORAL SOBRE LA PIEL

Normal (puntual)

Micropulso (lineal)

- Aplicar gel en la piel antes de la operación
- Mantener el cabezal en forma perpendicular a la piel
- No detener el movimiento sobre la piel durante la operación

T - 6.0 (cuerpo) 2MHz

Para la capa de la piel, el tono, la textura y el afinado de poros.

T - 9.0 (cuerpo) 2MHz

Llega directo a la dermis y estimula la proliferación continua de colágeno.

T - 13 (cuerpo) 2MHz

Llega directo a la capa fascial SMAS y tensa la base muscular para lograr un lifting firme.

EL CARTUCHO ANULAR SE
APLICA SOBRE LA PIEL



Normal
(punctual)



Micropulso
(lineal)

- Aplicar gel en la piel antes de la operación
- Mantener el cabezal en forma perpendicular a la piel
- No detener el movimiento sobre la piel durante la operación

T - 1.5 (rostro) 5.5MHz


Para la capa de la piel, líneas superficiales, tono de piel, textura y afinado de poros.

T - 3.0 (rostro) 5.5MHz

Llega directo a la dermis y estimula la proliferación continua de colágeno.

T - 4.5 (rostro) 4MHz

Llega directo a la capa fascial SMAS y tensa la base muscular para un lifting firme.


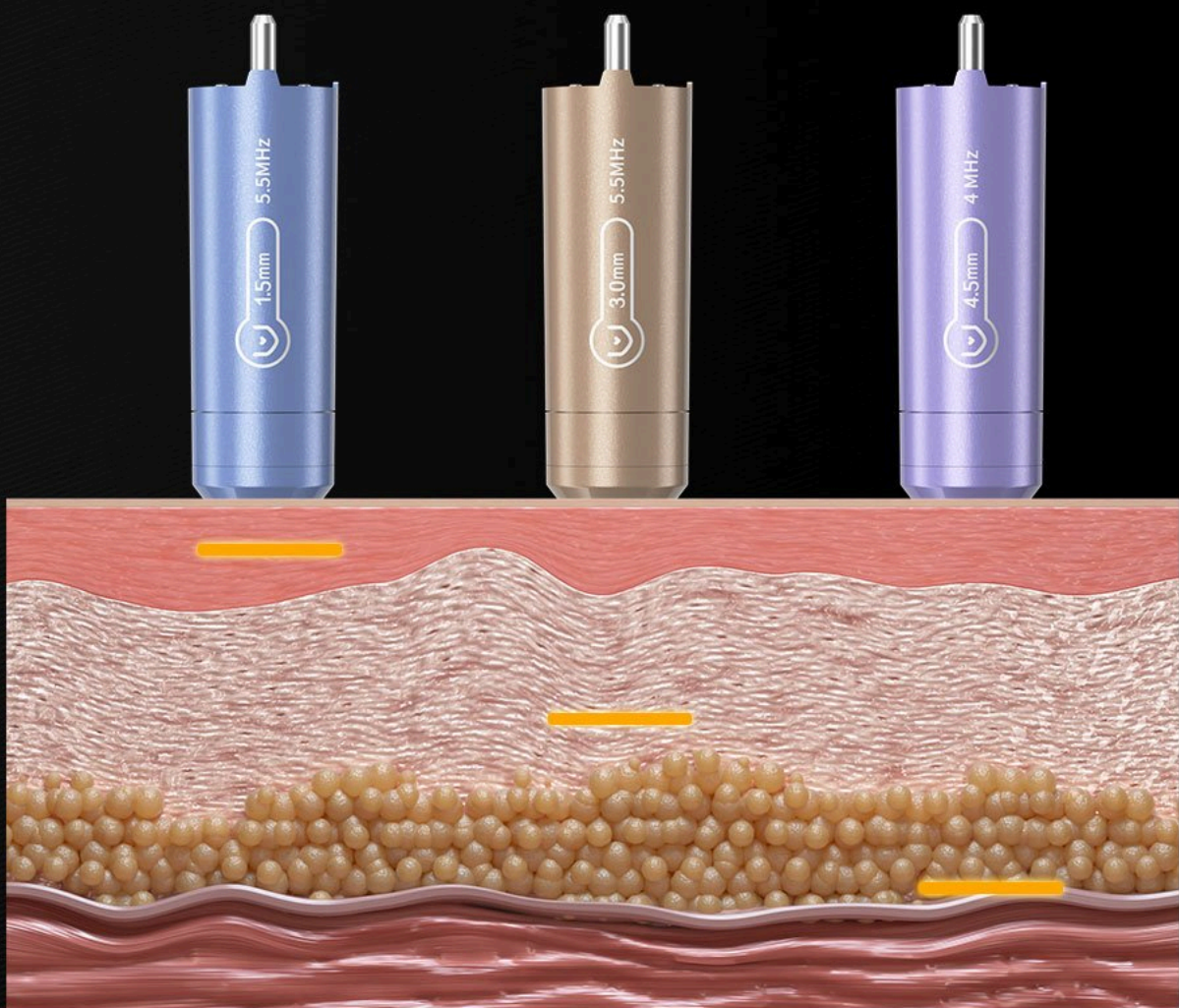


A LA MEDIDA DE CADA PERSONA
ANTIENVEJECIMIENTO DE CAPA COMPLETA

Según el grupo etario, el estado de la piel y las necesidades de cada clienta, se combinan los modos punto, línea y superficie para lograr un programa de personalización integral de antienvjecimiento en todas las capas.



- Activación de la epidermis y la dermis superficial
- Activación profunda de la dermis
- Tensado instantáneo de la fascia
- Refuerza el soporte de la capa fascial y reduce la flacidez del tejido
- Mejora la actividad celular y aumenta la capacidad de retención de agua de las células
- Aumenta el volumen facial y estimula la regeneración de colágeno y de la malla de fibras elásticas, dando un efecto pleno y elástico

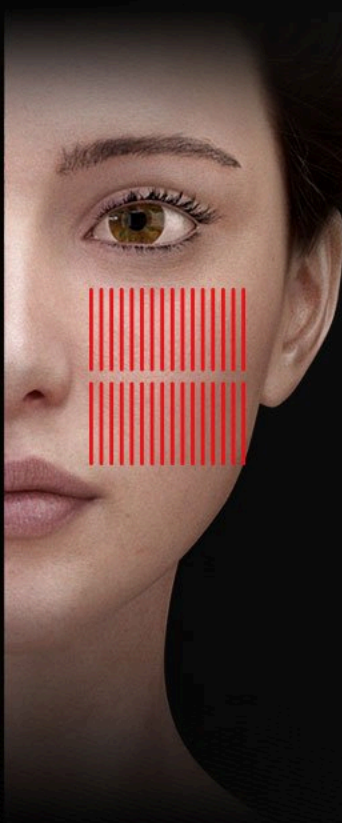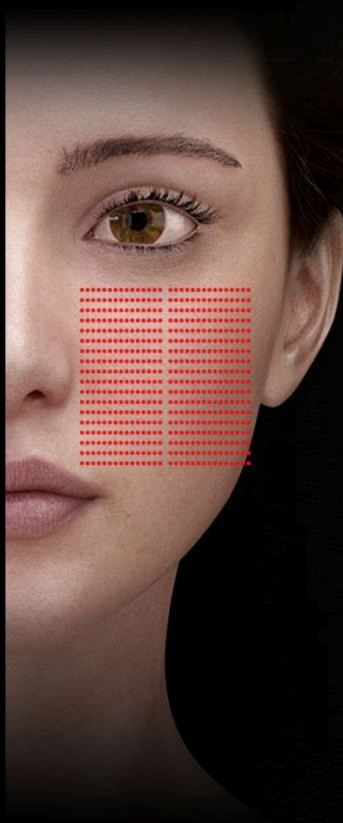

CUIDADO EN MODO ÚNICO


Modo MP (formación de línea multipunto) [417 puntos / 1 motor en total]

También se puede elegir el modo punto [17 puntos / 1 ronda en total]

El modo se puede cambiar libremente tocando la interfaz del mismo cartucho

MULTI-MODO CUIDADO COMBINADO

El micropulso logra la superposición de puntos de condensación térmica pequeños y precisos, actuando de forma uniforme e intensa sobre todas las áreas del nivel objetivo. La energía densa y dispersa actúa de forma más amplia, destacando las ventajas generales.

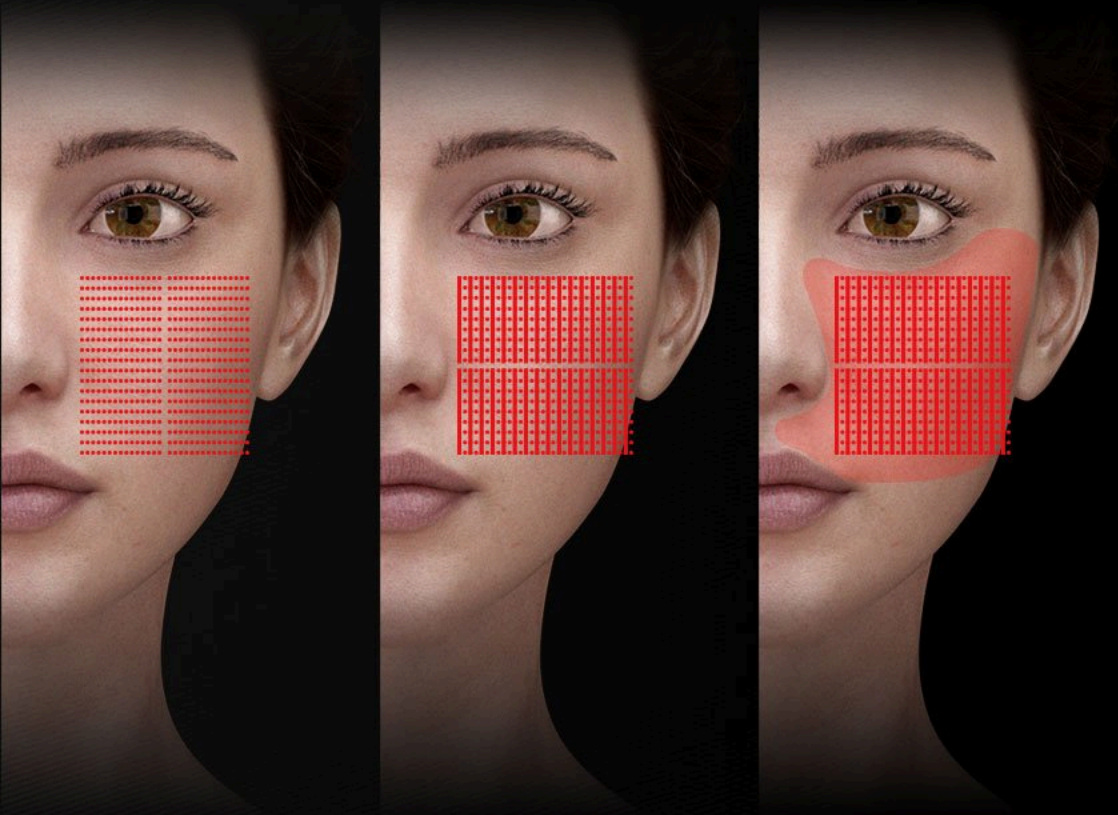


OPERACIÓN DE MICROPULSO

Efecto de cuidado base, con un nuevo esquema de operación que consolida el efecto y amplía el alcance de aplicación.

El modo MP anular puede seleccionarse como modo puntual anular, y el mismo cartucho puede cambiar de modo libremente tocando la interfaz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

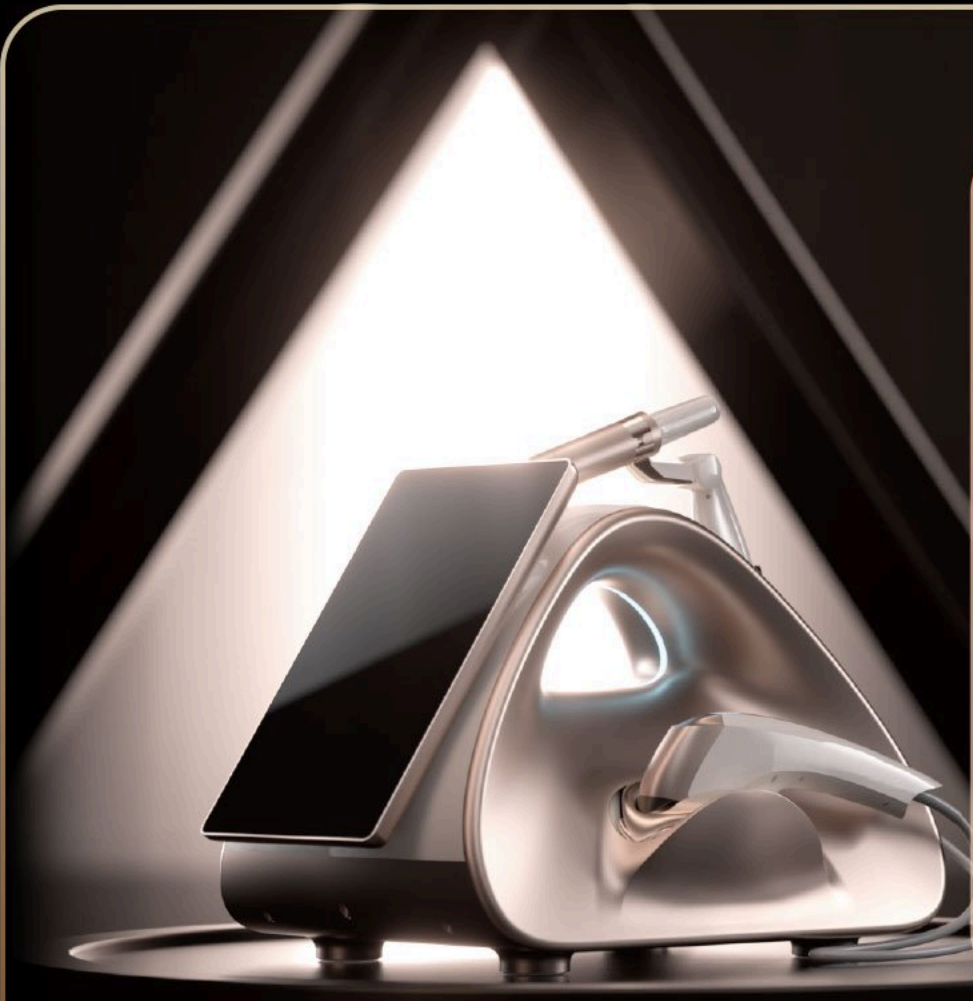

Nombre de producto: Ultraformer MPT portátil

Modelo: HIFU 12D Max Ultra

Alimentación: CA 110V CA 220V

Potencia: 650W

Frecuencia: 2 MHz 4 MHz 5.5 MHz

Peso del equipo: 10 kg

Peso total con embalaje: 20 kg

Tamaño del embalaje: 60 x 43 x 57 cm



Equipo



Cabezal



Cabezal



Cabezal



Cartucho



Cartucho



Pedal



Cable de
alimentación



Manual de
instrucciones



Caja de
embalaje

PRECAUCIONES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

- Es normal tener enrojecimiento e hinchazón leves y pasajeros después de la sesión; evitar ambientes de alta temperatura como sauna, yoga caliente y ejercicio intenso durante 1 semana después del tratamiento, y no exponerse al sol.
- Se recomienda no maquillarse al día siguiente del tratamiento (si es necesario retirar el maquillaje, hacerlo con suavidad, limpiando el rostro con un desmaquillante en aceite).
- No lavar el rostro con agua muy caliente durante una semana (alcanza con agua que no supere la temperatura corporal). Prestar atención a la hidratación: se recomienda aplicar una mascarilla hidratante cada mañana y noche durante 3 días o una semana; usar los productos de cuidado e hidratación habituales 2 a 3 veces más de lo normal.
- Evitar alimentos con colorantes fuertes como la salsa de soja durante una semana, y evitar alcohol, comidas picantes, mariscos y otros alimentos similares.
- No se recomienda tratar la misma zona con equipos similares el mismo día después de la sesión.
- Después del tratamiento, se recomienda usar láser u otros equipos recién después de que la piel se haya recuperado (la misma zona debe ajustarse según el estado de la piel de cada día).
- También puede aparecer un leve sarpullido blanco por energía o eritema en algunas zonas tratadas; son reacciones normales, leves y pasajeras (pueden tratarse con hielo o productos reparadores con factores de crecimiento, según el caso).