




Corium Laser Technology — Ficha de producto

Equipo multifunción: depilación, ND-Yag, IPL y radiofrecuencia

Plataforma de cuatro cabezales para depilación, tratamientos ND-Yag, rejuvenecimiento facial con luz pulsada (IPL) y tensado de piel por radiofrecuencia.

Cabezales del equipo

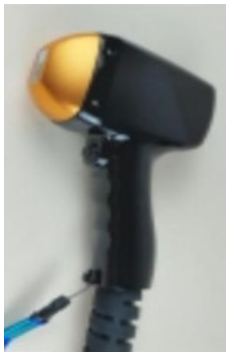

Cabezal de depilación



Cabezal ND-Yag



Cabezal IPL




Cabezal de radiofrecuencia

Función de cada cabezal

- **Cabezal de depilación:** depilación, rejuvenecimiento y blanqueamiento de la piel.
- **Cabezal ND-Yag:** elimina cejas tatuadas, arrugas y manchas; también permite realizar el tratamiento Hollywood Peel (peeling de carbón activado por láser).
- **Cabezal IPL (luz pulsada):** 640 nm para depilación, 530 nm para rejuvenecimiento de la piel y 480 nm para desvanecer manchas.
- **Cabezales de radiofrecuencia:** tres tamaños de punta, pensados para contorno de ojos, rostro y cuerpo.

Principio de funcionamiento

Principio de la depilación

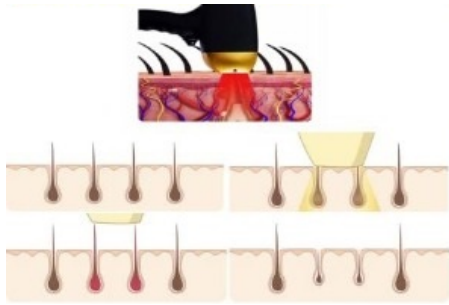


El calor del cabezal actúa sobre el folículo piloso para inhibir su crecimiento.

Principio del ND-Yag



El pulso láser penetra la piel y fragmenta el pigmento o actúa sobre el folículo, según el tratamiento.

Principio del IPL (luz pulsada)

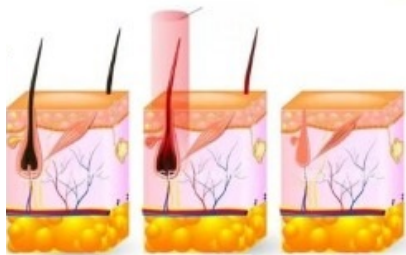

La luz pulsada de amplio espectro calienta selectivamente el folículo o el pigmento de la piel.

Principio de la radiofrecuencia



La energía de radiofrecuencia calienta la dermis en profundidad, estimulando colágeno y tensando la piel.

Parámetros del producto

Parámetro	Detalle
Potencia del equipo base	1500 W / 2500 W
Potencia del cabezal de depilación (barras)	5 barras (rake): 1000 W · 10 barras (rake): 2000 W
Frecuencia del equipo base	1–10 Hz
Longitud de onda del cabezal de depilación	1064 / 808 / 755 nm
Salida de luz del cabezal de depilación (12/16 barras)	13 × 28 mm / 13 × 40 mm
Longitud de onda del cabezal ND-Yag	1064 / 532 / 1320 nm
Cantidad de disparos del cabezal ND-Yag	50.000.000 de disparos
Longitud de onda del cabezal IPL	640 / 480 / 530 nm
Tamaño de punta del cabezal de radiofrecuencia	10 × 10 mm / 20 × 20 mm / 30 × 30 mm

Ficha elaborada por Corium Laser Technology a partir de la ficha técnica del fabricante, traducida al español. Documento comercial, no reemplaza al manual de uso ni al criterio profesional.